


new idea
new product



T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı
AR-GE Merkezimiz bulunmaktadır.

We have R&D center affiliated to the
ministry of industry and technology.

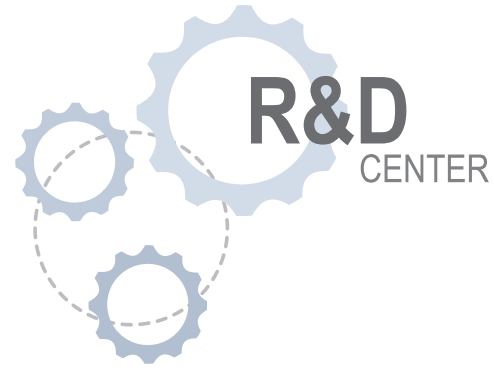

OFİSLINE Fabrika Binamız, Türkiye'de
Enerji Tasarrufu ve Çevre Duyarlılığında
Leed Gold Sertifikası Almış 2. Binadır.

Ofisline facility is the second facility which
has been awarded to Leed Gold certificate
on energy saving and environmental
awareness in Turkey

yenilik ve teknoloji innovation and technology



QR KATALOG
QR CATALOGUE

Basım Tarihi Nisan 2021



Hakkımızda / About Us

NITROCARE, Sivas'tan Türkiye'ye, Türkiye'den adım adım Dünya'ya yayılan ve sektörde 20 yılı aşkındır hizmet veren Gökler Group bünyesinde hastane mefruşatı ve medikal ekipmanlar üretmek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.

Nitrocare 40.000m² kapalı alanda ileri teknoloji makine parkuru ile üretim kapasitesini her geçen gün artırarak sektöründe lider üreticiler arasına girmeyi başarmıştır.

'Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir' prensibiyle çalışan Nitrocare, Anadolu'nun yükselen değeri olarak bir Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemesini her geçen gün sürdürmektedir.

Nitrocare, kaliteli ve esnek üretim kabiliyetini uzman tasarım ekibi ile geliştirerek kendine özgü tasarımlarını Dünyaya kanıtlamış, 2 yılda RED DOT DESIGN AWARD, GOOD INDUSTRIAL DESIGN, GOOD DESIGN AWARD, GERMAN DESIGN AWARD, IF DESIGN AWARD ve INTERNATIONAL DESIGN AWARD, PRODUCT DESIGN AWARD gibi uluslararası 17 tasarım ödülü kazanmıştır. Yeni ürünleri ile dünya çapındaki ödüllerde adaylığını devam ettirecektir.

Firmamızın değişmez prensipleri kaliteli ürün, sistemli çalışma, nitelikli hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Kaliteli ürüne verdiği değeri aldığı ürün belgeleri ile müşterilerinin gözünde kanıtlamış, 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatlarla, aldığı uluslararası tasarım ödülleriyle ve iki dönem üst üste Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer almasıyla karşılığını almıştır. (2013-2015).

Nitrocare dinamik çalışma ekibiyle, her geçen gün artan ürün portföyü ve gelişen makine parkuru ile geleceğe sağlam adımlarla ilerlemektedir. Nitrocare yenilik üretmeye, yorulmadan çalışmaya devam edecek, seçkinliği ve kalitesiyle yeni hedeflere, yeni başarılarla imza atacaktır. İşte bu yüzden Nitrocare imzası bir prestijdir ve bu imza hayata mükemmellik katar.



NITROCARE was established in 2009 on the purpose of producing hospital furniture and medical equipment within the body of Gökler Group, which spreads from Sivas to Turkey, from Turkey to the world step by step and has been serving for over 20 years in the sector.

Nitrocare managed to rank among the leader producers in the sector, by increasing its production capacity day by day with its high technology machine park at 40.000m² indoor areas.


Nitrocare, which serves with the principle of 'The assurance of success and sustainability in production is honesty and quality in the service', sustains its progress emphatically in being a world-brand as the ascending value of Anatolia.

Nitrocare has proved its unique designs to the world by developing its quality and flexible production skills with its expert designers, and it won 'RED DOT DESIGN AWARD, GOOD INDUSTRIAL DESIGN, GOOD DESIGN AWARD, GERMAN DESIGN AWARD, IF DESIGN AWARD INTERNATIONAL DESIGN AWARD and PRODUCT DESIGN AWARD' international 17 design awards. It will continue its nomination in worldwide awards with its new products.


Fixed principles of the firm have been quality products, systematic working, qualified service, delivery in time and affordable prices. It has proved to its customers that it values the quality product with its quality certificates and it received recompense with its exports to more than 100 countries, international design awards that it received and with its place among Turkey's fastest growing 100 companies (2013-2015).

Nitrocare proceeds to the future with firm steps with its dynamic working team, its product range increasing day by day and its developing machines. Nitrocare will keep making innovation, working non-stop and will reach new objectives, succeed new successes with its distinction and quality. So 'Nitrocare signature' is a prestige and this signature brings excellence to life.



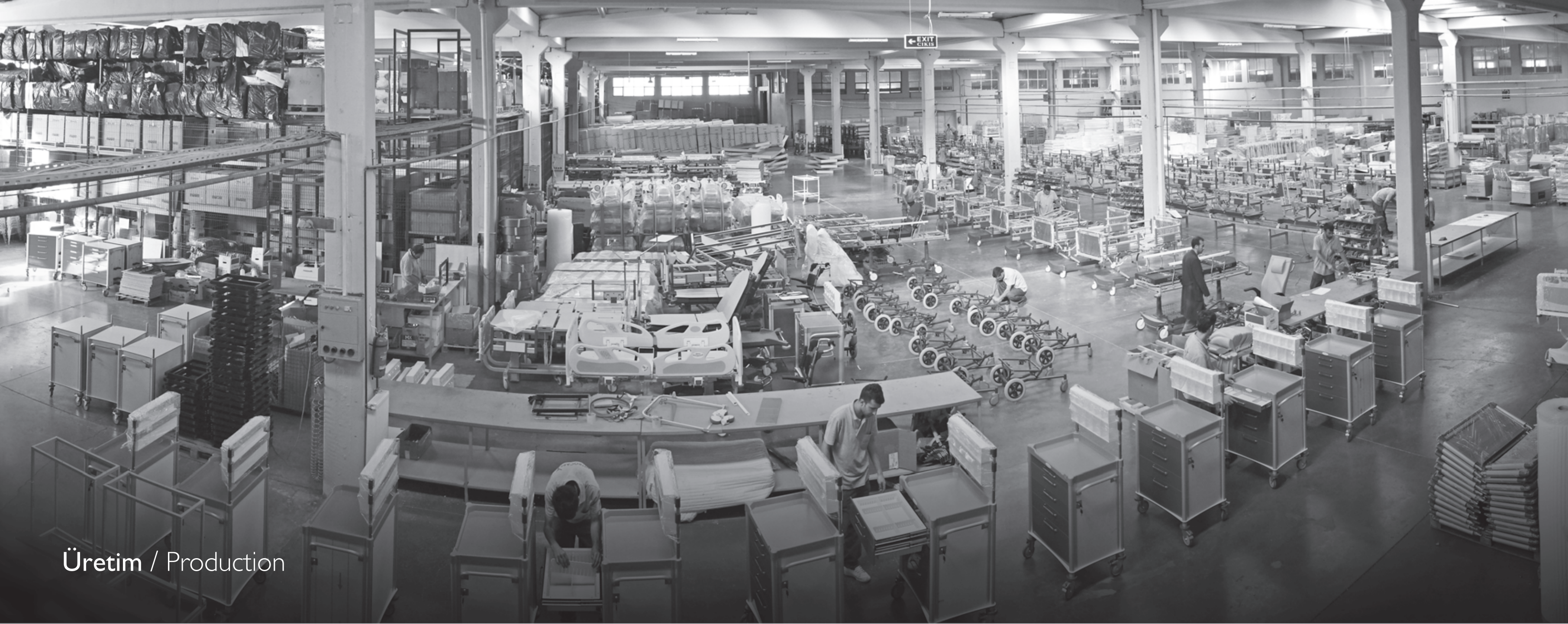

Üretim / Production

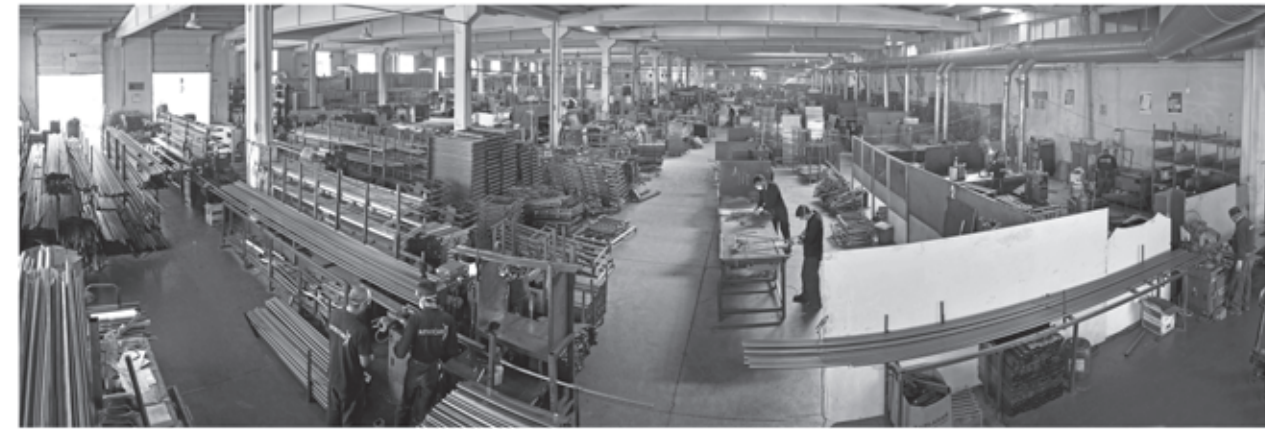

Ödüllerimiz / Awards



2013 YILI ÖDÜLLERİMİZ
2013 AWARDS



2014 YILI ÖDÜLLERİMİZ
2014 AWARDS



2015 YILI ÖDÜLLERİMİZ
2015 AWARDS



İÇİNDEKİLER
CONTENTS



HASTA KARYOLALARI
HOSPITAL BEDS

NITRO HB 8000 D	NITROCARE DÖRT MOTORLU DİJİTAL EKRANLI LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL DIGITAL DISPLAY INTENSIVE CARE PATIENT BED	14 / 17
NITRO HB 8150	NITROCARE BEŞ MOTORLU LATERAL TARTILI LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FIVE MOTORS COLUMN MODEL LATERAL + WEIGHT SCALE INTENSIVE CARE PATIENT BED	18 / 21
NITRO HB 8000 B	NITROCARE DÖRT MOTORLU BARIATRİK LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE BARIATRIC PATIENT BED	22 / 23
NITRO HB 8000 T	NITROCARE DÖRT MOTORLU TARTILI LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL WEIGHT SCALE INTENSIVE CARE PATIENT BED	24 / 25
NITRO HB 8000	NITROCARE DÖRT MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED	26 / 29
NITRO HB 6220 B	NITROCARE DÖRT MOTORLU BARIATRİK ELEKTRİKLİ LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE BARIATRIC PATIENT BED	30 / 31
NITRO HB 5130	NITROCARE DÖRT MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL WEIGHT SCALE INTENSIVE CARE PATIENT BED	32 / 35
NITRO HB 5220	NITROCARE DÖRT MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED	36 / 37
NITRO HB 5330	NITROCARE DÖRT MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED	38 / 39
NITRO HB 5110	NITROCARE BEŞ MOTORLU LATERAL, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FIVE MOTORS COLUMN MODEL LATERAL INTENSIVE CARE PATIENT BED	40 / 43
NITRO HB 5230	NITROCARE DÖRT MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED	44 / 47
NITRO HB 6260	NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	48 / 51
NITRO HB 6240	NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	52 / 55
NITRO HB 8140	NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)	56 / 61
NITRO HB 8140 C	NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)	62 / 63
NITRO HB 4230	NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)	64 / 65
NITRO HB 4220	NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)	66 / 67
NITRO HB 4310	NITROCARE DÖRT MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)	68 / 69
NITRO HB 6460	NITROCARE DÖRT MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)	70 / 71
NITRO HB 6630	NITROCARE DÖRT MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)	72 / 73
NITRO HB 8130	NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED	74 / 75
NITRO HB 3340	NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED	76 / 79
NITRO HB 3230	NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED	80 / 81
NITRO HB 3350	NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED	82 / 83
NITRO HB 3150	NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED	84 / 85
NITRO HB 8120	NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED	86 / 87
NITRO HB 2110	NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED	88 / 89
NITRO HB 2220	NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED	90 / 91
NITRO HB 2230	NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED	92 / 93



HASTA KARYOLALARI
HOSPITAL BEDS

NITRO HB 6420	NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED	94 / 95
NITRO HB 6610	NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED	96 / 97
NITRO HB 1310	NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ HASTA KARYOLASI NITROCARE HYDRAULIC PATIENT BED	98 / 99
NITRO HB 1430	NITROCARE MANUEL KONTROLLÜ HASTA KARYOLASI NITROCARE MANUEL PATIENT BED	100
NITRO HB 1420	NITROCARE MANUEL KONTROLLÜ HASTA KARYOLASI NITROCARE MANUEL PATIENT BED	101

PEDİATRİK HASTA KARYOLALARI
PEDIATRIC HOSPITAL BEDS

NITRO HB 4430P	NITROCARE DÖRT MOTORLU PEDİATRİK HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED	104 / 105
NITRO HB 4420P	NITROCARE DÖRT MOTORLU PEDİATRİK HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED	106 / 107
NITRO HB 3430P	NITROCARE ÜÇ MOTORLU PEDİATRİK HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE THREE MOTORS PEDIATRIC PATIENT BED	108 / 109
NITRO HB 3420P	NITROCARE ÜÇ MOTORLU PEDİATRİK HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE THREE MOTORS PEDIATRIC PATIENT BED	110 / 111
NITRO HB 2430P	NITROCARE İKİ MOTORLU PEDİATRİK HASTA KARYOLASI NITROCARE TWO MOTORS PEDIATRIC PATIENT BED	112 / 113
NITRO HB 2420P	NITROCARE İKİ MOTORLU PEDİATRİK HASTA KARYOLASI NITROCARE TWO MOTORS PEDIATRIC PATIENT BED	114 / 115
NITRO HB 1110P	NITROCARE REFAKATÇI YATAKLI PEDİATRİK KARYOLA NITROCARE MANUEL PEDIATRIC BED WITH COMPANION BED	116 / 117

EVDE BAKIM KARYOLALARI
HOME CARE BEDS

NITRO HB 7260F	NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED	120 / 123
NITRO HB 7260	NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED	124 / 125
NITRO HB 7240	NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED	126 / 129
NITRO HB 7000W	NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED	130 / 133
NITRO HB 7000	NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED	134 / 135
NITRO HB 7250	NITROCARE ÜÇ MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE THREE MOTORS CARE BED	136
NITRO HB 7250S	NITROCARE ÜÇ MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED NITROCARE THREE MOTORS CARE BED	137

SEDYELER VE HASTA TAŞIMA SANDALYELERİ
STRETCHER AND TRANSPORT CHAIR

SD 14 Drive	NITROCARE MOTORLU ACİL MÜDAHALE VE TAŞIMA SEDYESİ NITROCARE FOUR MOTORS EMERGENCY STRETCHER - E - DRIVE SYSTEMS	140 / 143
SD 14	NITROCARE MOTORLU ACİL MÜDAHALE VE TAŞIMA SEDYESİ NITROCARE FOUR MOTORS EMERGENCY STRETCHER	144 / 145
NT Q7	NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ NITROCARE HYDRAULIC COLUMN SYSTEM EMERGENCY STRETCHER	146 / 149
SD 15	NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ NITROCARE HYDRAULIC COLUMN SYSTEM EMERGENCY STRETCHER	150 / 151
SD 13 BARIATRIC	NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM BARIATRIC EMERGENCY STRETCHER	152 / 153

İÇİNDEKİLER
CONTENTS



SEDYELER VE HASTA TAŞIMA SANDALYELERİ
STRETCHER AND TRANSPORT CHAIR

SD 12 INFINITY	NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER	154 / 157
SD 09	NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER	158 / 161
SD 05	NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER	162 / 163
SD 04	NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM PATIENT STRETCHER	164 / 165
SD 01	NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ NITROCARE MECHANICAL SYSTEM PATIENT STRETCHER	166 / 167
SD 01P	NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ NITROCARE MECHANICAL SYSTEM PEDIATRIC PATIENT STRETCHER	168 / 169
SD 06	NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ TRANSFER SEDYESİ NITROCARE MECHANICAL SYSTEM TRANSFER STRETCHER	170 / 173
SD 10	NITROCARE MOTORLU HASTA MUAYENE MASASI NITROCARE ELECTRICAL EXAMINATION COUCH	174 / 175
SD 11	NITROCARE MOTORLU HASTA MUAYENE MASASI NITROCARE ELECTRICAL EXAMINATION COUCH	176
NITRO HB 6210	NITROCARE MOTORLU FİZİK TERAPİ YATAĞI NITROCARE PHYSICAL THERAPY BED	177
SD 08	NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ HASTA YIKAMA SEDYESİ NITROCARE PATIENT WASHING STRETCHER	178 / 179

HASTA TAŞIMA SANDALYELERİ
WHEEL CHAIRS

NTS X5	NITROCARE HASTA TAŞIMA SANDALYESİ NITROCARE WHEEL CHAIR	182 / 185
NTS X10	NITROCARE HASTA TAŞIMA SANDALYESİ NITROCARE WHEEL CHAIR	186 / 187
NTS X6	NITROCARE HASTA TAŞIMA SANDALYESİ NITROCARE MULTIFUNCTIONAL TRANSPORT CHAIR	188 / 191
NTS X8	NITROCARE YÜKSEKLİK AYARLI HASTA TAŞIMA SANDALYESİ NITROCARE HEIGHT ADJUSTMENT MULTIFUNCTIONAL TRANSPORT CHAIR	192 / 193
NTS X12	NITROCARE BARIATRİK HASTA TAŞIMA SANDALYESİ NITROCARE MULTIFUNCTIONAL BARIATRIC TRANSPORT CHAIR	194 / 195
NTS X7	NITROCARE KAN ALMA KOLTUĞU NITROCARE MULTIFUNCTIONAL BLOOD DONOR CHAIR	196 / 199
NTS X11	NITROCARE İKİ MOTORLU KAN ALMA KOLTUĞU NITROCARE MULTIFUNCTIONAL ELECTRICAL BLOOD DONOR CHAIR	200/ 201

JİNEKOLOJİK MUAYENE MASALARI
GYNAECOLOGICAL PATIENT BED

JMM 02	NITROCARE ÜÇ MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE VE DOĞUM MASASI NITROCARE THREE MOTORS GYNAECOLOGICAL DELIVERY BED	204 / 205
JMM 04	NITROCARE ÜÇ MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE KOLTUĞU NITROCARE THREE MOTORS GYNAECOLOGICAL EXAMINATION CHAIR	206 / 207
JMM 03	NITROCARE ÜÇ MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI NITROCARE THREE MOTORS GYNAECOLOGICAL EXAMINATION COUCH	208 / 211
JMM 01	NITROCARE İKİ MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI NITROCARE TWO MOTORS GYNAECOLOGICAL EXAMINATION COUCH	212 / 213

İLAÇ VE TEDAVİ ARABALARI
MEDICINE AND TREATMENT CART

NTHM 112	NITROCARE ACİL MÜDAHALE ARABASI NITROCARE EMERGENCY TROLLEY	216
NTHM 113	NITROCARE İLAÇ VE TEDAVİ ARABASI NITROCARE MEDICINE AND TREATMENT TROLLEY	217



İLAÇ VE TEDAVİ ARABALARI
MEDICINE AND TREATMENT CART

NTHM 114	NITROCARE ANESTEZİ ARABASI NITROCARE ANAESTHESIA TROLLEY	218
NTHM 115	NITROCARE İLAÇ VE TEDAVİ ARABASI NITROCARE MEDICINE AND TREATMENT TROLLEY	219
NTHM 116	NITROCARE İLAÇ DEPOLAMA ARABASI NITROCARE MEDICINE STORAGE TROLLEY	220 / 221
NTHM 117	NITROCARE İLAÇ DEPOLAMA ARABASI NITROCARE MEDICINE STORAGE TROLLEY	222 / 223
NTHM 118	NITROCARE MONİTÖR TUTUCULU İLAÇ VE TEDAVİ ARABASI NITROCARE MEDICINE AND TREATMENT TROLLEY WITH MONITOR HOLDER	224 / 225
NTHM 118B	NITROCARE BARKOD VE GÜÇ ÜNİTESİ YUVALI İLAÇ VE TEDAVİ ARABASI NITROCARE MEDICINE AND TREATMENT TROLLEY WITH BARCODE AND POWER UNIT HOLDER	226 / 227

BK 02 - BK 03	BEBEK KODU ve PEDIATRİK KARYOLA BABY COT AND MANUAL PEDIATRIC BED	228 / 229
----------------------	--	-----------

DİYALİZ ve KEMOTERAPİ KOLTUKLARI
DIALYSIS AND CHEMOTHERAPY CHAIRS

NHS 900	NITROCARE DÖRT MOTORLU DİYALİZ KOLTUĞU NITROCARE FOUR MOTORS DIALYSIS CHAIR	232 / 233
SD 07	NITROCARE ÜÇ MOTORLU DİYALİZ KOLTUĞU NITROCARE THREE MOTORS DIALYSIS CHAIR	234 / 235
NHS 870	NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ DİYALİZ KOLTUĞU NITROCARE HYDRAULIC COLUMN SYSTEM DIALYSIS CHAIR	236 / 237
AURA S	NITROCARE REFAKATÇİ KOLTUĞU NITROCARE ACCOMPANIMENT & CHEMOTHERAPY SOFA	238 / 239
AURA - HAPPY	NITROCARE DİYALİZ VE KEMOTERAPİ KOLTUKLARI NITROCARE ACCOMPANIMENT & CHEMOTHERAPY SOFA - DIALYSIS SOFA	240 / 241

OPERASYON KOLTUKLARI
OPERATIONAL CHAIRS

NHS 905	NITROCARE DÖRT MOTORLU PROKTOLOJİ KOLTUĞU NITROCARE FOUR MOTORS PROCTOLOGY CHAIR	244 / 245
NHS 904	NITROCARE DÖRT MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE KOLTUĞU NITROCARE FOUR MOTORS GYNAECOLOGICAL CHAIR	246 / 247
NHS 903	NITROCARE DÖRT MOTORLU PODİATRİ MUAYENE KOLTUĞU NITROCARE FOUR MOTORS PODIATRY CHAIR	248 / 249
NHS 902	NITROCARE ÜÇ MOTORLU KBB KOLTUĞU NITROCARE THREE MOTORS ENT CHAIR	250 / 251

MOBİLYA GRUBU FURNITURE GROUP	252 / 329
---	-----------

HAVALI ŞİLTELER AIR MATTRESS	330 / 339
--	-----------

PASLANMAZ MEDİKAL EKİPMANLARI STAINLESS STEEL MEDICAL EQUIPMENT	340 / 351
---	-----------

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENT	352 / 361
---	-----------

DUVAR KORUMA BANTLARI WALL PROTECT BAND	362 / 373
---	-----------

PVC ZEMİN VE HALI ÇÖZÜMLERİ PVC FLOORING AND CARPET SOLUTIONS	374 / 381
---	-----------

TUVALET KABİNLERİ - SOYUNMA DOLAPLARI TOILET CUBICLES	382 / 385
---	-----------

PROJELER VE REFERANSLAR PROJECTS AND REFERENCES	386 / 419
---	-----------

TABLO VE RENK KARTELALARI COLOR CHARTS	420 / 444
--	-----------



NITROCARE

Hasta Karyolaları

PATIENT BED


Sante

NITRO HB 8000D

NITROCARE DÖRT MOTORLU DİJİTAL EKRANLI LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL DIGITAL DISPLAY INTENSIVE CARE PATIENT BED

NITROCARE

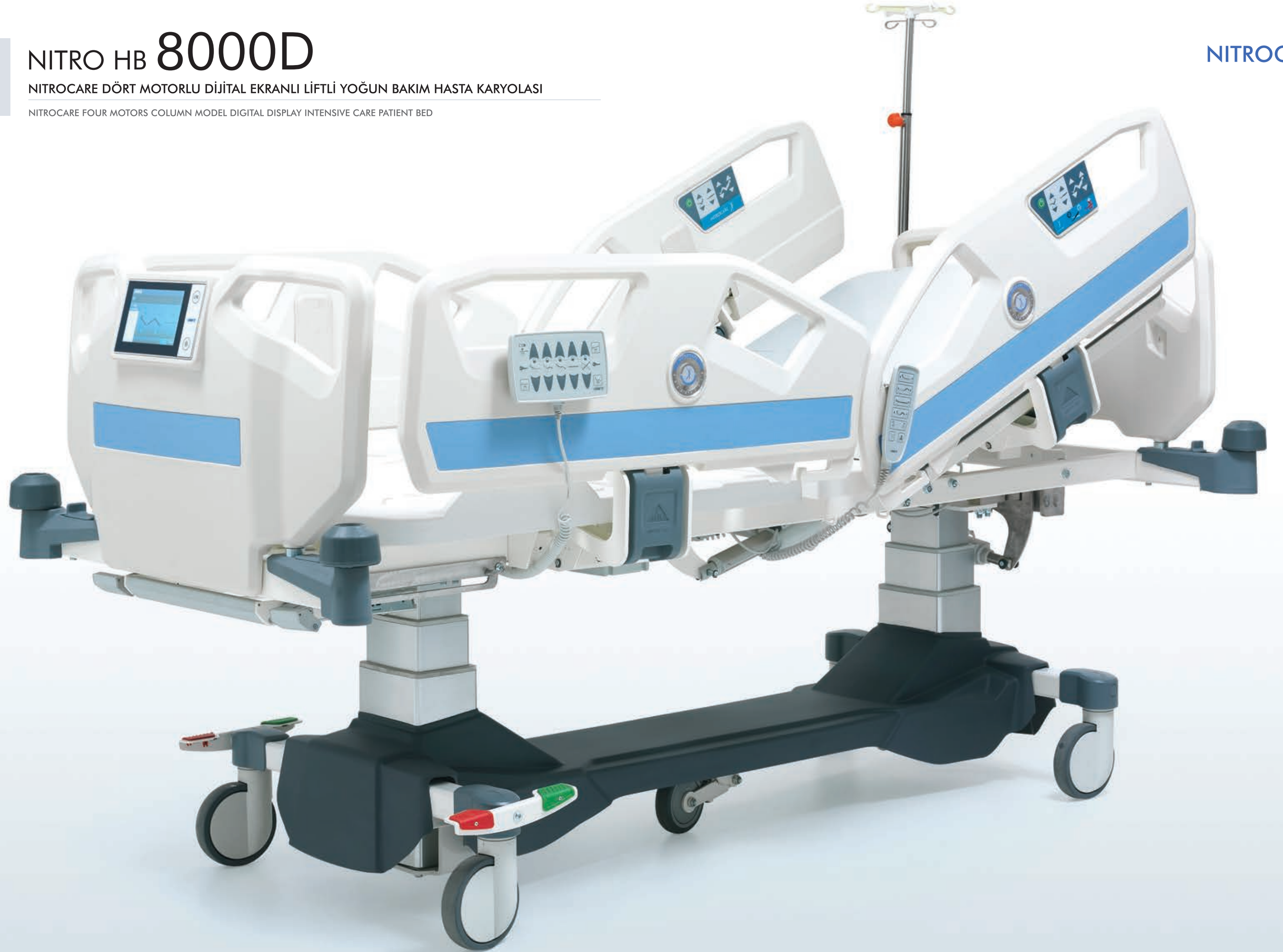




- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) 10" Elektronik Kontrol Paneli
- 3-) Korkuluk Kumandası
- 4-) El Kumandası
- 5-) Mekanik CPR
- 6-) X-Ray Özelliği
- 7-) 360 Derece Dönebilir Tekerler
- 8-) 5. Teker
- 9-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 10-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 11-) Açı ölçer
- 12-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 13-) ABS yatma yüzeyi
- 14-) İdrar Torbası Askılığı
- 15-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 16-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Attendant Control Touch Screen (10 ")
- 3-) Side Rail Control
- 4-) Hand Control Unit
- 5-) Mechanical Cpr
- 6-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 7-) 360° Movable Castors
- 8-) 5th Castor (125 Mm)
- 9-) Side Rail Open / Close
- 10-) Removable Head And Foot Board
- 11-) Angle Gauge
- 12-) Nurse Control Panel Storage
- 13-) Abs Bed Surfaces
- 14-) Urine Bag Holders
- 15-) Protection Bumpers
- 16-) IV Pole

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Yatak Uzatma / Bed Extension

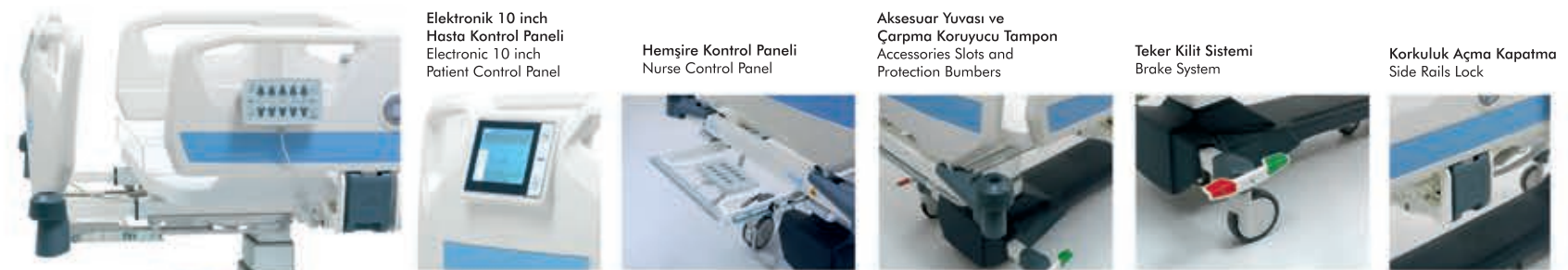

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Karyola fonksiyon yönetimi için 10" Elektronik Kontrol Paneli

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası / Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama / ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilir merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

5. Teker (125 mm)

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Attendant Control Touch Screen (10 ")

Nurse Control Panel And its Storage

Nurse Control Panel Can Lock The Functions

Hand Control Unit

Battery / Mechanical And Electronic Cpr

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Bed Extension

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 Mm)

1 Antistatic Castor / 5th Castor (125 mm)

Height Adjustable IV Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Lateral (Tilt) System

Weight Scale System

Double Castors Q 150

Full Hpl Bed Surface


Control Panel On Side Rails

Foot Control Panel

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

Linen Tray

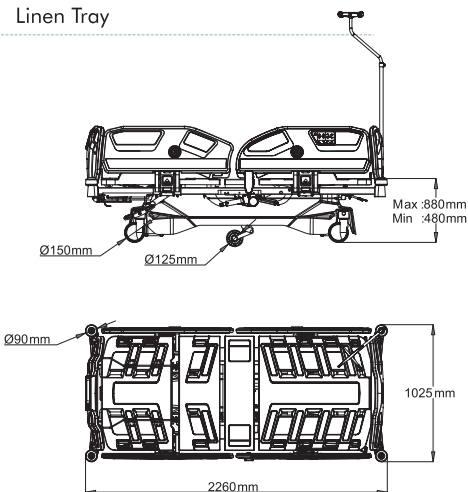

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

Sante

NITRO HB 8150

NITROCARE BEŞ MOTORLU LATERAL TARTILI LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FIVE MOTORS COLUMN MODEL LATERAL + WEIGHT SCALE INTENSIVE CARE PATIENT BED

NITROCARE





- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) Elektronik Tartı ve Lateral Özelliği
- 3-) Korkuluk Kumandası
- 4-) El Kumandası
- 5-) Mekanik Elektronik CPR
- 6-) X-Ray Özelliği
- 7-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 8-) 5. Teker
- 9-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 10-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 11-) Açı Ölçer
- 12-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 13-) ABS yatma yüzeyi
- 14-) İdrar Torbası Askılığı
- 15-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 16-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Lateral Tilt and Weight Scale
- 3-) Side Rail Control
- 4-) Hand Control Unit
- 5-) Mechanical Cpr
- 6-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 7-) 360° Movable Castors
- 8-) 5th Castor (125 Mm)
- 9-) Side Rail Open / Close
- 10-) Removable Head And Foot Board
- 11-) Angle Gauge
- 12-) Nurse Control Panel Storage
- 13-) Abs Bed Surfaces
- 14-) Urine Bag Holders
- 15-) Protection Bumpers
- 16-) IV Pole



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Elektronik Tartı ve Lateral Özelliği

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

5. Teker (125 mm)

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Lateral (Tilt) System

Weight Scale System

Nurse Control Panel And its Storage

Nurse Control Panel Can Lock The Functions

Hand Control Unit / Battery

Mechanical And Electronic Cpr

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Bed Extension

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS / 4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 Mm)

1 Antistatic Castor / 5th Castor (125 mm)

Height Adjustable IV Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Double Castors Q 150

Attendant Control Touch Screen (10 ")

Full Hpl Bed Surface


Control Panel On Side Rails

Foot Control Panel

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

Linen Tray

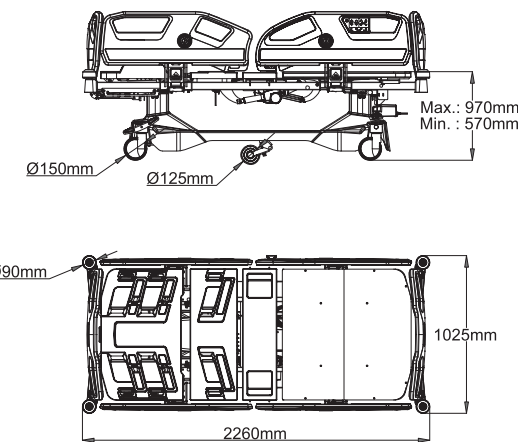

SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG




KARDİYAK
CARDIAC



LATERAL
LATERAL

Yatak Uzatma
Bed Extension

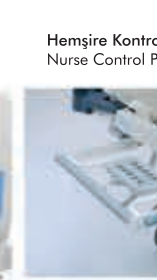

El Kumandası
Hand Control
Units

Elektronik Tartı
Kumandası
Weight Scale
Controller

Hemşire Kontrol Paneli
Nurse Control Panel

Çarpma Korumucu
Tamponlar
Plastic Protection
Bumpers

Kademeli Merkezi
Fren Sistemi
Gradual Central
Locking System

Açı Ölçer ve
Korkuluk Kontrol Ünitesi
Angle Gauge
Side Rail Control



- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) Elektronik Tartı Özelliği
- 3-) Korkuluk Kumandası
- 4-) El Kumandası
- 5-) Mekanik ve Elektronik CPR
- 6-) X-Ray Özelliği
- 7-) 360 Derece Dönebilir Tekerler
- 8-) 5. Teker
- 9-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 10-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 11-) Açı Ölçer
- 12-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 13-) ABS yatma yüzeyi
- 14-) İdrar Torbası Askılığı
- 15-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 16-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Weight Scale System
- 3-) Side Rail Control
- 4-) Hand Control Unit
- 5-) Mechanical Cpr
- 6-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 7-) 360° Movable Castors
- 8-) 5th Castor (125 Mm)
- 9-) Side Rail Open / Close
- 10-) Removable Head And Foot Board
- 11-) Angle Gauge
- 12-) Nurse Control Panel Storage
- 13-) Abs Bed Surfaces
- 14-) Urine Bag Holders
- 15-) Protection Bumpers
- 16-) IV Pole

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Elektronik Tartı Özelliği

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilir merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur./ 5. Teker (125 mm)

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Weight Scale System

Nurse Control Panel And its Storage

Nurse Control Panel Can Lock The Functions

Hand Control Unit

Battery

Mechanical And Electronic Cpr

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Bed Extension

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS / 4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 mm)

1 Antistatic Castor / 5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Lateral (Tilt) System

Attendant Control Touch Screen (10 ")

Double Castors Q 150

Full Hpl Bed Surface


Control Panel On Side Rails

Foot Control Panel

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

Linen Tray

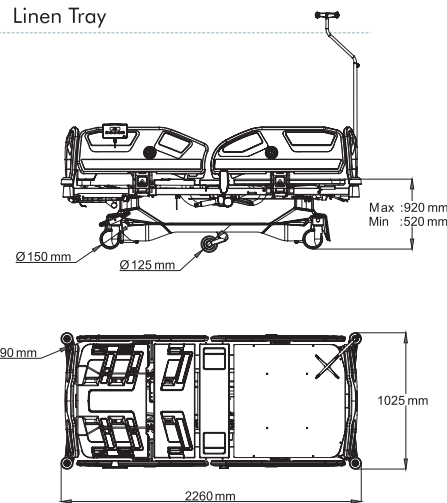

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

Yatak Uzatma
Bed Extension



El Kumandası
Hand Control
Units

Elektronik Tartı
Kumandası
Weight Scale
Controller

Hemşire Kontrol Paneli
Nurse Control Panel

Çarpma Korumucu
Tamponlar
Plastic Protection
Bumpers

Kademeli Merkezi
Fren Sistemi
Gradual Central
Locking System

Açı Ölçer ve
Korkuluk Kontrol Ünitesi
Angle Gauge
Side Rail Control


Sante

NITRO HB 8000

NITROCARE DÖRT MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

NITROCARE

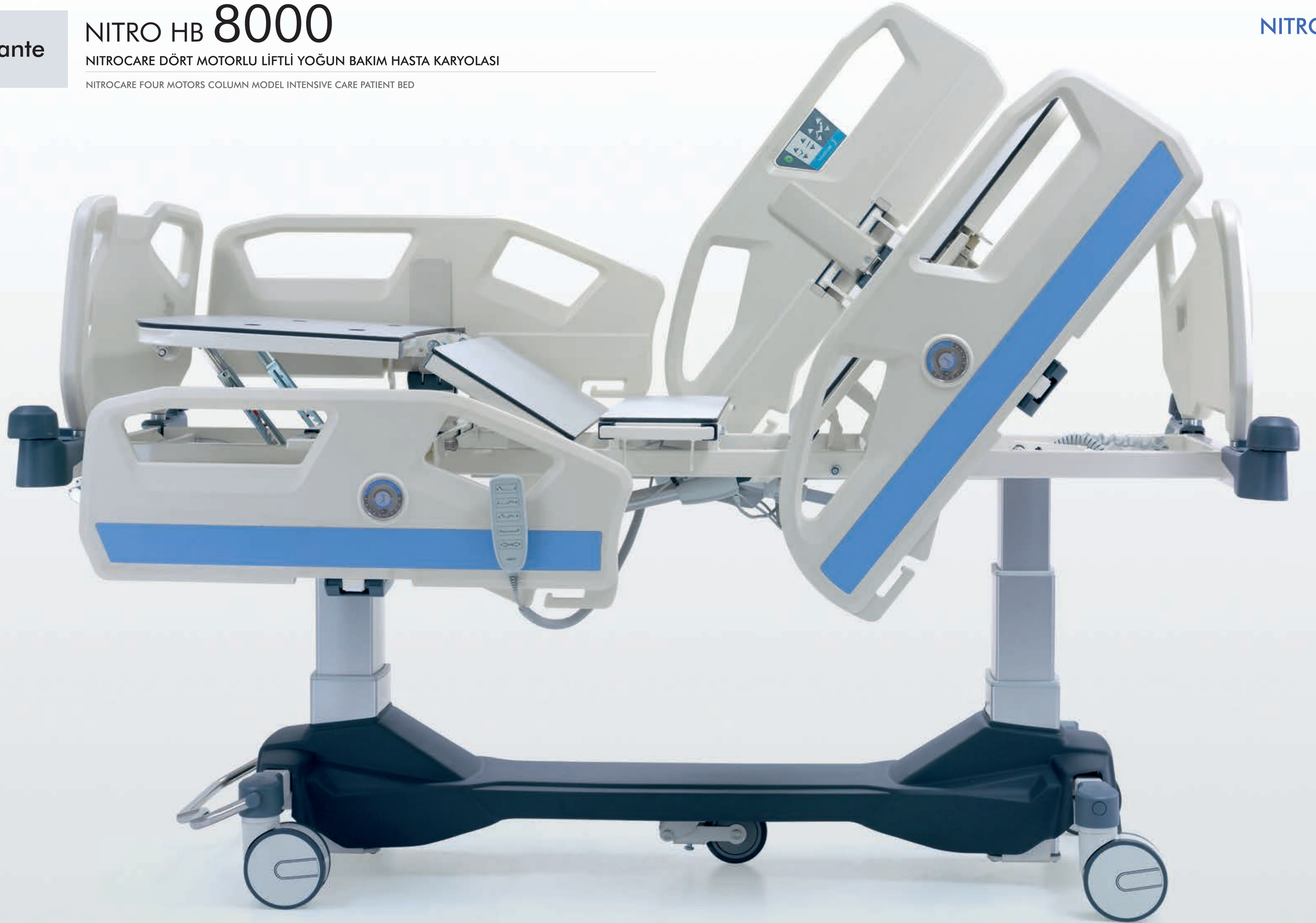



- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) Korkuluk Kumandası
- 3-) El Kumandası
- 4-) Mekanik CPR
- 5-) X-Ray Özelliği
- 6-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 7-) 5. Teker
- 8-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 9-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 10-) Açı Ölçer
- 11-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 12-) ABS yatma yüzeyi
- 13-) İdrar Torbası Askılığı
- 14-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 15-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Side Rail Control
- 3-) Hand Control Unit
- 4-) Mechanical Cpr
- 5-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 6-) 360° Movable Castors
- 7-) 5th Castor (125 Mm)
- 8-) Side Rail Open / Close
- 9-) Removable Head And Foot Board
- 10-) Angle Gauge
- 11-) Nurse Control Panel Storage
- 12-) Abs Bed Surfaces
- 13-) Urine Bag Holders
- 14-) Protection Bumpers
- 15-) IV Pole

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur. / 5. Teker (125 mm)

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Nurse Control Panel And its Storage

Nurse Control Panel Can Lock The Functions

Hand Control Unit

Battery

Mechanical And Electronic Cpr

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Bed Extension

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 mm)

1 Antistatic Castor / 5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Lateral (Tilt) System

Attendant Control Touch Screen (10 ")

Weight Scale System

Double Castors Q 150

Full Hpl Bed Surface


Control Panel On Side Rails

Foot Control Panel

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

Linen Tray

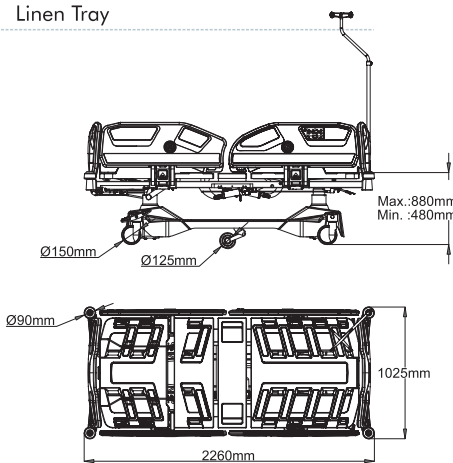

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC



Yatak Uzatma
Bed Extension

Hemşire Kontrol Paneli
Nurse Control Panel

ABS Yatma Yüzeyi
ABS Bed Surfaces

Teker Kilit Sistemi
Brake System

Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock

Compact

NITRO HB 6220 B

NITROCARE DÖRT MOTORLU BARIATRİK LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE BARIATRIC PATIENT BED

NITROCARE



- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik CPR
- 4-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 5-) 5. Teker
- 6-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 7-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 8-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 9-) Kompakt yatma yüzeyi
- 10-) İdrar Torbası Askılığı
- 11-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 12-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 13-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) 360° Movable Castors
- 5-) 5th Castor (125 mm)
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Removable Head And Foot Board
- 8-) Nurse Control Panel Storage
- 9-) Hpl Bed Surfaces
- 10-) Urine Bag Holders
- 11-) Protection Bumpers
- 12-) IV Pole
- 13-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Karyola Uzayabilme ve Genişleyebilme özelliğine sahiptir

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Kompakt Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

5. Teker (125 mm)

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Bed Extension System From Right and Left Sides For Extend The Beds

Nurse Control Panel And its Storage

Nurse Control Panel Can Lock The Functions

Hand Control Unit

Battery

Mechanical And Electronic Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium And HPL

HPL Bed Surfaces

360° Movable Double Castors With Central Brake Systems (150 mm)

1 Antistatic Castor

5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS


Foam Or Visco Mattress

Weight Scale System

Foot Control Panel

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

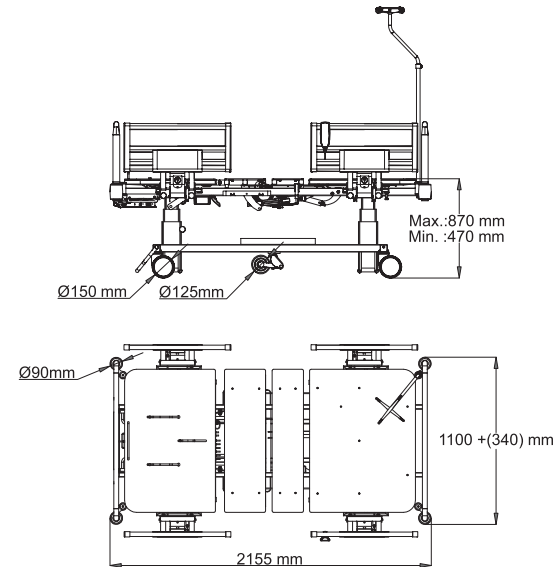

SIRT HAREKETİ

AYAK HAREKETİ

SIRT - AYAK

DİZ KIRMA

YÜKSEKLİK

TERS TRENDLENBURG

TRENDLENBURG

KARDİYAK

BARIATRİK

Yatak Uzatma

Bed Extension

Teker Kilit Sistemi

Brake System

Çarpma Korumucu

Tamponlar

5. Teker

5th Castor

Compact

NITRO HB 5130

NITROCARE DÖRT MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL WEIGHT SCALE INTENSIVE CARE PATIENT BED

NITROCARE




Compact

NITRO HB 5130

NITROCARE DÖRT MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI


NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL WEIGHT SCALE INTENSIVE CARE PATIENT BED

NITROCARE®

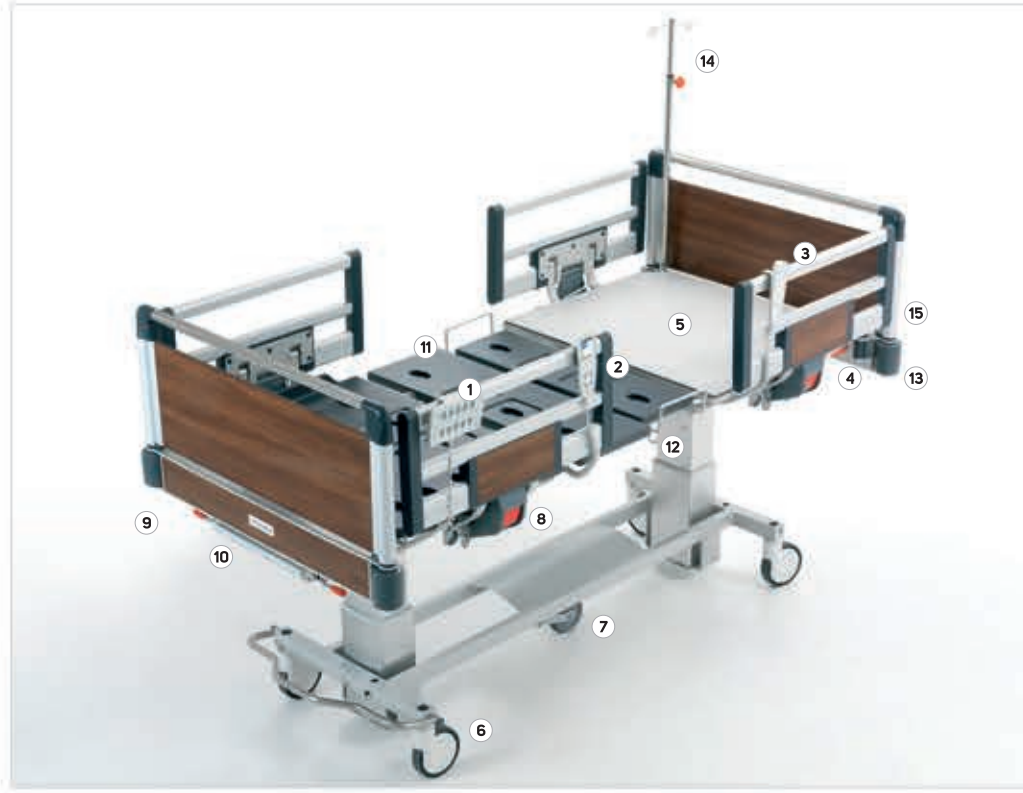

- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) Elektronik Tartı Özelliği
- 3-) El Kumandası
- 4-) Mekanik CPR
- 5-) X-Ray Özelliği
- 6-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 7-) 5. Teker
- 8-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 9-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 10-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 11-) ABS yatma yüzeyi
- 12-) İdrar Torbası Askılığı
- 13-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 14-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 15-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Weight Scale System
- 3-) Hand Control Unit
- 4-) Mechanical Cpr
- 5-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 6-) 360° Movable Castors
- 7-) 5th Castor (125 Mm)
- 8-) Side Rail Open / Close
- 9-) Removable Head And Foot Board
- 10-) Nurse Control Panel Storage
- 11-) Abs Bed Surfaces
- 12-) Urine Bag Holders
- 13-) Protection Bumpers
- 14-) IV Pole
- 15-) Accessories Slot

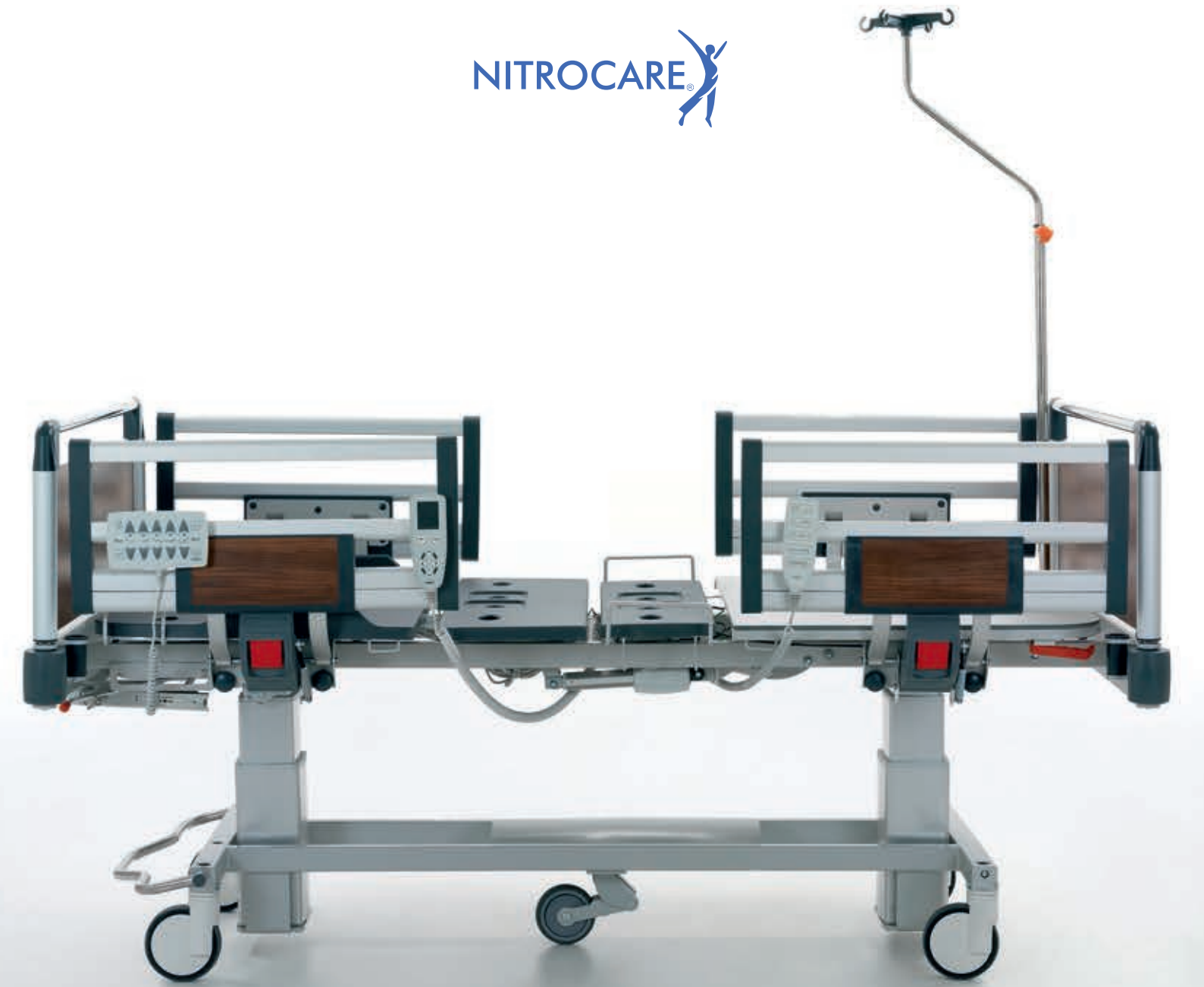

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Elektronik Tartı Özelliği

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

5. Teker (125 mm)

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Weight Scale System

Nurse Control Panel And its Storage

Nurse Control Panel Can Lock The Functions

Hand Control Unit

Battery

Mechanical And Electronic Cpr

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Bed Extension

Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 Mm)

1 Antistatic Castor / 5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Lateral (Tilt) System


Double Castors Q 150

Full Hpl Bed Surface

Foot Control Panel

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

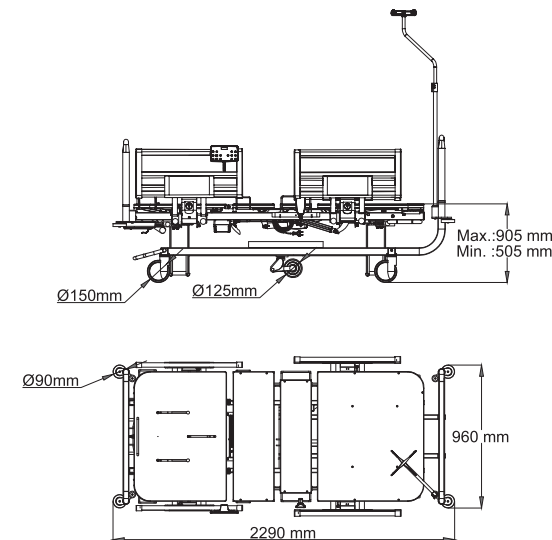

SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT


TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

Yatak Uzatma

Bed Extension

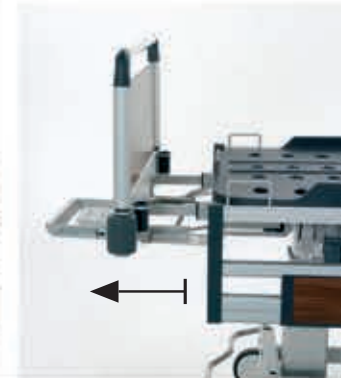

Korkuluk Açma Kapama
Folding Side Rails

Elektronik Tartı Kumandası
Weight Scale Controller

5. Teker
5th Castor

Hemşire Kontrol Paneli
Nurse Control Panel

Kademeli Merkezi
Fren Sistemi
Gradual Central
Locking System




Compact

NITRO HB 5220

NITROCARE DÖRT MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

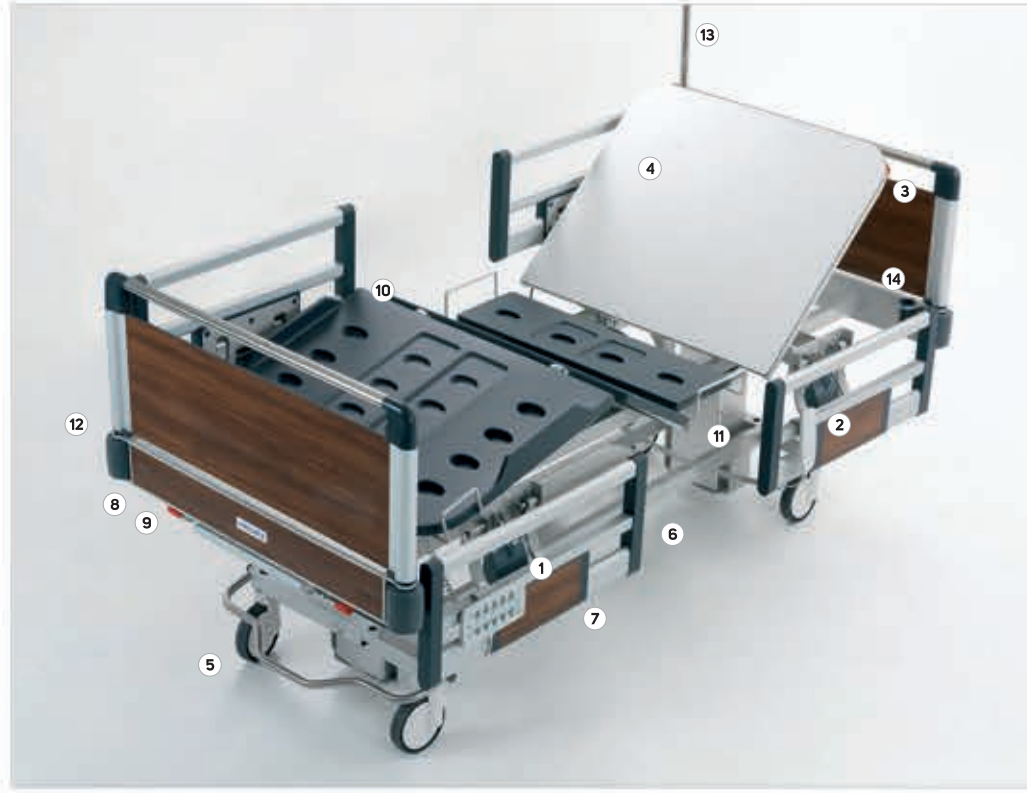

- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik CPR
- 4-) X-Ray Özelliği
- 5-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 6-) 5. Teker
- 7-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 8-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 9-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 10-) ABS yatma yüzeyi
- 11-) İdrar Torbası Askılığı
- 12-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 13-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 14-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 5-) 360° Movable Castors
- 6-) 5th Castor (125 Mm)
- 7-) Side Rail Open / Close
- 8-) Removable Head And Foot Board
- 9-) Nurse Control Panel Storage
- 10-) Abs Bed Surfaces
- 11-) Urine Bag Holders
- 12-) Protection Bumpers
- 13-) IV Pole
- 14-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

5. Teker (125 mm)

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Nurse Control Panel And its Storage

Nurse Control Panel Can Lock The Functions

Hand Control Unit

Battery

Mechanical And Electronic Cpr

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Bed Extension

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 Mm)

1 Antistatic Castor / 5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Lateral (Tilt) System

Weight Scale System


Double Castors Q 150

Full Hpl Bed Surface

Foot Control Panel

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

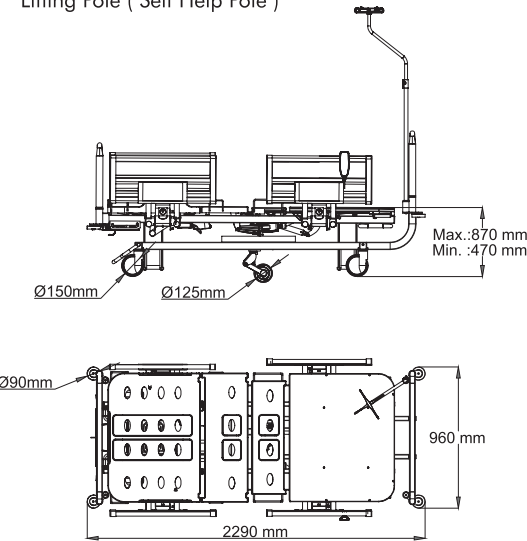

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Yatak Uzatma

Bed Extension




Fiesta

NITRO HB 5330

NITROCARE DÖRT MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

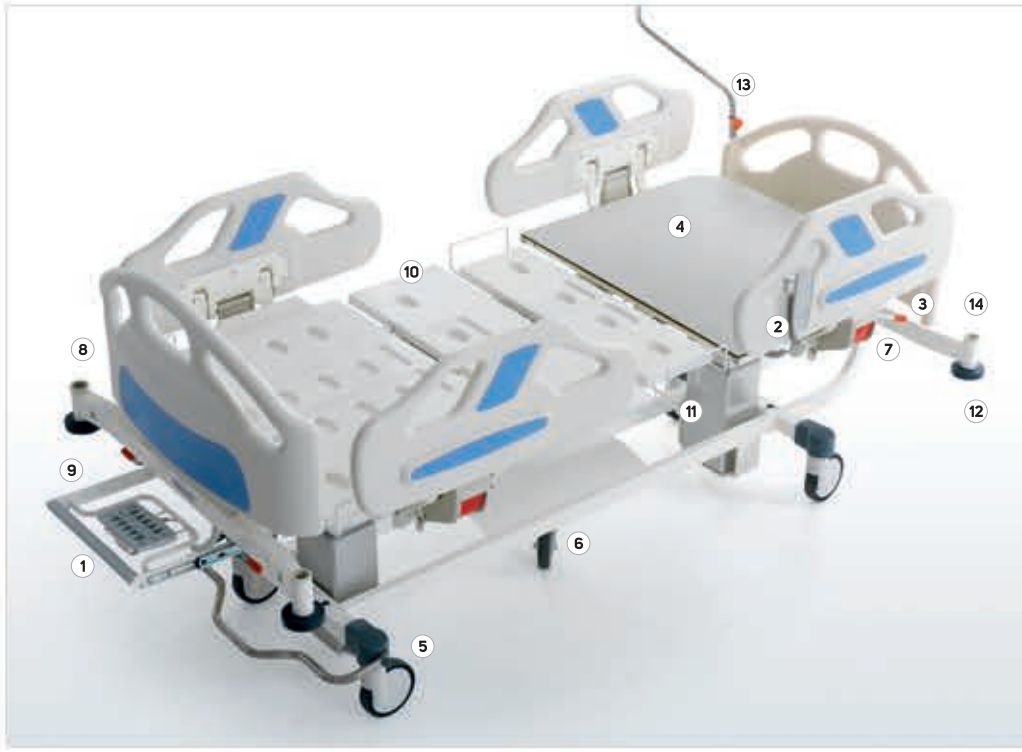

- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik CPR
- 4-) X-Ray Özelliği
- 5-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 6-) 5. Teker
- 7-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 8-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 9-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 10-) ABS yatma yüzeyi
- 11-) İdrar Torbası Askılığı
- 12-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 13-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 14-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 5-) 360° Movable Castors
- 6-) 5th Castor (125 Mm)
- 7-) Side Rail Open / Close
- 8-) Removable Head And Foot Board
- 9-) Nurse Control Panel Storage
- 10-) Abs Bed Surfaces
- 11-) Urine Bag Holders
- 12-) Protection Bumpers
- 13-) IV Pole
- 14-) Accessories Slot

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

Yatak Uzatma
Bed Extension



5. Teker
5th Castor

Teker Kilit Sistemi
Brake System

Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

Sırtta X Ray Özelliği
Backrest X Ray

ABS Yatma Yüzeyi
ABS Bed Surfaces

El Kumandası
Hand Control Unit

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors
Fowler And Vascular Position
Nurse Control Panel And its Storage
Nurse Control Panel Can Lock The Functions
Hand Control Unit
Battery
Mechanical And Electronic Cpr
X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
Bed Extension
Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Removable Head And Foot Board Made Of ABS
4 Pcs Side Rails Made Of ABS
Abs Bed Surfaces
360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 mm)
1 Antistatic Castor / 5th Castor (125 mm)
Height Adjustable Iv Pole


DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress
Lateral (Tilt) System
Weight Scale System
Double Castors Q 150
Full Hpl Bed Surface
Control Panel On Side Rails
Foot Control Panel
Under Bed Light
Lifting Pole (Self Help Pole)

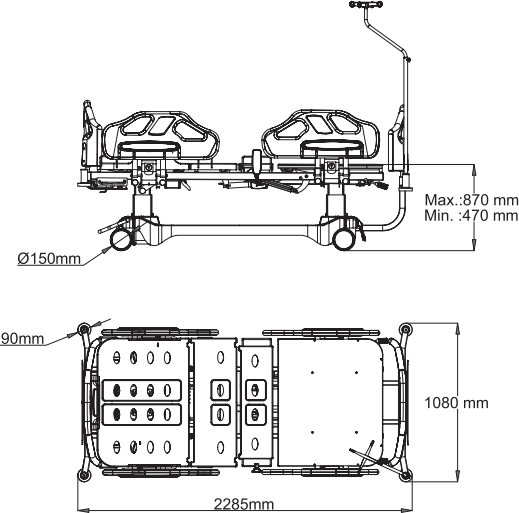

Lateral
Optima

NITRO HB 5110

NITROCARE BEŞ MOTORLU LATERAL, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FIVE MOTORS COLUMN MODEL LATERAL INTENSIVE CARE PATIENT BED

NITROCARE




Lateral Optima

NITRO HB 5110

NITROCARE BEŞ MOTORLU LATERAL, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FIVE MOTORS COLUMN MODEL LATERAL INTENSIVE CARE PATIENT BED

NITROCARE

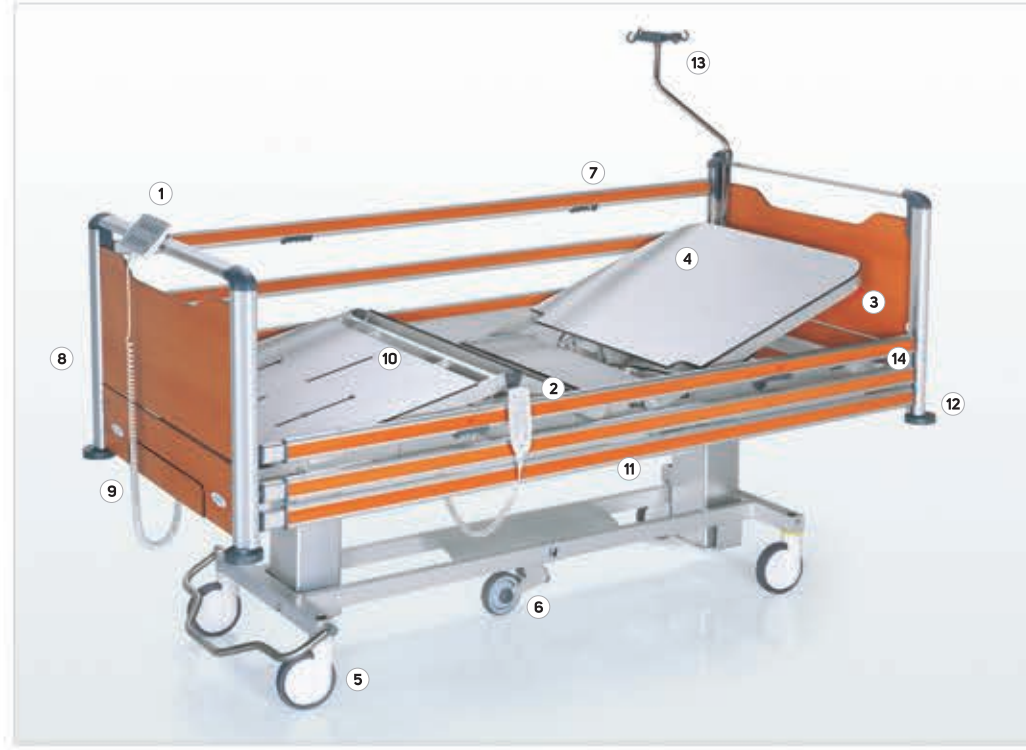

- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik CPR
- 4-) X-Ray Özelliği
- 5-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 6-) 5. Teker
- 7-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 8-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 9-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 10-) ABS yatma yüzeyi
- 11-) İdrar Torbası Askılığı
- 12-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 13-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 14-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 5-) 360° Movable Castors
- 6-) 5th Castor (125 mm)
- 7-) Side Rail Open / Close
- 8-) Removable Head And Foot Board
- 9-) Nurse Control Panel Storage
- 10-) Abs Bed Surfaces
- 11-) Urine Bag Holders
- 12-) Protection Bumpers
- 13-) IV Pole
- 14-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Elektronik Lateral Özelliği

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

5. Teker (125 mm)

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Lateral (Tilt) System

Nurse Control Panel And its Storage

Nurse Control Panel Can Lock The Functions

Hand Control Unit

Battery

Mechanical And Electronic Cpr

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Bed Extension

Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 mm)

1 Antistatic Castor

5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Weight Scale System


Double Castors Q 150

Full Hpl Bed Surface

Foot Control Panel

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

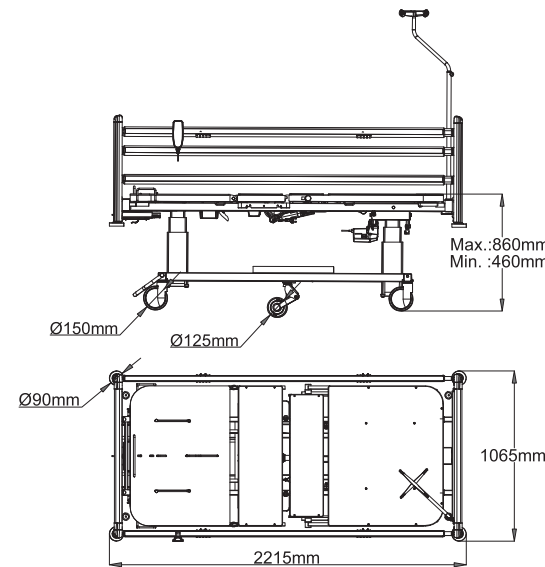

SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST




DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

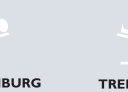

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



KARDİYAK
CARDIAC




LATERAL
LATERAL

Yatak Uzatma
Bed Extension

Kademeli Merkezi Fren Sistemi
Gradual Central Locking System

Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
Nurse Control Panel Storage

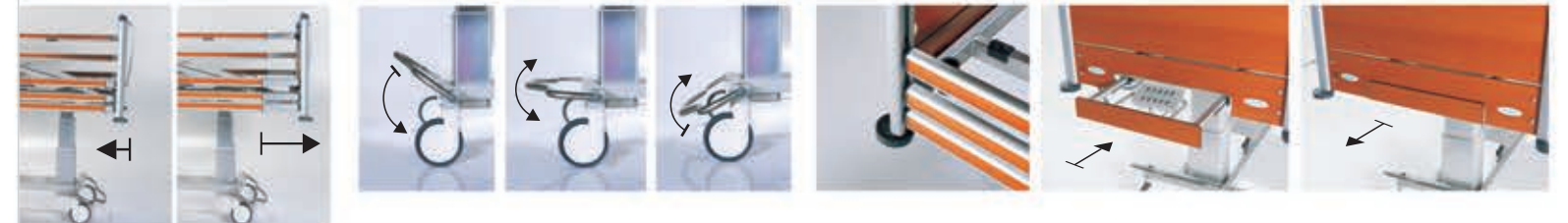

Optima


NITRO HB 5230

NITROCARE DÖRT MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

NITROCARE FOUR MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

NITROCARE



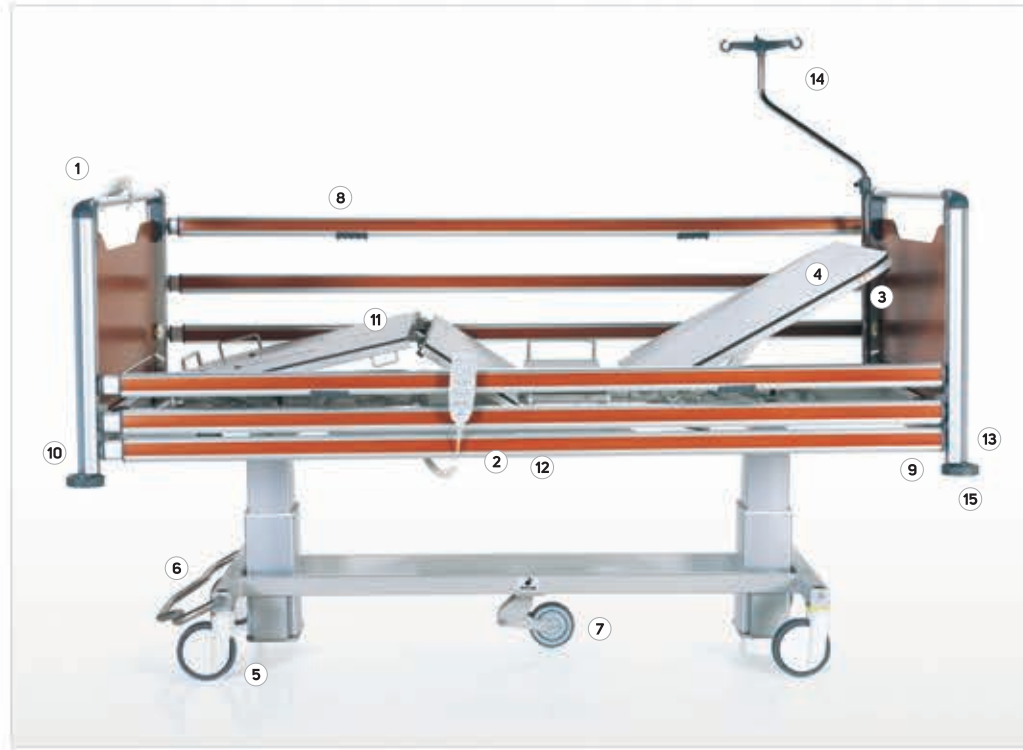

- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik CPR
- 4-) X-Ray Özelliği
- 5-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 6-) Merkezi Fren
- 7-) 5. Teker
- 8-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 9-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 10-) Çok Amaçlı Saklama Gözü
- 11-) ABS yatma yüzeyi
- 12-) İdrar Torbası Askılığı
- 13-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 14-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 15-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 5-) 360° Movable Castors
- 6-) Central Brake System
- 7-) 5th Castor (125 mm)
- 8-) Side Rail Open / Close
- 9-) Removable Head And Foot Board
- 10-) Nurse Control Panel Storage
- 11-) Abs Bed Surfaces
- 12-) Urine Bag Holders
- 13-) Protection Bumpers
- 14-) IV Pole
- 15-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

5. Teker (125 mm)

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Nurse Control Panel And its Storage

Nurse Control Panel Can Lock The Functions

Hand Control Unit

Battery

Mechanical And Electronic Cpr

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Bed Extension

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 mm)

1 Antistatic Castor

5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Lateral (Tilt) System

Weight Scale System


Double Castors Q 150

Full Hpl Bed Surface

Foot Control Panel

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

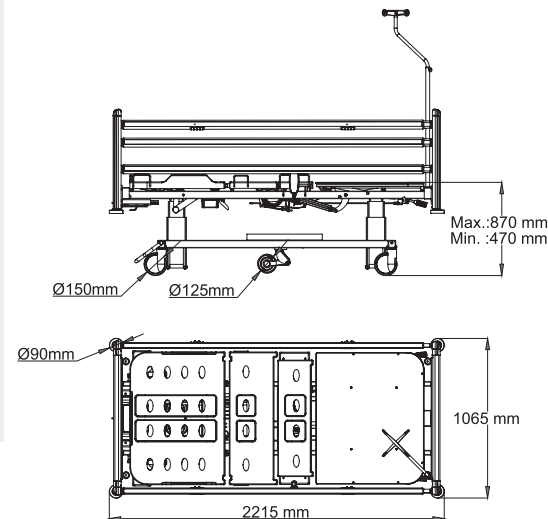

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING


YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

Yatak Uzatma
Bed Extension

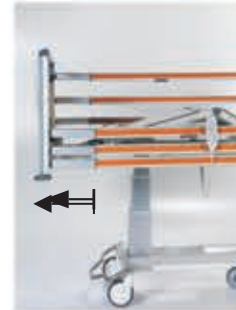

Sırtta X Ray Özelliği
Backrest X Ray



Mekanik CPR
Mechanical CPR



Teker Kilit Sistemi
Brake System



5. Teker
5th Castor



Hemşire Kontrol Paneli
Nurse Control Panel



Logica

NITRO HB 6260

NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)



NITROCARE 





- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik ve Elektronik CPR
- 4-) X-Ray Özelliği
- 5-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 6-) Kademeli Korkuluk Mekanizması
- 7-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 8-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 9-) ABS yatma yüzeyi
- 10-) İdrar Torbası Askılığı
- 11-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 12-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical CPR
- 4-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 5-) 360° Movable Castors
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Removable Head And Foot Board
- 8-) Nurse Control Panel Storage
- 9-) Abs Bed Surfaces
- 10-) Urine Bag Holders
- 11-) Protection Bumpers
- 12-) IV Pole



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 mm)

1 Antistatic Castor

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Double Castors Q 150

Nurse Control Panel (+ Electronic Cpr)


X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Full Hpl Bed Surface

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

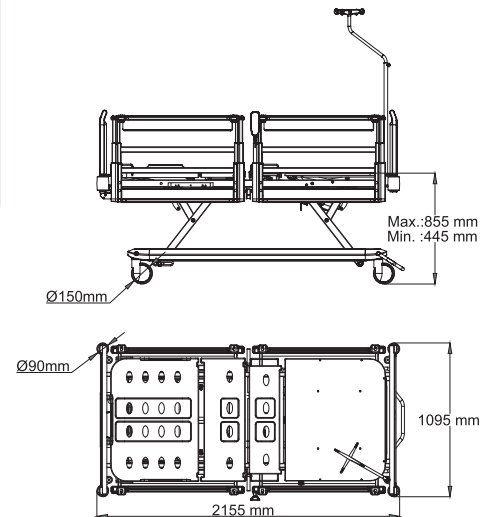

SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST




DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

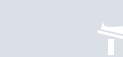

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



KARDİYAK
CARDIAC

Teker Kilit Sistemi
Brake System



Hemşire Kontrol Paneli
Gizleme Çekmecesi
Nurse Control Panel Storage



Kademeli Korkuluk Mekanizması
Gradual Side Rails



Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers



innova

NITRO HB 6240

NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)





- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik CPR
- 4-) X-Ray Özelliği
- 5-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 6-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 7-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 8-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 9-) ABS yatma yüzeyi
- 10-) İdrar Torbası Askılığı
- 11-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 12-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 5-) 360° Movable Castors
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Removable Head And Foot Board
- 8-) Nurse Control Panel Storage
- 9-) Abs Bed Surfaces
- 10-) Urine Bag Holders
- 11-) Protection Bumpers
- 12-) IV Pole



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Central Lock (150 mm)

Double Castors Q 150

5th Castor (125 mm) (Central Brake Must Be Added)

Nurse Control Panel (+ Electronic Cpr)


X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Full Hpl Bed Surface

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

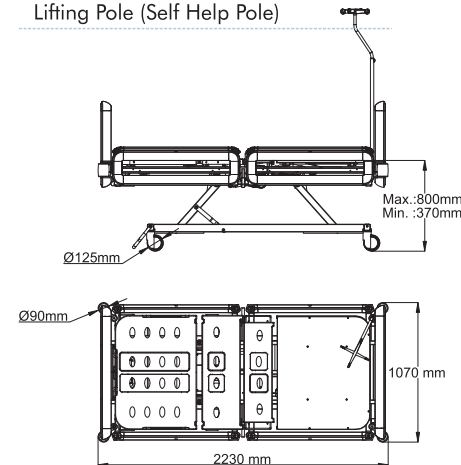

SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG




TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



KARDİYAK
CARDIAC

Kademeli Korkuluk Mekanizması
Gradual Side Rails

Teker Kilit Sistemi
Brake System

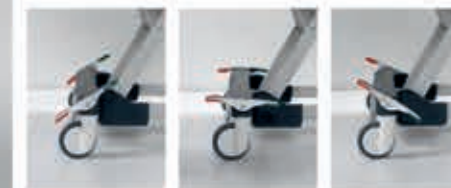

El Kumandası Yuvası
Hand Panel Slot



Sökülebilir Başucu Ayakucu Paneli
Removable Fixed Head Foot Board



Hemşire Kontrol Paneli
Gizleme Çekmecesi
Nurse Control Panel Storage




Sante

NITRO HB 8140

NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)

NITROCARE

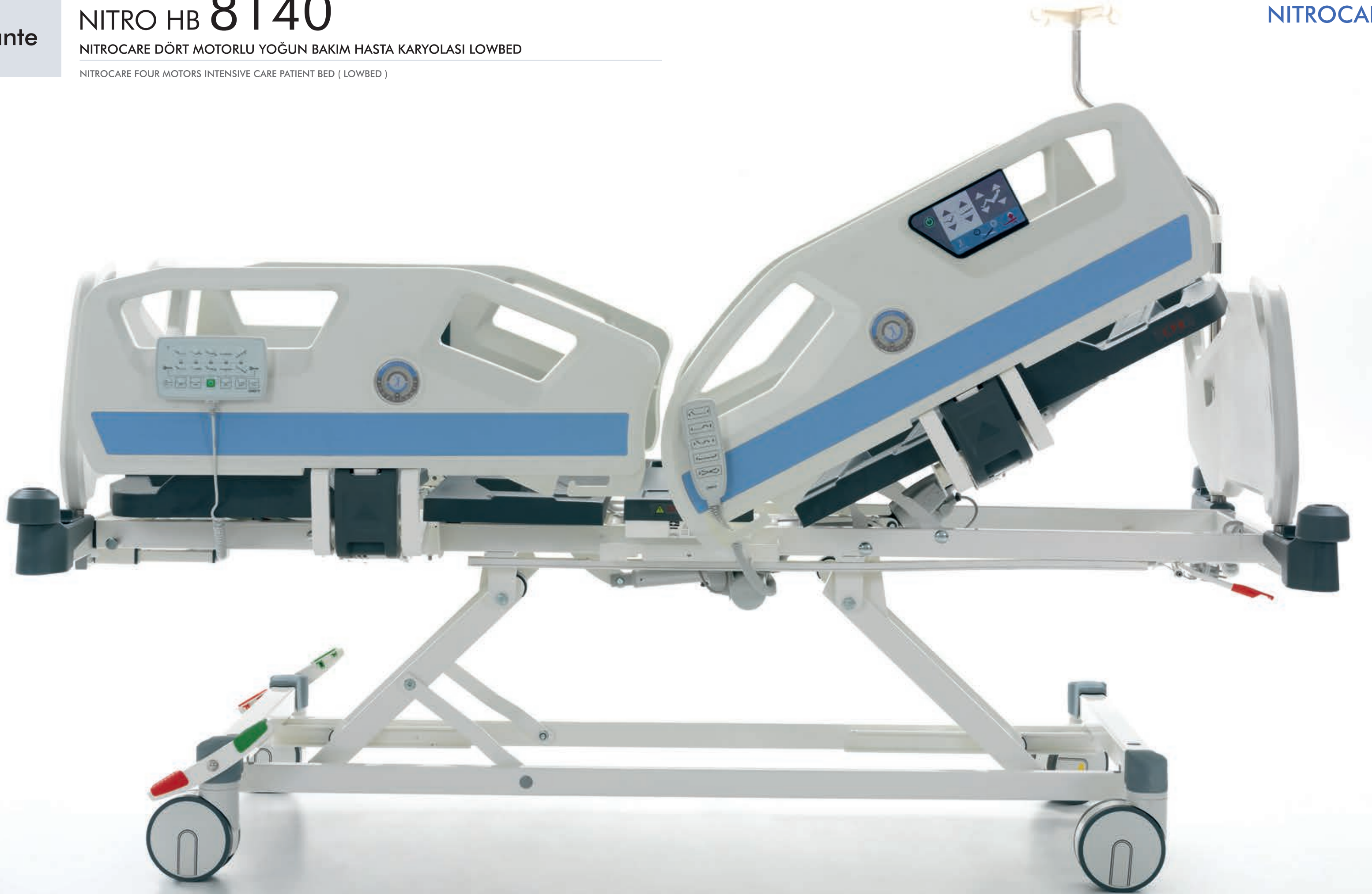

Sante

NITRO HB 8140

NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)

NITROCARE





- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) Korkuluk Kumandası
- 3-) El Kumandası
- 4-) Mekanik ve Elektronik CPR
- 5-) X-Ray Özelliği
- 6-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 7-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 8-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 9-) Aç Ölçer
- 10-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 11-) ABS yatma yüzeyi
- 12-) İdrar Torbası Askılığı
- 13-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 14-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 15-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Side Rail Control
- 3-) Hand Control Unit
- 4-) Mechanical Cpr
- 5-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 6-) 360° Movable Castors
- 7-) Side Rail Open / Close
- 8-) Removable Head And Foot Board
- 9-) Angle Gauge
- 10-) Nurse Control Panel Storage
- 11-) Abs Bed Surfaces
- 12-) Urine Bag Holders
- 13-) Protection Bumpers
- 14-) IV Pole
- 15-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Karyola Boyu Uzatma

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Central Lock (125 mm)

Central Lock (150 mm)

Double Castors Q 150

5th Castor (125 M) (Central Brake Must Be Added)

Nurse Control Panel (+ Electronic Cpr)

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Full Hpl Bed Surface

Bed Extension


Control Panel On Side Rails

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

Linen Tray

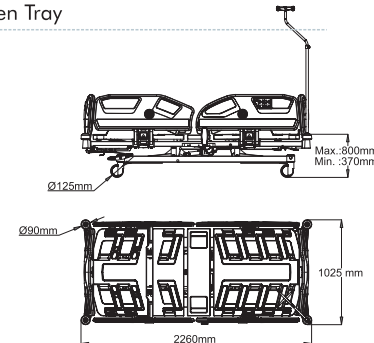

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

SIRT HAREKETİ

BACKREST

AYAK HAREKETİ

LEGREST

SIRT - AYAK

BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA

KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK

HEIGHT

TERS TRENDLENBURG

REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG

TRENDLENBURG

KARDİYAK

CARDIAC

Yataklar Uzatma

Bed Extension

Hemşire Kontrol Paneli

Nurse Control Panell

ABS Yatma Yüzeyi

ABS Bed Surfaces

Teker Kilit Sistemi

Brake System

Korkuluk Açma Kapatma

Side Rails Lock


Ayak Kontrol Ünitesi

Foot Control

5. Teker 5. Castors

Alt Aydınlatma

Under Bed Light

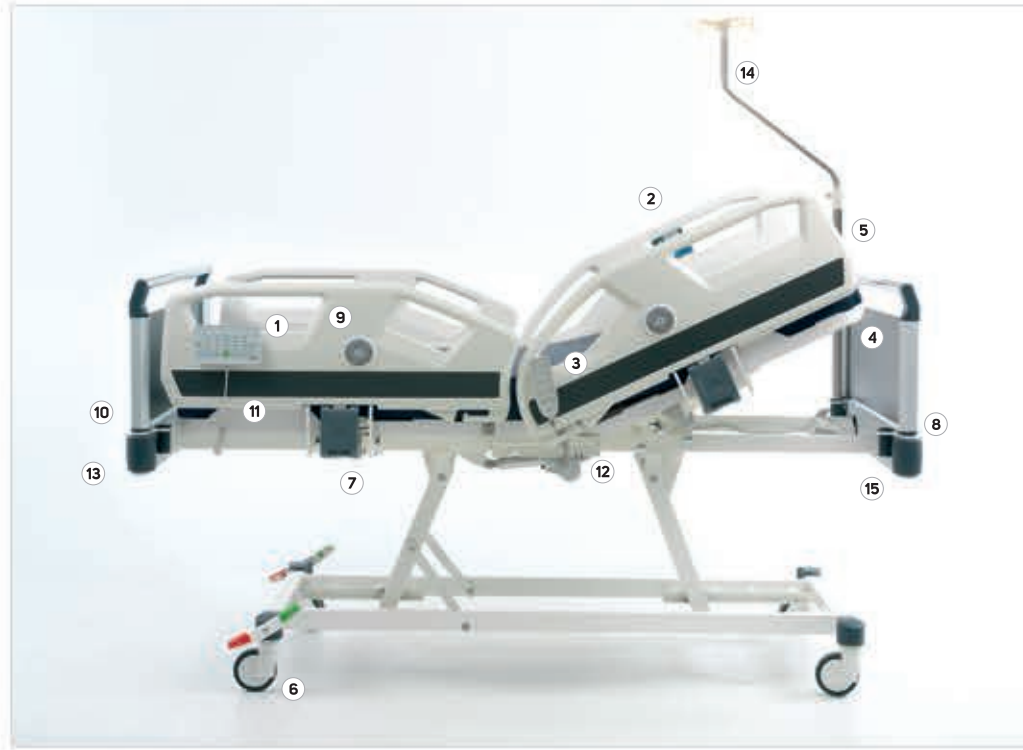

- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) Korkuluk Kumandası
- 3-) El Kumandası
- 4-) Mekanik ve Elektronik CPR
- 5-) X-Ray Özelliği
- 6-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 7-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 8-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 9-) Açı Ölçer
- 10-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 11-) ABS yatma yüzeyi
- 12-) İdrar Torbası Askılığı
- 13-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 14-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 15-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Side Rail Control
- 3-) Hand Control Unit
- 4-) Mechanical Cpr
- 5-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 6-) 360° Movable Castors
- 7-) Side Rail Open / Close
- 8-) Removable Head And Foot Board
- 9-) Angle Gauge
- 10-) Nurse Control Panel Storage
- 11-) Abs Bed Surfaces
- 12-) Urine Bag Holders
- 13-) Protection Bumpers
- 14-) IV Pole
- 15-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Karyola Boyu Uzatma

Hemşire Kontrol Paneli

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Central Lock (125 mm)

Central Lock (150 mm)

Double Castors Q 150

5th Castor (125 Mm) (Central Brake Must Be Added)

Nurse Control Panel (+ Electronic Cpr)

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)


Full Hpl Bed Surface

Control Panel On Side Rails

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

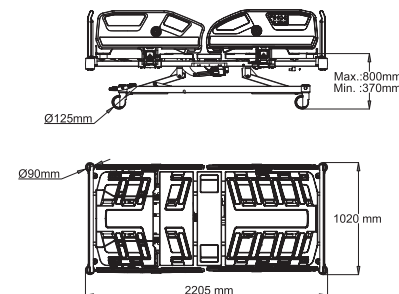

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING




YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

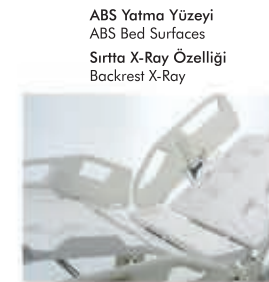

ABS Yatma Yüzeyi
ABS Bed Surfaces



El Kumandası
Hand Control Unit



Açı Ölçer
Angle Gauge



Hemşire Kontrol Paneli
Nurse Control Panel



Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



Ayak Kontrol Ünitesi
Foot Control



Alt Aydınlatma
Under Bed Light

Compact

NITRO HB 4230

NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)



- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik ve Elektronik CPR
- 4-) X-Ray Özelliği
- 5-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 6-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 7-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 8-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 9-) ABS yatma yüzeyi
- 10-) İdrar Torbası Askılığı
- 11-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 12-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 13-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 5-) 360° Movable Castors
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Removable Head And Foot Board
- 8-) Nurse Control Panel Storage
- 9-) Abs Bed Surfaces
- 10-) Urine Bag Holders
- 11-) Protection Bumpers
- 12-) IV Pole
- 13-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Central Lock (125 mm)

Central Lock (150 mm)

Double Castors Q 150

5th Castor (125 mm) (Central Brake Must Be Added)

Nurse Control Panel (+ Electronic Cpr)

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Full Hpl Bed Surface


Bed Extension

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

Linen Tray

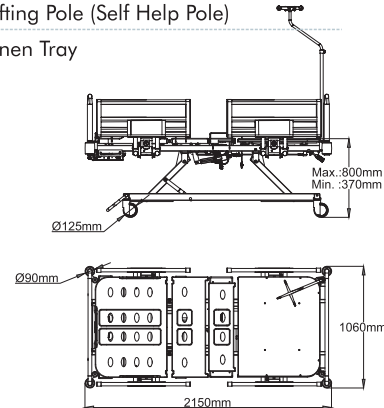

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT




TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



KARDİYAK
CARDIAC

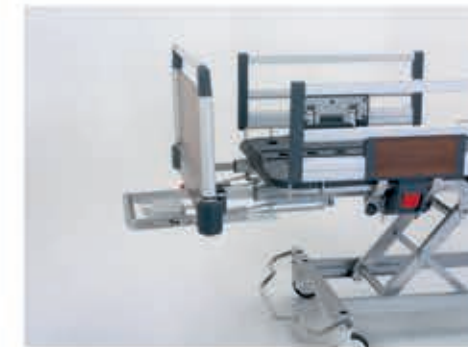

Yatak Uzatma
Bed Extension



Hemşire Kontrol Paneli
Nurse Control Panel



Hemşire Kontrol Paneli
Gizleme Çekmecesi
Nurse Control Panel Storage



5. Teker
5. Castor



Fiesta

NITRO HB 4220

NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)

NITROCARE®



- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik CPR
- 4-) X-Ray Özelliği
- 5-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 6-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 7-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 8-) Hemşire Kontrol Paneli Gizleme Çekmecesi
- 9-) ABS yatma yüzeyi
- 10-) İdrar Torbası Askılığı
- 11-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 12-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 13-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 5-) 360° Movable Castors
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Removable Head And Foot Board
- 8-) Nurse Control Panel Storage
- 9-) Abs Bed Surfaces
- 10-) Urine Bag Holders
- 11-) Protection Bumpers
- 12-) IV Pole
- 13-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Karyola Uzun Kısalmaya ve Genişleyebilir özelliğine sahiptir

Hemşire Kontrol Paneli ve Saklama Alanı Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilir özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Central Lock (125 mm)

Central Lock (150 mm)

Double Castors Q 150

5th Castor (125 mm) (Central Brake Must Be Added)

Nurse Control Panel (+ Electronic Cpr)

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Full Hpl Bed Surface

Control Panel On Side Rails


Bed Extension

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

Linen Tray

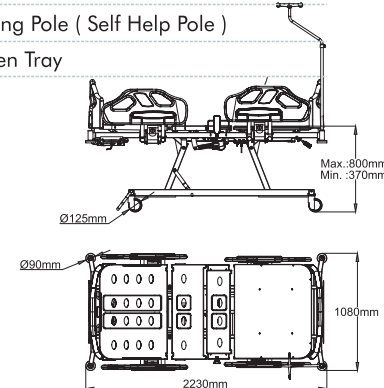

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

Mekanik CPR
Mechanic CPR



Hemşire Kontrol Paneli
Gizleme Çekmecesi
Nurse Control Panel Storage



Yatak Uzatma
Bed Extension



Sırtta X-Ray Özelliği
Backrest X-Ray



5. Teker
5. Castor



Optima

NITRO HB 4310

NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) X-Ray Özelliği
- 4-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 7-) ABS yatma yüzeyi
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
- 5-) 360° Movable Castors
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Removable Head And Foot Board
- 8-) Nurse Control Panel Storage
- 9-) Abs Bed Surfaces
- 10-) Urine Bag Holders
- 11-) Protection Bumpers
- 12-) IV Pole
- 13-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Karyola uzayabilme özelliğine sahiptir

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Sırt kısmında X-Ray ve Kaset Yuvası

Yatak Boyu Uzatma

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Central Lock (125 mm)

Central Lock (150 mm)

Double Castors Q 150

5th Castor (125 mm) (Central Brake Must Be Added)

Nurse Control Panel (+ Electronic Cpr)

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Full Hpl Bed Surface


Bed Extension

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

Linen Tray

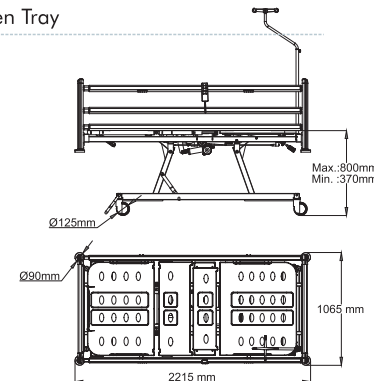

NITROCARE

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING




YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

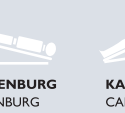

KARDİYAK
CARDIAC

Çıkarılabilir
Başucu/Ayakucu Paneli
Removable
Head/Foot Boards



Açılır Kapanır
Korkuluk Mekanizması
Folding Side Rails



El Kumandası
Hand Control Unit



Teker Kilit Sistemi
Brake System



ABS Yatma Yüzeyi
ABS Bed Surfaces



Ventura

NITRO HB 6460

NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Metal Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

125 mm Plastic Castors with Linear Brake

Central Lock (125 mm)

5th Castor (125 mm) (Central Brake Must Be Added)

Nurse Control Panel (+ Electronic Cpr)

Abs Bed Surfaces

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Full Hpl Bed Surface

Control Panel On Side Rails

Bed Extension


Mechanical CPR

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

Linen Tray

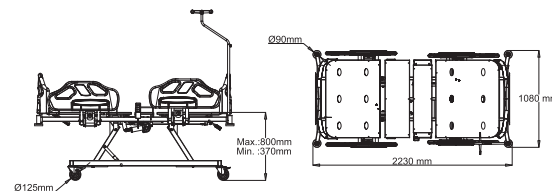

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

NITROCARE

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



KARDİYAK
CARDIAC



Korkuluk Açma Kapama
Folding Side Rails



El Kumandası
Hand Control Unit



Metal Yatma Yüzeyi
Metal Bed Surface



Ventura

NITRO HB 6630

NITROCARE DÖRT MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED (LOWBED)



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Koruyucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

2 Pcs Metal Side Rails

Metal Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

125 mm Plastic Castors with Linear Brake

Central Lock (125 mm)

5th Castor (125 mm) (Central Brake Must Be Added)

Nurse Control Panel (+ Electronic Cpr)

Abs Bed Surfaces

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)


Full Hpl Bed Surface / Bed Extension

Mechanical CPR / Battery

2 Pcs Aliminium Side Rail

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole) / Linen Tray

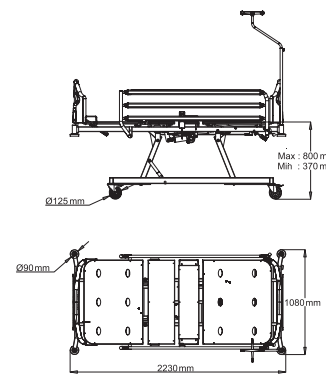

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

NITROCARE

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

Metal Yatma Yüzeyi
Metal Bed Surfaces

Sökülebilir Başucu - Ayakucu Paneli
Removable Fixed Head Foot Board

Çarpma Koruyucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

Korkuluk Açma Kapama
Rails Control (Open-Close)

El Kumandası
Hand Control Unit



- 1-) Korkuluk Kumandası
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik CPR
- 4-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 7-) Aç Ölçer
- 8-) ABS yatma yüzeyi
- 9-) İdrar Torbası Askılığı
- 10-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 11-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 12-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Side Rail Control
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) 360° Movable Castors
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Removable Head And Foot Board
- 7-) Angle Gauge
- 8-) Abs Bed Surfaces
- 9-) Urine Bag Holders
- 10-) Protection Bumpers
- 11-) IV Pole
- 12-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisörlü Mekanik Mekanizma ile Trendelenburg Hareketi

Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Central Lock (125 mm)

Mechanical Trendelenburg Movement

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)



Full Hpl Bed Surface

Bed Extension

Control Panel On Side Rails

Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

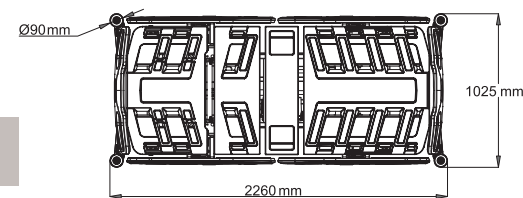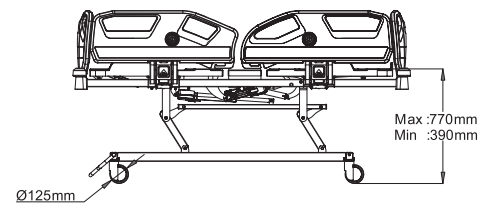

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ



Makas Sistemi
Bed Scissors System



ABS Yatma Yüzeyi
ABS Bed Surfaces



El Kumandası
Hand Control



Aksesuar Yuvası
Accessories Slots



Moonlight

NITRO HB 3340

NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED (LOWBED)

NITROCARE




Moonlight

NITRO HB 3340

NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED (LOWBED)

NITROCARE

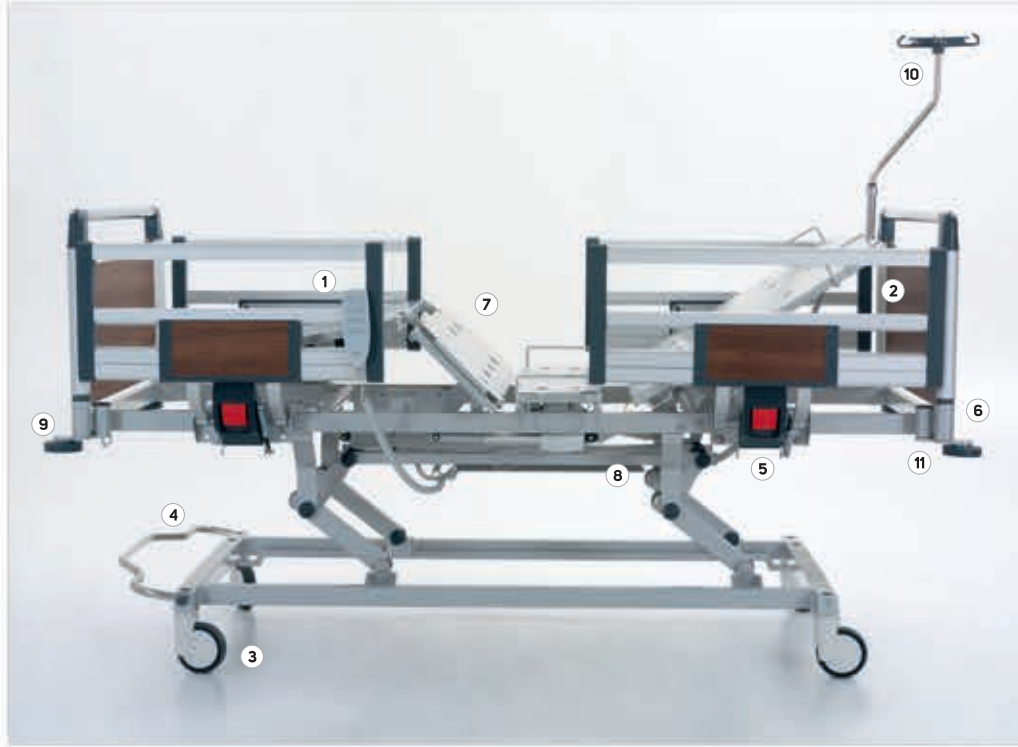

- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Merkezi Fren Sistemi
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 7-) ABS yatma yüzeyi
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Koruyucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Central Brake System
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Removable Head And Foot Board
- 7-) Metal Bed Surfaces
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) IV Pole
- 11-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sırt Ayak ve Yükseklik Hareketi Motor Yardımı İle Yapabilmektedir
Amortisörlü Mekanik Mekanizma İle Trendelenburg Hareketi
Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir
El Kumandası
Mekanik CPR
Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama
ABS Yatma Yüzeyi
360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height Adjustment With Electronic Motors
Fowler And Vascular Position
Hand Control Unit
Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL
4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium And HPL
Metal Bed Surfaces
360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)
Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress
125 mm Plastic Castors with Linear Brake
Central Lock (125 mm)
Mechanical Trendelenburg Movement
Abs Bed Surfaces
X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
Full Hpl Bed Surface
Bed Extension
Mechanical CPR
Battery
Lifting Pole (Self Help Pole)

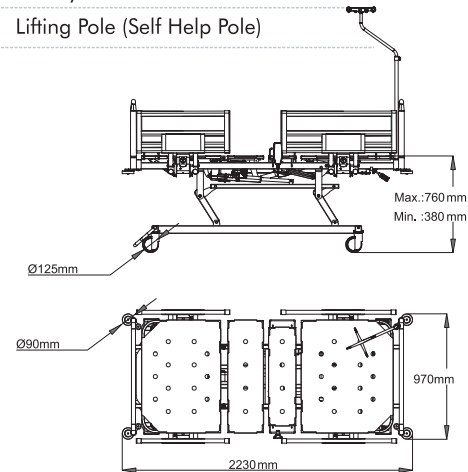

SIRT HAREKETİ

AYAK HAREKETİ

SIRT-AYAK

DİZ KIRMA

YÜKSEKLİK

TRENDELBURG



Korkuluk Açma Kapama
Rails Control (Open-Close)

El Kumandası
Hand Control Unit

Çarpma Koruyucu
Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

Başucu ve Ayakucu Paneli
Head Board and Foot Board



Optima

NITRO HB 3230

NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED (LOWBED)



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Merkezi Fren Sistemi
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 7-) ABS yatma yüzeyi
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Central Brake System
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Removable Head And Foot Board
- 7-) Metal Bed Surfaces
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) IV Pole
- 11-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sırt Ayak ve Yükseklik Hareketi Motor Yardımı İle yapabilmektedir
Amortisörlü Mekanik Mekanizma İle Trendelenburg Hareketi
Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir
El Kumandası
Mekanik CPR
Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama
ABS Yatma Yüzeyi
360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height Adjustment With Electronic Motors
Fowler And Vascular Position
Hand Control Unit
Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL
Side Rails Made Of Aluminium And HPL
Abs Bed Surfaces
360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)
Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress
Central Lock (125 mm)
Mechanical Trendelenburg Movement
X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
Full Hpl Bed Surface
Bed Extension
Mechanical CPR
Battery
Lifting Pole (Self Help Pole)

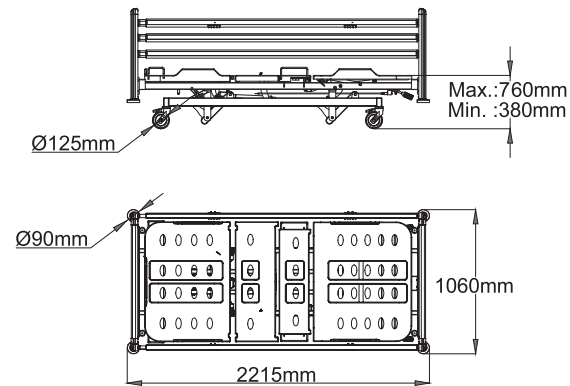

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG

Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

Sökülebilir Başucu ve Ayakucu Paneli
Removable Foot and Head Board

Aksesuar Yuvaları
Accessory Slots

ABS Yatma Yüzeyi
ABS Bed Surfaces

Ventura

NITRO HB 3350

NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED (LOWBED)



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Merkezi Fren Sistemi
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 7-) ABS yatma yüzeyi
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Central Brake System
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Removable Head And Foot Board
- 7-) Metal Bed Surfaces
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) IV Pole
- 11-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak ve Yükseklik Hareketlerini Motor Yardımı İle yapabilmektedir

Amortisörlü Mekanik Mekanizma İle Trendelenburg Hareketi

Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir

Portatif Hasta Kontrol Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Metal Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

125 mm Plastic Castors with Linear Brake

Central Lock (125 mm)

Mechanical Trendelenburg Movement

Abs Bed Surfaces

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)


Full Hpl Bed Surface

Control Panel On Side Rails

Bed Extension

Mechanical CPR / Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

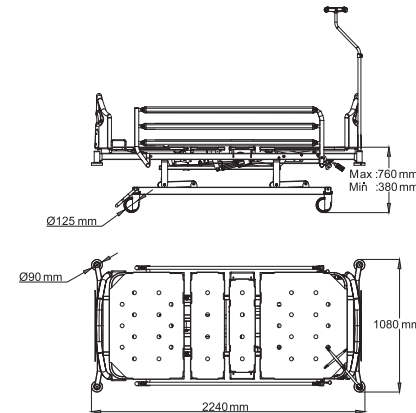

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

NITROCARE®



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG



Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

El Kumandası
Hand Control

Korkuluk Açma Kapama
Rails Control (Open-Close)

ABS Malzemeden İmal
Karyola Yüzeyi
Bed Surface Can Be Made From ABS

Sac Malzemeden İmal
Karyola Yüzeyi
Bed Surface Made From Metal

Ventura

NITRO HB 3150

NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED (LOWBED)



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360° Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Koruyucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak ve Yükseklik Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisörlü Mekanik Mekanizma İle Trendelenburg Hareketi

Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

2 Pcs Metal Side Rails

Metal Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

125 mm Plastic Castors with Linear Brake

Central Lock (125 mm)

Mechanical Trendelenburg Movement

Abs Bed Surfaces

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)


Full Hpl Bed Surface

Bed Extension

Mechanical CPR

Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

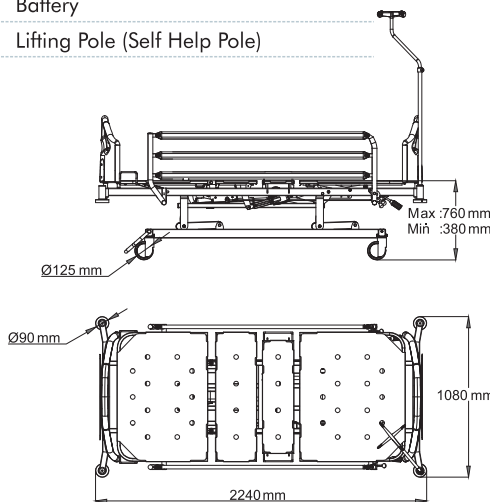

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG

Korkuluk Açma Kapama
Rails Control (Open-Close)

Metal Yatma Yüzeyi
Metal Bed Surfaces

Teker Kilit Sistemi
Brake System

Karyola Makas Sistemi
Bed Scissors System

Sökülebilir Başucu Ayakucu Paneli
Removable Head and Foot Board

Çarpma Koruyucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Açı Ölçer
- 7-) ABS yatma yüzeyi
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Angle Gauge
- 7-) Abs Bed Surfaces
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) IV Pole
- 11-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak Hareketi Motor Yardımı İle yapabilmektedir

Amortisörlü Mekanik Mekanizma ile Trendelenburg yapabilmektedir.

Korkulukta Merkezi kontrol Kumandası

El Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Mechanical Trendelenburg Movement


X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Full Hpl Bed Surface

Bed Extension

Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

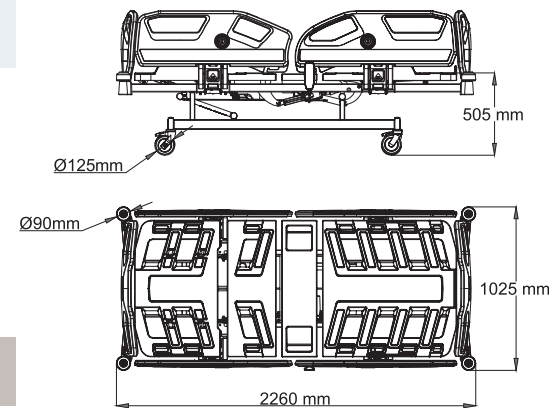

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG



El Kumandası
Hand Control Unit

Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

Açı Ölçer
Angle Gauge

Compact

NITRO HB 2110

NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI

NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED

NITROCARE®



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360° Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) ABS yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Abs Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak Hareketi Motor Yardımı İle yapabilmektedir

Amortisörlü Mekanik Mekanizma İle Trendelenburg Hareketi

Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir

El kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Abs Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Mechanical Trendelenburg Movement


X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)

Full Hpl Bed Surface

Bed Extension

Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

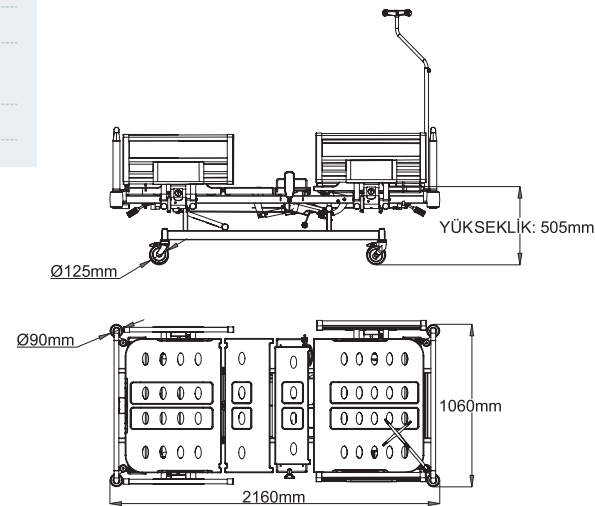

Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers



Aksesuar Yuvaları
Accessory Slots



Fiesta

NITRO HB 2220

NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI

NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360° Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) ABS yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Abs Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sırt Ayak Hareketi Motor Yardımı İle yapabilmektedir
Amortisörlü Mekanik Mekanizma İle Trendelenburg Hareketi
Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir
El Kumandası
Mekanik CPR
Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama
ABS Yatma Yüzeyi
360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest Adjustment With Electronic Motors
Fowler And Vascular Position
Hand Control Unit
Mechanical Cpr
Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Removable Head And Foot Board Made Of ABS
4 Pcs Side Rails Made Of ABS
Abs Bed Surfaces
360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)
Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress
Mechanical Trendelenburg Movement
X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
Full Hpl Bed Surface
Bed Extension
Battery
Lifting Pole (Self Help Pole)

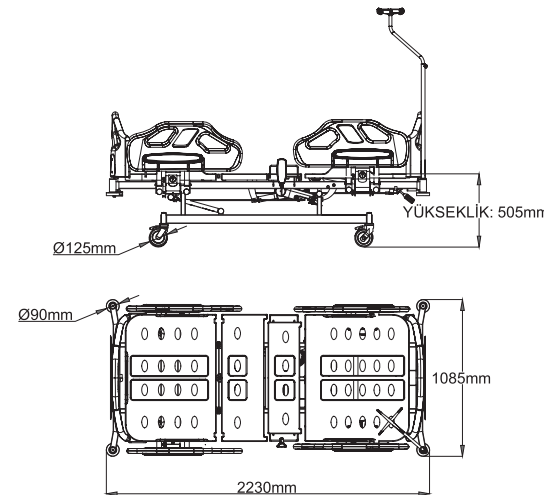

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

NITROCARE

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG

125 mm'lik Doğrusal
Kilitli Tekerler
Castors (125 mm)
with linear lock



ABS Yan Korkuluklar
ABS Side Rails



Sökülüp Takılabilen
Başucu ve Ayakucu Panelleri
Removable Head/Foot Boards



Optima

NITRO HB 2230

NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI

NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360° Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) ABS yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Abs Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sırt Ayak Hareketi Motor Yardımı İle yapabilmektedir
Amortisörlü Mekanik Mekanizma İle Trendelenburg Hareketi
Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir
El Kumandası
Mekanik CPR
Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama
ABS Yatma Yüzeyi
360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest Adjustment With Electronic Motors
Fowler And Vascular Position
Hand Control Unit
Mechanical Cpr
Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL
Side Rails Made Of Aluminium And HPL
Abs Bed Surfaces
360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)
Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress
Mechanical Trendelenburg Movement
X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)
Full Hpl Bed Surface
Bed Extension
Battery
Lifting Pole (Self Help Pole)

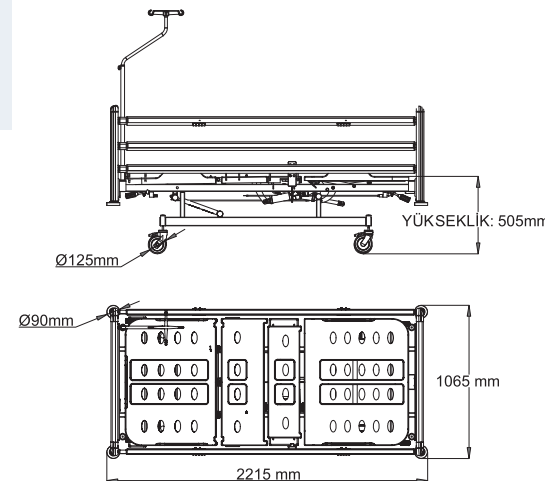

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

TRENDELBURG
TRENDELBURG

Mekanik CPR
Mechanical CPR



Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



ABS Malzemeden İmal Karyola Yüzeyi
Bed Surface Made From ABS Material




Ventura

NITRO HB 6420

NITROCARE İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI

NITROCARE TWO MOTORS PATIENT BED

NITROCARE

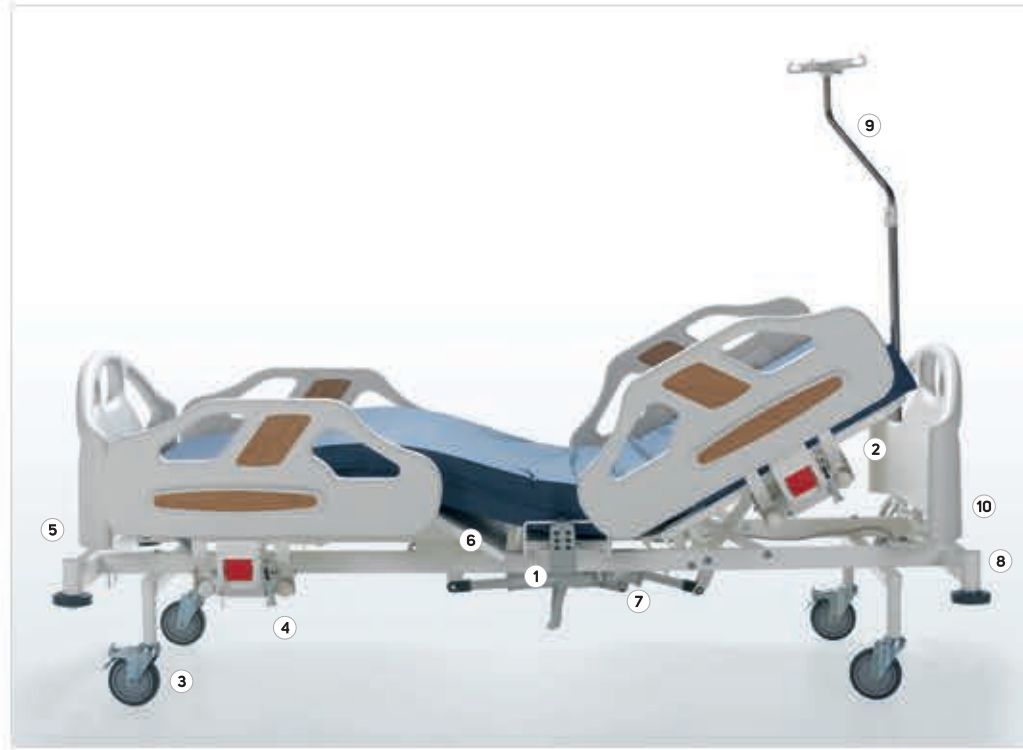

- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak Hareketi Motor Yardımı İle yapabilmektedir

Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Açılıp Kapanan Yan Korkuluklar

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Metals Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress


125 mm Plastic Castors with Linear Brake

Abs Bed Surfaces

Mechanical CPR

Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

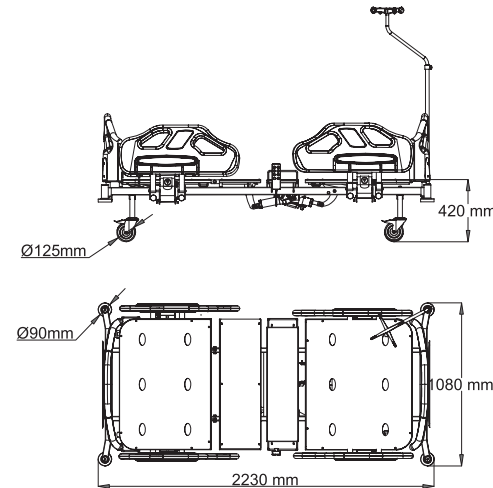

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



360 Derece Dönebilen Tekerler
360° Movable Castors



Korkuluk Açma Kapama
Rails Control (Open-Close)



El Kumandası
Hand Control Unit



Başucu ve Ayakucu Paneli
Head Board and Foot Board





- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak Hareketi Motor Yardımı ile yapabilmektedir

Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Katlanabilir Metal yan Korkuluklar

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

2 Pcs Metal Side Rails

Metals Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress


125 mm Plastic Castors with Linear Brake

Abs Bed Surfaces

Mechanical CPR

Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

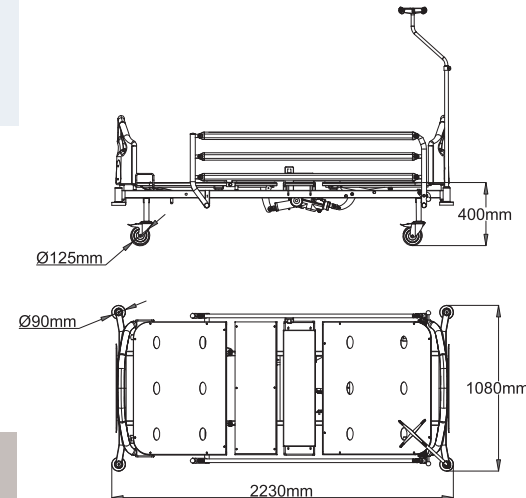


DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

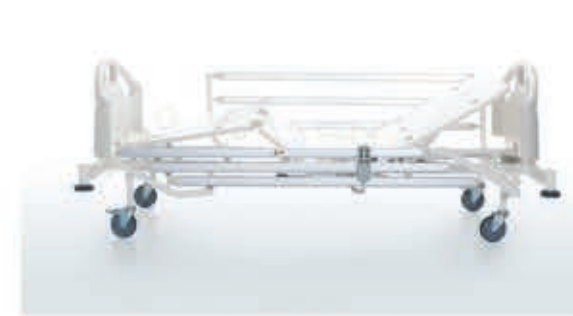

360 Derece Dönebilen Tekerler
360° Movable Castors



Korkuluk Açma Kapama
Rails Control (Open-Close)



El Kumandası
Hand Control Unit



Metal Yatma Yüzeyi
Metal Bed Surfaces



NITRO HB 1310

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ HASTA KARYOLASI

NITROCARE HYDRAULIC PATIENT BED



- 1-) Hidrolik Ayak kontrol Pedalı
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 4-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 5-) Metal yatma yüzeyi
- 6-) İdrar Torbası Askılığı
- 7-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 8-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 9-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Height Adjustment With Hydraulics Pump
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Side Rail Open / Close
- 4-) Removable Head And Foot Board
- 5-) Metal Bed Surfaces
- 6-) Urine Bag Holders
- 7-) Protection Bumpers
- 8-) Height Adjustable Iv Pole
- 9-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER


Hidrolik Lift ile Yükseklik Ayarı
Sırt Ayak,ve Trendelenburg Hareketlerini Amortisör Yardımı ile Yapabilmektedir
Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir
Açılıp kapanabilir metal korkuluk
ABS malzemeden imal başucu ve ayakucu paneli
Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama
Metal Yatma Yüzeyi
360 Derece dönebilen tekerler
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Adjustment With Hydraulics Pump
Headrest And Legrest Adjustment With Gas Spring
Trendelenburg Movement With The Help Of Mechanical Damper Mechanism
Fowler And Vascular Position
Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Removable Head And Foot Board Made Of ABS
2 Pcs Metal Side Rails
Metals Bed Surfaces
360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)
Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress
125 mm Plastic Castors with Linear Brake
Central Lock (125 mm)
2 Pcs Aliminium Side Rails
Abs Bed Surfaces
Full Hpl Bed Surface
Lifting Pole (Self Help Pole)

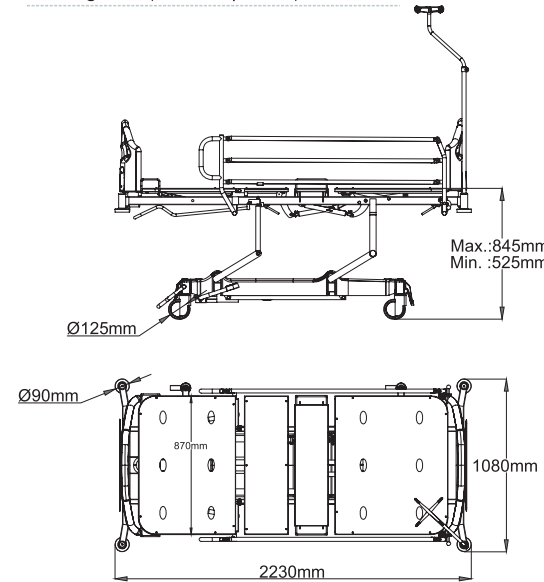

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TRENDELEBURG
TRENDELEBURG

Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers



Trendelenburg
Trendelenburg



Teker Kilit Sistemi
Brake System



Korkuluk Açma Kapama
Rails Control (Open-Close)



Hidrolik Ayak kontrol Pedalı
Height Adjustment With Hydraulics Pump



Compact

NITRO HB 1430

NITROCARE MANUEL KONTROLLÜ HASTA KARYOLASI

NITROCARE MANUEL PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Başucu , Ayakucu ve Yükseklik Hareketlerini Ayakucunda bulunan ayar kolları ile yapabilmektedir.

Manuel olarak trendelenburg ve Ters Trendelenburg hareketlerini yapar

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Katlanabilir Yan Kollar

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

Gizlenebilir Ayar Kolları

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest And Height Adjustment (Crank) With Adjusting Arms On The Foot Side

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Movement With The Help Of Mechanical Damper Mechanism

Fowler And Vascular Position

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

2 Pcs Metal Side Rails

Metals Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS



Foam Or Visco Mattress

125 mm Plastic Castors with Linear Brake

2 Pcs Aliminium Side Rails

Full Hpl Bed Surface

Lifting Pole (Self Help Pole)

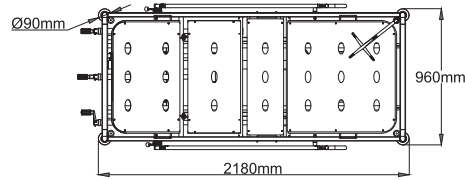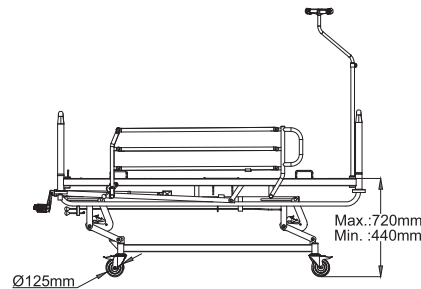

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

NITRO HB 1420

NITROCARE MANUEL KONTROLLÜ HASTA KARYOLASI

NITROCARE MANUEL PATIENT BED

Fiesta

TEKNİK ÖZELLİKLER

Başucu , Ayakucu ve Yükseklik Hareketlerini Ayakucunda bulunan ayar kolları ile yapabilmektedir.

Manuel olarak trendelenburg ve Ters Trendelenburg hareketlerini yapar

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Katlanabilir Yan Kollar

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

Gizlenebilir Ayar Kolları

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest And Height Adjustment (Crank) With Adjusting Arms On The Foot Side

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Movement With The Help Of Mechanical Damper Mechanism

Fowler And Vascular Position

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

2 Pcs Metal Side Rails

Metals Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress




125 mm Plastic Castors with Linear Brake

2 Pcs Aliminium Side Rails

4 Pcs ABS Side Rail

Full Hpl Bed Surface

Lifting Pole (Self Help Pole)

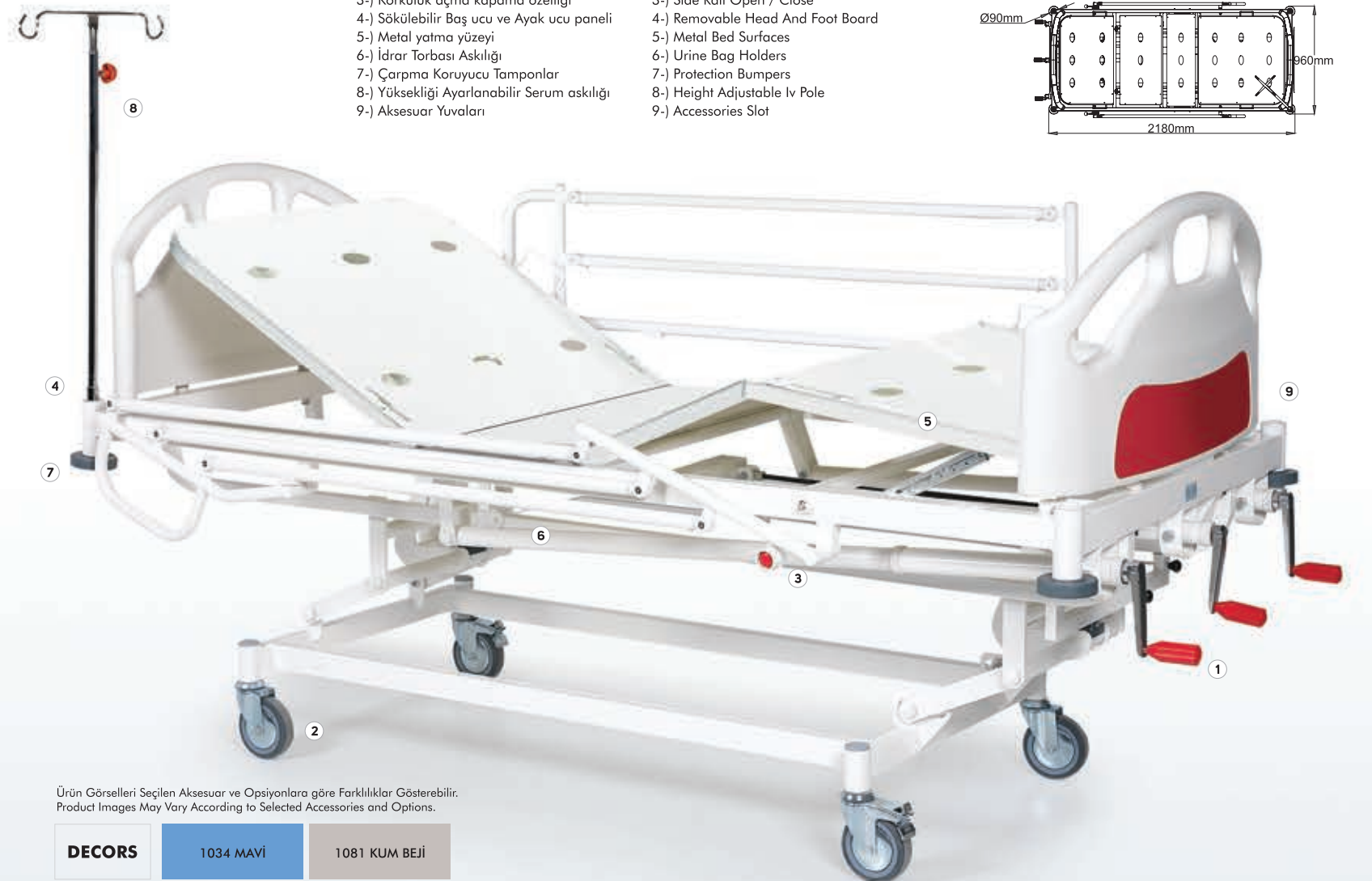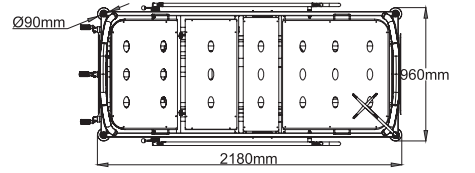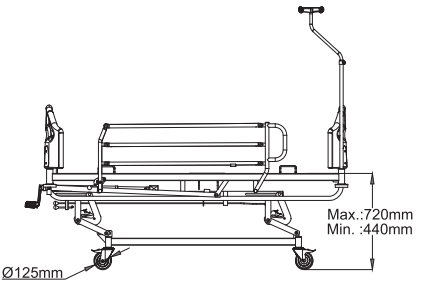

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ



NITROCARE

Pediatric Hasta Karyolaları

PEDIATRIC PATIENT BED



Compact

NITRO HB 4430P PEDIATRIC

NITROCARE DÖRT MOTORLU PEDIATRİK HASTA KARYOLASI

NITROCARE FOUR MOTORS PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED

NITROCARE



- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik ve Elektronik CPR
- 4-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 5-) Merkezi Fren
- 6-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 7-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 8-) Metal yatma yüzeyi
- 9-) İdrar Torbası Askılığı
- 10-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 11-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 12-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) 360° Movable Castors
- 5-) Central Brake System
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Removable Head And Foot Board
- 8-) Metal Bed Surfaces
- 9-) Urine Bag Holders
- 10-) Protection Bumpers
- 11-) IV Pole
- 12-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Hemşire Kontrol Paneli Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Alüminyum ve Kompak malzemeden İmal Başlıklar ve Korkuluklar

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Central Lock (125 mm)

Nurse Control Panel


Full Hpl Bed Surface

Bed Extension

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

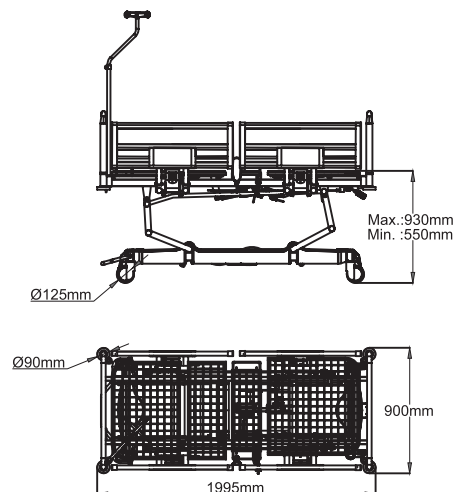

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

Mekanik CPR
Mechanic CPR



Karyola Makas Sistemi
Bed Scissors System



Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



360 Derece Dönebilen Tekerler
360° Movable Castors



Fiesta

NITRO HB 4420P PEDIATRIC

NITROCARE DÖRT MOTORLU PEDIATRİK HASTA KARYOLASI

NITROCARE FOUR MOTORS PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED



- 1-) Hemşire Kontrol Paneli
- 2-) El Kumandası
- 3-) Mekanik ve Elektronik CPR
- 4-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 5-) Merkezi Fren
- 6-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 7-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 8-) ABS yatma yüzeyi
- 9-) İdrar Torbası Askılığı
- 10-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 11-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 12-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Nurse Control Panel
- 2-) Hand Control Unit
- 3-) Mechanical Cpr
- 4-) 360° Movable Castors
- 5-) Central Brake System
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Removable Head And Foot Board
- 8-) Metal Bed Surfaces
- 9-) Urine Bag Holders
- 10-) Protection Bumpers
- 11-) IV Pole
- 12-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Hemşire Kontrol Paneli Mevcuttur

Hemşire Kontrol Paneli ile tüm fonksiyonları kilitleyebilme özelliği

El Kumandası

Batarya

Mekanik ve Elektronik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Başlıklar ve Korkuluklar

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Mechanical Cpr

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Nurse Control Panel

Full Hpl Bed Surface


Bed Extension

Control Panel On Side Rails

Battery

Under Bed Light

Lifting Pole (Self Help Pole)

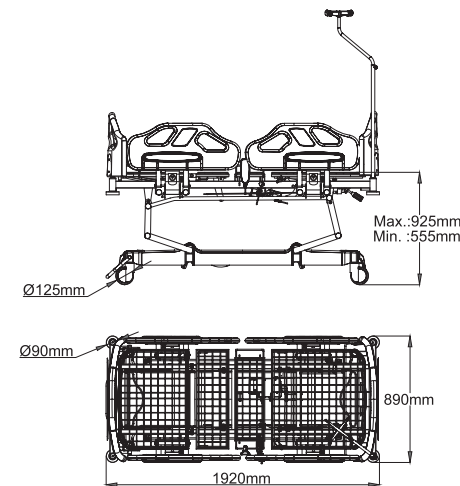

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

Mekanik CPR
Mechanic CPR



El Kumandası
Hand Control Unit



360 Derece
Dönebilen Tekerler
360° Movable Castors



Compact

NITRO HB 3430P PEDIATRIC

NITROCARE ÜÇ MOTORLU PEDIATRİK HASTA KARYOLASI

NITROCARE THREE MOTORS PEDIATRIC PATIENT BED



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Koruması Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisörlü Mekanik Mekanizma ile Trendelenburg Hareketi

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Alüminyum ve Kompak malzemeden İmal Başlıklar ve Korkuluklar

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Mechanical Trendelenburg Movement

Central Lock (125 mm)


Full Hpl Bed Surface

Mechanical Cpr

Bed Extension

Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

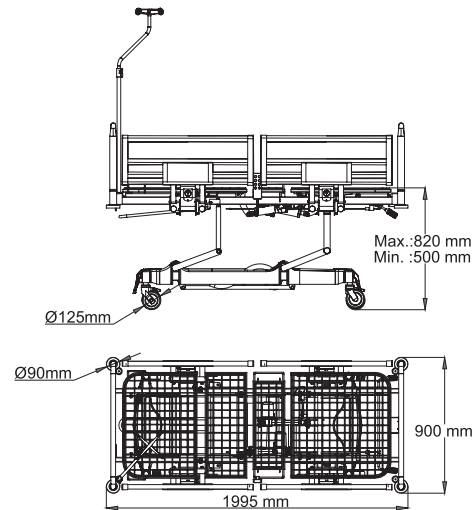

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG

Mekanik CPR
Mechanic CPR



Manuel Trendelenburg Kolu
Manual Trendelenburg Lever



Çıkarılabilir Başucu / Ayakucu Paneli
Removable Head / Foot Boards



Fiesta

NITRO HB 3420P PEDIATRIC

NITROCARE ÜÇ MOTORLU PEDIATRİK HASTA KARYOLASI

NITROCARE THREE MOTORS PEDIATRIC PATIENT BED



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sırt Ayak, Yükseklik, Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir
Amortisörlü Mekanik Mekanizma ile Trendelenburg Hareketi
Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir
El Kumandası
Mekanik CPR
Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama
ABS Başlıklar ve Korkuluklar
Metal Yatma Yüzeyi
360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Adjustment With Electronic Motors
Fowler And Vascular Position
Hand Control Unit
Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Removable Head And Foot Board Made Of ABS
4 Pcs Side Rails Made Of ABS
Metal Bed Surfaces
360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)
Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress
Mechanical Trendelenburg Movement
Central Lock (125 mm)
Full Hpl Bed Surface
Bed Extension
Mechanical Cpr
Control Panel On Side Rails
Battery
Lifting Pole (Self Help Pole)

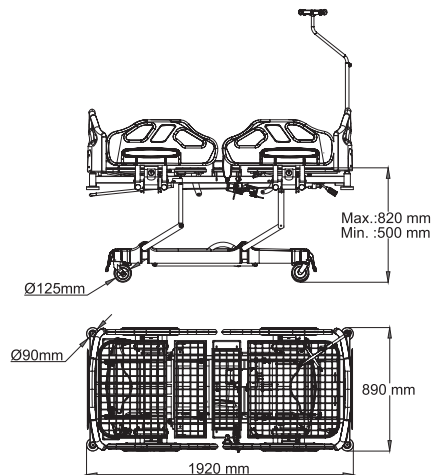

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG

Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



Manuel Trendelenburg Kolu
Manual Trendelenburg Lever



Compact

NITRO HB 2430P PEDIATRIC

NITROCARE İKİ MOTORLU PEDIATRİK HASTA KARYOLASI

NITROCARE TWO MOTORS PEDIATRIC PATIENT BED



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisörlü Mekanik Mekanizma ile Trendelenburg Hareketi

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Alüminyum ve Kompak malzemeden İmal Başlıklar ve Korkuluklar

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of Aluminium And HPL

4 Pcs Side Rails Made Of Aluminium And HPL

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Mechanical Trendelenburg Movement


Full Hpl Bed Surface

Bed Extension

Mechanical Cpr

Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

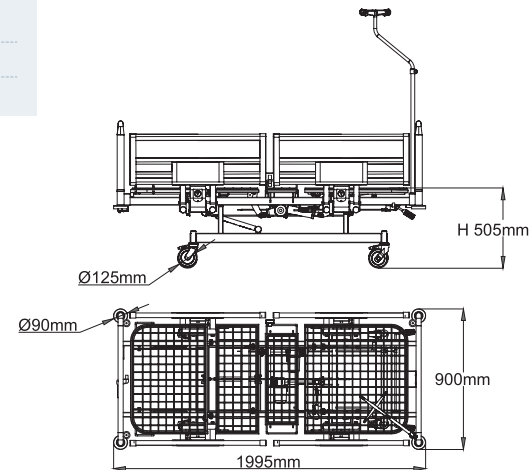

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



360 Derece Dönebilen Tekerler
360° Movable Castors



El Kumandası
Hand Control Unit



Fiesta

NITRO HB 2420P PEDIATRIC

NITROCARE İKİ MOTORLU PEDIATRİK HASTA KARYOLASI

NITROCARE TWO MOTORS PEDIATRIC PATIENT BED



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 9-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 10-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Removable Head And Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) Protection Bumpers
- 9-) IV Pole
- 10-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisörlü Mekanik Mekanizma ile Trendelenburg Hareketi

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Başlıklar ve Korkuluklar

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

Mechanical Trendelenburg Movement


Full Hpl Bed Surface

Bed Extension

Mechanical Cpr

Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)

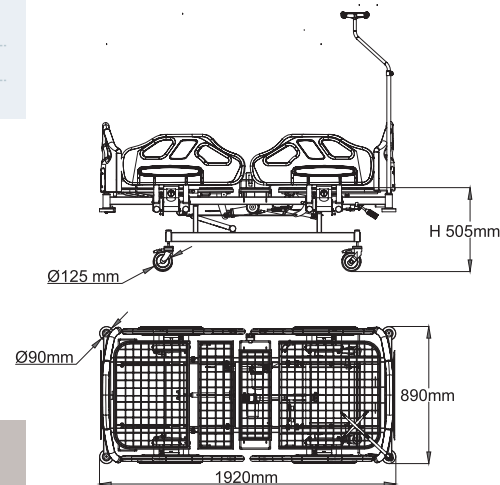

DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



Doğrusal Kilitli Teker
Linear Brake Castors



Mekanik CPR
Mechanic CPR



NITRO HB 1110P PEDIATRIC

NITROCARE REFAKATÇI YATAKLI PEDIATRİK KARYOLA

NITROCARE MANUEL PEDIATRIC BED WITH COMPANION BED



- 1-) Açılıp Kapanabilen Korkuluk
- 2-) Çekmeceli Ahşap Dolap
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Şilte

- 1-) Rails Control (Open - Close)
- 2-) Cabinet With Drawers
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Mattress



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER



Amortisörlü Mekanizma ile Sırt ve Trendelenburg Hareketi yapabilmektedir
Metal ve Ahşap Malzemelerden İmal Başucu ve Ayakucu Panelleri
Açılır Kapanır Metal Korkuluk
Çelik Profilden İmal, Elektostatik Toz boyalı Şase
Çekmeceli Ahşap Dolap
Pediatrik Karyolada 125 mm Çapında 4 Adet , Refakatçi Karyolasında 50 mm Çapında 4 Adet Teker Kullanılmaktadır.
Pediatrik Karyola ile Birlikte Şilte Verilmektedir

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Head And Foot Panels Made Of Metal And Wood
2 Pcs Foldable Side Rails Made From Electrotatic Powder Cotated Metal
Rails Control (Open - Close)
Metal Steel Chassis
Metal Bed Surfaces
Cabinet With Drawers
Electrostatic Powder Cotated Metal Body
360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm) For Padiatric Cot
360° Movable Castors With Linear Brake Systems (50 mm) For Companion Bed
Trendelenburg Positions With Help Of Gas Spring
28 Density Pediatric And Adult Mattress

EXPORT OPTIONS

32 Density Foam Mattres
Visco Mattress

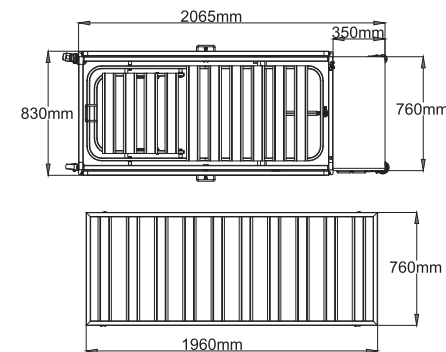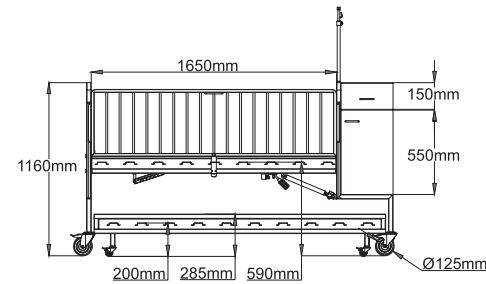


Çekmeceli Ahşap Dolap
Wooden Chest of Drawers



Açılır Kapanır Metal Korkuluk
Folding Metal Side Rails



Çelik Profilden İmal Edilmiş Şase
Chasis Made From Steel Shape

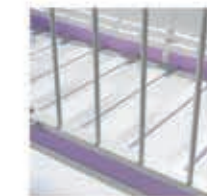

Pediatrik Karyola ile Birlikte Şilte Verilmektedir.
Mattress is Given With Pediatric Cot





NITROCARE

Evde Bakım Karyolaları

CARE BEDS

NITRO HB 7260F

NITROCARE 



Serra 2

NITRO HB 7260F


NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED (LOWBED)

NITROCARE



- 1-) El Kumandası
 - 2-) Mekanik CPR
 - 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
 - 4-) Merkezi Fren Sistemi
 - 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
 - 6-) Döşeme Kaplı Dış yüzey
 - 7-) Metal yatma yüzeyi
 - 8-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
 - 9-) Aksesuar Yuvaları
- 1-) Hand Control Unit
 - 2-) Mechanical Cpr
 - 3-) 360° Movable Castors
 - 4-) Central Brake System
 - 5-) Side Rail Open / Close
 - 6-) Wooden Decors On Both Side Covered With Textile
 - 7-) Metal Bed Surfaces
 - 8-) IV Pole
 - 9-) Accessories Slot

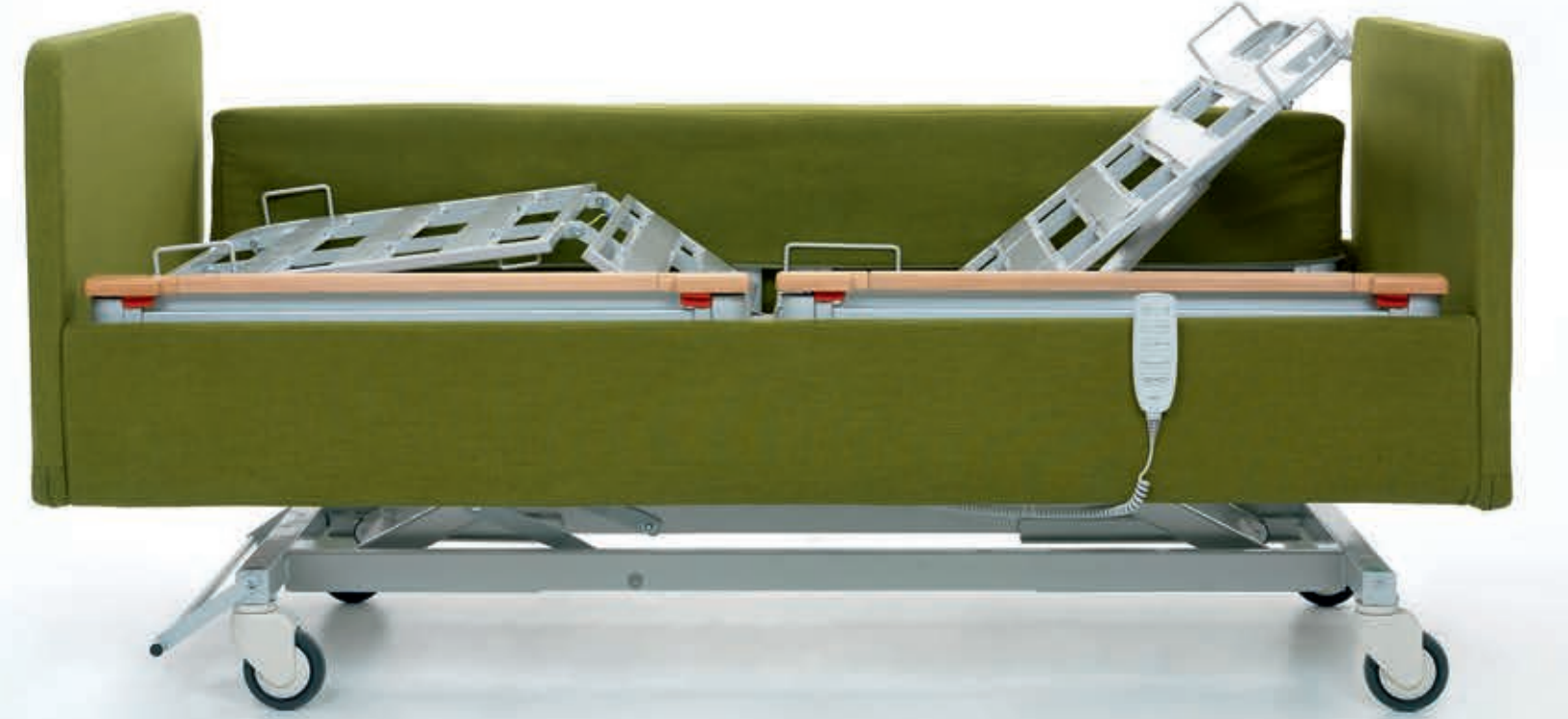

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Döşeme Kaplı Dış Yüzey

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Head And Foot Boards From Wood Decors Covered With Textile

Wooden Decors On Both Side Covered With Textile

4 Pcs Side Rails Made From Aliminium

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress



Central Lock (125 mm)

Mechanical CPR


IV Pole

Belt Hook

Lifting Pole (Self Help Pole)

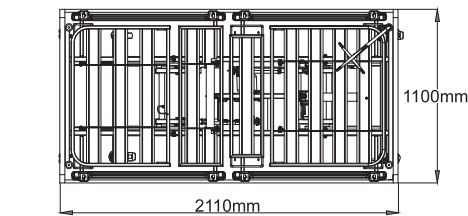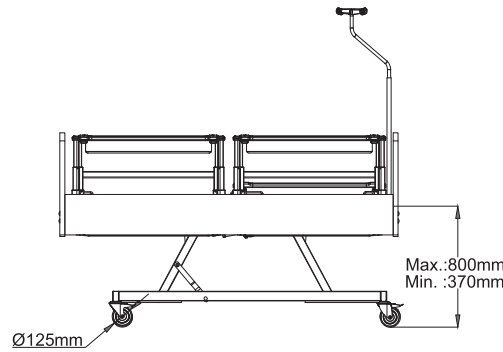

DEKORS

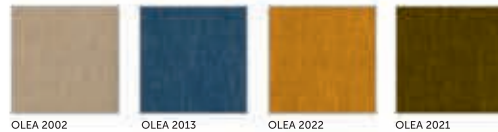

SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC



Yan Korkuluklar
Side Rails




Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



Antistatik Teker
Antistatic Castors



Metal Yatma Yüzeyi
Metal Bed Surfaces

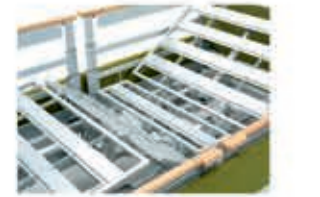

Serra 2

NITRO HB 7260

NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED (LOWBED)

NITROCARE



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Merkezi Fren Sistemi
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Ahşap Malzemeden İmal Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 7-) Metal yatma yüzeyi
- 8-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 9-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Central Brake System
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Wooden Decors Head and Foot Board
- 7-) Metal Bed Surfaces
- 8-) IV Pole
- 9-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Portatif Hasta Kontrol Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Ahşap Malzemeden İmal Dış Kaplama

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Head And Foot Boards From Wood Decors

Wooden Decors On Both Side

4 Pcs Side Rails Made From Aluminium

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress


Central Lock (125 mm)

Mechanical CPR

IV Pole

Belt Hook

Lifting Pole (Self Help Pole)

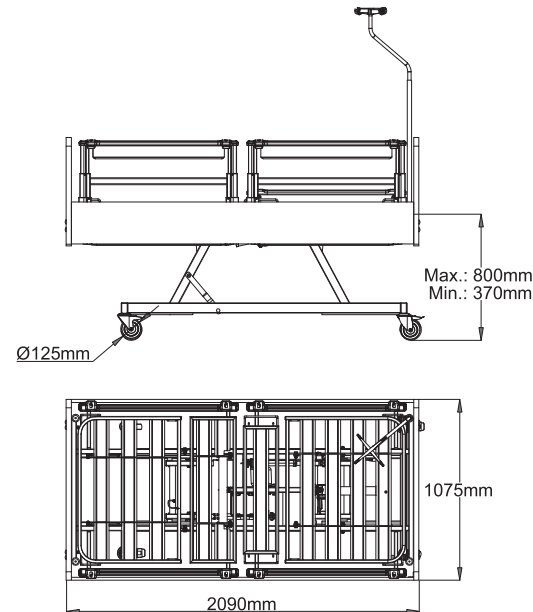

Metal Yatma Yüzeyi
Metal Bed Surfaces



Yan Korkuluklar
Side Rails



Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



Serra
NITRO HB 7240

NITROCARE



Serra

NITRO HB 7240

NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED (LOWBED)



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Ahşap Malzemeden İmal Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 9-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Wooden Decors Head and Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) IV Pole
- 9-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Ahşap Malzemeden İmal Başlıklar ve Alüminyum malzemeden İmal Korkuluklar Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Head And Foot Boards From Wood Decors

4 Pcs Side Rails Made From Aluminium And HPL

Metal Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

125 mm Plastic Castors with Linear Brake


Central Lock (125 mm)

Mechanical CPR

IV Pole

Belt Hook


Lifting Pole (Self Help Pole)

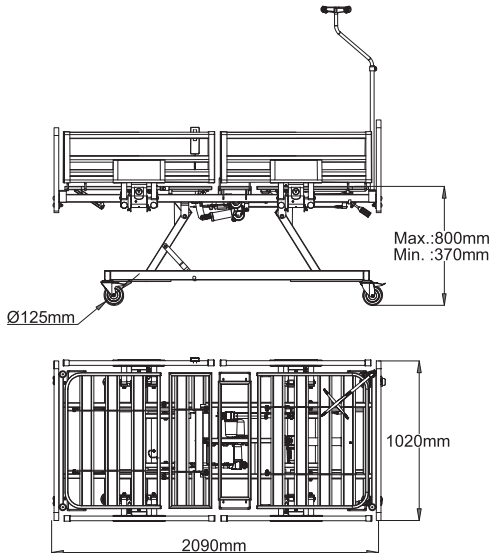

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

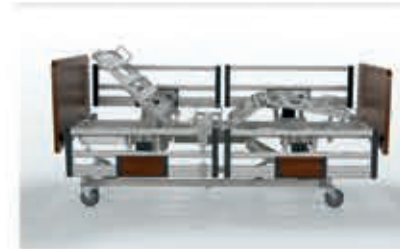

SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



KARDİYAK
CARDIAC



Metal Yatma Yüzeyi
Metal Bed Surfaces



Yan Korkuluklar
Side Rails



Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



Aksesuar Yuvaları
Accessory Slots



Serenity

NITRO HB 7000W

NITROCARE 



Serenity

NITRO HB 7000W

NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED (LOWBED)

NITROCARE



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Ahşap Malzemeden İmal Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 9-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rails Control (Open - Close)
- 5-) Wooden Decors Head and Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) IV Pole
- 9-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Mekanik CPR

Katlanabilir ve Taşınabilir Özellikte

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Ahşap Malzemeden İmal Başlıklar ve yan kollar

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde hareketi sağlayan teker

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Head, Foot And Side Rails Made From Wood Decors

Head And Foot Board Both Side Wood Decors

Metal Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

125 mm Plastic Castors with Linear Brake


Mechanical CPR

Wood Batten Bed Surface

IV Pole

Belt Hook

Lifting Pole (Self Help Pole)

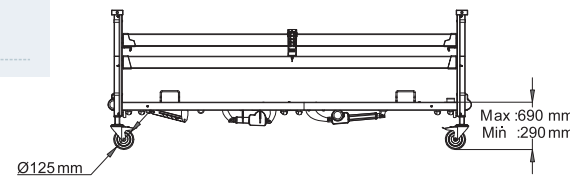


DECORS



4251 ARMUT



4236 SIAM TEAK

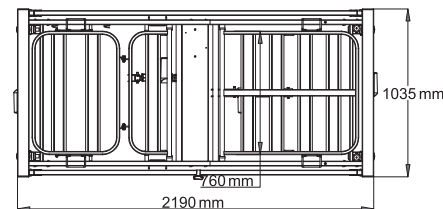

SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

Katlanabilir ve Taşınabilir Transport Positions



Yan Korkuluklar Side Rails



El Kumandası Hand Control Unit



Teker Kilit Sistemi Brake System



Metal Yatma Yüzeyi Metal Bed Surfaces



Serenity

NITRO HB 7000

NITROCARE DÖRT MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE FOUR MOTORS CARE BED (LOWBED)

NITROCARE



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Ahşap Malzemeden İmal Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) İdrar Torbası Askılığı
- 8-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 9-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Side Rails Control (Open - Close)
- 5-) Wooden Decors Head and Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Urine Bag Holders
- 8-) IV Pole
- 9-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Mekanik CPR

Katlanabilir ve Taşınabilir Özellikte

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Ahşap Malzemeden İmal Başlıklar ve Alüminyum malzemeden İmal Korkuluklar

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Head, Foot And Side Rails Made From Wood Decors

Metal Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

125 mm Plastic Castors with Linear Brake



Mechanical CPR

Wood Batten Bed Surface

IV Pole

Belt Hook

Lifting Pole (Self Help Pole)

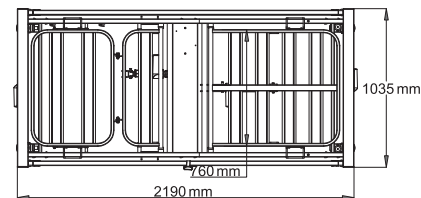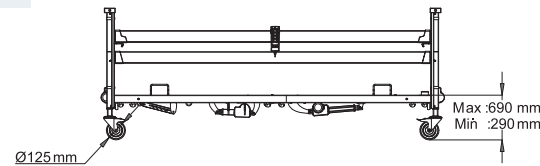

DECORS



4251 ARMUT

4236 SIAM TEAK



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

Katlanabilir ve
Taşınabilir
Transport
Positions

Teker Kilit Sistemi
Brake System

Yan Korkuluklar
Side Rails

El Kumandası
Hand
Control Unit



King
Size

NITRO HB 7250

NITROCARE ÜÇ MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE THREE MOTORS CARE BED (LOWBED)

Single
Size

NITRO HB 7250S

NITROCARE ÜÇ MOTORLU EVDE BAKIM HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE THREE MOTORS CARE BED (LOWBED)



- 1-) El Kumandası
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Ahşap Malzemeden İmal Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 6-) Metal yatma yüzeyi
- 7-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 8-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake System
- 4-) Side Rails Control (Open - Close)
- 5-) Wooden Decors Head and Foot Board
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) IV Pole
- 8-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir
Karyola Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir
Portatif Hasta Kontrol Kumandası
Mekanik CPR
Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama
Ahşap Malzemeden İmal Dış Kaplama
Metal Yatma Yüzeyi
360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
32 Dansite Antibakteriyel Şilte



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height Adjustment With Electronic Motors
Fowler And Vascular Position
Hand Control Unit
Knee Adjustment With Gradual Mechanism
Head, Foot Boards Made From Wood Decors
2 Pcs Metal Side Rails
Metal Bed Surfaces
360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)



EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress
125 mm Plastic Castors with Linear Brake
Central Lock (125 mm)
Double Castors Q 150
Hand Control Unit With Lockable
Mechanical CPR
Bed Extension
Battary
IV Pole
Lifting Pole (Self Help Pole)


7250 King

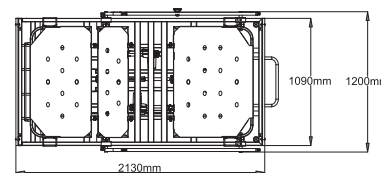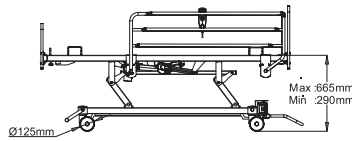

7250 Single

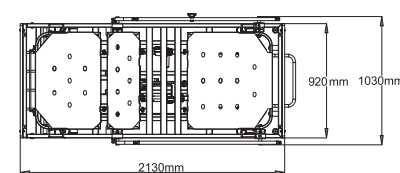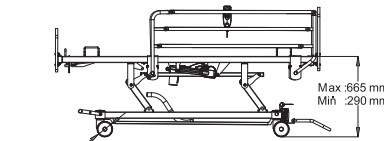

DECORS

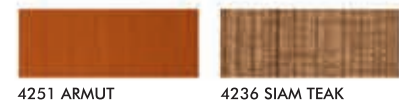

Yatak Uzatma
Bed Extension



El Kumandası
Hand Control Unit



Metal Yatma Yüzeyi
Metal Bed Surfaces



Teker Kilit Sistemi
Brake System





NITROCARE

Acil Müdahale Sedyeleri

NITROCARE EMERGENCY STRETCHER

SD 14 DRIVE




SD

SD 14 DRIVE

NITROCARE DÖRT MOTORLU ACİL MÜDAHALE VE TAŞIMA SEDYESİ

NITROCARE FOUR MOTORS EMERGENCY STRETCHER - E - DRIVE SYSTEMS

NITROCARE

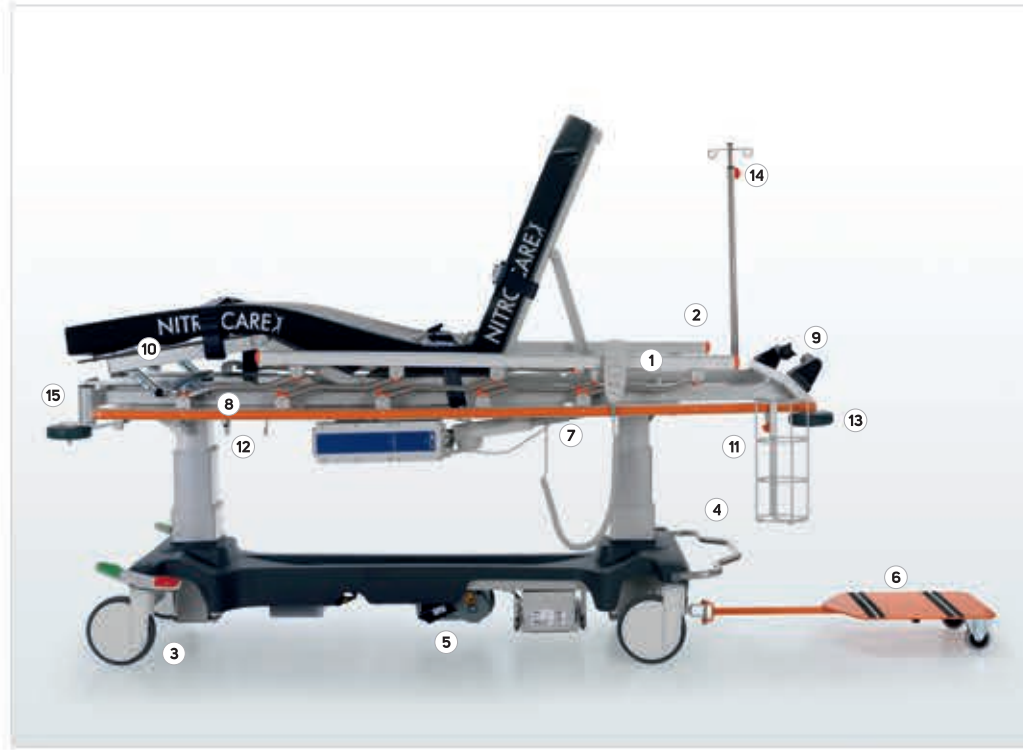

- 1-) El Kumandası
- 2-) X-Ray Özelliği
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Merkezi Fren Sistemi
- 5-) 5. Teker
- 6-) Metal Çıkarılabilir Taşıma Ünitesi
- 7-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 8-) Açı Ölçer
- 9-) İtme kolları
- 10-) Kompakt Yatma Yüzeyi
- 11-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 12-) İdrar Torbası Askılığı
- 13-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 14-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 15-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Full X-Ray (Head To Foot)
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Central Brake System
- 5-) 5th Castor
- 6-) Metal Driving Platform
- 7-) Side Rail Open / Close
- 8-) Angle Gauge
- 9-) Control Handles
- 10-) Full HPL Bed Surfaces
- 11-) Oxygen Cylinder Holder
- 12-) Urine Bag Holders
- 13-) Protection Bumpers
- 14-) Height Adjustable Iv Pole
- 15-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Sedye İleri Geri Hareket Motor Yardımı ile Yapılmaktadır Kolda bulunan Joystick Vasıtasıyla Hareket kontrol edilir.

Sedye Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

El Kumandası

Batarya

Sedye Tüm Bölge X- Ray Özelliği

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Alüminyum ve paslanmaz metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Metal çıkarılabilir taşıma ünitesi

Kompakt Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

5.teker

Çarpma Korumucu Tamponlar

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Havluluk Askılığı / Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta Emniyet kemeri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Stretcher Drive Systems with Help of the Motors. Movement is controlled by the joystick on the handle.

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Full X-Ray (Head To Foot) and X-Ray Cassette Holder (Hpl)

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

2 Pcs Aluminium + Stainless Steel Foldable Side Rail

Full HPL Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (200 Mm)

Oxygen Cylinder Holder

5th Castor (125 mm)

Battery

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Towel Rack

Plastic Protection Bumpers

Accessories Slot


Urine Bag Holders

Belt

EXPORT OPTIONS

Metal Driving Platform

Defibrillator Table

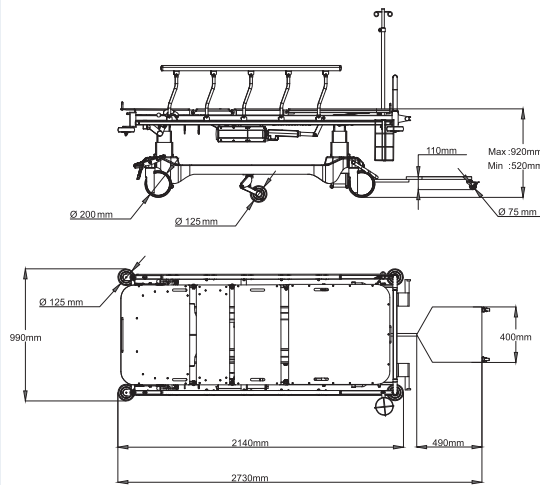

SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

Metal Çıkarılabilir Taşıma Ünitesi
Metal Driving Platform

Oksijen Tüpü Yuvası
O2 Tube Holder

El Kumandası
Hand Control Unit

Aksesuar Yuvaları
Accessory Slots

Sürüş Kolları
Driving Handles

Kademeli Merkezi Kilit Sistemi
Gradual Central Brake System

Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



SD

14

NITROCARE DÖRT MOTORLU ACİL MÜDAHALE VE TAŞIMA SEDYESİ

NITROCARE FOUR MOTORS EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



- 1-) El Kumandası
- 2-) X-Ray Özelliği
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Merkezi Fren Sistemi
- 5-) 5. Teker
- 6-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 7-) Açı Ölçer
- 8-) Açılır Kapanır İtme Kolları
- 9-) Kompakt Yatma Yüzeyi
- 10-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 11-) İdrar Torbası Askılığı
- 12-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 13-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 14-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Full X-Ray (Head To Foot)
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Central Brake Systems
- 5-) 5th Castor
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Angle Gauge
- 8-) Openable Handles
- 9-) Full HPL Bed Surfaces
- 10-) Oxygen Cylinder Holder
- 11-) Urine Bag Holders
- 12-) Protection Bumpers
- 13-) Height Adjustable Iv Pole
- 14-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Sedye Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Kontrol Kumandası

Batarya

Sedye Tüm Bölge X- Ray Özelliği

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Alüminyum ve paslanmaz metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Kompakt Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

5. teker

Çarpma Korumucu Tamponlar

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Havluluk Askılığı

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta Emniyet kemeri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Full X-Ray (Head To Foot) and X-Ray Cassette Holder (Hpl)

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

2 Pcs Aliminium + Stainless Steel Foldable Side Rail

Full HPL Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (200 Mm)

Oxygen Cylinder Holder

5th Castor (125 mm)

Battery

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Towel Rack


Accessories Slot

Urine Bag Holders

Belt

EXPORT OPTIONS

Defibrillator Table

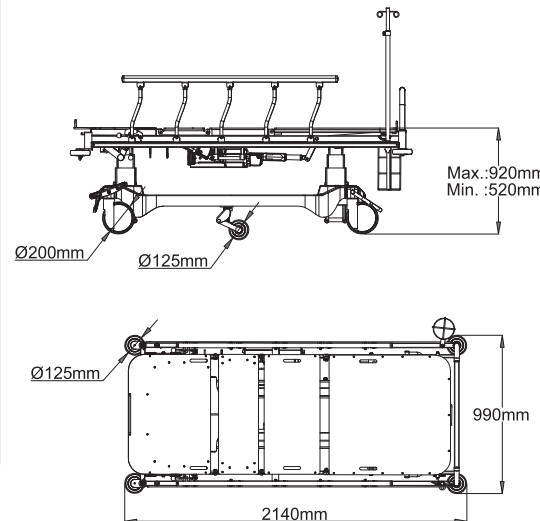

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

KARDİYAK
CARDIAC

X-ray
X-ray Cassette Holder



El Kumandası
Hand Control Unit



Aksesuar Yuvaları - Açı Ölçer
Accessory Slots - Angle Gauge



Açılır Kapanır İtme Kolları
Openable Push Handles



Kademeli Merkezi Kilit Sistemi
Gradual Central Brake System



Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



NT Q7

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC COLUMN SYSTEM EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



Reddot Design Award
Winner 2013



Good Design Award
Winner 2013



product
design award
2014



NT Q7

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC COLUMN SYSTEM EMERGENCY STRETCHER



- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalları
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 4-) Kompakt Yatma Yüzeyi
- 5-) İdrar Torbası Askılığı
- 6-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 7-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 8-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Foot Control Pedals
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Side Rail Open / Close
- 4-) HPL Bed Surfaces
- 5-) Urine Bag Holders
- 6-) Protection Bumpers
- 7-) Height Adjustable Iv Pole
- 8-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Yüksekliği, Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir
Sırt Ayak, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Amortisör Yardımıyla yapar
Baştan Ayakucuna Kadar X-Ray Geçirgen Özellikli Yatma Yüzeyi
Sedye Manevra Kabiliyeti Sağlayan 5. Teker
Hasta Muayene, Entübasyon ve Radyografi işlemlerine olanak sağlar
Çelik Üzeri Poliüretan Kaplamadan İmal Kilitlenebilir Yan Korkuluklar.
Kompakt Yatma Yüzeyi
360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.
5. teker
Çarpma Korumucu Tamponlar
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte
Aksesuar Yuvaları
İdrar Torbası Askılığı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Adjustment With Hydraulic System
Headrest, Legrest, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Dampers System
Full X-Ray (Head To Foot) and X-Ray Cassette Holder (Hpl)
Allows Patient Examination, Intubation and Radiography Procedures
Lockable Side Rails Made of Polyurethane Coating on Steel.
Hpl Bed Surfaces
360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 mm)
5th Castor (125 mm)
Height Adjustable Iv Pole
Antibacterial And Water Proof Mattress
Plastic Protection Bumpers
Accessories Slot
Urine Bag Holders

EXPORT OPTIONS

Defibrillator Table

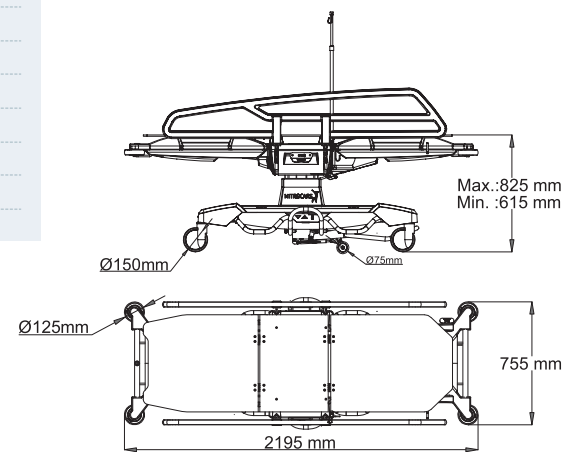

SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

TV OUT HAREKETİ
TV OUT MOVEMENT



Trendelenburg
Trendelenburg

Diz Kırma Hareket Kolu
Knee Position Arm

5. Teker Kontrol Pedalı
5. Castor Control Pedal

Merkezi Kilit Sistemi
Central Brake System

SD

SD 15

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalları
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) 5. Teker
- 5-) Açı Ölçer
- 6-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 7-) Açılır Kapanır İtme Kolları
- 8-) Kompakt Yatma Yüzeyi
- 9-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 10-) İdrar Torbası Askılığı
- 11-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 12-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 13-) Aksesuar Yuvaları
- 14-) Havluluk

- 1-) Foot Control Pedals
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake Systems
- 4-) 5th Castor (125 Mm)
- 5-) Angle Gauge
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Openable Handles
- 8-) Full HPL Bed Surfaces
- 9-) Oxygen Cylinder Holder
- 10-) Urine Bag Holders
- 11-) Protection Bumpers
- 12-) Height Adjustable Iv Pole
- 13-) Accessories Slot
- 14-) Towel Rack

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisör Yardımıyla Ayarlanabilir Sırt Kısım

Sedye Tüm Bölge Sürgülü X-Ray Mevcuttur.

Alüminyum ve paslanmaz metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Kompakt Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

5.teker

Çarpma koruyucu tamponlar

Oksijen Tüpü Taşıma Aparatı

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Çok Amaçlı Sepet

Havluluk Askılığı

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta emniyet kemeri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Hydraulic Lift

Headrest Adjustment With Damper System

Full X-Ray (Head To Foot) and Full X-Ray Cassette Holder (Hpl)

2 Pcs Aliminium + Stainless Stainless Foldable Side Rail

Full HPL Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (200 mm)

Oxygen Cylinder Holder

5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Multi Purpose Basket

Towel Rack

Accessories Slot

Urine Bag Holders


Belt

EXPORT OPTIONS

Head Restraint System

Defibrillator Table

Full Handle On Footboard

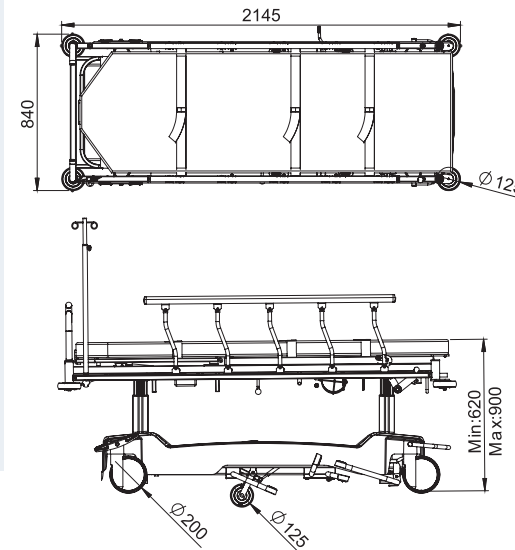

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



Çarpma Korumucu
Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock

Kademeli Merkezi
Kilit Sistemi
Gradual Central
Brake System

Açılır Kapanır İtme Kolları
Openable Push Handles



SD

SD 13 BARIATRIC

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM BARIATRIC EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalları
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) 5. Teker
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Ağırlı Kapanır İtme Kolları
- 7-) Kompakt Yatma Yüzeyi
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları
- 12-) Sepet

- 1-) Foot Control Pedals
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake Systems
- 4-) 5th Castor (125 Mm)
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Openable Handles
- 7-) Full HPL Bed Surfaces
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) Height Adjustable Iv Pole
- 11-) Accessories Slot
- 12-) Multi Purpose Basket



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisör Yardımıyla Ayarlanabilir Sirt Kısım

Yüksek Ağırlık Taşıma Kapasitesi

Sedye Tüm Bölge Sürgülü X-Ray Mevcuttur.

Alüminyum ve paslanmaz metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Kompakt Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

5. teker

Çarpma Korumucu Tamponlar

Oksijen Tüpü Taşıma Aparatı

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Çok Amaçlı Sepet

Havluluk Askılığı

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta Emniyet kemeri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Hydraulic Lift

Headrest Adjustment With Damper System

High Weight Carrying Capacity

Full X-Ray (Head To Foot) and X-Ray Cassette Holder (Hpl)

2 Pcs Aluminium + Stainless Steel Foldable Side Rail

Full HPL Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (200 mm)

5th Castor (125 mm)

Oxygen Cylinder Holder

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Multi Purpose Basket

Towel Rack

Accessories Slot

Urine Bag Holders


Belt

EXPORT OPTIONS

Head Restraint System

Defibrillator Table

Full Handle On Footboard

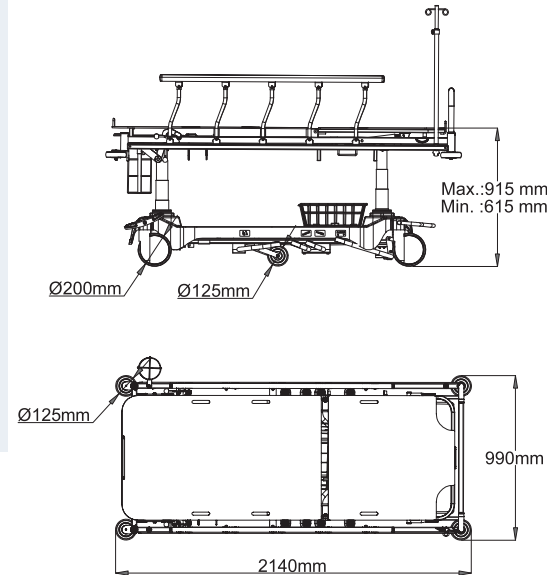

SIRT HAREKETİ
BACKREST

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



Çarpma Korumucu
Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock

Sepet
Basket

Kademeli Merkezi Kilit Sistemi
Gradual Central Brake System

Ağırlı Kapanır İtme Kolları
Openable Push Handles



SD

SD 12 INFINITY

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



SD

SD 12 INFINITY

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalları
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) 5. Teker
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Açı Ölçer
- 7-) Açılır Kapanır İtme Kolları
- 8-) Kompakt Yatma Yüzeyi
- 9-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 10-) İdrar Torbası Askılığı
- 11-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 12-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 13-) Aksesuar Yuvaları
- 14-) Havluluk

- 1-) Foot Control Pedals
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake Systems
- 4-) 5th Castor (125 Mm)
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Angle Gauge
- 7-) Openable Handles
- 8-) Full HPL Bed Surfaces
- 9-) Oxygen Cylinder Holder
- 10-) Urine Bag Holders
- 11-) Protection Bumpers
- 12-) Height Adjustable Iv Pole
- 13-) Accessories Slot
- 14-) Towel Rack

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir

Sırt Ayak hareketlerini amortisör Yardımıyla yapmaktadır.

Sedye Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Sedye Tüm Bölge Sürgülü X-Ray Mevcuttur.

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Çelik Üzeri Poliüretan Kaplamadan İmal Kilitlenebilir Yan Korkuluklar.

Kompakt Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

5. teker

Çarpma Korumucu Tamponlar

Oksijen Tüpü Taşıma Aparatı

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Havluluk Askılığı

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta Emniyet Kemer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Hydraulic Lift

Headrest, Legrest Adjustment With Damper System

Fowler And Vascular Position

Full X-Ray (Head To Foot) and X-Ray Cassette Holder (Hpl)

Knee Adjustment With Damper Systems

Lockable Side Rails Made of Polyurethane Coating on Steel.

Full HPL Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (200 mm)

5th Castor (125 mm)

Oxygen Cylinder Holder

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Towel Rack

Accessories Slot

Urine Bag Holders


Belt

EXPORT OPTIONS

Head Restraint System

Defibrillator Table

Full Handle On Footboard

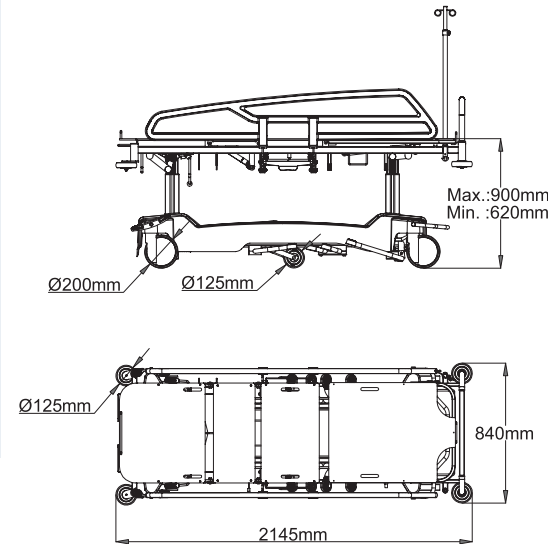


Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST

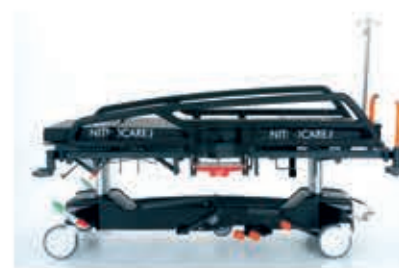

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



KARDİYAK
CARDIAC



Sirtta X-Ray Özelliği
Backrest X-Ray
Kaset Yuvası
Cassette Holder

Açılır Kapanır İtme Kolları
Openable Push Handles



Merkezi Kilit Sistemi
Central Brake System

Korkuluk Açma / Kapama
Folding Slide Rolls



SD

SD 09

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



SD

SD 09

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalları
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) 5. Teker
- 5-) Korkuluk Açma Kapama Özelliği
- 6-) Ağırlı Kapanır İtme Kolları
- 7-) Kompakt Yatma Yüzeyi
- 8-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 9-) İdrar Torbası Askılığı
- 10-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 11-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 12-) Aksesuar Yuvaları
- 13-) Havluluk
- 14-) Sepet

- 1-) Foot Control Pedals
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake Systems
- 4-) 5th Castor (125 Mm)
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Openable Handles
- 7-) Full HPL Bed Surfaces
- 8-) Oxygen Cylinder Holder
- 9-) Urine Bag Holders
- 10-) Protection Bumpers
- 11-) Height Adjustable Iv Pole
- 12-) Accessories Slot
- 13-) Towel Rack
- 14-) Multi Purpose Basket

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir

Sırt ayak hareketlerini amortisör Yardımıyla yapmaktadır.

Sedye Fowler Vasküler Pozisyonları Alabilmektedir

Sedye Tüm Bölge Sürgülü X-Ray Mevcuttur.

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

Alüminyum ve paslanmaz metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Kompakt Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

5. teker

Çarpma Korumucu Tamponlar

Oksijen Tüpü Taşıma Aparatı

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Çok Amaçlı Sepet

Havluluk Askılığı

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta Emniyet Kemer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Hydraulic Lift

Headrest, Legrest Adjustment With Damper System

Fowler And Vascular Position

Full X-Ray (Head To Foot) and X-Ray Cassette Holder (Hpl)

Knee Adjustment With Damper Systems

2 Pcs Aluminium + Stainless Steel Foldable Side Rail

Full HPL Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (200 mm)

Oxygen Cylinder Holder

5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Multi Purpose Basket

Towel Rack

Accessories Slot


Urine Bag Holders / Belt

EXPORT OPTIONS

Head Restraint System

Defibrillator Table

Full Handle On Footboard

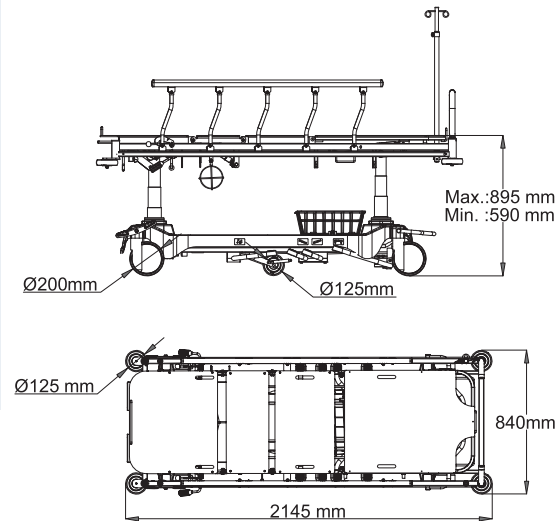

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.




SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

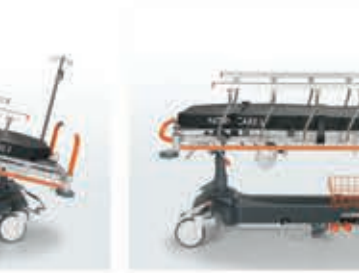

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



KARDİYAK
CARDIAC



Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers



Oksijen Tüpü Yuvası
O₂ tank holder



Sirtta X-Ray Özelliği Backrest X-Ray
Kaset Yuvası Cassette Holder



SD

SD 05

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalları
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) 5. Teker
- 5-) Açı Ölçer
- 6-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 7-) Ağırlı Kapanır İtme Kolları
- 8-) Kompakt Yatma Yüzeyi
- 9-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 10-) İdrar Torbası Askılığı
- 11-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 12-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 13-) Aksesuar Yuvaları
- 14-) Havluluk
- 15-) Sepet

- 1-) Foot Control Pedals
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake Systems
- 4-) 5th Castor (125 Mm)
- 5-) Angle Gauge
- 6-) Side Rail Open / Close
- 7-) Openable Handles
- 8-) Full HPL Bed Surfaces
- 9-) Oxygen Cylinder Holder
- 10-) Urine Bag Holders
- 11-) Protection Bumpers
- 12-) Height Adjustable Iv Pole
- 13-) Accessories Slot
- 14-) Towel Rack
- 15-) Multi Purpose Basket

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisör Yardımıyla Ayarlanabilir Sirt Kısım
Sedye Tüm Bölge Sürgülü X-Ray Mevcuttur.

Alüminyum ve paslanmaz metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Kompakt Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

5.teker

Çarpma koruyucu tamponlar

Oksijen Tüpü Taşıma Aparatı

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Çok Amaçlı Sepet

Havluluk Askılığı

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta Emniyet Kemer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Hydraulic Lift

Headrest Adjustment With Damper System

Full X-Ray (Head To Foot) and X-Ray Cassette Holder (Hpl)

2 Pcs Aluminium + Stainless Steel Foldable Side Rail

Full HPL Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (200 mm)

Oxygen Cylinder Holder

5th Castor (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Multi Purpose Basket

Towel Rack

Accessories Slot

Urine Bag Holders


Belt

EXPORT OPTIONS

Head Restraint System

Defibrillator Table

Full Handle On Footboard

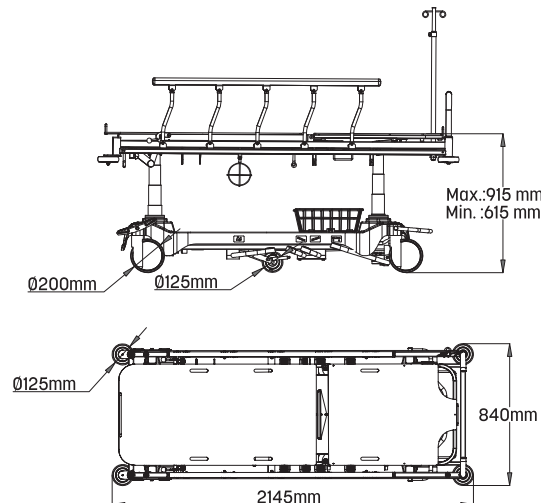

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



Defibrilatör Tablası
Defibrillator Table



Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



Sepet
Basket



Oksijen Tüpü Yuvası
O2 Tube Holder



Teker Kilit Sistemi
Brake System



SD

SD 04

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE HYDRAULIC SYSTEM EMERGENCY STRETCHER

NITROCARE



- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalları
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Açı Ölçer
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Metal Yatma Yüzeyi
- 7-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Foot Control Pedals
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake Systems
- 4-) Angle Gauge
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Oxygen Cylinder Holder
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) Height Adjustable Iv Pole
- 11-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisör Yardımıyla Ayarlanabilir Sirt Kısım

Metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Çarpma Korumucu Tamponlar

Oksijen Tüpü Taşıma Aparatı

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Havluluk Askılığı

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta Emniyet Kemer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Hydraulic Lift

Headrest Adjustment With Damper System

Electrostatic Powder Coated Folding, Lockable Metallic Side Rails

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (200 mm)

Oxygen Cylinder Holder

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Towel Rack

Accessories Slot

Urine Bag Holders


Belt

EXPORT OPTIONS

Head Restraint System

Defibrillator Table

Full Hpl Bed Surface

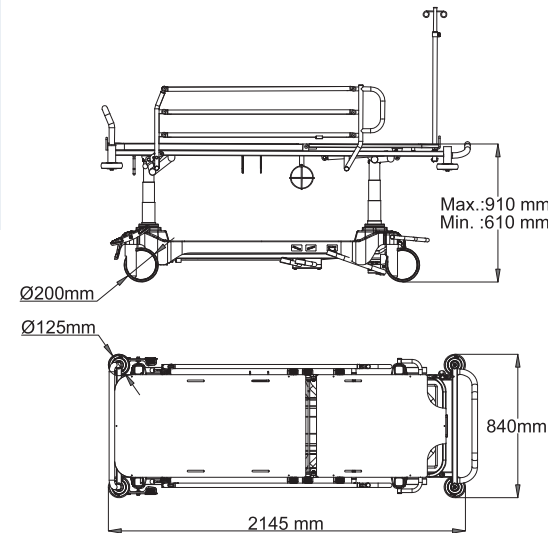

SIRT HAREKETİ
BACKREST

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG



Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers



Korkuluk Açma Kapatma
Side Rails Lock



Açılır Kapanır İtme Kolları
Openable Push Handles



360 Derece Dönebilen Tekerler
360° Movable Castors



SD

SD 01

NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE MECHANICAL SYSTEM PATIENT STRETCHER



- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalları
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Açı Ölçer
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Metal Yatma Yüzeyi
- 7-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları
- 12-) Havluluk
- 13-) Sepet

- 1-) Foot Control Pedals
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake Systems
- 4-) Angle Gauge
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Oxygen Cylinder Holder
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) Height Adjustable Iv Pole
- 11-) Accessories Slot
- 12-) Towel Rack
- 13-) Multi Purpose Basket

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik Hareketlerini Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisör Kontrollü Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketi Yapılabilmektedir

Amortisör Yardımıyla Ayarlanabilir Sirt Kısım

Metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Çarpma Korumucu Tamponlar

Oksijen Tüpü Taşıma Aparatı

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Çok Amaçlı Sepet

Havluluk Askılığı

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta emniyet kemeri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Adjustment With Hydraulic Lift

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Damper System

Headrest Adjustment With Damper System

Electrostatic Powder Coated Folding, Lockable Metallic Side Rails

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (125 mm)

Oxygen Cylinder Holder

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Multi Purpose Basket

Towel Rack

Accessories Slot

Urine Bag Holders

Belt


EXPORT OPTIONS

200 Mm Central Brake Wheels

Defibrillator Table

Leg Holder Set 2 Pcs


Full Hpl Bed Surface

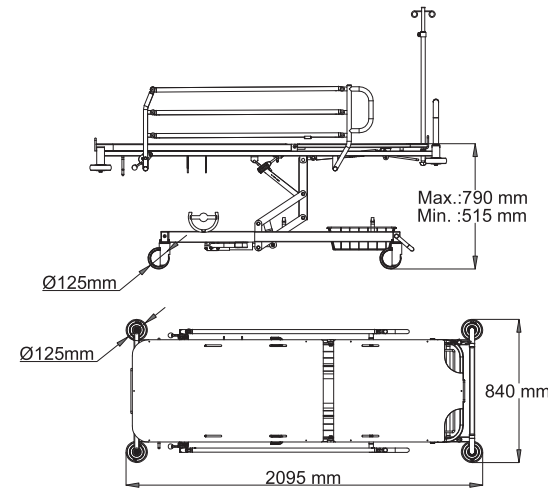

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

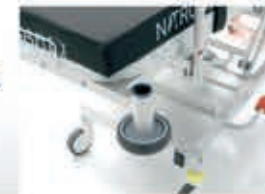SIRT HAREKETİ
BACKRESTYÜKSEKLİK
HEIGHTTERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURGTRENDLENBURG
TRENDLENBURGAçılır Kapanır İtme Kolları
Openable Push HandlesÇarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection BumpersAçı Ölçer
Angle GaugeMekanik CPR
Mechanic CPR


SD

SD 01P PEDIATRIC

NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ PEDIATRİK ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

NITROCARE MECHANICAL SYSTEM PEDIATRIC PATIENT STRETCHER

NITROCARE

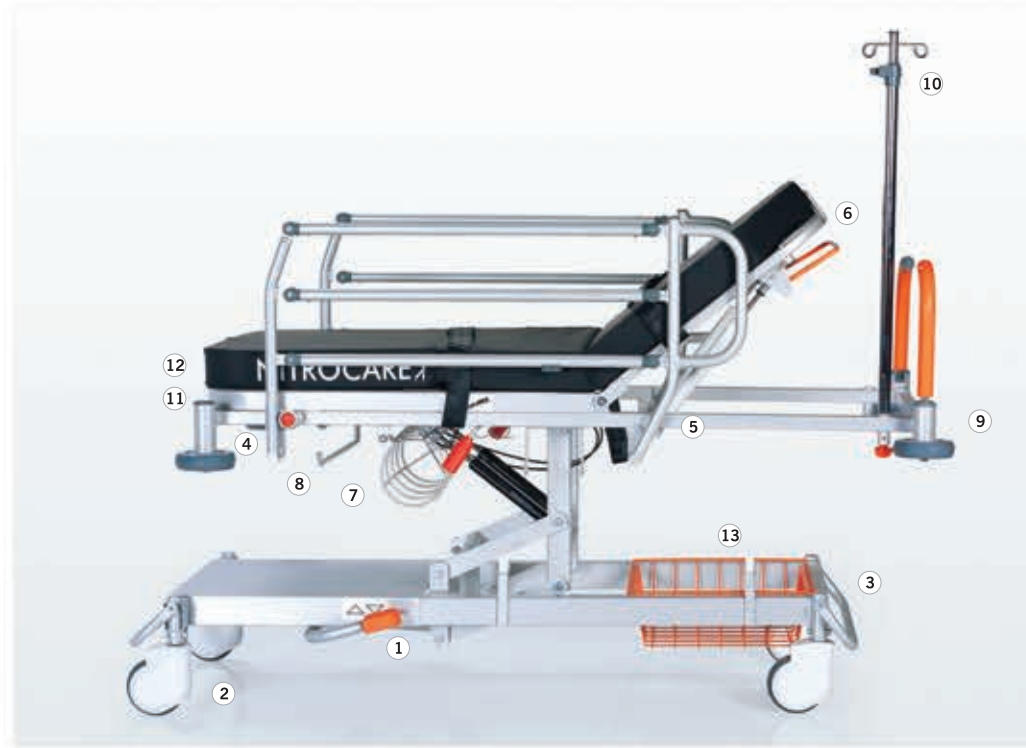

- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalları
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Açı Ölçer
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Metal Yatma Yüzeyi
- 7-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları
- 12-) Havluluk
- 13-) Sepet

- 1-) Foot Control Pedals
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake Systems
- 4-) Angle Gauge
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Metal Bed Surfaces
- 7-) Oxygen Cylinder Holder
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) Height Adjustable Iv Pole
- 11-) Accessories Slot
- 12-) Towel Rack
- 13-) Multi Purpose Basket

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik Hareketlerini Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisör Kontrollü Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketi Yapılabilmektedir

Amortisör Yardımıyla Ayarlanabilir Sirt Kısım

Metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Metal Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Çarpma koruyucu tamponlar

Oksijen Tüpü Taşıma Aparatı

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Çok Amaçlı Sepet

Havluluk Askılığı

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta Emniyet Kemer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Adjustment With Hydraulic Lift

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Damper System

Headrest Adjustment With Damper System

Electrostatic Powder Coated Folding, Lockable Metallic Side Rails

Metal Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (125 mm)

Oxygen Cylinder Holder

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Multi Purpose Basket

Towel Rack

Accessories Slot

Urine Bag Holders


Belt

EXPORT OPTIONS

200 Mm Central Brake Wheels

Defibrillator Table

Leg Holder Set 2 Pcs

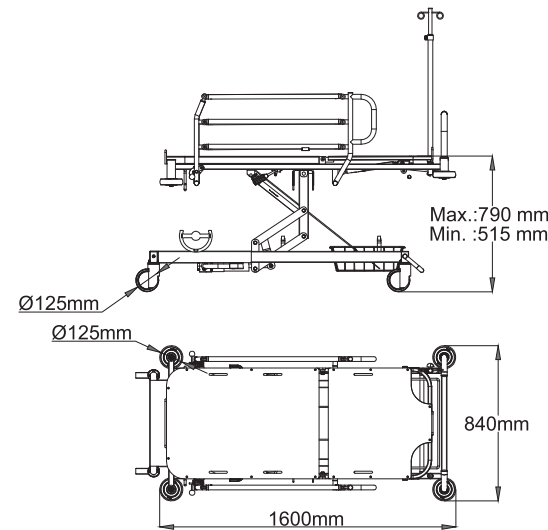

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

SIRT HAREKETİ
BACKRESTYÜKSEKLİK
HEIGHTTERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURGTRENDLENBURG
TRENDLENBURGTeker Kilit Sistemi
Brake SystemSedye Hareket
Kontrol Pedalları
Foot Control PedalsÇarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection BumpersSepet
Multi Purpose Basket

SD

SD 06

NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ TRANSFER SEDYESİ

NITROCARE MECHANICAL SYSTEM TRANSFER STRETCHER

NITROCARE



SD

SD 06

NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ TRANSFER SEDYESİ

NITROCARE MECHANICAL SYSTEM TRANSFER STRETCHER

NITROCARE



- 1-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 2-) Merkezi Fren Sistemi
- 3-) Transfer Mekanizması
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Açılır Kapanır İtme Kolları
- 6-) Kompakt Yatma Yüzeyi
- 7-) Oksijen Tüpü Yuvası
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) 360° Movable Castors
- 2-) Central Brake Systems
- 3-) Transfer mechanism
- 4-) Side Rail Open / Close
- 5-) Openable Handles
- 6-) Full HPL Bed Surfaces
- 7-) Oxygen Cylinder Holder
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) Height Adjustable Iv Pole
- 11-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Steril Ortam Sedyesi ve Genel Kullanım Sedyesi Olarak iki ayrı Sedye arabası ve Bir Adet Kızaklı Üst platformdan oluşur. Transfer noktasında İki Ayrı Sedye Arabası Birbirine Kilitlenerek Üzerindeki Platform Kızak Üzerinde Tekerler Vasıtası ile Kaydırılarak Hasta Transferi Gerçekleşir.

Sedyenin Sırt kısmından Başlayıp Ayak kısmında Sonlanan x-Ray ve Sürgü Mekanizması Bulunmaktadır. Bu sayede Röntgen Çekimleri ve X-ray Görüntülemeleri Hastanın Müdahale Gerektiren Bölgesinde Direk Olarak Gerçekleştirilir.

Amortisör Yardımıyla Ayarlanabilir Sırt Kısım Alüminyum ve paslanmaz metalden imal katlanabilir Yan Korkuluklar.

Kompakt Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Oksijen Tüpü Taşıma Aparatı

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel ve Su Geçirmez Şilte

Aksesuar Yuvaları

İdrar Torbası Askılığı

Hasta emniyet kemeri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Formed By Two Separate Stretcher Trolleys As A Sterile Area Stretcher And A General Use Stretcher And One Upper Platform With Slide System. At The Transfer Point, Two Separate Stretcher Trolleys Are Locked To Each Other And Upper Platform Slide With Help Of Wheels To Realize Patient Transfer.

Full X-Ray (Head To Foot) and X-Ray Cassette Holder (Hpl) on Top

There is a Rail and Sliding Mechanism That Starts From The Back Of The Stretcher And Ends At The foot.

Headrest Adjustment With Damper System

2 Pcs Aluminium + Stainless Stell Foldable Side Rail

Full HPL Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 mm)

Oxygen Cylinder Holder


Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers

Accessories Slot

Urine Bag Holders / Belt

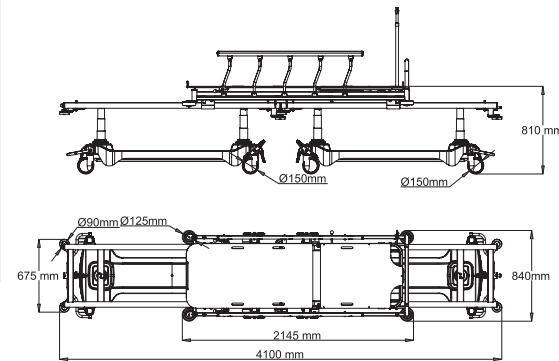

Açılır Kapanır Korkuluk Mekanizması
Folding Side Rails



Transfer Mekanizması
Transfer Mechanism



SD

SD 10

NITROCARE MOTORLU HASTA MUAYENE MASASI

NITROCARE ELECTRICAL EXAMINATION COUCH



- 1-) El Kumandası
2-) Havluluk
3-) Amortisörlü baş hareketi


- 1-) Hand Control Unit
2-) Towel Rack
3-) Headrest Adjustment

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Yardımı İle Yükseklik Ayarı Yapılabilmektedir
Baş Kısmı Amortisör Yardımı İle Hareket edebilmektedir.
El kumandası
Hafif Olması Sebebi İle Oda İçerisinde İstenilen Noktaya Hareket Ettirilebilir
Havlu Aparatı Sayesinde Daha Hijyenik Muayene
Ürün Pratik Kullanıma Sahiptir
Suni Deri Döşeme

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Adjustment With Electronic Motors
Headrest Adjustment With Damper System
Hand Control Unit
2 Movable Castors (Back : 200 mm)
Due to its light weight, it can be moved to the desired point in the room
More Hygienic Examination With Towel Rack
Practical Use
Antibacterial Artificial Leather Furnishing Foam Mattress

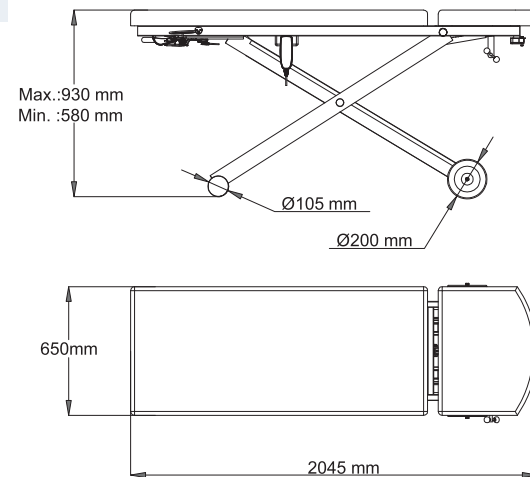

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Başlık Hareket Mekanizması
Backrest Controller

Teker (200 mm)
Castors (200 mm)

Ön Tekerler
Front Castors

Havluluk
Towelrack

El Kumandası
Hand Unit



SD

SD 11

NITROCARE MOTORLU HASTA MUAYENE MASASI

NITROCARE ELECTRICAL EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER



Motorlu yüksekli hareketi
El kumandası
Ameliyat Sonrası Sürekli Yatmak Zorunda olan Hastaların Hareketlerini Kolaylaştırmak İçin Tasarlanmıştır
Hastayı Ayağa Kaldırabilecek şekilde dik Konuma Getirebilme Özelliğine sahiptir.
Kademeli mekanizma ile ayarlanabilir baş kısım
Dik Konumdayken Yüksekliği Ayarlanabilir Yemek Tablası Mevcuttur.
Kemer İstenilen Konumda Sabitlenebilir
Sunı Deri Döşeme

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Adjustment With Electronic Motors
Hand Control Unit
It is designed to facilitate the movements of patients who have to lie down constantly after surgery
It has the ability to bring the patient to an upright position in a way that it can stand up.
Headrest Adjustment With Racket Mechanism
90° Vertical Position Speciality For Raising The Patient
360° Movable Metal Castors (125 Mm)
Height Adjustable Dinner Table Is Available When The Product Is Upright Position.
Practical Use
Antibacterial Artificial Leather Furnishing With Polyurethane Foam Mattress

EXPORT OPTIONS

Q125 Plastic Castors With Linear Brake System

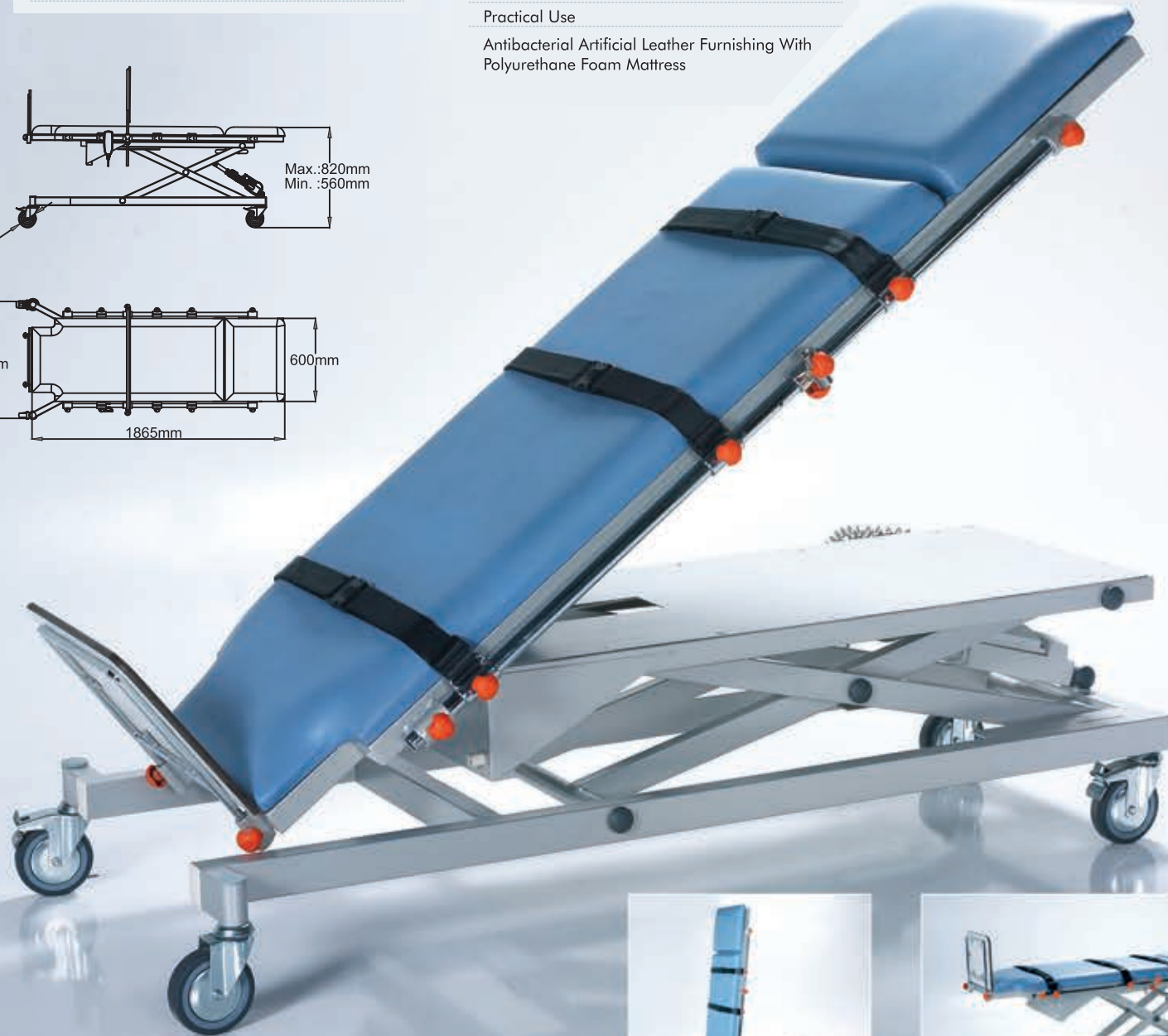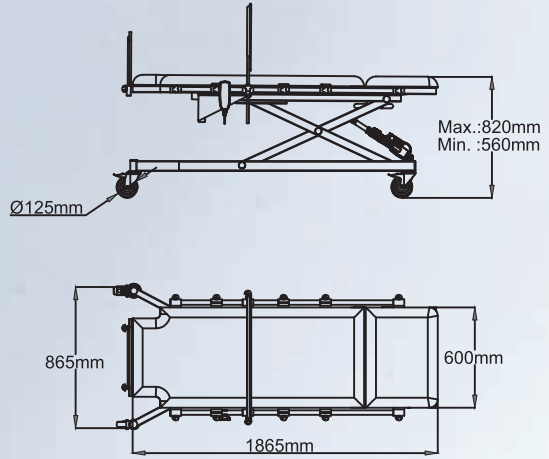

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

NITRO HB 6210

NITROCARE MOTORLU FİZİK TERAPİ YATAĞI

NITROCARE ELECTRICAL PHYSICAL THERAPY BED

TEKNİK ÖZELLİKLER


Yükseklik Ayarı Motor Yardımıyla Yapılabilmektedir.
Amortisör Yardımıyla Ayarlanabilir Sırt Kısım
El kumandası
Hastanın ve Terapistin Muayene Esnasında Birlikte Hareket Etmesini Sağlayarak Şekilde Dizayn Edilmiştir.
360 Derece Dönebilen Doğrusal Kilit ve Doğrusal Yönde Hareketi Sağlayan Teker
Üzeri Suni Deri veya Kumaş Döşeme

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Adjustment With Electronic Motors
Headrest Adjustment With Damper System
Hand Control Unit
It is Designed By Allowing The Patient And Therapist To Act Together During The Examination.
360° Movable Metal Castors (125 Mm)
Antibacterial Artificial Leather Furnishing With Polyurethane Foam Mattress

EXPORT OPTIONS

Q125 Plastic Castors With Linear Brake System

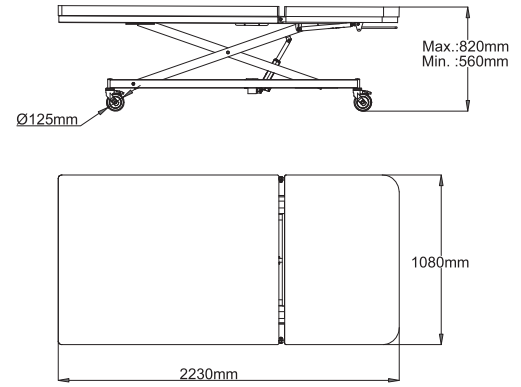

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

SD

SD 08

NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ HASTA YIKAMA SEDYESİ

NITROCARE MECHANICAL PATIENT WASHING STRETCHER

NITROCARE®



- 1-) Sedye Hareket Kontrol Pedalı
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 5-) Tahliye Hortumu
- 6-) Çarpma Korumucu Tamponlar

- 1-) Foot Control Pedal
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake System
- 4-) Rails Control (Open-Close)
- 5-) Drain Hose
- 6-) Plastic Protection Bumpers

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hasta Yıkama Sedyesi Hastaların Yataklarından Alınarak Sedye İçerisinde Yıkanması İçin Özel Olarak Tasarlanmıştır

Yükseklik hareketini hidrolik lift ile yapmaktadır

Trend hareketini amortisör yardımı ile yapmaktadır.

360 Derece Dönebilen Merkezi Kilitli Tekerler

Sedye Sessiz ve Sarsıntısız bir Şekilde Yükselip Alçalabilmektedir

Sedyeden Atık Su, Sedye Minderlerinde bulunan Tahliye Kanalında Drenaja Yönlendirilerek Gider Hortumu Sayesinde Tahliye Edilmektedir

Sedye İsteğe Bağlı Olarak Elektrostatik Toz Boyalı Malzemeden Üretilmektedir

Sedye şiltesi Çıkarılabilir ve temizlenebilir Özelliğindedir

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Adjustable With Hydraulics Piston

Trendelenburg Position

360° Movable Castors With Central Locking (125 mm)

Metal Part With Powder Coated.


Side Rail Can Be Opened And Closed Next To Both Sides Of The Stretcher

A Drain Siphon Is Available At The Head Section For Easy Remove The Water

Stretcher Hight And Down System Running Silent And Wosmooth

Mattres Of The Stretcher Can Be Detachable And Washable

Plastic Protection Bumpers

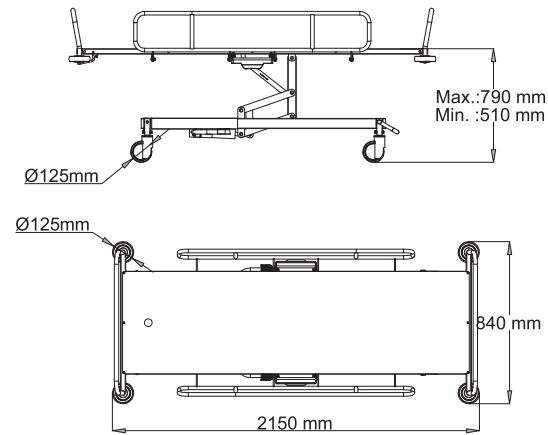

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



YÜKSEKLİK
HEIGHT

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG



Açılır Kapanır
Korkuluk Mekanizması
Folding Side Rails



Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers





NITROCARE

Hasta Taşıma Sandalyeleri

NITROCARE WHEEL CHAIRS



SD

NTS X5

NITROCARE HASTA TAŞIMA SANDALYESİ

NITROCARE WHEEL CHAIR



- 1-) Fren kolu
- 2-) 360 derece dönebilen tekerler (ön)
- 3-) Integral açılıp kapanabilir kollar
- 4-) Integral sırt ve oturma
- 5-) Açılıp kapanabilir ayaklık
- 6-) Serum askısı

- 1-) Brake Handle
- 2-) 360° Movable Front Castors
- 3-) Foldable Integral Arms
- 4-) Integral Seating And Backrest
- 5-) Foldable Footrest
- 6-) IV Pole




TEKNİK ÖZELLİKLER

İç İçe Geçen Etkileyici Tasarımı İle Yer Tasarrufu
Paslanmaz Çelik Malzemeden İmal Gövde Yapısı
Açılıp kapanabilen metal üzeri poliüretan kollar
Rahatlık İçin Integral malzemeden Üretilmiş Kolçak Oturma ve Sırt Bölümü
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
Ayak Koyma Yeri hareketli Yapıya Sahip iç kısmı metal iskeletli, Geriye Kaldırılabilen Özellikte
Depozito Seçeneği
360 Derece Kendi Etrafında Dönebilen Tekerlek Sistemi Sayesinde Hızlı Nakil İçin Rahat ve Kolay Kullanım


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Space Saving With Nested Design
Body Structure Made Of Stainless Steel Material
Armrest (Foldable),Seat and Back Section Made of Integral Material
Integral Seating And Backrest
Height Adjustable Iv Pole
Footrest; It has a movable structure, its inner part have metal skeleton for great substantiality and it can be lifted back. Footrest Hidable.
360° Movable Castors (Front : 125 mm Back : 200 Mm) Comfortable and Easy to Use for Fast Transport with Central Brake System

EXPORT OPTIONS

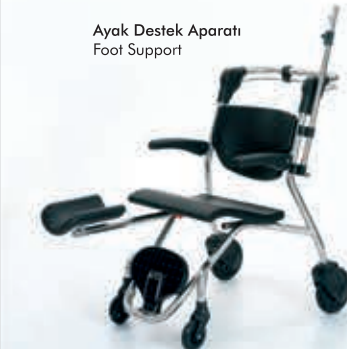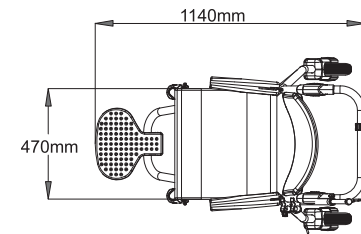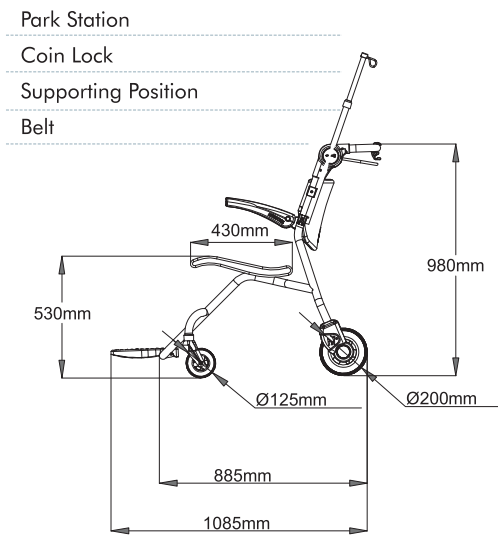Ayak Destek Aparatı
Foot Support

Açılır - Kapanır Kolçaklar / Folding Side Rails

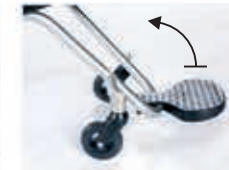Hareketli Yapıya Sahip Ayak Koyma Yeri
Hidable FootboardTekerlek Kilit Sistemi
Brake System

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Good Design Award
Winner 2013

SD

NTS X10

NITROCARE HASTA TAŞIMA SANDALYESİ

NITROCARE WHEEL CHAIR



- 1-) Fren kolu
- 2-) 360 derece dönebilen tekerler (ön)
- 3-) Integral açılıp kapanabilir kollar
- 4-) Integral sırt ve oturma
- 5-) Açılıp kapanabilir ayaklık
- 6-) Serum askısı

- 1-) Brake Handle
- 2-) 360° Movable Front Castors
- 3-) Foldable Integral Arms
- 4-) Integral Seating And Backrest
- 5-) Foldable Footrest
- 6-) IV Pole



TEKNİK ÖZELLİKLER



İç İçe Geçen Etkileyici Tasarımı İle Yer Tasarrufu
Açılıp kapanabilen metal üzeri poliüretan kollar
Antibakteriyel Toz boyalı isteğe göre farklı renklerde üretilen
Rahatlık İçin Integral malzemeden Üretilmiş Kolçak Oturma ve Sırt Bölümü
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı
Ayak Koyma Yeri hareketli Yapıya Sahip iç kısmı metal iskeletli, Geriye Kaldırılabilen Özellikte
Depozito Seçeneği
360 Derece Kendi Etrafında Dönebilen Tekerlek Sistemi Sayesinde Hızlı Nakil İçin Rahat ve Kolay Kullanım

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Space Saving With Nested Design
Body Structure Made Of Electrostatic Powder Coated Metal
Armrest (Foldable),Seat and Back Section Made of Integral Material
Integral Seating And Backrest
Height Adjustable Iv Pole
Footrest: It has a movable structure, its inner part have metal skeleton for great substantiality and it can be lifted back. Footrest Hidable.
360° Movable Castors (Front : 125 mm Back : 200 Mm) Comfortable and Easy to Use for Fast Transport with Central Brake System

EXPORT OPTIONS

Park Station
Coin Lock
Supporting Position
Belt

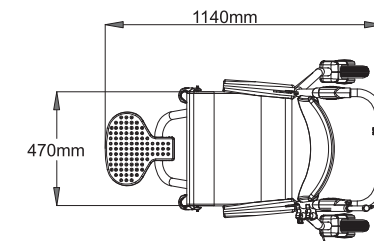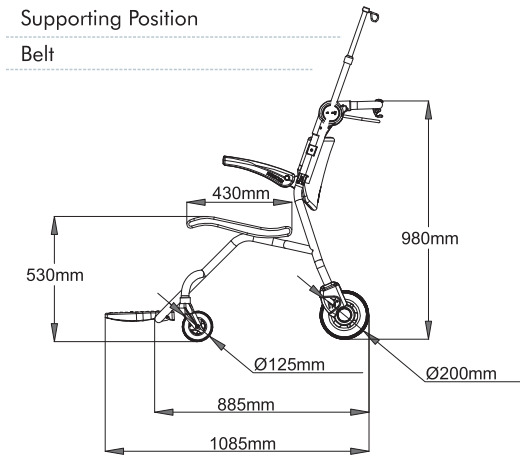

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Hareketli Yapıya Sahip Ayak Koyma Yeri
Hidable Footboard



Ayak Destek Aparatı
Foot Support

SD

NTS X6

NITROCARE HASTA TAŞIMA SANDALYESİ

NITROCARE MULTIFUNCTIONAL TRANSPORT CHAIR

NITROCARE

2013
IDA
INTERNATIONAL
DESIGN
AWARDS
WINNER

Intern
ational
Design
Awards



SD

NTS X6

NITROCARE HASTA TAŞIMA SANDALYESİ

NITROCARE MULTIFUNCTIONAL TRANSPORT CHAIR

NITROCARE

2013
IDA
INTERNATIONAL
DESIGN
AWARDS
WINNER
iF
INTERNATIONAL
DESIGN
AWARDS
WINNER

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ergonomik tasarımı ve hafif yapısı ile hasta taşımak ve kullanım kolaylığı sağlamak için tasarlanmıştır

Mükemmel manevra kabiliyeti

Kademeli olarak açılıp kapanabilen kolçaklar

Açılıp kapanabilen hasta hareketine uyumlu kompakt malzemeden yapılmış ayaklık

Arka iki tekerleği kilitleyebilen fren pedali

Yumuşaklık hissi veren, poliüretan malzemeden imal oturak kısmı

Poliüretan malzemeden yapılmış istenildiği zaman yatırılabilen sırt yapısı

İtme kolları

Sırt ve Ayak Kısmını Senkronize Eden El Tutamağı ile Yatay Pozisyon

Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Ayarlanabilir koltuk başlığı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designed to transport patients and provide easy use with ergonomic design and light structure

Excellent Maneuverability

Adjustable Arm Supports. Armrests With Gradual Operating And Closing

Hpl Footboard Compliant With Patient Movements

Central Brake System Lock Rear Two Castors
360° Movable Castors (Front : 300 mm Back : 125 Mm)

Polyurethane Seating And Backrest

Adjustable Backrest Made Of Polyurethane

Push Handles On The Back

The Hand Holder That Brings Back and Foot Part Synchronous Together Horizontal Position



Height Adjustable Iv Pole

Adjustable Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS

Overbed Table

Backrest Metal Basket

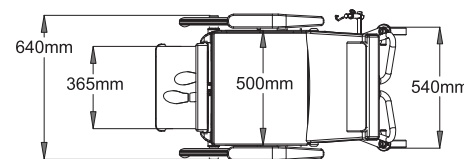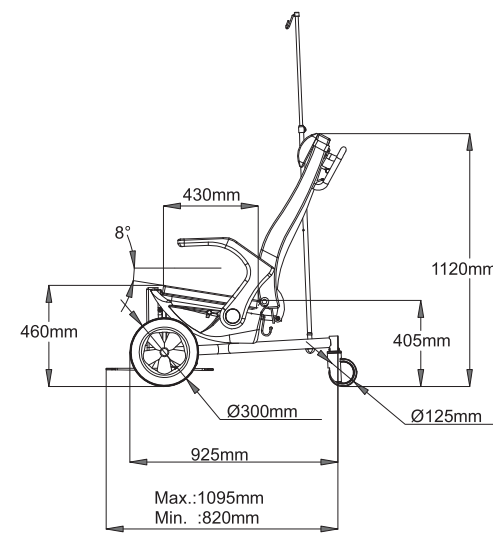

Ayak Koyma
Foot Panel



Hareketli Kolçaklar
Movable Arms



Ergonomik Başlık
Ergonomic Head Rest



Hasta Önü Yemek Masası
Overbed Table

SD

NTS X8

NİTROCORE YÜKSEKLİK AYARLI HASTA TAŞIMA SANDALYESİ

NITROCORE HEIGHT ADJUSTMENT MULTIFUNCTIONAL TRANSPORT CHAIR



- 1-) 360 derece dönebilen tekerler (arka)
- 2-) Poliüretan açılıp kapanabilir kollar
- 3-) Yükseklik kontrol pedalı
- 4-) Döşemeli sırt ayak ve oturum kısmı
- 5-) Merkezi fren
- 6-) Serum askısı
- 7-) Tutamak
- 8-) Yastık

- 1-) 360° Movable Back Castors
- 2-) Foldable Polyurethane Arms
- 3-) Height Adjustment Pedal
- 4-) Polyurethane Seating And Backrest
- 5-) Central Brake
- 6-) IV Pole
- 7-) Handle
- 8-) Headrest Pillow



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ergonomik tasarımı ve hafif yapısı ile hasta taşımak ve kullanım kolaylığı sağlamak için tasarlanmıştır

Mükemmel manevra kabiliyeti

Hidrolik lift yardımıyla yükseklik ve alçalma hareketlerini yapabilmektedir

Kademeli olarak açılıp kapanabilen kolçaklar

Arka iki tekerleği kilitleyebilen fren pedalı

Yumuşaklık hissi veren, poliüretan malzemeden imal oturak kısmı

Poliüretan malzemeden yapılmış istenildiği zaman yatırılabilen sırt yapısı

İtme kolları

Sırt ve Ayak Kısmını Senkronize Eden El Tutamağı ile Yatay Pozisyon

Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Ayarlanabilir koltuk başlığı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designed to transport patients and provide easy use with ergonomic design and light structure

Excellent Maneuverability

Height Adjustment With Hydraulic Lift

Adjustable Arm Supports. Armrests With Gradual Operating And Closing

Central Brake System Lock Rear Two Castors
360° Movable Castors (Front : 300 mm Back : 125 mm)

Polyurethane Seating And Backrest

Adjustable Backrest Made Of Polyurethane

Push Handles On The Back

The Hand Holder That Brings Back and Foot Part Synchronous Together Horizontal Position



Height Adjustable Iv Pole

Adjustable Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS

Overbed Table

Hpl Footboard

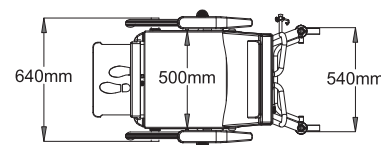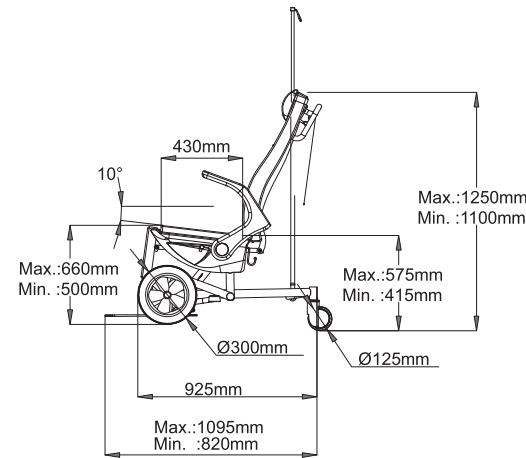

Merkezi Kilit Mekanizması
Central Lock System



Sırt Hareket Kolu
Backrest Adjustment Arm



Kademeli Kol Mekanizması
Armrest with Gradual Open and Close System



Ergonomik Başlık
Ergonomic Head Rest



SD

NTS X12

NİTROCARE BARIATRİK HASTA TAŞIMA SANDALYESİ

NITROCARE MULTIFUNCTIONAL BARIATRIC TRANSPORT CHAIR

NITROCARE



- 1-) 360 derece dönebilen tekerler (arka)
- 2-) Poliüretan açılıp kapanabilir kollar
- 3-) Kompakt ayaklık
- 4-) Döşemeli sırt ayak ve oturum kısmı
- 5-) Merkezi fren
- 6-) Serum askısı
- 7-) Tutamak
- 8-) Yastık

- 1-) 360° Movable Back Castors
- 2-) Foldable Polyurethane Arms
- 3-) Hpl Footboard
- 4-) Polyurethane Seating And Backrest
- 5-) Central Brake
- 6-) IV Pole
- 7-) Handle
- 8-) Headrest Pillow

« EXTRA LARGE »



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Geniş yapısı ile Bariatrik kullanım için uygundur
- Ergonomik tasarımı ve hafif yapısı ile hasta taşımak ve kullanım kolaylığı sağlamak için tasarlanmıştır
- Mükemmel manevra kabiliyeti
- Kademeli olarak açılıp kapanabilen kolçaklar
- Açılıp kapanabilen hasta hareketine uyumlu kompakt malzemeden yapılmış ayaklık
- Arka iki tekerleği kilitleyebilen fren pedalı
- Yumuşaklık hissi veren, poliüretan malzemeden imal oturak kısmı
- Poliüretan malzemeden yapılmış istenildiği zaman yatırılabilen sırt yapısı
- İtme kolları
- Sırt ve Ayak Kısmını Senkronize Eden El Tutamağı ile Yatay Pozisyon
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Ayarlanabilir koltuk başlığı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Suitable for Bariatric use with its wide structure.
- Designed to transport patients and provide easy use with ergonomic design and light structure
- Excellent Maneuverability
- Adjustable Arm Supports. Armrests With Gradual Operating And Closing
- Hpl Footboard Compliant With Patient Movements
- Central Brake System Lock Rear Two Castors
- 360° Movable Castors (Front : 300 mm Back : 125 Mm)
- Polyurethane Seating And Backrest
- Adjustable Backrest Made Of Polyurethane
- Push Handles On The Back
- The Hand Holder That Brings Back and Foot Part Synchronous Together Horizontal Position
- Height Adjustable Iv Pole
- Adjustable Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS

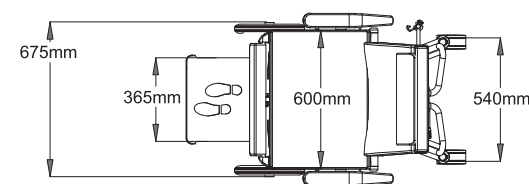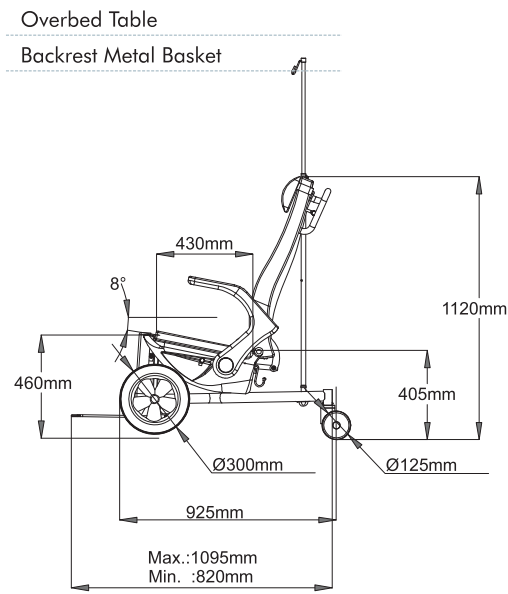

Hareketli Sırt Yapısı
Adjustable Back Rest



Gizlenebilir, Hasta Hareketlerine Duyarlı Ayaklık
Hpl Footboard Compliant With Patient Movements



Ergonomik Başlık
Ergonomic Head Rest



SD

NTS X7

NİTROKARE KAN ALMA KOLTUĞU

NITROKARE MULTIFUNCTIONAL BLOOD DONOR CHAIR

NITROKARE



SD

NTS X7

NİTROCARE KAN ALMA KOLTUĞU

NITROCARE MULTIFUNCTIONAL BLOOD DONOR CHAIR

NITROCARE



- 1-) 360 derece dönebilen tekerler (arka)
- 2-) Poliüretan açılıp kapanabilir kollar
- 3-) Kompakt ayaklık
- 4-) Döşemeli sırt ayak ve oturum kısmı
- 5-) Merkezi fren
- 6-) Sırt yatırma mandalı
- 7-) Serum askısı
- 8-) Tutamak
- 9-) Yastık

- 1-) 360° Movable Back Castors
- 2-) Foldable Polyurethane Arms
- 3-) Hpl Footboard
- 4-) Polyurethane Seating And Backrest
- 5-) Central Brake
- 6-) Adjustable Backrest Handle
- 7-) IV Pole
- 8-) Handle
- 9-) Headrest Pillow

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ergonomik tasarımı ve hafif yapısı ile hasta taşımak ve kullanım kolaylığı sağlamak için tasarlanmıştır

Mükemmel manevra kabiliyeti

Ayarlanabilir kol destekleri,

Kan alma için kolçaklar

Gizlenebilir hasta hareketlerine uyumlu kompakt malzemeden imal ayaklık

Arka iki tekerleği kilitleyebilen fren pedalı

Yumuşaklık hissi veren, poliüretan malzemeden imal oturak kısmı

Poliüretan malzemeden yapılmış istenildiği zaman yatırılabilen sırt yapısı

İtme kolları

Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Ayarlanabilir Koltuk Başlığı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designed to transport patients and provide easy use with ergonomic design and light structure

Excellent Maneuverability

Adjustable Arm Supports. Armrests With Gradual Operating And Closing

Armrests For Blood Donor

Hpl Footboard Compliant With Patient Movements

Central Brake System Lock Rear Two Castors 360° Movable Castors (Front : 300 mm Back : 125 Mm)

Polyurethane Seating And Backrest

Adjustable Backrest Made Of Polyurethane

Push Handles On The Back


The Hand Holder That Brings Back and Foot Part Synchronous Together Horizontal Position

Height Adjustable Iv Pole

Adjustable Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS

Overbed Table

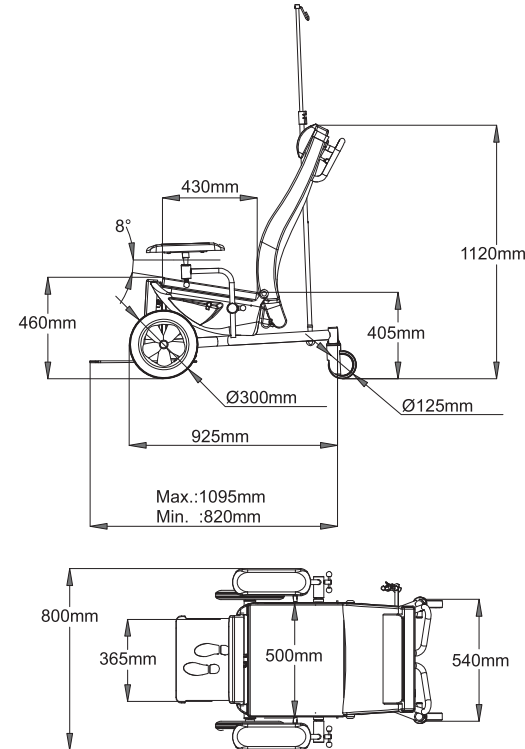

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Gizlenebilir, Hasta Hareketlerine Duyarlı Ayaklık
Hpl Footboard Compliant With Patient Movements



Ergonomik Başlık
Ergonomic Head Rest



SD

NTS X11

NİTROCARE İKİ MOTORLU KAN ALMA KOLTUĞU

NITROCARE MULTIFUNCTIONAL ELECTRICAL BLOOD DONOR CHAIR



- 1-) El kumandası
- 2-) 360° derece dönebilen tekerler (arka)
- 3-) Poliüretan, açısı ve yüksekliği ayarlanabilir kollar
- 4-) Döşemeli sırt ayak ve oturma kısmı
- 5-) Merkezi fren
- 6-) Serum askısı
- 7-) Tutamak
- 8-) Yastık

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) 360° Movable Back Castors
- 3-) Foldable Polyurethane Arms
- 4-) Polyurethane Seating And Backrest
- 5-) Central Brake
- 6-) IV Pole
- 7-) Handle
- 8-) Headrest Pillow

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ergonomik tasarımı, kullanım kolaylığı ve hafif yapısı ile hasta taşımak için tasarlanmıştır

Motor yardımı ile sırt, diz ve trendelenburg hareketlerini yapabilmektedir

Mükemmel manevra kabiliyeti

X11, Ergonomik tasarımı, kullanım kolaylığı ve hafif yapısı ile kan alma işlemlerinin vazgeçilmez platformudur

Ayarlanabilir kol destekleri,

Arka iki tekerleği kilitleyebilen plastik ve metal malzemeden oluşan merkezi fren pedalı

Yumuşaklık hissi veren, poliüretan malzemeden imal oturma kısmı

Poliüretan malzemeden yapılmış istenildiği zaman yatırılabilen sırt yapısı

İtme kolları

Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Ayarlanabilir koltuk başlığı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ease Of Use, Lightweight Construction and Ergonomic. Comfortable and Easy to Use for Fast Transport.

2 Motors - 1. Motor : Back And Foot Synchronous Adjustment. 2 . Motor : Trendelenburg Position

Excellent Maneuverability

Ease Of Use, Lightweight Construction and Ergonomic - Original Design

Adjustable Arm Supports. Armrests With Gradual Operating And Closing

Armrests For Blood Donor

Central Brake System Lock Rear Two Castors 360° Movable Castors (Front : 300 mm Back : 125 Mm)

Polyurethane Seating And Backrest



Adjustable Backrest Made Of Polyurethane

Push Handles On The Back

Height Adjustable Iv Pole

Adjustable Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS

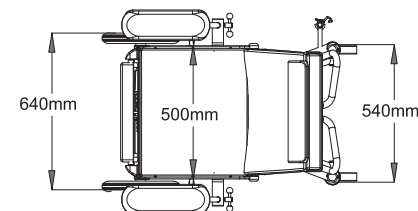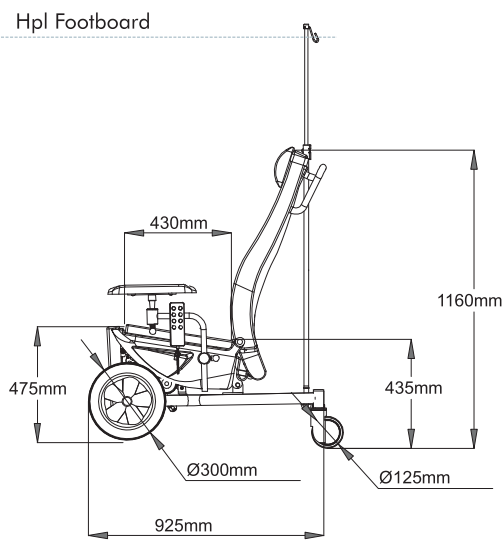

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Ø300 mm Ön Tekerlekler
Ø300 mm Front Wheel



Ayarlanabilir Kol Destekleri
Adjustable Armrests



Ergonomik Başlık
Ergonomic Head Rest





NITROCARE

Jinekoloji ve Muayene Masaları

GYNAECOLOGICAL EXAMINATION COUCH



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Merkezi Fren Sistemi
- 5-) Ayarlanabilir Baldır Destek Aparatı
- 6-) Paslanmaz Atık Küveti
- 7-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 8-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 9-) Açı Ölçer
- 10-) Kompak sırt ve oturma yüzeyi
- 11-) İdrar Torbası Askılığı
- 12-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 13-) Serum askılığı
- 14-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical CPR
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Central Brake System
- 5-) Adjustable Leg Support
- 6-) Stainless Steel Removable Basin
- 7-) Side Rail Open / Close
- 8-) Removable Head And Foot Board
- 9-) Angle Gauge
- 10-) Full HPL Bed Surfaces
- 11-) Urine Bag Holders
- 12-) Protection Bumpers
- 13-) Height Adjustable Iv Pole
- 14-) Accessories Slot



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Ürün Doğum Pozisyonundan, alt kısımdaki sürgülü sistem sayesinde yatak pozisyon getirilebilmektedir. Bu sayede hasta ürün değiştirmeden doğuma girebilir.

Tek modelde iki ürün kombinasyonu olmaktadır.

Jmm 02 modeli Doğum, Üroloji Operasyonları ve Hastanın Tedavi Sonrası Dinlenebileceği şekilde yatak pozisyonuna gelmektedir.

uluslararası Standartlara Sahip Yüksek ağırlığa Karşı Dayanıklı ABS Korkuluklar mevcut

Hastanın Tutabilmesi için korkuluk önlerinde mevcut metal üzeri Poliüretan kaplamalı kollar

İntegral Malzemeden İmal, Ayarlanabilir Ayak / Baldır Destek Aparatı

El Kumandası

Batarya / Mekanik CPR

Yatak Boyu Uzatma

Kompakt Yatma ve Oturma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Teleskoopik Raylı Gizlenebilir Paslanmaz Atık Küveti

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Antibakteriyel Şilte

Çarpma Korumucu Tamponlar / Aksesuar Yuvaları

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Height, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

From the Product Delivery Position, the bed position can be reached with the sliding system at the bottom. With this systems, the patient can go the delivery without changing the product.

Two products are combined in one product.

The Jmm 02 model comes to the bed position so that the patient can rest after Birth, Urology Operations and After Treatment.

Side Rails have High-weight-resistant ABS with International Standards.

Polyurethane coated metal arms for patient holding.

Made Of Integral Adjustable Leg Support

Bed Extension / Hand Control Unit

Battery / Mechanical CPR / Full HPL Bed Surfaces

360° Movable Castors With Central Brake Systems (125 mm)

1 Antistatic Castor

Stainless Steel Removable Basin

Height Adjustable Iv Pole

Antibacterial And Water Proof Mattress

Plastic Protection Bumpers / Accessories Slot

DECORS


1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

EXPORT OPTIONS

Double Cators Q 150

Stainless Steel Accessory Trolley

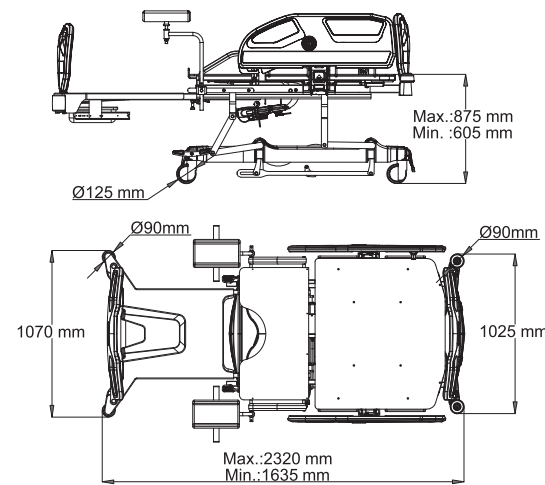

SIRT HAREKETİ
BACKREST

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

Paslanmaz Atık Toplama Küveti
Stainless Steel, Removable Basin



Merkezi Fren Sistemi
Central Brake System



Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers



Açı Ölçer
Angle Gauge



Eva

JMM 04

NİTROCARE ÜÇ MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE KOLTUĞU

NITROCARE THREE MOTORS GYNAECOLOGICAL EXAMINATION CHAIR



- 1-) El Kumandası
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Doğrusal fren sistemi
- 4-) Açılabilir hareket edebilen ayak dayama
- 5-) Paslanmaz Atık Küveti

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Linear Brake System
- 4-) Adjustable Foot Support
- 5-) Stainless Steel Removable Basin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Muayene Koltuğu Sırt , Yükseklik, Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir.

Jinekoloji, Muayene, Üroloji ve Ufak Cerrahi Operasyonlar için Tasarlanmıştır.

Poliüretan Sünger Üzeri Suni Deri Kaplamalı Oturma ve Yatma Yüzeyi Mevcuttur.

Açılabilir hareket edebilen ayak dayama

El Kumandası.

360 Derece dönebilen tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Teleskobik Raylı Gizlenebilir Paslanmaz Atık Küveti

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Height, Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors.

Designed for Gynecology, Examination, Urology and Small Surgical Operations.

Seating and Lying Surfaces Covered with Artificial Leather on Polyurethane Foam.

Polyurethane Coated Metal Arms For Patient Holding.


Adjustable Foot Support

Hand Control Unit

360° Movable Double Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

1 Antistatic Castor

Stainless Steel Removable Basin

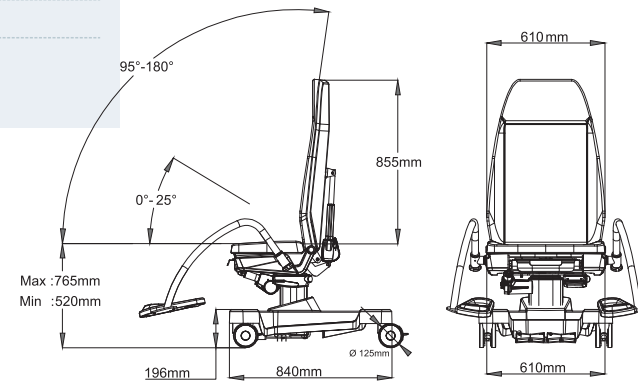

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

Ayak Dayama
Adjustable Foot Support



Atık Toplama Küveti
Stainless Steel Removable Basin



360 Derece Dönebilen Tekerler
360° Movable Castors



JMM 03

NİTROKARE ÜÇ MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI

NITROCARE THREE MOTORS GYNAECOLOGICAL EXAMINATION COUCH

NITROCARE®



JMM 03

NİTROCORE ÜÇ MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI

NITROCORE THREE MOTORS GYNAECOLOGICAL EXAMINATION COUCH



- 1-) El Kumandası
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Ayarlanabilir Baldır Destek Aparatı
- 5-) Paslanmaz Atık Küveti
- 6-) Havluluk

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake System
- 4-) Adjustable Leg Support
- 5-) Stainless Steel Removable Basin
- 6-) Towel Rack

TEKNİK ÖZELLİKLER

Muayene Masası Sırt , Yükseklik, Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Jinekoloji, Muayene, Üroloji ve Ufak Cerrahi Operasyonlar için Tasarlanmıştır

Poliüretan Sünger Üzeri Suni Deri Kaplamalı Oturma ve Yatma Yüzeyi Mevcuttur

Hastanın Tutabilmesi metal üzeri Poliüretan kaplamalı kollar

İntegral Malzemeden İmal, Ayarlanabilir Ayak / Baldır Destek Aparatı

Ürün Low- Bed Özelliğine Sahiptir.

El Kumandası

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Teleskoopik Raylı Gizlenebilir Paslanmaz Atık Küveti

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Height, Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Designed for Gynecology, Examination, Urology and Small Surgical Operations.

Seating and Lying Surfaces Covered with Artificial Leather on Polyurethane Foam.

Polyurethane coated metal arms for patient holding.

Made Of Integral Adjustable Leg Support


Low Bed

Hand Control Unit

360° Movable Castors With Central Brake Systems (125 mm)

1 Antistatic Castor

Stainless Steel Removable Basin

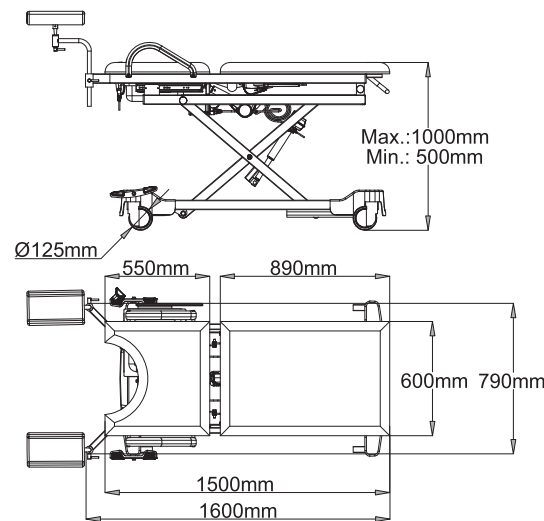

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TRENDELEBURG
TRENDELEBURG



Atık Toplama Küveti
Stainless Steel, Removable Basin




JMM 01

NİTROCARE İKİ MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI

NITROCARE TWO MOTORS GYNAECOLOGICAL EXAMINATION COUCH

NITROCARE

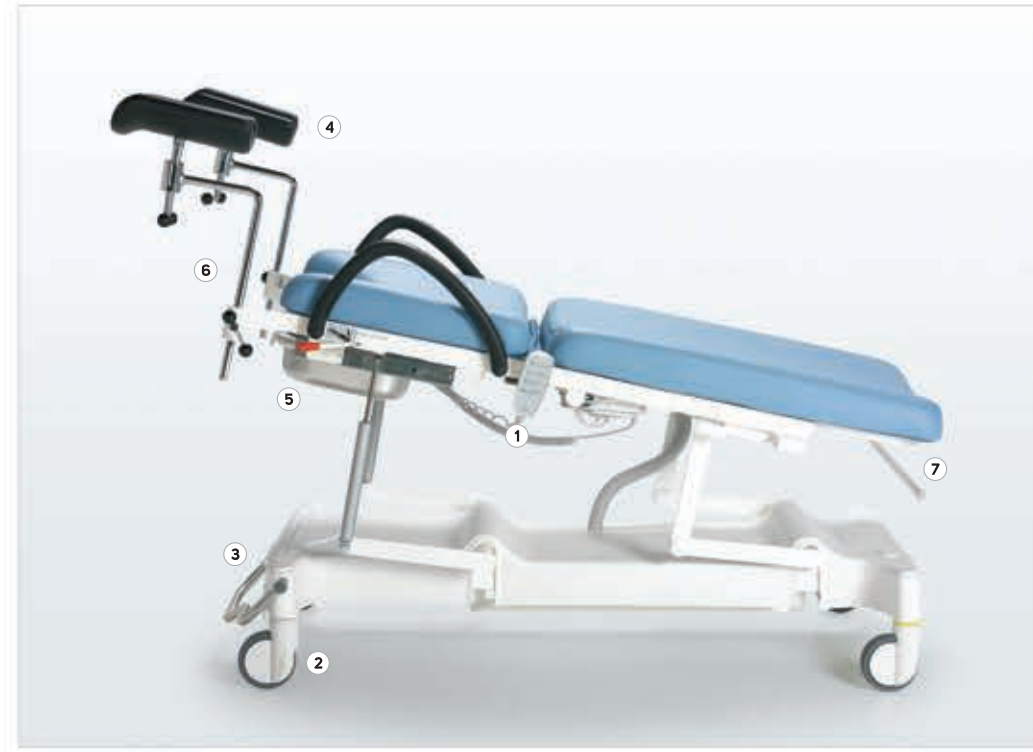

- 1-) El Kumandası
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Ayarlanabilir Baldır Destek Aparatı
- 5-) Trendelenburg Mandalı
- 6-) Paslanmaz Atık Küveti
- 7-) Havluluk

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake System
- 4-) Adjustable Leg Support
- 5-) Mechanical Trendelenburg
- 6-) Stainless Steel Removable Basin
- 7-) Towel Rack

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt ve Yükseklik, Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Jinekoloji, Muayene, Üroloji ve Ufak Cerrahi Operasyonlar için Tasarlanmıştır

Poliüretan Sünger Üzeri Suni Deri Kaplamalı Oturma ve Yatma Yüzeyi Mevcuttur

Hastanın Tutabilmesi için metal üzeri Poliüretan kaplamalı kollar

Amortisörlü Mekanik Mekanizma ile Trendelenburg Hareketi

İntegral Malzemeden İmal, Ayarlanabilir Ayak / Baldır Destek Aparatı

El Kumandası

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Teleskobik Raylı Gizlenebilir Paslanmaz Atık Küveti

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest And Height Adjustment With Electronic Motors

Designed for Gynecology, Examination, Urology and Small Surgical Operations.

Seating and Lying Surfaces Covered with Artificial Leather on Polyurethane Foam.

Polyurethane coated metal arms for patient holding.

Mechanical Trendelenburg With Help Of The Shock Absorber


Made Of Integral Adjustable Leg Support

Hand Control Unit

360° Movable Castors With Central Brake Systems (125 Mm)

1 Antistatic Castor

Stainless Steel Removable Basin

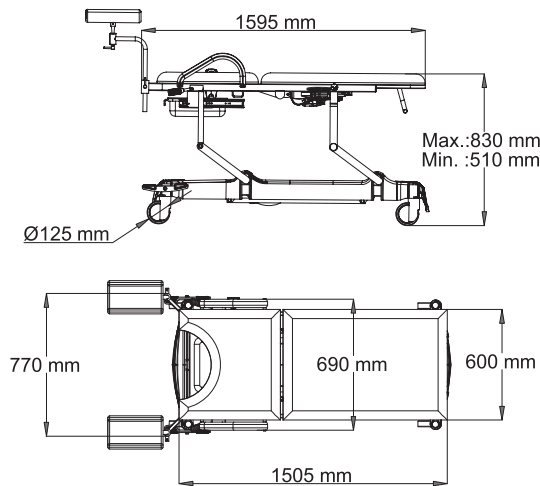

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TRENDELBURG
TRENDELBURG



Paslanmaz Atık Toplama Küveti
Stainless Steel, Removable Basin



Ayarlanabilir Baldır
Destek Aparatı
Adjustable
Leg Stirrups

Kağıt Havlu Aparatı
Paper Towel Kit





NITROCARE

Acil Müdahale ve İlaç Arabaları

MEDICINE AND TREATMENT TROLLEY

NITROCARE EMERGENCY TROLLEY

Kompakt ve Alüminyum Malzemeden İmal
Gövde Yapısı

Ön Çekmece yüzeyleri 8mm Pleksi
Malzemeden İmal

360 Derece Dönebilen 2 Si Kilitli 4 Adet 125 lik
Tekler

İki Teker Üzerinde Mandal Şeklinde Ayak İle
Kilitlenebilen Fren Sistemi Mevcuttur.

Çekmece Üzerinde Alüminyum Malzemeden
İmal Kulplar Bulunmaktadır.

İsteğe Bağlı Olarak Çekmeceler Ayraçlarla 3-
4-5-6-7-8-9-12 Bölüme Ayrılabilir

Bütün Gözler Tek Kilit Mekanizması İle
Kilitlenebilir.

MDF veABS Malzemeden İmal Üst Tabla

Alt Tabla Metal İskelet İle Desteklenmiş, 8 Mm
Compact Malzemeden İmal

Kompakt Malzemeden Üretilmiş Hareketli
Defibilatör Tablası

Resüstasyon Tahtası

Çarpmaları Önlemek Amaçlı Koruyucu
Tampolar

Yüksekliği Ayarlanabilir Serumluk Askısı

Sabitlenebilir Oksijen Tüp Yuvası

Body Structure Made Of HPL (Compact) and Aluminum Material

Front Drawer Surfaces Are Made Of 8 mm Plexy Material

360° Movable Castors (125 mm)

There is A Brake System On Two Wheels That Can Be Locked By Legs

There Are Handles Made Of Aluminium On The Drawers.

Upon request, the drawers can be divided into 3-4-5-6-7-8-9-12 sections with dividers.

All Drawers Can Be Locked At The Same Time With The Locking Mechanism

Top Table Made Of ABS and MDF

The Bottom Plate Is Supported With Metal Frame, Made Of 8 MM HPL (Compact) Material

Movable Defibrillator Table Made Of HPL

Resuscitation Board


Protection Bumpers

Height Adjustable Iv Pole

Oxygen Cylinder Holder



Elektronik kilit / Opsiyonlu
Electronic lock / Options

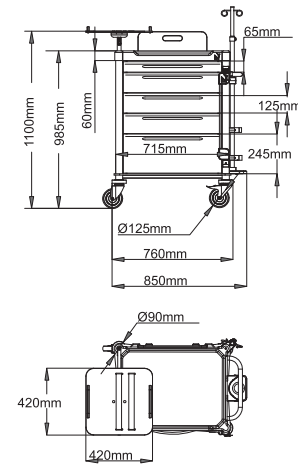

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

NITROCARE MEDICINE AND TREATMENT TROLLEY

Kompakt ve Alüminyum Malzemeden İmal
Gövde Yapısı

Ön Çekmece yüzeyleri 8mm Pleksi Malzemeden
İmal

360 Derece Dönebilen 2 Si Kilitli 4 Adet 125 lik
Teker

İki Teker Üzerinde Mandal Şeklinde Ayak İle
Kilitlenebilen Fren Sistemi Mevcuttur.

Çekmece Üzerinde Alüminyum Malzemeden İmal
Kulplar Bulunmaktadır.

İsteğe Bağlı Olarak Çekmeceler Ayraçlarla 3-4-
5-6-7-8-9-12 Bölüme Ayrılabilir

İlaç ve Tedavi Arabası Üst Kısımında ilk sırada 6
adet ikinci sırada beş adet çikanabilir ilaç
saklama Kutusu Mevcuttur

Yan tarafından İlaç Şişesi saklama Rafı
Bulunmaktadır

Bütün Gözler Kilit Mekanizması İle Kilitlenebilir.

MDF ve ABS Malzemeden İmal Üst Tabla

Alt Tabla Metal İskelet İle Desteklenmiş, 8 Mm
Compact Malzemeden İmal

Çarpmaları Önlemek Amaçlı Koruyucu Tamponlar

Çöp Kovası

Body Structure Made Of HPL (Compact) and Aluminum Material

Front Drawer Surfaces Are Made Of 8 mm Plexy Material

360° Movable Castors (125 Mm)

There is A Brake System On Two Wheels That Can Be Locked By Legs

There Are Handles Made Of Aliminium On The Drawers.

Upon request, the drawers can be divided into 3-4-5-6-7-8-9-12 sections with dividers.

There are 6 removable medicine storage boxes in the first row and 6 in the second row in the upper part of the Medicine and Treatment Trolley.

Medicine Bottle Storage Shelf On The Side.



All Drawers Can Be Locked At The Same Time With The Locking Mechanism

Top Table Made Of ABS and MDF

The Bottom Plate Is Supported With Metal Frame, Made Of 8 mm HPL (Compact) Material

Protection Bumpers

Plastic Dustbin

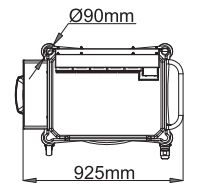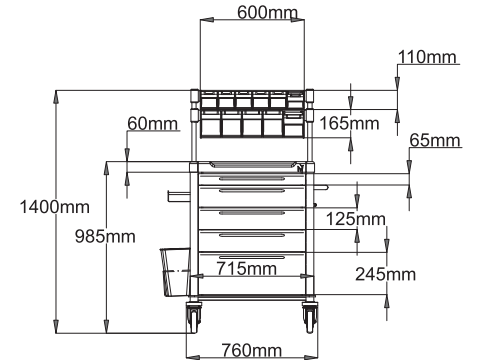

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

NTHM 114

NİTROKARE ANESTEZİ ARABASI

NITROCARE ANAESTHESIA TROLLEY

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kompakt ve Alüminyum Malzemeden İmal Gövde Yapısı

Ön Çekmece yüzeyleri 8mm Pleksi Malzemeden İmal

360 Derece Dönebilen 2 Si Kilitli 4 Adet 125 İlik Teker

İki Teker Üzerinde Mandal Şeklinde Ayak İle Kilitlenebilen Fren Sistemi Mevcuttur.

Çekmece Üzerinde Alüminyum Malzemeden İmal Kulplar Bulunmaktadır.

İsteğe Bağlı Olarak Üst Çekme Ayraçlarla 3-4-5-6-7-8-9-12 Bölüme Ayrılabilir

İlaç ve Tedavi Arabası Üst Kısımında İlk sırada 6 adet ikinci sırada beş adet çıkarılabilir ilaç saklama Kutusu Mevcuttur

Dolap İçerisinde MDF ile Bölünmüş İki Kapaklı Dolap Mevcuttur

MDF veABS Malzemeden İmal Üst Tabla

Alt Tabla Metal İskelet İle Desteklenmiş, 8 Mm Compact Malzemeden İmal

Çarpmaları Önlemek Amaçlı Koruyucu Tamponlar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Body Structure Made Of HPL (Compact) and Aluminum Material

Front Drawer Surfaces Are Made Of 8 mm Plexy Material

360° Movable Castors (125 Mm)

There is A Brake System On Two Wheels That Can Be Locked By Legs

There Are Handles Made Of Aliminium On The Drawers.

Upon Request, the Upper Drawers Can be Divided into 3-4-5-6-7-8-9-12 Sections With Dividers.



There are 6 removable medicine storage boxes in the first row and 6 in the second row in the upper part of the Medicine and Treatment Trolley.

Inside the cupboard, there is a two-door cabinet divided by MDF.

Top Table Made Of ABS and MDF

The Bottom Plate Is Supported With Metal Frame, Made Of 8 MM HPL (Compact) Material

Protection Bumpers

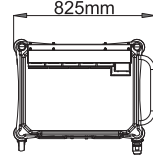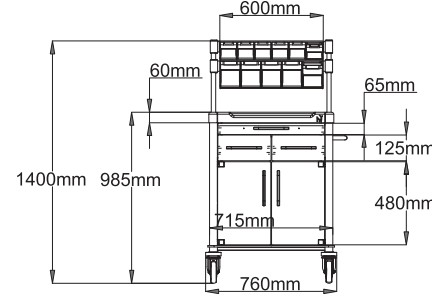

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kompakt ve Alüminyum Malzemeden İmal Gövde Yapısı

Ön Çekmece yüzeyleri 8mm Pleksi Malzemeden İmal

360 Derece Dönebilen 2 Si Kilitli 4 Adet 125 İlik Teker

İki Teker Üzerinde Mandal Şeklinde Ayak İle Kilitlenebilen Fren Sistemi Mevcuttur.

Çekmece Üzerinde Alüminyum Malzemeden İmal Kulplar Bulunmaktadır.

İlk çekmece Paslanmaz Malzemeden İmaldır Çalışma Tezgahı olarak Kullanılmaktadır

2. ve 5. Çekmecelerde 7 adet , 3 ve 4.

çekmecelerde 5 adet ilaç Saklama Aparatı vardır, bu aparatların Herbir bölümü 4 Göze ayrılmaktadır

İlaç ve Tedavi Arabası Üst Kısımında ilk sırada 6 adet ikinci sırada beş adet çıkarılabilir ilaç saklama Kutusu Mevcuttur

İlaç Arabası Arka Kısımında 3 sıra Halinde belli açılarda açılabilen Toplamda 15 Adet adet ilaç Saklama Kutusu Vardır.

6. Çekmece Ayraçlar ile Bölümlere ayrılabilir Bütün Gözler Kilit Mekanizması İle Kilitlenebilir.

MDF veABS Malzemeden İmal Üst Tabla

Alt Tabla Metal İskelet İle Desteklenmiş, 8 Mm Compact Malzemeden İmal

Çarpmaları Önlemek Amaçlı Koruyucu Tamponlar Çöp Kovası

NTHM 115

NİTROKARE İLAÇ VE TEDAVİ ARABASI

NITROCARE MEDICINE AND TREATMENT TROLLEY

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Body Structure Made Of HPL (Compact) and Aluminum Material

Front Drawer Surfaces Are Made Of 8 mm Plexy Material

360° Movable Castors (125 Mm)

There is A Brake System On Two Wheels That Can Be Locked By Legs

There Are Handles Made Of Aliminium On The Drawers.

The first drawer is made of Stainless Steel. It is for as a work bench.

There are 7 Medicine Storage Apparatus in The 2nd and 5th Drawers, and 5 Medicine Storage Devices in The 3rd and 4th Drawers. Each Part of These Apparatus is Divided into 4 Sections.

There are 6 removable medicine storage boxes in the first row and 5 in the second row in the upper part of the Medicine and Treatment Trolley.

There are 15 Medicine Storage Boxes on the Back of the Medicine Cart that can be opened in 3 rows at certain angles.

6. Drawer can be divided into sections with Dividers.



All Drawers Can Be Locked At The Same Time With The Locking Mechanism

Top Table Made Of ABS and MDF

The Bottom Plate Is Supported With Metal Frame, Made Of 8 MM HPL (Compact) Material

Protection Bumpers

Plastic Dustbin

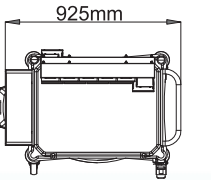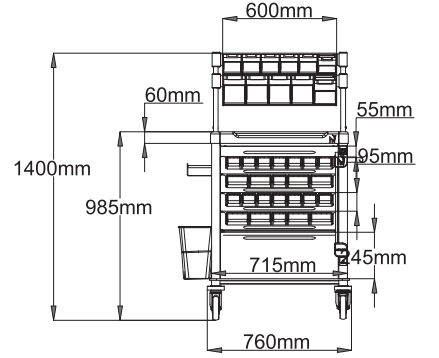

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

NTHM 116

NİTROCARE İLAÇ DEPOLAMA ARABASI

NITROCARE MEDICINE STORAGE TROLLEY



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kompakt ve Alüminyum Malzemeden İmal Gövde Yapısı

Ön Çekmece yüzeyleri 8mm Pleksi Malzemeden İmal

360 Derece Dönebilen 2 Si Kilitli 4 Adet Teker

İki Teker Üzerinde Mandal Şeklinde Ayak İle Kilitlenebilen Fren Sistemi Mevcuttur.

Çekmece Üzerinde Alüminyum Malzemeden İmal Kulplar Bulunmaktadır.

9 Çekmece vardır, İlk 7 Çekmece 3-4-5-6-7-8-9-12 Bölüme Ayrılabilir, 8 ve 9. Çekmeceler 4 Bölümdür.

İsteğe Bağlı Olara 100-200 mm Yükseklikteki Çekmeceler Ayraçlarla 3-4-5-6-7-8-9-12 Bölüme Ayrılabilir

Bütün Gözler Kilit Mekanizması İle Kilitlenebilir.

MDF ve ABS Malzemeden İmal Üst Tabla

Alt Tabla Metal İskelet İle Desteklenmiş, 8 Mm Compact Malzemeden İmal

Çarpmaları Önlemek Amaçlı Korumucu Tamponlar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Body Structure Made Of HPL (Compact) and Aluminum Material

Front Drawer Surfaces Are Made Of 8 mm Plexy Material

360° Movable Castors (100 Mm Double)

There is A Brake System On Two Wheels That Can Be Locked By Legs

There Are Handles Made Of Aliminium On The Drawers.

There are 9 Drawers, First 7 Drawers can be divided into 3-4-5-6-7-8-9-12 Sections, 8 and 9 Drawers are 4 Sections.



Upon request, 100-200 mm height drawers can be divided into 3-4-5-6-7-8-9-12 sections with separators.

All Drawers Can Be Locked At The Same Time With The Locking Mechanism

Top Table Made Of ABS and MDF

The Bottom Plate Is Supported With Metal Frame, Made Of 8 MM HPL (Compact) Material

Protection Bumpers

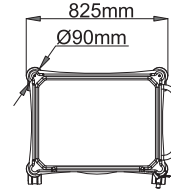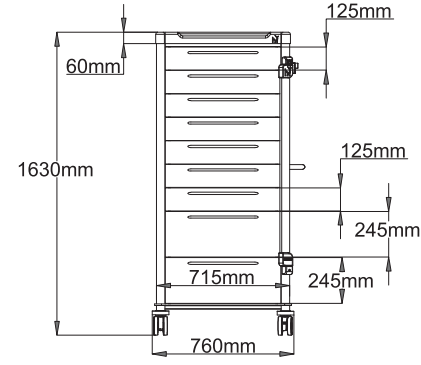

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

NTHM 117

NİTROCARE İLAÇ DEPOLAMA ARABASI

NITROCARE MEDICINE STORAGE TROLLEY




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kompakt ve Alüminyum Malzemeden İmal Gövde Yapısı
- Ön Çekmece yüzeyleri Yarı Saydam 8mm Pleksi Malzemeden İmal
- 360 Derece Dönebilen 2 Si Kilitli 4 Adet Teker
- İki Teker Üzerinde Mandal Şeklinde Ayak İle Kilitlenebilen Fren Sistemi Mevcuttur.
- Çekmece Üzerinde Alüminyum Malzemeden İmal Kulplar Bulunmaktadır.
- 7 Adet Çekmece Mevcuttur İsteğe Bağlı Artırılabilir Veya Azaltılabilir.
- İsteğe Bağlı Olarak Çekmeceler Ayraçlarla 3-4-5-6-7-8-9-12 Bölüme Ayrılabilir
- MDF ve ABS Malzemeden İmal Üst Tabla
- Altı Tabla Metal İskelet İle Desteklenmiş, 8 Mm Compact Malzemeden İmal
- Çarpmaları Önlemek Amaçlı Korumayı Tamponlar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Body Structure Made Of HPL (Compact) and Aluminum Material
- Front Drawer Surfaces Are Made Of 8 mm Translucent Plexy Material
- 360° Movable Castors (100 Mm Double)
- There is A Brake System On Two Wheels That Can Be Locked By Legs
- There Are Handles Made Of Aliminium On The Drawers.
- There Are 7 Drewers And Can Be Increased Or Reduced Optionally
- Upon request, the drawers can be divided into 3-4-5-6-7-8-9-12 sections with dividers.
- Top Table Made Of ABS and MDF
- The Bottom Plate Is Supported With Metal Frame, Made Of 8 MM HPL (Compact) Material
- Protection Bumpers

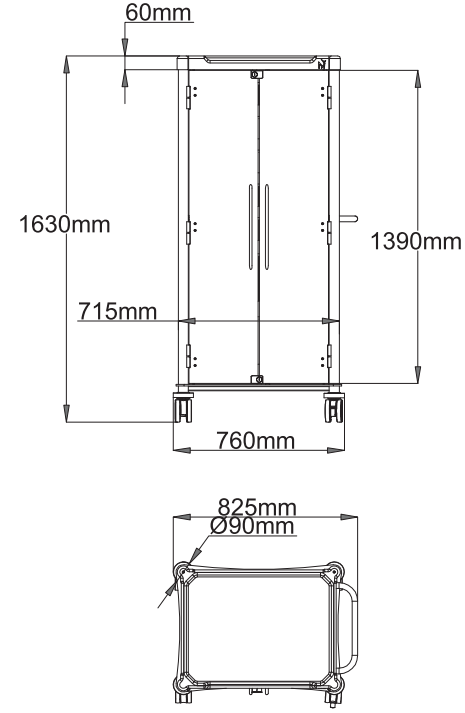

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

NTHM 118

NİTROCARE ACİL MÜDAHALE ARABASI

NITROCARE MEDICINE AND TREATMENT TROLLEY WITH MONITOR HOLDER




TEKNİK ÖZELLİKLER

Kompakt Ve Alüminyum Malzemeden İmal Gövde Yapısı
Ön Çekmece Yüzeyleri 8mm Pleksi Malzemeden İmal
360 Derece Dönebilen 2 Si Kilitli 4 Adet 125 Lik Teker
İki Teker Üzerinde Mandal Şeklinde Ayak İle Kilitlenebilen Fren Sistemi Mevcuttur.
Çekmece Üzerinde Alüminyum Malzemeden İmal Kulplar Bulunmaktadır.
İlk Çekmece Paslanmaz Malzemeden İmaldir Çalışma Tezgahı Olarak Kullanılmaktadır
2. Ve 4. Çekmecelerde 6 Adet , 3 Ve 5. Çekmecelerde 4 Adet İlaç Saklama Aparatı Vardır. Bu Aparatların Herbir Bölümü 4 Göze Ayrılmaktadır
8 Mm Kompakt Malzemeden İmal Üst Tabla
Üst Tabla Üzerinde Monitör Ve Klaviye Bağlama Aparatı Mevcuttur
Slim Bilgisayar Kasası Ve Dosya Tutucu
Alt Şase Üzerinde Sepet Mevcuttur
Çöp Kovası

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Body Structure Made Of HPL (Compact) and Aluminum Material
Front Drawer Surfaces Are Made Of 8 mm Plexy Material
360° Movable Castors (75 Mm Double)
There is A Brake System On Two Wheels That Can Be Locked By Legs
There Are Handles Made Of Aliminium On The Drawers.
The first drawer is made of Stainless Steel. It is for as a work bench.
There are 6 Medicine Storage Apparatus in The 2nd and 4th Drawers, and 4 Medicine Storage Devices in The 3rd and 5th Drawers. Each Part of These Apparatus is Divided into 4 Sections.
Top Table Made Of 8 MM HPL (Compact)
There is a Monitor and Keyboard Connection Apparatus on the Top Table
Slim Computer Case and File Holder
Multi Purpose Basket
Plastic Dustbin

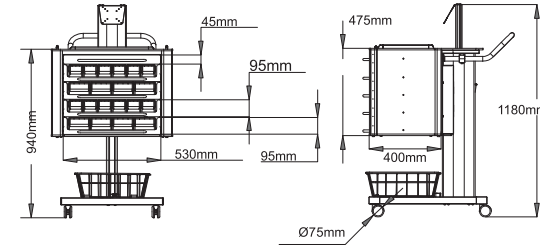

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

NTHM 118B

NİTROCARE BARKOD VE GÜÇ ÜNİTESİ YUVALI İLAÇ VE TEDAVİ ARABASI

NITROCARE MEDICINE AND TREATMENT TROLLEY WITH BARCODE AND POWER UNIT HOLDER



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kompakt ve Alüminyum Malzemeden İmal Gövde Yapısı

Ön Çekmece yüzeyleri 8mm Pleksi Malzemeden İmal

360 Derece Dönebilen 2 Si Kilitli 4 Adet 125 lik Teker

İki Teker Üzerinde Mandal Şeklinde Ayak İle Kilitlenebilen Fren Sistemi Mevcuttur.

Çekmece Üzerinde Alüminyum Malzemeden İmal Kulplar Bulunmaktadır.

İlk çekmece Paslanmaz Malzemeden İmaldır Çalışma Tezgahı olarak Kullanılmaktadır

2. ve 4. Çekmecelerde 6 adet , 3 ve 5. çekmecelerde 4 adet ilaç Saklama Aparatı vardır. Bu aparatların Herbir bölümü 4 Göze ayrılmaktadır

8 mm Kompakt Malzemeden İmal Üst Tabla

Üst Tabla Üzerinde Monitör ve Klaviye Bağlama Aparatı Mevcuttur

Slim Bilgisayar Kasası ve Dosya Tutucu

Alt Şase Üzerinde Sepet Mevcuttur

Çöp Kovası

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Body Structure Made Of HPL (Compact) and Aluminum Material

Front Drawer Surfaces Are Made Of 8 mm Plexy Material

360° Movable Castors (75 Mm Double)

There is A Brake System On Two Wheels That Can Be Locked By Legs

There Are Handles Made Of Aliminium On The Drawers.

The first drawer is made of Stainless Steel. It is for as a work bench.

There are 6 Medicine Storage Apparatus in The 2nd and 4th Drawers, and 4 Medicine Storage Devices in The 3rd and 5th Drawers. Each Part of These Apparatus is Divided into 4 Sections.


Top Table Made Of HPL (Compact)

There is a Monitor and Keyboard Connection Apparatus on the Top Table

Barcode And Power Unit Support

Multi Purpose Basket

Plastic Dustbin

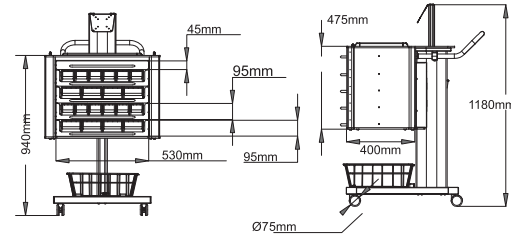

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

BK 02

BK 02

NITROCARE BEBEK KODU

NITROCARE BABY COT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üst kısım Şeffaf Pleksiglass Küvetten Oluşmaktadır.

Küvet içinde sıvı geçirilmeyen, terletmeyen özel astarlı bebek yatağı bulunmaktadır.

Antibakteriyel, hafif ve kolay taşınabilir.

360° dönebilen, ikisi kilitlenebilen tekerlekler

Metal aksamlar paslanmaya ve dış etkenlere karşı elektro-statik toz boyalı

Amortisör yardımı ile küvet ön tarafa doğru 3 kademeli olarak eğimlendirilebilir.

Amortisör yardımı ile yükseklik ayarı yapılabilmektedir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Formed By A Carrier Car, A Transparent Plexiglass Cell On Top

A Baby Bed With Liquid Tight, Antiperspirant Special Priming in Cell.

Antibacterial, Easily Carried And Light

360° Movable Castors 2 Of Them Lockable

Corrosion Resisting Metal Parts And Electrostatic Powder Coating Against External Factors

Sloppable Cell As 3 Graded By The Help Of Damper Mechanism

Height Adjustment By The Help Of Damper Mechanism



BK 03

NITROCARE MANUEL PEDIATRİK KARYOLA

MANUAL PEDIATRIC BED

BK 03

TEKNİK ÖZELLİKLER

Açılıp Kapanabilir Yan Korkuluk

Metal Yatma Yüzeyi

Komple Metal Sağlam Yapı

Elektrostatik Toz Boya

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Foldable Side Rails Made From Metal

Metal Bed Surfaces

Full Metal Body

Electrostatic Powder Coated





NITROCARE

Diyaliz ve Kemoterapi Koltukları

DIALYSIS AND CHEMOTHERAPY CHAIRS

SD

NHS 900

NITROCARE DÖRT MOTORLU DİYALİZ KOLTUĞU

NITROCARE FOUR MOTORS DIALYSIS CHAIR

NITROCARE®



- 1-) El Kumandası
- 2-) Batarya
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Merkezi Fren Sistemi
- 5-) Yüksekliği ve Açısı Ayarlanabilir kolçaklar
- 6-) Tutamaklar
- 7-) Serum askılığı
- 8-) Yastık
- 9-) Uzayabilir Ayak Dayama

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Battery
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Central Brake System
- 5-) Polyurethane Armrests
- 6-) Push Handles
- 7-) Height Adjustable Iv Pole
- 8-) Headrest Pillow
- 9-) Extendable Foot Rest

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

El kumandası

Poliüretan Malzemeden Yapılmış oturm sırt ve ayak kısmı

Koltuk Sandalye, Konfor, ve Yatak Pozisyonlarına Gelebilmektedir

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Batarya

Koltuk Üzerinde Uzun Süren Diyaliz Tedavisi için Rahatlığı Artırmak ve Konforlu Uykuyu Sağlamak amacıyla 5cm Yastık Bulunmaktadır

Ayak dayama kısmı uzatılabilir Özelliktir

Yüksekliği ve Açısı Ayarlanabilir Poliüretan kolçaklar

Sırt kısmında İtme Kolu mevcuttur

Manuel cpr

Yüksekliği Ayarlanabilir Serumluk

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height And Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Hand Control Unit

Seating and All Surfaces Covered with Artificial Leather on Polyurethane Foam.

Chair Can Come To Bed Position.

360° Movable Castors With Central Brake Systems

Battery

There is a 5 cm visco pillow on the seat to increase the comfort for long-lasting dialysis treatment and to provide a comfortable sleep.

The Backrest can be adjusted and locked at any angle.

Extendable Foot Rest

Adjustable Polyurethane Armrests

Push Handles On The Back

The Hand Holder That Brings Back and Foot Part Synchronous Together Horizontal Position



Height Adjustable Iv Pole

Adjustable Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS

Foot Control Panel

Manuel CPR

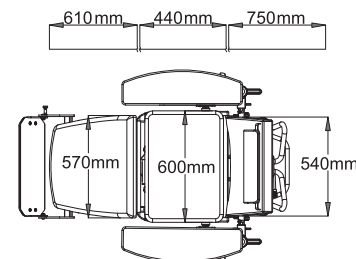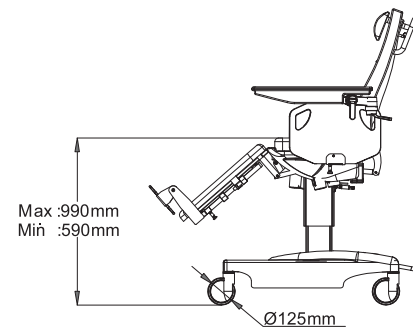

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

TV OUT HAREKETİ
TV OUT MOVEMENT



Ayarlanabilir Ayak Destekleri
Adjustable Footrest

Hareketli Sırt Yapısı
Adjustable Back Rest

Merkezi Fren Sistemi
Central Locking


Ayarlanabilir Kol Destekleri
Adjustable Armrests

SD

SD 07

NITROCARE ÜÇ MOTORLU DİYALİZ KOLTUĞU

NITROCARE THREE MOTORS DIALYSIS CHAIR

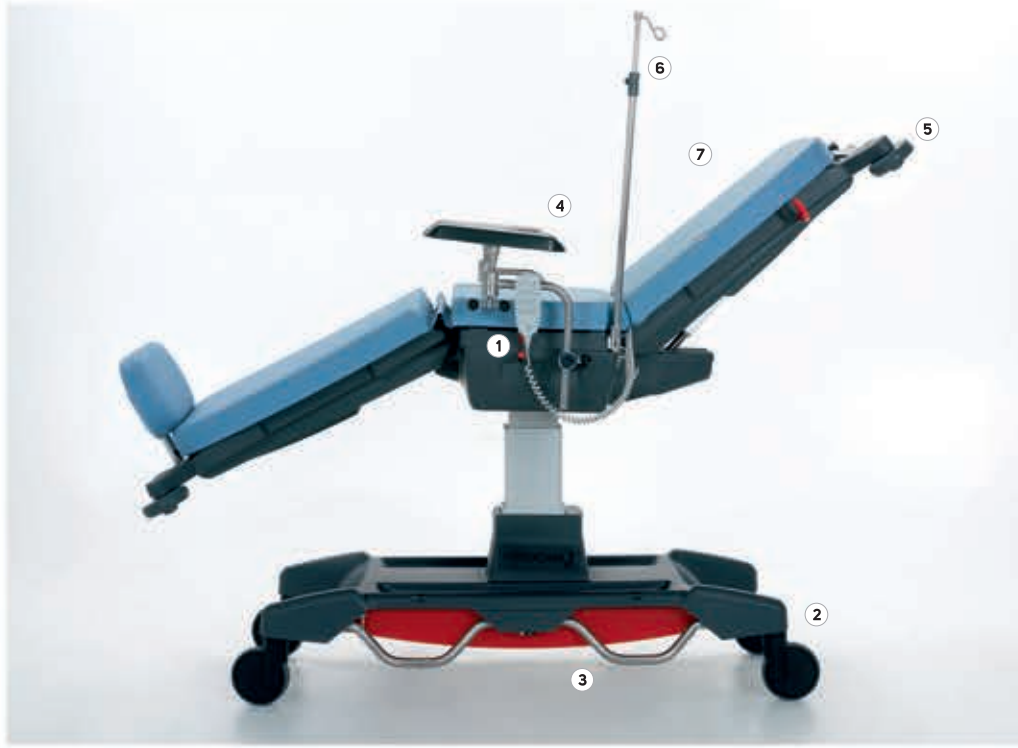

- 1-) El Kumandası
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Yüksekliği ve Açısı Ayarlanabilir kolçaklar
- 5-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 6-) Serum askılığı
- 7-) Yastık

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake System
- 4-) Polyurethane Armrests
- 5-) Protection Bumpers
- 6-) Handles
- 7-) Height Adjustable Iv Pole
- 8-) Headrest Pillow

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisör Yardımıyla Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Yapabilmektedir

El kumandası

Suni deri kaplı sünger Malzemeden Yapılmış oturma sırt ve ayak kısmı

Koltuk Sandalye, Konfor, ve Yatak Pozisyonlarına Gelebilmektedir

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Batarya

Ayakcu dayama

Yüksekliği ve Açısı Ayarlanabilir Poliüretan kolçaklar

Sırt ve ayak hareketini senkronize olarak yapabilmektedir.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serumluk

Baş Yastığı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height Adjustment With Electronic Motors

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Dampers System

Hand Control Unit

Seating and All Surfaces Covered with Artificial Leather Foam.

Chair Can Come To Bed Position.

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 Mm)

Battery

The Backrest Can Be Stop At Any Angle.

Foot Rest

Adjustable Polyurethane Armrests

The Hand Holder That Brings Back and Foot Part Synchronous Together Horizontal Position


Height Adjustable Iv Pole

Adjustable Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS

Foot Control Panel

Manuel CPR

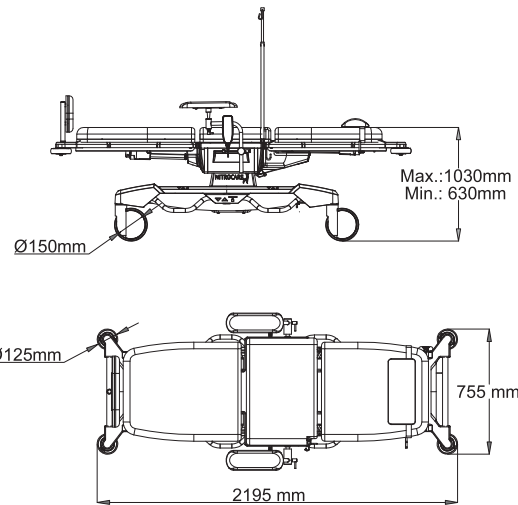

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURG

TRENDLENBURG
TRENDLENBURG

TV OUT HAREKETİ
TV OUT MOVEMENT

Yüksekliği ve Açısı
Ayarlanabilir Kolçaklar
Polyurethane Armrests

Fren ve Yükseklik Pedalları
Brake And Height Adjustment Pedals

Çarpma Korumucu Tamponlar
Protection Bumpers

360 Derece Dönebilen Tekerler
360° Movable Castors

Diz / Ayak Kontrol Mekanizması
Knee Moves Adjustment Mechanism

SD

NHS 870

NITROCARE HİDROLİK KONTROLLÜ DİYALİZ KOLTUĞU

NITROCARE HYDRAULIC COLUMN SYSTEM DIALYSIS CHAIR

NITROCARE®



- 1-) Kontrol Pedalı
- 2-) 360° Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Yüksekliği ve Açısı Ayarlanabilir kolçaklar
- 5-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 6-) Serum askılığı
- 7-) Yastık

- 1-) Foot Control
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake System
- 4-) Polyurethane Armrests
- 5-) Protection Bumpers
- 6-) Height Adjustable Iv Pole
- 7-) Headrest Pillow



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yüksekliği Hidrolik Lift Yardımı ile Yapabilmektedir

Amortisör Yardımıyla Sırt Ayak, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Yapabilmektedir

Diyaliz ve Kan Alma Kotuğu olarak Dizayn Edilmiştir

Suni deri kaplı sünger Malzemedan Yapılmış oturm sırt ve ayak kısmı

Koltuk Sandalye, Konfor, ve Yatak Pozisyonlarına Gelebilmektedir

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Yüksekliği ve Açısı Ayarlanabilir Poliüretan kolçaklar

Yüksekliği Ayarlanabilir Serumluk

Baş Yastığı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Adjustment With Hydraulic System

Headrest, Legrest, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg Adjustment With Dampers System

Designed as a Dialysis and Blood Donor Chair

Seating and All Surfaces Covered with Artificial Leather Foam.

The Backrest Can Be Stop At Any Angle.



Chair Can Come To Bed Position.

360° Movable Castors With Central Brake Systems (150 Mm)

Adjustable Polyurethane Armrests

Height Adjustable Iv Pole

Adjustable Headrest Pillow

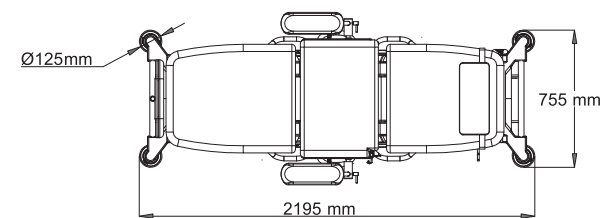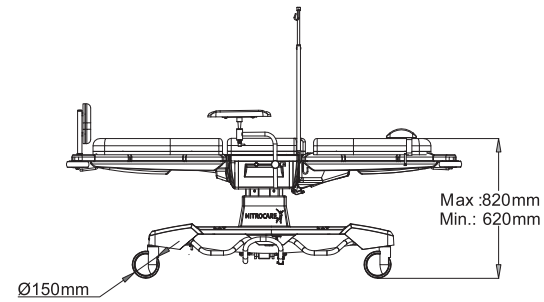SIRT HAREKETİ
BACKRESTSIRT - AYAK
BACKREST-LEGRESTYÜKSEKLİK
HEIGHTTERS TRENDLENBURG
REVERSE TRENDLENBURGTRENDLENBURG
TRENDLENBURGTV OUT HAREKETİ
TV OUT MOVEMENTYüksekliği ve Açısı
Ayarlanabilir Kolçaklar
Polyurethane ArmrestsFren ve Yükseklik Pedalları
Brake And Height Adjustment PedalsAyak Dayama
Foot RestYastık
Headrest Pillow
Serum askılığı yuvası
Height Adjustable Iv Pole Slot

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



- 1-) Sehpa
- 2-) Ayak Dayama
- 3-) Teker (100 mm)
- 4-) Sırt ve Ayak Hareket Mandalı
- 5-) İtme Kolları
- 6-) Serumluk
- 7-) Yan Kol Açma Kapama Butonu

- 1-) Coffee Table
- 2-) Foots Support
- 3-) Castors (100 mm)
- 4-) Arm Open - Close Button
- 5-) Backrest and Footrest Adjustment arm
- 6-) Push Handle
- 7-) IV Pole

TEKNİK ÖZELLİKLER

Amortisör Yardımıyla Sırt Hareketi Yapabilmektedir

Mekanizma Yardımıyla Açılabilir Ayak Kısmı

360 Derece Dönebilen Tekerler

Çapraz Fren Sistemi

Mekanizmaya Kolay Ulaşım İçin Açılabilir Yan Kollar

Yumuşaklık Hissi Veren Poliüretan Malzeme Üzeri Suni Deri Kaplı Yüzey

Paslanmaz Malzemeden İmal Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

Açılıp Kapanabilir Kompakt Malzemeden
 İmal Yan Kol Sehpa'sı

Açılıp Kapanabilir Kompakt Malzemeden
 İmal Ayaklık

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Back adjustment with the help of shock absorber

Foot part that can be opened with the help of mechanism.

360° Movable Castors

Brake Systems


The side arms can be opened for easy access with the help of the mechanism.

Artificial leather or Fabric covered surface
on polyurethane material.

Height Adjustable Iv Pole

Side table made of HPL material that can be opened and closed.

Hpl Footboard Compliant With Patient Movements

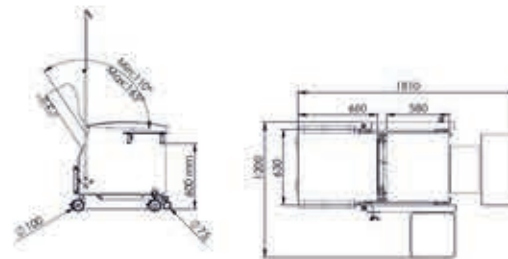

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Ayak Koyma Aparatı
Foot Rest



Yan Sehpa
Side Table



Sirt Hareket Mekanizması
Backrest Mechanism



Aura

AURA

DİYALİZ VE KEMOTERAPİ KOLTUĞU

NITROCARE DIALYSIS & CHEMOTHERAPY CHAIR



HAPPY

NITROCARE MEKANİK KONTROLLÜ DİYALİZ KOLTUĞU

NITROCARE MECHANIC SYSTEM
DIALYSIS CHAIR





NITROCARE

Operasyon Koltukları
OPERATIONAL CHAIRS

SD

NHS 905

NITROCARE DÖRT MOTORLU PROKTOLOJİ KOLTUĞU

NITROCARE FOUR MOTORS PROCTOLOGY CHAIR



- 1-) El Kumandası
2-) Ayarlanabilir poliüretan kolçaklar
3-) Tutamaklar
4-) Havluluk

- 1-) Hand Control Unit
2-) Polyurethane Armrests
3-) Handles
4-) Towel Rack

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik, Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Hareket Ettirilebilir Koltuk Kontrol Kumandası

Suni deri kaplı Poliüretan Malzemeden Yapılmış Oturak, sırt ve ayak kısmı

Koltuk Sandalye, Konfor, ve Yatak Pozisyonlarına Gelebilmektedir

Yüksekliği ve Açısı Ayarlanabilir Poliüretan kolçaklar

Koltuğu İstenilen Yerde Hareket Etmeden Kalmasını Sağlayan Sabit Alt Şase Ayakları Bulunmaktadır.

Koltuğu Taşımak İçin Alt Şasede Gizlenmiş Teker Mekanizması Ve Bu Mekanizmayı Gerekliği Anda Harekete Geçiren Pedala Sahiptir.

Batarya

Kolçaklar yukarı aşağı, sağa sola ve açılabilir olarak ayarlanabilmektedir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height And Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Hand Control Unit

Seating and All Surfaces Covered with Artificial Leather on Polyurethane Foam.

The Backrest Can Be Stop At Any Angle.

Chair Can Come To Bed Position.

Battery

Adjustable Polyurethane Armrests

The Chair Has Fixed Bottom Chassis Legs That Make It Stay Without Moving In The Desired Place.



To Carry The Chair Has A Hidden Wheel Mechanism And A Pedal Which Takes This Mechanism Into Action When It Needs

EXPORT OPTIONS

Foot Control Panel

Back Basket

Manuel CPR

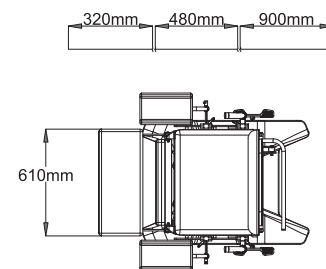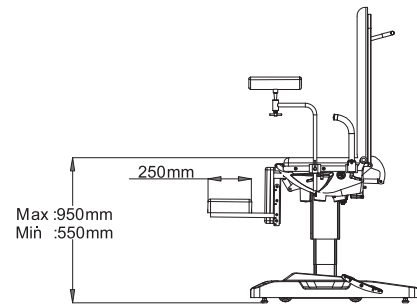

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST



AYAK HAREKETİ
LEGREST



SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TRENDELEBURG
TRENDELEBURG



Teker Kilit Sistemi
Brake System



El Kumandası
Hand Control Unit



SD

NHS 904

NITROCARE DÖRT MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE KOLTUĞU

NITROCARE FOUR MOTORS GYNAECOLOGICAL CHAIR



- 1-) El Kumandası
2-) Ayarlanabilir poliüretan kolçaklar
3-) Tutamaklar
4-) Havluluk
5-) Sepet

- 1-) Hand Control Unit
2-) Polyurethane Armrests
3-) Push Handles
4-) Headrest Pillow

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik ve Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Hareket Ettirilebilir Koltuk Kontrol Kumandası

Suni deri kaplı Poliüretan Malzemeden Yapılmış Oturak, sırt ve ayak kısmı

Koltuk Sandalye, Konfor, ve Yatak Pozisyonlarına Gelebilmektedir

Batarya

Koltuğu İstenilen Yerde Hareket Etmeden Kalmasını Sağlayan Sabit Alt Şase Ayakları Bulunmaktadır.

Koltuğu Taşımak İçin Alt Şasede Gizlenmiş Teker Mekanizması Ve Bu Mekanizmayı Gerekli Anda Harekete Geçiren Pedala Sahiptir.

Konumlandırılabilir poliüretan kolçaklar

Tutamaklar

Yastık Mevcuttur

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height And Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Hand Control Unit

Seating and All Surfaces Covered with Artificial Leather on Polyurethane Foam.

The Backrest Can Be Stop At Any Angle.

Chair Can Come To Bed Position.

Battery

The Chair Has Fixed Bottom Chassis Legs That Make It Stay Without Moving In The Desired Place.

To Carry The Chair Has A Hidden Wheel Mechanism And A Pedal Which Takes This Mechanism Into Action When It Needs

Height and Angle Adjustable Polyurethane Armrests

Push Handles


Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS


Foot Control Panel

Back Basket

Manuel CPR

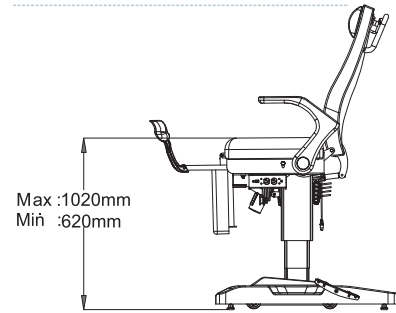

365mm 520mm 750mm

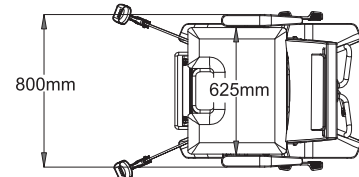

Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



Ayarlanabilir Kol Destekleri
Adjustable Armrest



El Kumandası
Hand Control Unit



Hareketli Sırt yapısı
Adjustable Back Rest

SD

NHS 903

NITROCARE DÖRT MOTORLU PODİATRİ MUAYENE KOLTUĞU

NITROCARE FOUR MOTORS PODIATRY CHAIR

NITROCARE



- 1-) El Kumandası
- 2-) Ayarlanabilir poliüretan kolçaklar
- 3-) Tutamaklar
- 4-) Havluluk
- 5-) Atık küveti
- 6-) Yastık

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Polyurethane Armrests
- 3-) Push Handles
- 4-) Stainless Steel, Removable Basin
- 5-) Headrest Pillow



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak, Yükseklik Ve Trendelenburg Hareketlerini Motor Yardımı İle Yapabilmektedir

El Kumandası

Sunî Deri Kaplı Poliüretan Malzemeden Yapılmış Oturak, Sırt Ve Ayak Kısmı

Koltuk Sandalye, Konfor, Ve Yatak Pozisyonlarına Gelebilmektedir

Batarya

Hastanın Rahat Oturumunu Sağlayan Ve Ayakucu İle Senkronize Hareket Eden Paslanmaz Malzemeden Atık Tası İçeren Ayak Destek Platformu

Koltuğu İstenilen Yerde Hareket Etmeden Kalmasını Sağlayan Sabit Alt Şase Ayakları Bulunmaktadır.

Koltuğu Taşımak İçin Alt Şasede Gizlenmiş Teker Mekanizması Ve Bu Mekanizmayı Gerekliği Anda Harekete Geçiren Pedala Sahiptir.

180 Derece Dönebilme Kabiliyeti

Konumlandırılabilir Poliüretan Kolçaklar

Tutamaklar

Yastık Mevcuttur

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height And Trendelenburg Adjustment With Electronic Motors

Hand Control Unit

Seating and All Surfaces Covered with Artificial Leather on Polyurethane Foam.

The Backrest Can Be Stop At Any Angle.

Chair Can Come To Bed Position.

Battery

Foot Support Platform With Stainless Material Waste Bowl Provides Comfortable Patient Session And Moving To Synchronized With Foot

The Chair Has Fixed Bottom Chassis Legs That Make It Stay Without Moving In The Desired Place.

To Carry The Chair Has A Hidden Wheel Mechanism And A Pedal Which Takes This Mechanism Into Action When It Needs

180 Degree Rotation

Adjustable Polyurethane Armrests

Push Handles




Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS

Foot Control Panel

Back Basket

Manuel CPR

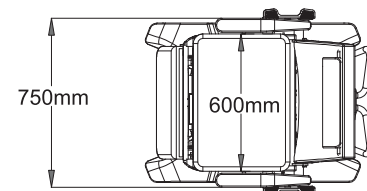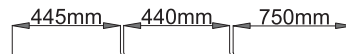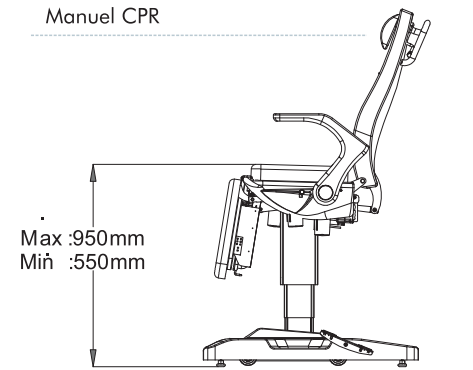SIRT HAREKETİ
BACKRESTAYAK HAREKETİ
LEGRESTSIRT - AYAK
BACKREST-LEGRESTYÜKSEKLİK
HEIGHTTRENDLENBURG
TRENDLENBURG

SD

NHS 902

NITROCARE ÜÇ MOTORLU KBB KOLTUĞU

NITROCARE THREE MOTORS ENT CHAIR

NITROCARE



- 1-) El Kumandası
- 2-) Ayarlanabilir kolçaklar
- 3-) Tutamaklar
- 4-) Yastık

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Polyurethane Armrests
- 3-) Push Handles
- 4-) Headrest Pillow



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak Ve Yükseklik Hareketlerini Motor Yardımı İle Yapabilmektedir

El Kumandası

Suni Deri Kaplı Poliüretan Malzemeden Yapılmış Oturak, Sırt Ve Ayak Kısmı

Koltuk Sandalye, Konfor, Ve Yatak Pozisyonlarına Gelebilmektedir

Batarya

Hastanın Rahat Oturumunu Sağlayan Ve Ayakucu İle Senkronize Hareket Eden Compact Malzemeden İmal Edilmiş Ayak Destek Platformu

Koltuğu İstenilen Yerde Hareket Etmeden Kalmasını Sağlayan Sabit Alt Şase Ayakları Bulunmaktadır.

Koltuğu Taşımak İçin Alt Şasede Gizlenmiş Teker Mekanizması Ve Bu Mekanizmayı Gerekliği Anda Harekete Geçiren Pedala Sahiptir.

180 Derece Dönebilme Kabiliyeti

Konumlandırılabilir Poliüretan Kolçaklar

Paslanmaz Tutamaklar

Yastık Mevcuttur

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest And Height Adjustment With Electronic Motors

Hand Control Unit

Seating and All Surfaces Covered with Artificial Leather on Polyurethane Foam.

The Backrest Can Be Stop At Any Angle.

Chair Can Come To Bed Position.

Battery

Foot Support Platform With Stainless Material Waste Bowl Provides Comfortable Patient Session And Moving To Synchronized With Foot

The Chair Has Fixed Bottom Chassis Legs That Make It Stay Without Moving In The Desired Place.

To Carry The Chair Has A Hidden Wheel Mechanism And A Pedal Which Takes This Mechanism Into Action When It Needs

180 Degree Rotation

Adjustable Polyurethane Armrests

Push Handles



Headrest Pillow

EXPORT OPTIONS

Foot Control Panel

Back Basket

Manuel CPR

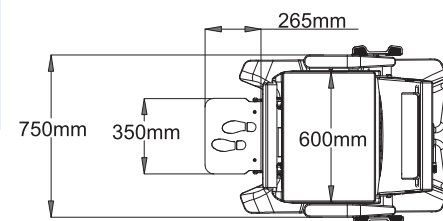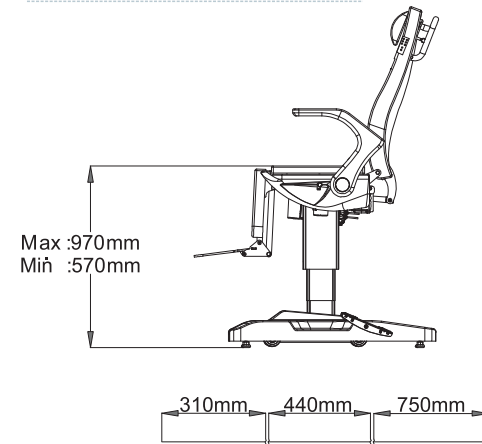

Mekanik CPR
Mechanic CPR



El Kumandası
Hand Panel



Ayak Koyma Yeri
Foot Board



Ayarlanabilir Kol Destekleri
Adjustable Armrests





NITROCARE



Mobilya Grubu
FURNITURE GROUP

OLHD 1011

HASTA BAŞI KOMODİNİ (KOMPLE COMPACT)
BEDSIDE CABINET (FULL COMPACT)



OLHD 1008

HASTA BAŞI KOMODİNİ (KOMPLE COMPACT)
BEDSIDE CABINET (FULL COMPACT)





OLHD 1007
COMPACT HASTA BAŞI KOMODİNİ
COMPACT BEDSIDE CABINET



OLHD 1006
COMPACT HASTA BAŞI KOMODİNİ
COMPACT BEDSIDE CABINET



OLHD 2003 STEP
HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET






OLHD 2005 TEN
HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET



OLHD 2004 STEP
HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET



OLHD 2002 TARA
HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

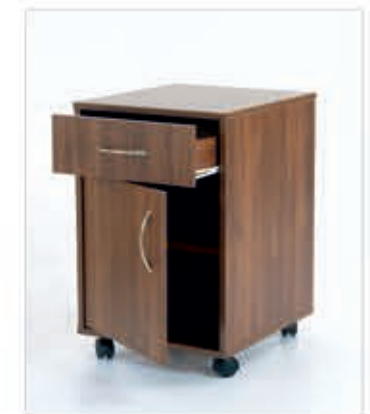



OLHD 1010
HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET



OLHD 1009
HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET



OLHD 2001 PORTO
HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET




MODÜLER GRUP
FURNITURE GROUP

BST - 04

AÇI AYARLI COMPACT TABLALI
HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
(ALÜMİNYUM AYAKLI)
LATERAL SYSTEM OVER BED
TABLE (COMPACT TOP TABLE
ALUMINIUM LEG)



MODÜLER GRUP
FURNITURE GROUP

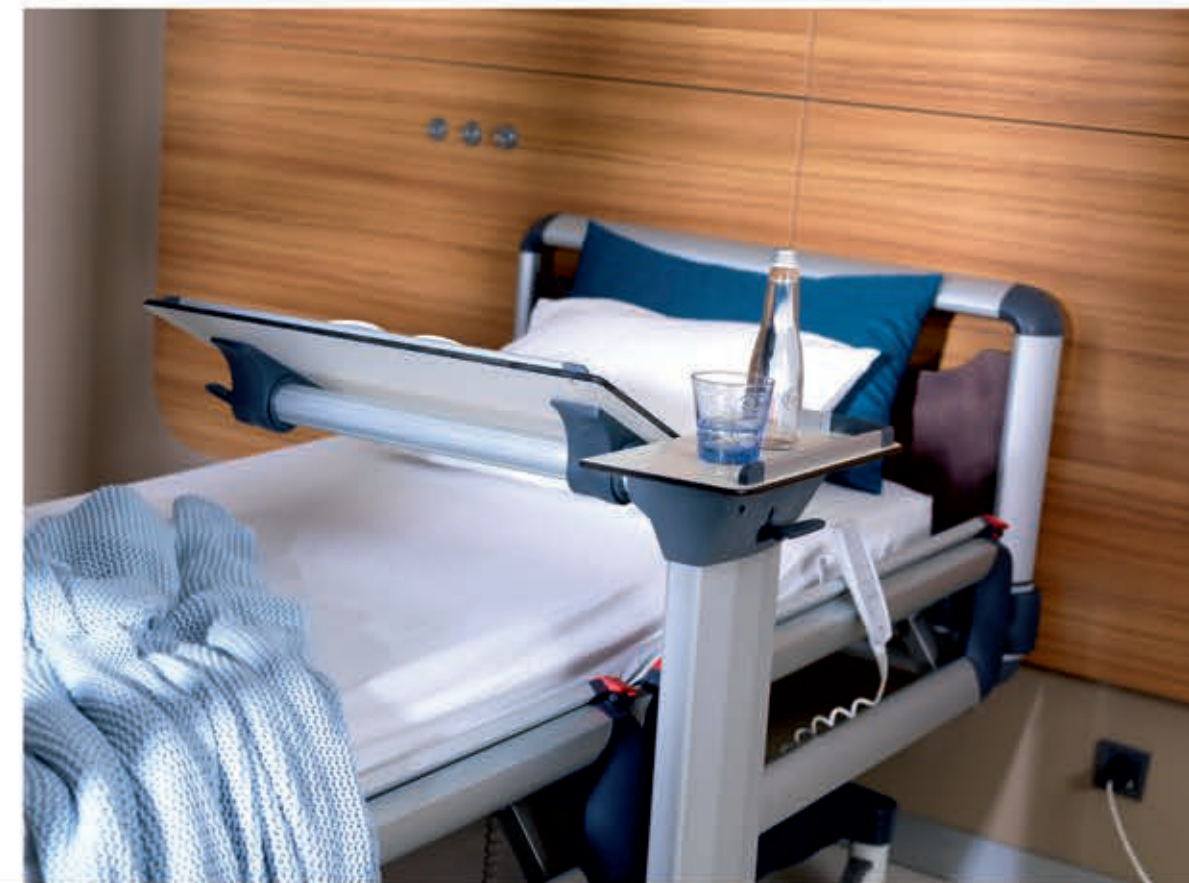



BST - 03

AÇI AYARLI COMPACT TABLALI
HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
(METAL AYAKLI)

LATERAL SYSTEM OVER BED
TABLE (COMPACT TOP TABLE
METAL LEG)



BST - 01

COMPACT TABLALI HASTA ÖNÜ
YEMEK MASASI
OVER BED TABLE
(COMPACT TOP TABLE - METAL LEG)



BST - 02

LAMİNANT TABLALI HASTA ÖNÜ
YEMEK MASASI
OVER BED TABLE
(LAMINATE TOP TABLE - METAL LEG)



BST - 05

AÇI AYARLI LAMİNANT TABLALI
HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
(METAL AYAKLI)
LATERAL SYSTEM OVER BED
TABLE (LAMINATE TOP TABLE
ALUMINIUM LEG)





ELBİSE SOYUNMA DOLABI
DÖRTLÜ Z FORM KAPAK
WARDROBE
800X520X1905 H



TEK KAPAKLI LAMİNAT
KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
WARDROBE
500X520X1905 H



ELBİSE SOYUNMA DOLABI
LAMİNAT
WARDROBE
840X420X1905 H



ELBİSE SOYUNMA
DOLABI İKİ KİŞİLİK LAMİNAT
WARDROBE
800X520X1905 H



TEK KİŞİLİK
METAL SOYUNMA
DOLABI
50 x 40 x 185
Single Metal
Wardrobe

İKİ KİŞİLİK
METAL SOYUNMA
DOLABI
50 x 40 x 200
Duble Metal
Wardrobe

İKİ KİŞİLİK
METAL SOYUNMA
DOLABI
80 x 40 x 185
Duble Metal
Wardrobe


METAL
TEMİZLİK
DOLABI
92 x 40 x 210
Metal Cleaning
Cabinet

NTCR HKL 001
HASTA TAŞIMA LİFTİ
PATIENT LIFT



CARET 503
HASTA MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH


CARET 501
HASTA MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH

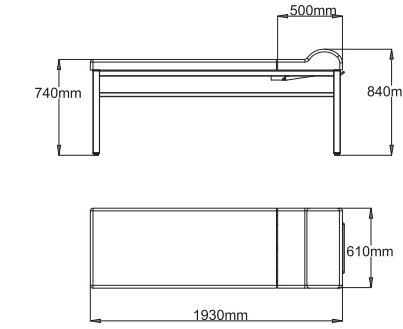

NITROCARE TRAKSİYON SETİ
NITROCARE TRACTION SET



CARET 502
HASTA MUAYENE MASASI SABİT
AĞSAP ÇEKMECELİ
EXAMINATION COUCH

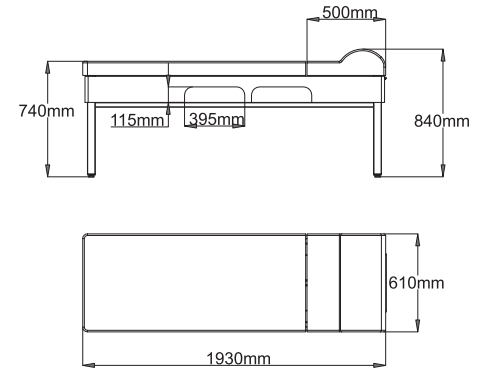

BEBEK ALT DEĞİŞTİRME
DOLABI
NTBD 1000
BABY CHANGING CABINET





PANORA
REFAKATÇI KOLTUĞU
RECLINER



EFES
REFAKATÇI KOLTUĞU
RECLINER





EDAN
REFAKATÇI KOLTUĞU
SLEEPER



VİSTA
REFAKATÇI KOLTUĞU
SLEEPER



KOLTUK VE REFAKATÇİ KOLTUKLARI
SOFA AND RECLINERS

HAPPY
REFAKATÇİ KOLTUĞU
RECLINER



HAPPY
AHŞAP KOLLU REFAKATÇİ KOLTUĞU
WOOD ARMREST RECLINER



DADA

SLEEPER SOFA



ARIA

SLEEPER SOFA



DOMINO

(KOLLU - WITH ARMREST)
SLEEPER SOFA



DOMINO

SLEEPER SOFA



CITY
KOLTUK
SOFA GROUP



PEDRA
KOLTUK
SOFA GROUP



KOLTUK GRUPLARI
SOFA GROUPS

ALYA
MİSAFİR KOLTUĞU
SOFA GROUP



BIRDY
MİSAFİR KOLTUĞU
SOFA GROUP





TUNCA

KOLTUK
SOFA



ZEN
MİSAFİR KOLTUĞU
SOFA GROUP



BODRUM
MİSAFİR KOLTUĞU
SOFA GROUP



KOLTUK GRUPLARI
SOFA GROUPS



TRUVA
MİSAFİR KOLTUĞU
SOFA GROUP



ASOS
MİSAFİR KOLTUĞU
SOFA GROUP



CANYON
MİSAFİR KOLTUĞU
SOFA GROUP





OTTOMAN
BEKLEME KOLTUĞU
WAITING GROUP



HILL
BEKLEME KOLTUĞU
WAITING GROUP





MAGNUM
BEKLEME KOLTUĞU
WAITING GROUP



BEKLEME GRUPLARI
WAITING GROUPS

AREA
BEKLEME KOLTUĞU
WAITING GROUP



AREA
BEKLEME KOLTUĞU
WAITING GROUP





ESTETİCA
BEKLEME KOLTUĞU
WAITING GROUP



PRİZMA
BEKLEME KOLTUĞU
WAITING GROUP




SEDNA
BEKLEME KOLTUĞU
WAITING GROUP



TURKUAZ
BEKLEME KOLTUĞU
WAITING GROUP



BEKLEME GRUPLARI
LOUNGE FURNITURE GROUP

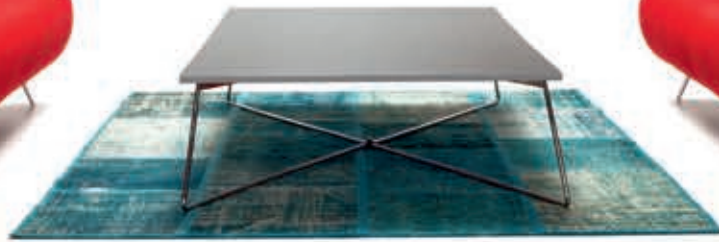

NITROCARE®



CUBIC S
BEKLEME KOLTUĞU
LOUNGE GROUP



LEDA
BEKLEME KOLTUĞU
LOUNGE GROUP



PALLADIUM
BEKLEME KOLTUĞU
LOUNGE GROUP



BEKLEME GRUPLARI
LOUNGE FURNITURE GROUP



CUBIC L
MODÜLER BEKLEME GRUBU
LOUNGE GROUP



CUBIC C
MODÜLER BEKLEME GRUBU
LOUNGE GROUP



KONFERANS KOLTUĞU
CONFERENCE CHAIR



SELLA
KONFERANS KOLTUĞU
CONFERENCE CHAIR



OLA
KONFERANS KOLTUĞU
CONFERENCE CHAIR





SPRIT
SANDALYE
CHAIR



FINISH
SANDALYE
CHAIR



OSS
SANDALYE
CHAIR

GRACE-02
SANDALYE
CHAIR



REAL
SANDALYE
CHAIR



GRACE-01
SANDALYE
CHAIR



FIONA
SANDALYE
CHAIR



BOSPHORUS
SANDALYE
CHAIR

EFE
TABURE
KROM AYAKLI
STOOL



CLUB-01
SANDALYE
CHAIR



EIFFEL
SANDALYE
CHAIR



CLUB-9
SANDALYE
CHAIR





REBECCA
SANDALYE
CHAIR



BOSS
KOLTUK
CHAIR



SELOX
SANDALYE
CHAIR



SANDALYE GRUPLARI
CHAIR GROUPS

ARCO

SEMİNER KOLTUĞU
SEMINAR CHAIR



ISOS

YAZMA TABLALI
KONFERANS KOLTUĞU
CONFERENCE CHAIR WITH
WRITING TABLE



KODEİFFEL

SANDALYE
CHAIR



PLUS

SANDALYE
CHAIR



SAKİ

SANDALYE
CHAIR



VİOLET

SANDALYE
CHAIR



FREE

SANDALYE
CHAIR

FLOWER
SANDALYE
CHAIR



VIOLET
SANDALYE
CHAIR



LONDON



SIDNEY



SANDALYE GRUPLARI
CHAIR GROUPS

PALMA



TOKYO





NITROCARE

Havalı Şilteler
AIR MATTRESS

NA 1

Nitrocae 1, düşük basınç ülseri riski taşıyan hastaların korunması ve tedavisi için idealdir. Bu hafif ve kompakt alternatif basınç pedi, 2,5 "yüksekliğinde kabarcık hücrelerinden oluşur ve jel kaplamalı şilteler gibi daha ağır ürünlere alternatif olarak kullanılır. Sistem, kısa süreli kullanım için mükemmeldir ve kurulumu çok kolaydır. Pedin kaymasını önlemek için balonlu pedin üst ve alt taraflarında basınç ayarlı bir pompa ve uzatma pedleri bulunan Nitrocare 1, evde bakım için harika bir geçiş ve koruma yatağı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Nitrocae 1 is ideal for prevention and treatment of patients at low risk of pressure ulcers. This light weight and compact alternating pressure pad is composed of 2.5"-height bubble cells, and it is used as an alternative for heavier products such as gel overlay mattresses. The system is great for short term usage and easy to install. With a pressure adjustable pump and extension flaps on top and bottom sides of the bubble pad to prevent the pad from sliding, Nitrocare 1 is designed to be a great transition mattress for homecare.




Ağırlık Göstergesi, Referans Optimize edilmiş basınç ayarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Weight Indicator Reference To facilitate optimized pressure setting.




Ayarlanabilir Askılar Çoğu yatak tipi için uygundur. Adjustable Hangers Suitable for most bed types.




Uzatma Pedleri Sabitleme için standart şiltenin altına sıkıştırılabilir. Extension Flaps Can be tucked under the standard mattress for stabilization.

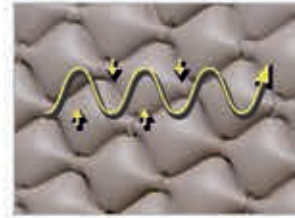

Tıbbi Sınıf PVC Ped Kolay temizlenebilir ve alev geciktirici özelliğe sahiptir. Medical Grade PVC Pad Easy to clean and fire retardant.

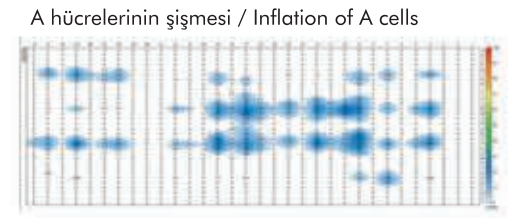

Hasta : 170 cm / 80 kg / Erkek /

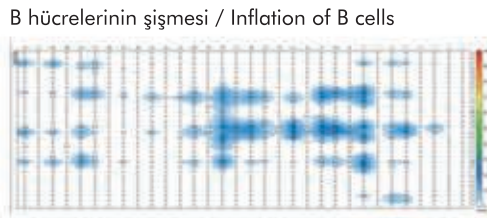

Patient : 170 cm / 80 kg / Male

		Teknik Özellikler	Specifications
POMPA PUMP	Model	Nitrocare 1	Nitrocare 1
	Boyut	23.7 x 11.2 x 9.5 cm	23.7 x 11.2 x 9.5 cm
	Ağırlık	1.4 kg	1.4 kg
	Kullanılan Malzeme	Flame retardant ABS	Flame retardant ABS
	Besleme Voltajı	AC 230V, 50 Hz ; AC 230V, 60 Hz ; 120V, 60Hz	AC 230V, 50 Hz ; AC 230V, 60 Hz ; 120V, 60Hz
	Çalışma Döngüsü	9.6 min (230V) ; 8 min (120V)	9.6 min (230V) ; 8 min (120V)
ŞİLTE MATTRESS		2.5" Bubble Pad Overlay	2.5" Bubble Pad Overlay
	Boyut	196 x 90 x 6.4 cm	196 x 90 x 6.4 cm
	Değişkenlik	1 - in - 2	1 - in - 2
	Hücre Yüksekliği	2.5" x 130 pcs of bubbles	2.5" x 130 pcs of bubbles
	Ağırlık	2.3 kg	2.3 kg
	Malzeme	Medical - grade PVC	Medical - grade PVC
	Maksimum Hasta Ağırlığı	100 kg	100 kg
	Alev Geciktirici Standartlar	CA 117	CA 117

* Hava akışı çıkışı ve döngü süresi, farklı elektrik voltaj ve frekansa bağlı olarak değişebilir.
* Nitrocare 1 doğrudan mevcut bir yüzey üzerinde veya ek bir şiltenin üzerinde kullanılmalıdır.
* Doğrudan cilt temasından kaçınmak için pedi daima bir örtü ile kullanın.

* The airflow output and cycle time may vary slightly due to different electrical voltage and frequency.
* Nitrocare 1 should always be used directly on top of an existing surface or an additional foam.
* Always cover the pad with a sheet of clothing to avoid direct skin contact.

NA 2



Nitrocare 2, etkili destek sağlamanın kullanımı kolay bir yoludur! Topuk basıncını düşürmek için topuk eğimli ve alternatif özelliğe sahip 5 "yüksekliğinde tek parça yatak kaplamasıdır. Nitrocare 2S kaplama, düşük ila orta basınç ülseri riski altında olduğu tahmin edilenler için idealdir. En önemlisi, çoğu insanın karşılayabileceği fiyata konfor ile etkili bir basınç rahatlaması sağlar!


Nitrocare 2 is an easy to use way to provide effective support! It is a 5" height one-piece mattress overlay with heel slope for heel pressure relieve and 1 in 2 alternating feature. Nitrocare 2s overlay is ideal for those who are assessed to be at low to medium risk of developing pressure ulcers. Most importantly, it provides effective pressure relief with comfort at the price most people can afford!



Ağırlık Göstergesi, Referans Optimize edilmiş basınç ayarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Weight Indicator Reference To facilitate optimized pressure setting.




Ayarlanabilir Askılar Çoğu yatak tipi için uygundur. Adjustable Hangers Suitable for most bed types.

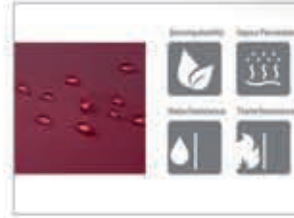


Naylon / PU Kapak Temel alev geciktirici seviyesiyle buhar geçirgendir ve suya dayanıklıdır. Nylon/PU Cover Vapor permeable and water resistant with basic flame retardant level.



"C-bölümündeki" Yastık Fonksiyonu Tüpleri, hasta uyumuna da yardımcı olan bir yastık fonksiyonunu simüle etmek için tasarlanmıştır. Pillow Function Tubes in the "C-section" are designed to simulate a pillow function which also helps with patient compliance

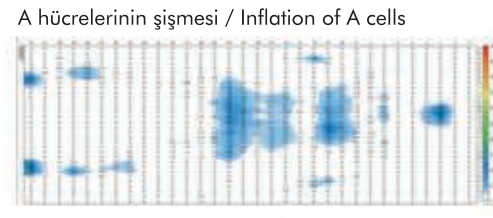

Hasta : 170 cm / 80 kg / Erkek /

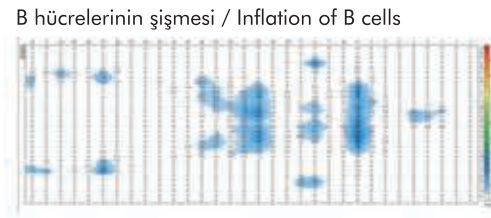

Patient : 170 cm / 80 kg / Male

		Teknik Özellikler	Specifications
POMPA PUMP	Model	Nitrocare 1	Nitrocare 2
	Boyut	23.7 x 11.2 x 9.5 cm	23.7 x 11.2 x 9.5 cm
	Ağırlık	1.4 kg	1.4 kg
	Kullanılan Malzeme	Alev geciktirici ABS	Flame retardant ABS
	Besleme Voltajı	AC 230V, 50 Hz ; AC 230V, 60 Hz ; 120V, 60Hz	AC 230V, 50 Hz ; AC 230V, 60 Hz ; 120V, 60Hz
	Çalışma Döngüsü	9.6 dakika (230V); 8 dakika (120V)	9.6 min (230V) ; 8 min (120V)
ŞİLTE MATTRESS		4" Kaplamalı Yatak	4" Overlay Mattress
	Boyut	196x90x6.4 cm/196x90x10.2 cm/190x80x10.2 cm	196x90x6.4cm/196x90x10.2 cm/190x80x10.2 cm
	Değişkenlik	1 - in - 2 / 1 - in - 2 / 1 - in - 3	1 - in - 2 / 1 - in - 2 / 1 - in - 3
	Hücre Yüksekliği	18 x 4 hücre	18 x 4" cells
	Ağırlık	3.8 kg	3.8 kg
	Kılıf Malzemesi	Naylon / PU	Nylon / PU
	Hücre Malzemesi	Naylon / PVC	Nylon / PVC
	Maksimum Hasta Ağırlığı	140 kg	140 kg
	Alev Geciktirici Standartlar	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2

* Hava akışı çıkışı ve döngü süresi, farklı elektrik voltaj ve frekansa bağlı olarak değişebilir.
* Nitrocare 2 doğrudan mevcut bir yüzey üzerinde veya ek bir şiltenin üzerinde kullanılmalıdır.

* The airflow output and cycle time may vary slightly due to different electrical voltage and frequency.
* Nitrocare 2 should always be used directly on top of an existing surface or an additional foam.

NA 3



"Nitrocare 3, statik terapi moduyla birlikte etkili bir alternatif kaplama sistemidir. Bir dizi bireysel hücrenin döngülerde alternatif olarak şişirilmesi ve sönmesi ile hastalar yeterli basınç rahatlamasına ulaşırlar. Sistem, pansuman, muayene de dahil olmak üzere her türlü hemşirelik prosedürünü kolaylaştırmak için statik moda geçirilebilir. Antimikrobiyal etkiyi artırmak için hastayı yeniden konumlandırılan silver-ion Naylon / PU kılıf mevcuttur. Net ağırlık göstergesi referans kadran ayarı ile, Nitrocare 3'ün kullanımı kolaydır ve yüksek basınç ülseri riski ile orta riskli hastalar için önerilir."

"The Nitrocare 3 is an effective alternating overlay system combined with static therapy mode. By having a series of individual cells inflate and deflate alternatively in cycles, patients receive their adequate pressure relief. The system can be switched to a static mode to facilitate all kinds of nursing procedures including dressing changes and patient repositioning silver-ion Nylon/PU cover is also available to increase the antimicrobial effect. With clear weight indicator reference dial adjustment, Nitrocare 3 is easy to use and is recommended for patients at medium risk to high risk of pressure ulcers."




"Kapaklı ve Hızlı Bağlantı, Hastanın taşınması, hemşirelik prosedürleri ve taşıma - kullanım için tek tip sabit bir yüzey sağlar."
"Quick Connector with Cap Provide a uniform stable surface for patient transportation, nursing procedures, and moving and handling."



Döngüsel Fermuar sıvı girişini azaltır ve çamaşır makinesinde temizlik için tamamen çıkarılabilir. Zipper-All-Around Cover Reduce ingress of unwanted fluid and can be completely removed for laundry.




Köpük Taban Cebi Ek köpük eklemek içindir. (H5 "şilte üzerinde mevcuttur). Foam Base Pocket For inserting additional foam. (Available on H5" mattress)

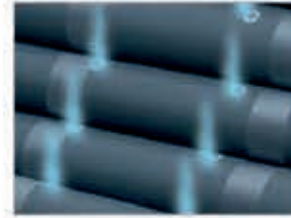

Havalandırılmalı Düşük Hava Kaybı Hücreleri Hastayı rahat ettirmek için nemi engeller. Ventilated LowAir-Loss Cells Wicks moisture away to keep the patient comfortable.




CPR Valfi Acil durumlar için yatağı hızla indirir. CPR Valve Quickly deflate the mattress for emergencies.

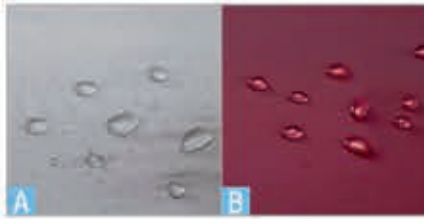

A. Antimikrobiyal Gümüş + Naylon / PU Kılıf Düşük alev geciktirici ve anti-MRSA etkisi olan buhar geçirgen ve suya dayanıklı malzemeden yapılmıştır. B. Naylon / PU Kılıf (Opsiyonel) Temel alev geciktirici seviyesiyle buhar geçirgendir ve suya dayanıklıdır. A. Antimicrobial Silver+ Nylon / PU Cover Vapor permeable and water resistant cover with a level of low fire retardancy and anti-MRSA effect. / B. Nylon/PU Cover (Optional) Vapor permeable and water resistant with basic flame retardant level.




A hücrelerinin şişmesi / Inflation of A cells

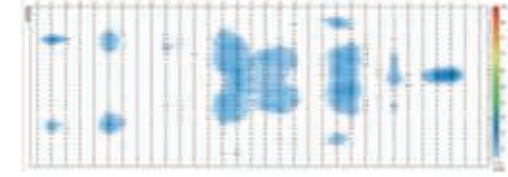

Hasta : 170 cm / 80 kg / Erkek /

B hücrelerinin şişmesi / Inflation of B cells

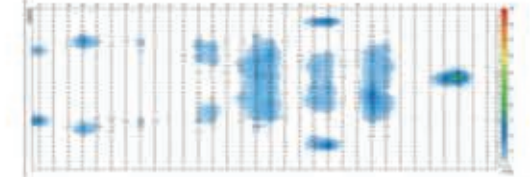

Patient : 170 cm / 80 kg / Male

		Teknik Özellikler		
		Model	Nitrocare 3	
POMPA	Boyut	29 x 18.5 x 12.6 cm		
	Ağırlık	2.2 kg		
	Kullanılan Malzeme	Alev geciktirici ABS		
	Besleme Voltajı	AC 220 - 240V, 50Hz ; 100 - 120V, 60Hz		
	Çalışma Döngüsü	9,6 dakika (230V); 8 dakika (120V)		
ŞİLTE		5" + 3" Kaplamalı Yatak	5" Kaplamalı Yatak	4" Kaplamalı Yatak
	Boyut	200 x 90 x 12.7cm w / 3" yüksek köpük cebi	200 x 90 x 12.7 cm	190 x 80 x 10.2 cm
	Değişkenlik	1 - in - 2	1 - in - 2	1 - in - 3
	Hücre Yüksekliği	17 x 5" hücreler	17 x 5" hücreler	18 x 4" hücreler
	Ağırlık	5,6 kg	5,2 kg	3,1 kg
	Kılıf Malzemesi	Silver + Nylon / PU*	Silver + Nylon / PU*	Silver + Nylon / PU*
	Hücre Malzemesi	Nylon / TPU	Nylon / TPU	Nylon / TPU
	Maksimum Hasta Ağırlığı	180 kg	180 kg	140 kg
	Alev Geciktirici Standartlar	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2

		Specifications		
		Model	Nitrocare 3	
PUMP	Dimension	29 x 18.5 x 12.6 cm		
	Weight	2.2 kg		
	Case Material	Flame retardant ABS		
	Supply Voltage	AC 220 - 240V, 50Hz ; 100 - 120V, 60Hz		
	Operating Cycle	9.6 min (230V) ; 8 min (120V)		
MATTRESS		5" + 3" Overlay	5" Overlay	4" Overlay
	Dimension	200 x 90 x 12.7cm w / 3" high foam pocket	200 x 90 x 12.7 cm	190 x 80 x 10.2 cm
	Alternating	1 - in - 2	1 - in - 2	1 - in - 3
	Cell Height	17 x 5" cells	17 x 5" cells	18 x 4" cells
	Weight	5,6 kg	5,2 kg	3,1 kg
	Cover Material	Silver + Nylon / PU*	Silver + Nylon / PU*	Silver + Nylon / PU*
	Cell Material	Nylon / TPU	Nylon / TPU	Nylon / TPU
	Maximum Patinet Weight	180 kg	180 kg	140 kg
	Flame Retardant Standards	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2

* Hava akışı çıkışı ve döngü süresi, farklı elektrik voltaj ve frekansa bağlı olarak değişebilir.
* Opsiyonel Naylon / PU kılıf da mevcuttur.
* Dar ebatlar (85 cm genişliğinde) da mevcuttur.
* Nitrocare 3 doğrudan mevcut bir yüzey üzerinde veya ek bir şiltenin üzerinde kullanılmalıdır.

* The airflow output and cycle time may vary slightly due to different electrical voltage and frequency.
* Optional Nylon / PU cover is also available.
* Narrow sizes (85 cm in width) is also available.
* Nitrocare 3 should always be used directly on top of an existing surface or an additional foam.




"Ek statik mod, hastanın yeniden konumlandırılmasına ve her türlü hemşirelik işlemine yardımcı olur. Düşük basınç alarmı özelliği hasta güvenliğini artırır. Gümüş iyonla işlenmiş Naylon / PU kılıf ile artan antimikrobiyal aktivite. tamamlanır."

"Additional static mode helps with patient repositioning and all kinds of nursing care. Low pressure alarm feature increases patient safety. Increased antimicrobial activity with silver-ion treated Nylon/PU cover."

NA 4

Nitrocare 4, Nitrocare serisindeki en gelişmiş sistemlerden biridir. Dijital çok modlu pompa, yalnızca alternatif basıncın yeniden dağıtımını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sabit düşük basınç düşürme ile statik bir moda sahiptir. Alternatif modda, doğal uyku hareket modellerini taklit etmek ve dokuda uzun süreli basınç oluşmasını önlemek için, hücrelerin şişirilmesi ve söndürülmesiyle periyodik olarak yeniden dağıtılır. Sabit statik modda, daldırma ve zarflama yoluyla alternatif moddan aynı basınç seviyesine kıyasla basınçlar yaklaşık 2/3 oranında düşürülür. Sistem ayrıca koltuk şişirme ve maksimum sertlik özellikleri gibi gelişmiş özellikler sunar. Hemşireyi olağandışı durumdan haberdar etmek için hem sesli hem de görsel alarmlarla uarı verir. Sistem, insan hatası riskini azaltmak için idealdir ve basınç üslerinin tüm aşamalarının önlenmesi ve tedavisi için uygundur.

Nitrocare 4 is one of the advanced systems in Nitrocare series. The digital multi-mode pump is not only offering alternating pressure redistribution, but also has a static mode with constant low pressure reduction. In alternating mode, the pressure is periodically redistributed by inflating and deflating cells in order to mimic natural sleep movement patterns and avoid long term pressurization of tissue. In constant static mode, the pressures is about 2/3 lowered when compared to the same pressure level from alternating mode by the means of immersion and envelopment. The system also offers advanced features such as seat inflation and max firm features. With both audible and visual alarms to notify the caregiver of unusual situation, the system is an ideal to reduce the risk of human error and suitable for the prevention and treatment of all stages of pressure ulcers.

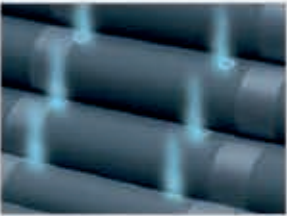

Havalandırılmalı Düşük Hava Kaybı Hücreleri Hastayı rahat ettirmek için nemi engeller. Ventilated LowAir-Loss Cells Wicks moisture away to keep the patient comfortable.



CPR Valfi Acil durumlar için yatağı hızla indirir. CPR Valve Quickly deflate the mattress for emergencies.



Döngüsel Fermuar sıvı girişini azaltır ve çamaşır makinesinde temizlik için tamamen çıkarılabilir. Zipper - All - Around Cover Reduce ingress of unwanted fluid and can be completely removed for laundry.



Hücre Üstü Tasarımı ; Alt hücreler, ekstra köpük taban olmadan sistem için elektrik kesintisi durumunda temel basınç desteği görevi görür. (H8 "şiltede mevcuttur) Cell-on-cell Bladder Design The bottom cells acts as basic pressure support in case of power failure for the system without extra foam base. (available on H8" mattress)



A. Antimikrobiyal Gümüş + Naylon / PU Kılıf Düşük alev geciktirici ve anti-MRSA etkisi olan buhar geçirgen ve suya dayanıklı malzemeden yapılmıştır. **B. Naylon / PU Kılıf (Opsiyonel)** Temel alev geciktirici seviyesiyle buhar geçirgendir ve suya dayanıklıdır.


A. Antimicrobial Silver+ Nylon / PU Cover Vapor permeable and water resistant cover with a level of low fire retardancy and anti-MRSA effect. / B. Nylon/PU Cover (Optional) Vapor permeable and water resistant with basic flame retardant level.



Bir dizi tedavi moduyla sessiz ve titreşimsiz. Basınç tahliyesi ve konfor sağlayan kullanımı kolay dijital ayarlar mevcuttur. Görsel ve sesli alarm, hastaların güvenliğini artırır. Quiet and vibration free with a range of treatment modes. Easy to use digital settings providing pressure relief and comfort. Visual and audible alarm enhances patients safety and security.




A hücrelerinin şişmesi / Inflation of A cells

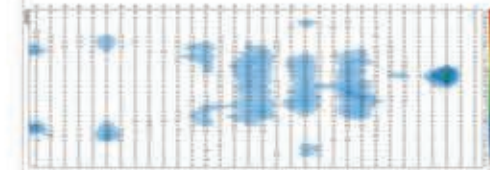

Hasta : 170 cm / 80 kg / Erkek /

B hücrelerinin şişmesi / Inflation of B cells

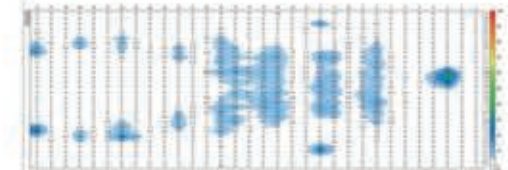

Patient : 170 cm / 80 kg / Male

		Teknik Özellikler	
POMPA	Model	Nitrocare 4	
	Boyut	29 x 18,5 x 12.6 cm	
	Ağırlık	2.2 kg	
	Kullanılan Malzeme	Alev geciktirici ABS	
	Besleme Voltajı	AC 220 - 240V, 50Hz ; 100 - 120V, 60Hz	
	Çalışma Döngüsü	10 Dakika	
ŞİLTE			
		8" Değirtirmeli	5" + 3" Kaplamalı Yatak
	Boyut	200 x 90 x 20.3 cm	200 x 90 x 12.7 cm w / 3" yüksek köpük cebi
	Değişkenlik	1 - in - 2	1 - in - 2
	Hücre Yüksekliği	20 x 8" Hücre	17 x 5" Hücre
	Ağırlık	6.9 kg	5,9 kg
	Kılıf Malzemesi	Silver + Nylon/PU*	Silver + Nylon / PU*
	Hücre Malzemesi	Nylon / TPU	Nylon / TPU
	Maksimum Hasta Ağırlığı	200 kg	180 kg
	Alev Geciktirici Standartlar	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2

		Specifications	
PUMP	Model	Nitrocare 4	
	Dimension	29 x 18.5 x 12.6 cm	
	Weight	2.2 kg	
	Case Material	Flame retardant ABS	
	Supply Voltage	AC 220 - 240V, 50Hz ; 100 - 120V, 60Hz	
	Operating Cycle	10 min	
MATTRESS			
		8" Replacement	5" + 3" Overlay
	Dimension	200 x 90 x 20.3 cm	200 x 90 x 12.7 cm w / 3" high foam pocket
	Alternating	1 - in - 2	1 - in - 2
	Cell Height	20 x 8" cells	17 x 5" cells
	Weight	6.9 kg	5,9 kg
	Cover Material	Silver + Nylon/PU*	Silver + Nylon / PU*
	Cell Material	Nylon / TPU	Nylon / TPU
	Maximum Patinet Weight	200 kg	180 kg
Flame Retardant Standards	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2	

* Dar ebatlar (85 cm genişliğinde) da mevcuttur.

* Opsiyonel iki yönlü streç kılıf mevcuttur.

* Nitrocare 4 doğrudan mevcut bir yüzey üzerinde veya ek bir şiltenin üzerinde kullanılmalıdır.

* Narrow sizes (85 cm in width) is also available.

* Optional two-directional stretch cover is also available.

* Nitrocare 4 overlay should always be used directly on top of an existing surface or an additional foam

NA AUTO



Nitrocare Auto, basınç ülserlerinin önlenmesi ve yönetimi için etkili bir çözüm olarak tasarlanmıştır ve hemşireler için gelişmiş bakım kalitesi ve azaltılmış riskler sunar. Tescilli basınç / vücut ağırlığı algoritması, bireysel vücut kitle dağılımına ve hasta hareketine yanıt olarak otomatik basınç ayarını mümkün kılan sessiz ve titreşimsiz bir pompanın içine yerleştirilmiştir. Nitrocare Auto için, elektrik kesintileri sırasında en az birkaç saat temel destek sağlayabilen 8 "hücreli yatak dahil olmak üzere iki farklı yatak yüksekliği de mevcuttur. Sistem, bakıcılar için kullanım ve temizlik kolaylığı sağlar. Savunmasız hastalara ve sakinlere yüksek kaliteli bakım sağlamak için tasarlanmıştır.

Nitrocare Auto is designed as an effective solution for the prevention and management of pressure ulcers, offering enhanced quality of care and reduced risks for caregivers. The proprietary pressure/body-weight algorithm is embedded within a quiet and vibration-free pump, which enables automatic pressure adjustment in response to individual body mass distribution and patient movement. Two different heights of mattress are also available for Nitrocare Auto including the 8" cell-on-cell mattress which is able to provide at least a few hours of basic support during power outages. The system is intended for the delivery of high quality care to vulnerable patients an residents, whilst remaining easy-to-use for the caregivers and simple to clean and maintain.



Köpük Taban Cebi Ek köpük eklemek içindir. (H5 "şilte üzerinde mevcuttur).
Foam Base Pocket For inserting additional foam. (Available on H5" mattress)



CPR Valfi Acil durumlar için yatağı hızla indirir.
CPR Valve Quickly deflate the mattress for emergencies.




Döngüsel Fermuar sıvı girişini azaltır ve çamaşır makinesinde temizlik için tamamen çıkarılabilir.
Zipper - All - Around Cover
Reduce ingress of unwanted fluid and can be completely removed for laundry.



Hücre Üstü Tasarımı ; Alt hücreler, ekstra köpük taban olmadan sistem için elektrik kesintisi durumunda temel basınç desteği görevi görür. (H8 "şilte de mevcuttur)
Cell-on-cell Bladder Design The bottom cells acts as basic pressure support in case of power failure for the system without extra foam base. (available on H8" mattress)




A. Antimikrobiyal Gümüş + Naylon / PU Kılıf Düşük alev geciktirici ve anti-MRSA etkisi olan buhar geçirgen ve suya dayanıklı malzemeden yapılmıştır. B. Naylon / PU Kılıf (Opsiyonel) Temel alev geciktirici seviyesiyle buhar geçirgendir ve suya dayanıklıdır.
A. Antimicrobial Silver+ Nylon / PU Cover Vapor permeable and water resistant cover with a level of low fire retardancy and anti-MRSA effect. / B. Nylon/PU Cover (Optional) Vapor permeable and water resistant with basic flame retardant level.

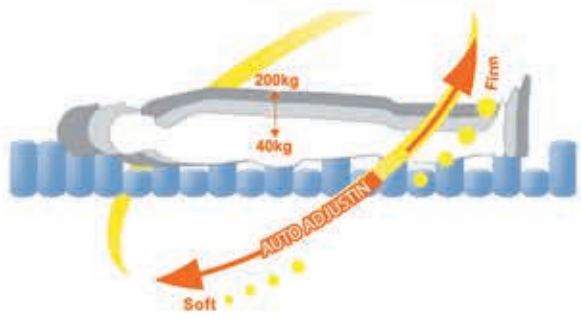

Hastanın ağırlığına göre otomatik olarak ayarlanır, bakıcının yükünü azaltır. Cell-on-cell yatak, elektrik kesintisi sırasında saatlerce destek sağlar.Farklı hemşirelik gereksinimleri için çok yönlü terapi modları mevcuttur. Kanıtlanmış anti-MRSA etkinliği Silver ve Kılıfta, çapraz enfeksiyonun kontrolüne yardımcı olur. Automatically adjusts to the patients weight, saves the caregiver's loading. Cell-on-cell mattress provide hours of support during power outage. Versatile therapy modes for different nursing requirements. Proven anti-MRSA activity Silver+ cover helps with control of cross infection.




A hücrelerinin şişmesi / Inflation of A cells

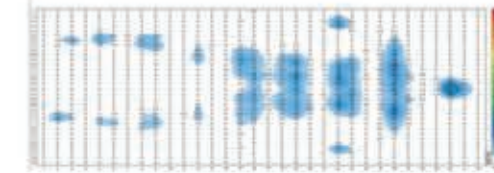

Hasta : 170 cm / 80 kg / Erkek /

B hücrelerinin şişmesi / Inflation of B cells

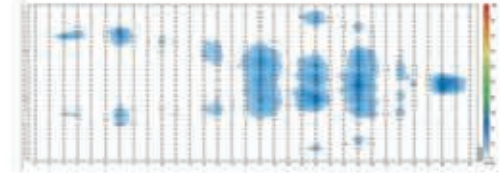

Patient : 170 cm / 80 kg / Male

		Teknik Özellikler	
POMPA	Model	Nitrocare Auto	
	Boyut	29 x 18.5 x 12.6 cm	
	Ağırlık	2.2 kg	
	Kullanılan Malzeme	Alev geciktirici ABS	
	Besleme Voltajı	AC 220 - 240V, 50Hz ; 100 - 120V, 60Hz	
ŞİLTE	Çalışma Döngüsü	9,6 Dakika	
		8" Değiştirmeli	5" + 3" Kaplamalı Yatak
	Boyut	200 x 90 x 20.3 cm	200 x 90 x 12.7 cm w / 3" yüksek köpük cebi
	Değişkenlik	1 - in - 2	1 - in - 2
	Hücre Yüksekliği	20 x 8" Hücre	17 x 5" Hücre
	Ağırlık	6.9 kg	5,6 kg
	Kılıf Malzemesi	Silver + Nylon/PU*	Silver + Nylon / PU*
	Hücre Malzemesi	Nylon / PU	Nylon / PU
	Maksimum Hasta Ağırlığı	200 kg	180 kg
	Alev Geciktirici Standartlar	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2

		Specifications	
PUMP	Model	Nitrocare Auto	
	Dimension	29 x 18.5 x 12.6 cm	
	Weight	2.2 kg	
	Case Material	Flame retardant ABS	
	Supply Voltage	AC 220 - 240V, 50Hz ; 100 - 120V, 60Hz	
MATTRESS	Operating Cycle	9,6 min	
		8" Replacement	5" + 3" Overlay
	Dimension	200 x 90 x 20.3 cm	200 x 90 x 12.7 cm w / 3" high foam pocket
	Alternating	1 - in - 2	1 - in - 2
	Cell Height	20 x 8" cells	17 x 5" cells
	Weight	6.9 kg	5,6 kg
	Cover Material	Silver + Nylon/PU*	Silver + Nylon / PU*
	Cell Material	Nylon / PU	Nylon / PU
	Maximum Patient Weight	200 kg	180 kg
	Flame Retardant Standards	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2

* Dar ebatlar (85 cm genişliğinde) da mevcuttur.

* Opsiyonel iki yönlü streç kılıf mevcuttur.

* Nitrocare 4 doğrudan mevcut bir yüzey üzerinde veya ek bir şiltenin üzerinde kullanılmalıdır.

* Narrow sizes (85 cm in width) is also available.

* Optional two-directional stretch cover is also available.

* Nitrocare Auto overlay should always be used directly on top of an existing surface or an additional foam.



Paslanmaz Medikal Ekipmanları

STAINLESS STEEL MEDICAL EQUIPMENT

STSS-1001

CERRAHİ ALET YIKAMA EVİYESİ
SURGICAL INSTRUMENT WASH SINK



1-2 veya 3 eviyeli olarak üretilebilir
Can be produced with 1-2 or 3 sink

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçülerde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1003

ÇALIŞMA MASASI
WORKING TABLE



Sabit ya da tekerlekli imal edilebilir.
Can be produce fixed or with wheels

Tek veya çift katlı imal edilebilir.
Single or Double shelf can be possible

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1002

ÇALIŞMA MASASI (Dolaplı - Çekmeceli)
WORKING TABLE (With cabinet and drawers)



Masada 4 adet çekmece bulunmaktadır.
4 drawers is included

Rafli Sürgü kapak dolaplı
Cabinet with sheelf and sliding door

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1004

ALET BOHÇALAMA MASASI
MATERIAL PACKING TABLE



Üst Çalışma tablası kenarları 4 cm bariyerlidir
Upper table corners are having 4 cm barriers

Ön kısımda 1 adet çekmece bulunur
Front part have 1 drawer

Alt kısmında malzeme rafı mevcuttur.
There is a material shelf at the bottom

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1005

KAPALI TRANSFER ARABASI
CLOSED TRANSFER TROLLEY



Sterilizasyon merkezlerinde malzeme taşımak için tasarlanmıştır
Designed to carry for materials in sterilization centers

Konteynerlerin veya diğer malzemelerin taşınması için uygundur
Suitable for transporting containers or other materials

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1007

ALET MASASI
INSTRUMENT TABLE



İki Raflıdır
With 2 shelves

Yan tarafında itme kulbu mevcuttur
Trolley sides have push handles

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1006

TEL RAF
WIRE SHELF



Portatif özelliktedir.
Portable

Raf aralıkları ayarlanmaktadır.
Shelf gaps are adjustable

Raflar ızgaralı özelliktedir.
The shelves have a grid feature.

Üç, dört ve beş katlı olarak imal edilir.
It is manufactured as 3-4 and 5 floors

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1008

TEL RAF
WIRE SHELF



Portatif özelliktedir.
Portable

Raf aralıkları ayarlanabilmektedir.
Shelf gaps are adjustable

Üç, dört ve beş katlı olarak imal edilir.
It is manufactured as 3-4 and 5 floors

Raf sistemi hareketlidir
Shelf system are movable

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1009

PASLANMAZ DÜZ RAF
STAINLESS STEEL FLAT SHELF



Raflar düz tablalı yada delikli olarak imal edilmektedir.
Shelf can be manufactured flat top or perforated

Üç, dört ve beş katlı olarak imal edilir.
It is manufactured as 3-4 and 5 floors

Raf sistemi hareketlidir.
Shelf system are movable

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1011

DOKTOR EL YIKAMA EVYESİ (Dizden Kumandalı)
DOCTOR HAND WASH SINK (KNEE OPERATED)



Tekli, ikili veya üçlü el yıkama evyesi olarak imal edilmektedir.
It is manufactured as a single, double or triple hand washing sink.

Su kumanda sistemi dizden kontrollüdür.
Water control system is controlled from the knee operated

Şabunluk, dirsek kumandalı yada fotosellidir.
Soap dispenser is elbow controlled or photocell.

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1010

AMELİYATHANE DOLABI
OPERATING ROOM CABINET



Üst kısmında iki cam kapaklı üç gözlü dolap mevcuttur.
There is a three-compartment cabinet with two glass doors at the top.

Alt kısımda iki adet çekmece ve iki kapaklı dolap mevcuttur.
There are two drawers and a two-door cabinet at the bottom.

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1012

AMELİYATHANE DOLABI
OPERATING ROOM CABINET WITH GLASS DOOR



İki Adet kilitlenebilir boy kapaklıdır.
There is 2 lockable full glass door

Malzeme koyabilmek için 4 raflıdır.
There is 4 shelf for material storage

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1013

AY MASA
FALCATE TABLE



Yarım ay şeklinde çalışma alanı vardır.
It has a half-moon shaped working area.

İki katlı ve altı ayaklıdır.
With 2 shelf and 6 wheels.

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1015

HİDROLİK MAYO MASA
HYDRAULIC CONTROLLED MAYO TABLE



Yükseklik ayarı hidrolik sistemle yapılmaktadır.
Height adjustable can be made by hydraulic system

Üst tabla 1,5 mm paslanmaz çelik tabladan yapılmaktadır.
Upper table is made from 1,5 mm stainless steel material

3 Adet kilitlenebilir tekerlek mevcuttur
There is 3 pcs lockable wheel

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1014

PANSUMAN ARABASI
DRESSING TROLLEY



Pansuman yapmaya uygun olarak tasarlanmıştır.
It is manufactured as a single, double or triple hand washing sink.

Üst table üzerinde serum şişe tutucuları mevcuttur.
Water control system is controlled from the knee operated

5 adet çekmeceye sahiptir.
Soap dispenser is elbow controlled or photocell.

Yanında sökülebilir çöp kovası mevcuttur.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İçe geçebilen çanak pansuman işlemlerinde kullanılabilir.
Implicable bowl can be used for dressing operation

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

STSS-1016

ALÇI MASASI
PLASTER TABLE



Alçı hazırlamak için özel haznesi vardır.
It has a special chamber for preparing plaster.

Üç adet çekmece vardır.
There is 3 pcs drawer

Bir adet alçı veya malzeme koyma dolabı vardır.
There is 1 pc plaster and material cabinet.

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1017

KİRLİ - TEMİZ TAŞIMA ARABASI
CLEAN - DIRTY TROLLEY



Farklı renklerde 2 adet bez torba mevcuttur
2 cloth bags available in different colors

2'si kilitlenebilir 4 adet tekerlek mevcuttur
There are 4 castors, 2 of which are lockable.

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1019

TERLİK RAFI
SLIPPER SHELF



20 Çift terlik kapasitelidir.
20 pair slipper capacity

Hareketli veya sabit imal edilebilmektedir.
Can be made fixed or with wheels.

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1018

PORT ÇANAK
SURGICAL BOWL



Tekli veya ikili olarak üretilmektedir.
It is manufactured as single or double bowl

2'si kilitlenebilir 4 adet tekerlek mevcuttur
There are 4 castors, 2 of which are lockable.

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension

STSS-1020

BASAMAK (ESKABO)
STEP (ESCABO)



Tekli veya 2 basamaklı imal edilebilmektedir.
Can be made single or double

AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Made of AISI 304 Quality stainless steel material

İstenilen ölçüde imal edilebilir.
It can be manufactured according to project or desired dimension



Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENT

KMT-1270-T

HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHLARI
MOBILE WORKBENCHES



MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)		
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT
KMT/12070-T	Hareketli Çalışma Tezgahı, Taban Rafli Mobile Workbench, W/Bottom Shelf	1200	700	850
KMT/14070-T		1400		
KMT/16070-T		1600		

KA-TT/122

TEPSİ TAŞIMA ARABALARI
TRAY TROLLEYS



MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			KAPASİTE (Tepsi) CAPACITY (Tray)
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT	
KA-TT/122	Tepsi Taşıma Arabası Tray Trolley	1220	570	1600	45

KDD-120

DUVAR DOLABI
WALL CABINET



MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)		
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT
KDD/120	Duvar Dolabı Wall Cabinet	1200	400	600
KDD/140		1400		
KDD/160		1600		

KAR-S/3

SERVİS & BULAŞIK TOPLAMA ARABALARI
SERVICE & DIRTY DISHES TROLLEYS



MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)		
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT
KAR-S/3	Servis Arabası Service Trolley	900	600	850

KSSB-C-714

SALAD BARLAR
SALAD BARS



Paslanmaz çelik gövde.
Stainless steel body.

Opsiyonel olarak granit üst tabla ve ahşap gövdeli olarak imal edilmektedir.
Granite worktop or wooden body can be optional.

Nötr ve soğutmalı modelleri mevcuttur.
Neutral and cold models are available.

Aydınlatma sistemli.
Lighting system.

MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			ISI KAPASİTESİ (kW) HEAT CAPACITY (kW)	KAPASİTE (kg/sefer) CAPACITY (kg/cycle)	ELEKTRİK GİRİŞİ (V) ELECTRIC INPUT (V)
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT			
KSSB-C/714	Set Üstü Soğutuculu Salad Bar, Camlı Set Top Refrigerated Salad Bar, Glass	1600	350	500	0,20	7*GN 1/4	220 ~ 240 V, 50 Hz, 1 AC
KSSB-C/914		2100	350	500	0,20	9*GN 1/4	

KDCE-60

DEVİRİLİR ÇEKMECELİ EKMEK DOLABI
BREAD CUPBOARD, W/TILTING DRAWER



MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)		
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT
KDCE/60	Devrilir Çekmeceli Ekmek Dolabı Bread Cupboard, W/Tilting Drawer	1900	600	850
KDCE/80			800	

KK-G/2010

KUZİNE
RANGE



Tamamen 18/8 AISI paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Entries are manufactured entirely from 18/8 AISI stainless steel.

Alev emniyet sistemlidir.
Flame safety system.

1 m² den başlayan sabit ölçülerde imal edilebileceği gibi, seri ölçülerde de imal edilebilmektedir.
Can be manufactured in fixed sizes of 1 m² starting from teh serial sizes can also be manufactured.

Sağlam konstrüksiyonu ile ergonomik ve emniyetli kullanım sağlamaktadır.
Sturdy construction is designed to provide ergonomic and safe use.

MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			ISI KAPASİTESİ (kW) HEAT CAPACITY (kW)	GAZ GİRİŞİ GAS INPUT	GAZ SARFIYATI / GAS CONSUMPTION	
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT			LPG (kg/h)	NG (M ³ /h)
KK-G/2010	Kuzine, Fırınlı, Gazlı Range, W/Oven, Gas	2000	1000	850	55,50	1/2"	4,38	5,87

KKF-E/40

KONVEKSİYONLU FIRIN
CONVECTION OVEN



18/8 AISI paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.
18/8 AISI stainless steel housing.

Temperli çift camlı kapısı ve iç aydınlatması ile pişirme işlemi izlenebilmektedir.
Tempered double-glass doors and interior lighting with the cooking process can be traced.

Kapak emniyet switch sistemi.
Door safety switch.

Gazlı ve elektrikli modelleri mevcuttur.
Gas and electric models are available.

Gazlı modelleri EN 203-1 standardına, elektrikli modelleri EN 60335 standardına uygun imal edilmektedir.
Gas models are manufactured according to the EN 203-1 standard, electric models are manufactured according to the EN 60335.

Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.
Sturdy construction and safe operation.

Uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
Long lasting, easy to clean and hygienic.

MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			ISI KAPASİTESİ (kW) HEAT CAPACITY (kW)	KAPASİTE CAPACITY	ELEKTRİK GİRİŞİ (V) ELECTRIC INPUT (V)
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT			
KKF-E/40	Konveksiyonlu, Manuel Convection Oven, Manuel	1280	1060	1600	49,80	40 GN 1/1-40 20 GN 2/1-40	380 ~ 415 V, 50 Hz, 3 AC

KFR-E/788

FRİTÖZ
FRYER



Tamamen 18/8 AISI paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Entries are manufactured entirely from 18/8 AISI stainless steel.

Gazlı ve elektrikli modelleri mevcuttur.
Gas and electric models are available.

Tekli veya ikili paslanmaz çelik sepetli modelleri mevcuttur.
It has models as single basket or double baskets.

Tek veya ikili pişirme haznesi mevcut olup, farklı ölçülerde imal edilebilmektedir.
Available in single or dual cooking chamber, can be manufactured in different sizes.

Sağlam konstrüksiyonu ile ergonomik ve emniyetli kullanım sağlamaktadır.
Sturdy construction is designed to provide ergonomic and safe use.

Uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
Long lasting, easy to clean and hygienic.

MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			ISI KAPASİTESİ (kW) HEAT CAPACITY (kW)	KAPASİTE (lt) CAPACITY (lt)	ELEKTRİK GİRİŞİ (V) ELECTRIC INPUT (V)
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT			
KFR-E/788	Fritöz, Dolaplı Fryer, W/Cupboard	2*18	700	850	26,00	2*18	380 ~ 415 V, 50 Hz, 3 AC

KKTSM-3/10

OTOMATİK TULUMBA & KÖFTE ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ
AUTOMATIC SEMOLINA & MEATBALL SHAPER



Hijyenik, temizlemesi ve kullanımı kolay dahili bileyici.
Hygienic, easy to clean and use blade shaper.

Alüminyum gövde
Aluminium body.

Ayarlanabilir kesme kalınlığı.
Adjustable slice thickness.

MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			ISI KAPASİTESİ (kW) HEAT CAPACITY (kW)	KAPASİTE (kg/sefer) CAPACITY (kg/cycle)	ELEKTRİK GİRİŞİ (V) ELECTRIC INPUT (V)
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT			
KKTSM-3/10	Otomatik Tulumba & Köfte Şekillendirme Makinesi Automatic Semolina & Meatball Shaper	470	1530	1030	0,37	10	380 ~ 415 V, 50 Hz, 3 AC

KPM-2/40

MİKSER
PLANETARY MIXER



Güvenlik sensörü
Safety switch

Paslanmaz çelik kazan.
Stainless steel bowl.

Çırpma teli, çırpma paleti ve hamur baltası ile birlikte.
With whisk, mixing paddle with dough hook.

MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			ISI KAPASİTESİ (kW) HEAT CAPACITY (kW)	KAPASİTE (lt) CAPACITY (lt)	ELEKTRİK GİRİŞİ (V) ELECTRIC INPUT (V)
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT			
KPM-2/40	Mikser, Çift Devirli Planetary Mixer, Double Speed	650	900	1200	1,10 - 1,70	40	380 ~ 415 V, 50 Hz, 3 AC

KBYM/1000

GİYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ
HOOD TYPE DISHWASHER



Dış kaplama, yıkama deposu, kapağı ve boilerin tamamı paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
External finish, washing tank, its cover and boiler are entirely made of stainless steel material.

TS EN 60335-2-5 standardına uygun olarak imal edilmektedir.
It complies the standard of TS EN 60335-2-5.

Elektromekanik ve dijital kontrol sistemli modeller.
Electromechanical and digital control panel.

MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			ISI KAPASİTESİ (kW) HEAT CAPACITY (kW)	KAPASİTE (Tabak/Saat) CAPACITY (Plate/Hour)	ELEKTRİK GİRİŞİ (V) ELECTRIC INPUT (V)
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT			
KBYM/1000	Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Hood Type Dishwasher	780	650	1450 / 1900	16,00	1000	380 ~ 415 V, 50 Hz, 3 AC

KBYM/2000-K

KONVEYÖRLÜ BULASIK YIKAMA MAKİNESİ
CONVEYOR TYPE DISHWASHERS



Dış kaplama, yıkama depoları, boyleri, konveyör kızaklarının tamamı paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
Outer finish, washing tanks, boiler, conveyor slides and power panel are entire/y made of stainless steel material.

Makinenin çalışması ve su regülasyonu tamamen otomatiktir.
Operation and water regulation of the machine is fully automatic.

Yıkama ekipmanları paslanmaz çelik malzemedir.
Washing equipment is made of stainless steel material.

Ön yıkama, ana yıkama, durulama ve kurutma işlemlerini yapmaktadır.
Pre-wash, main wash, reinse and dryer are process of diswasher.

TS EN 60335-2-5 standardına uygun imal edilmektedir.
It complies the standard of TS EN 60335-2-5.

MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			ISI KAPASİTESİ (kW) HEAT CAPACITY (kW)	KAPASİTE (Tabak/Saat) CAPACITY (Plate/Hour)	ELEKTRİK GİRİŞİ (V) ELECTRIC INPUT (V)
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT			
KBYM/2000-K	Kurutma Tüneli Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi Conveyor Type Dishwasher W/Drying Tunnel	2940	680	1910	48,85	2000	380 ~ 415 V, 50 Hz, 3 AC

KBEN-E/190

SICAK YEMEK SERVİS ÜNİTELERİ (BENMARİ)
BAIN-MARIES



Tamamı paslanmaz çelik sacdan imal edilmektedir.
They are entirely made of stainless steel sheets.

Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.
Sturdy construction and safe operation.

Uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
Long lasting, easy to clean and hygienic.

MODEL / MODEL	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	EBATLAR(mm) / DIMENSIONS (mm)			ISI KAPASİTESİ (kW) HEAT CAPACITY (kW)	KAPASİTE CAPACITY	ELEKTRİK GİRİŞİ (V) ELECTRIC INPUT (V)
		GENİŞLİK / WIDTH	DERİNLİK / DEPTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT			
KBEN-E/190	Sıcak Yemek Servis Ünitesi (Benmarî) Bain - Maries	1900	700	900/1350	2,50	3 Sıcak / 3 Hot	220 ~ 240 V, 50 Hz, 1 AC

KAR-SY

SICAK YEMEK DAĞITIM ARABASI
BAIN MARIE TROLLEY



SICAK YEMEK DAĞITIM ARABASI BAIN MARIE TROLLEY				
MODEL MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	EBATLAR (mm) DIMENSION (mm)		
		GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
KAR-SY	Sıcak Yemek Dağıtım Arabası Bain Marie Trolley	1100	750	900

KAR-ML

MALZEME TAŞIMA ARABASI
MATERIAL CARRYING TROLLEY



MALZEME TAŞIMA ARABASI MATERIAL CARRYING TROLLEY				
MODEL MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	EBATLAR (mm) DIMENSION (mm)		
		GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
KAR-ML	Malzeme Taşıma Arabası Material Carrying Trolley	800	600	700




Duvar Koruma Bantları

WALL PROTECTION BAND


CG-50 B

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

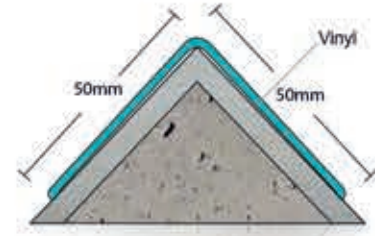


CG-76

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

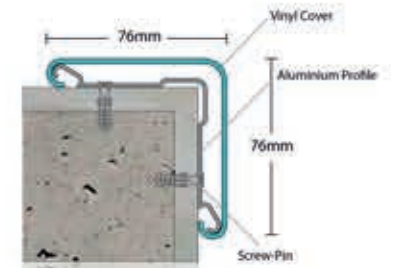


CG-50

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

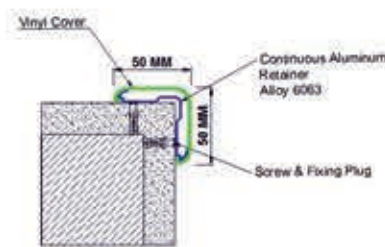


DC-150

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

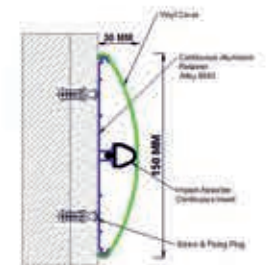


DC-200

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

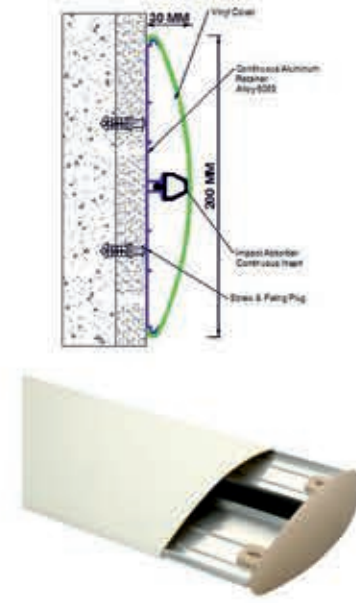


WG-42-2

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

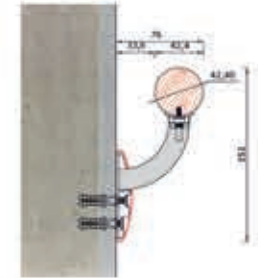



WG-42-1

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

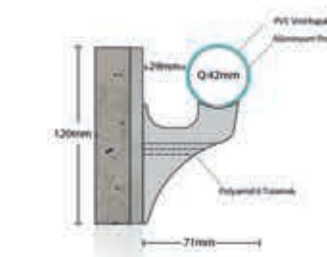


WG-42-3

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

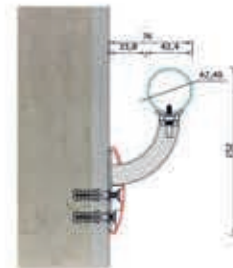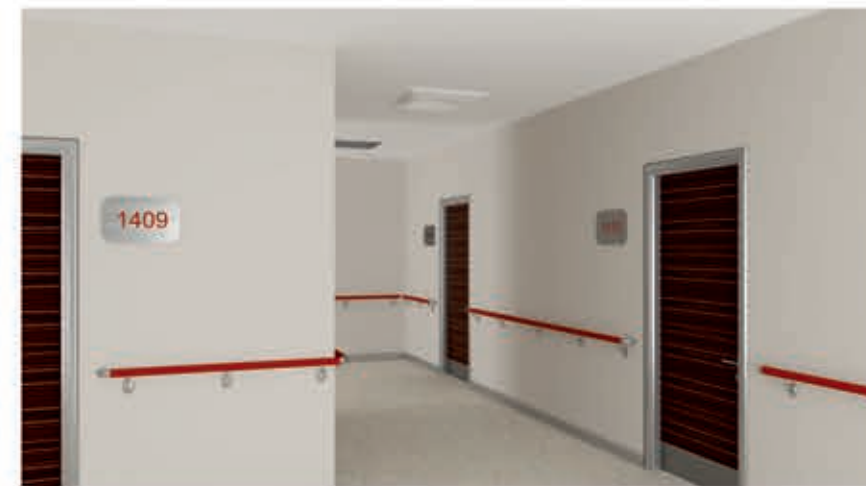


WG-42-4

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

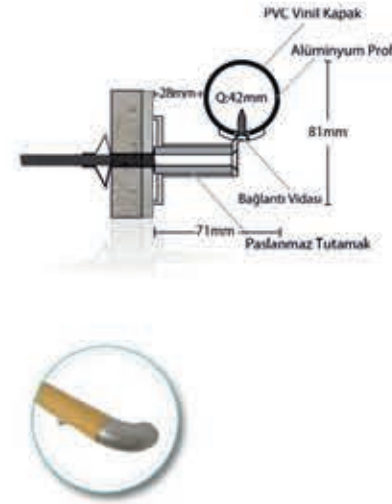


WG-146

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

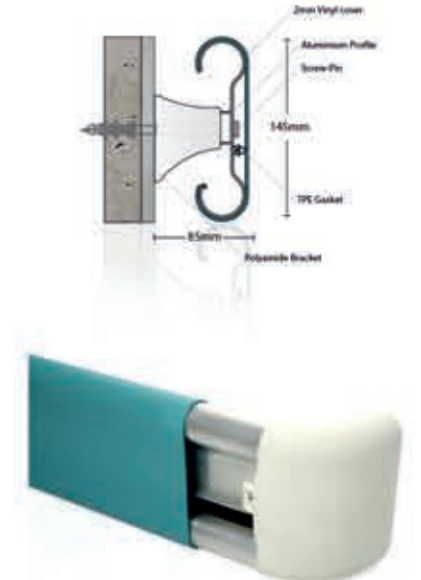


WG-50

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

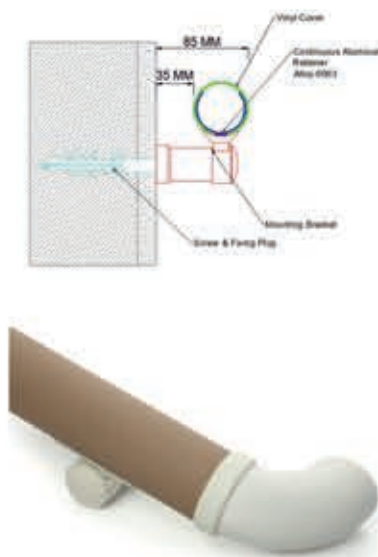


WG-145

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

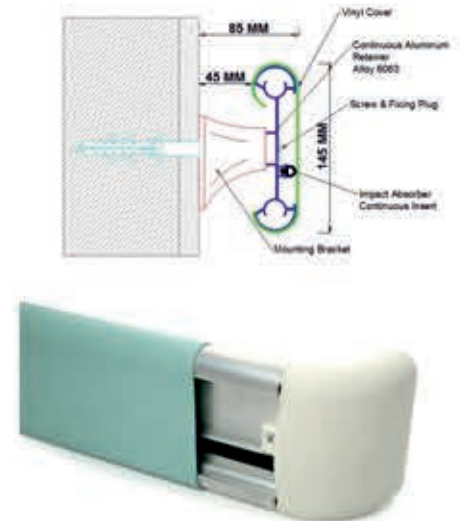


WG-152-1

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

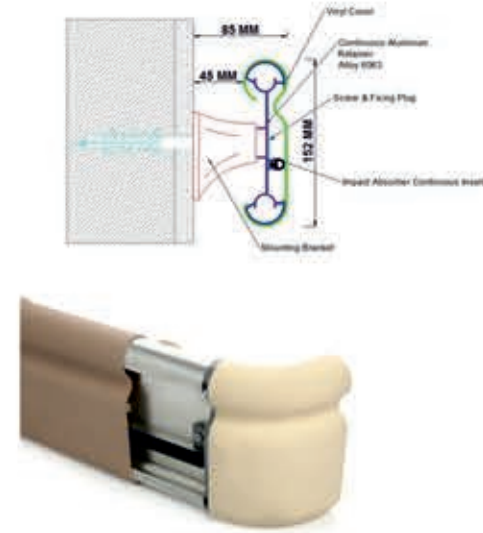


WG-200

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

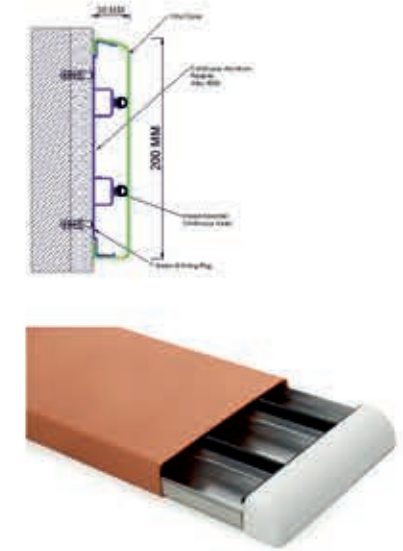



WG-152-2

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

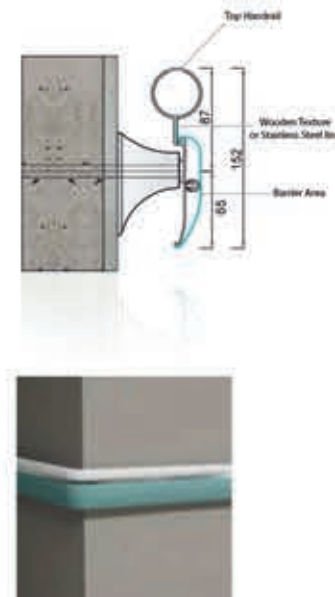


WG-201

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

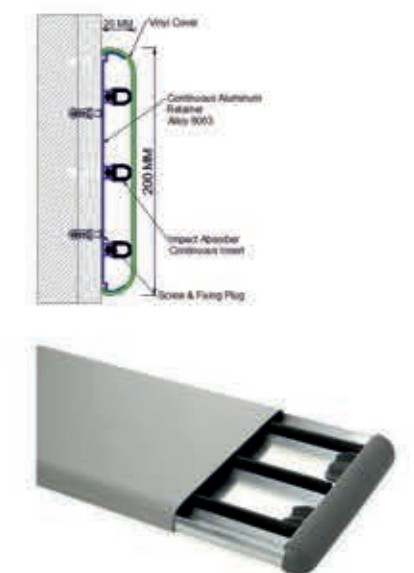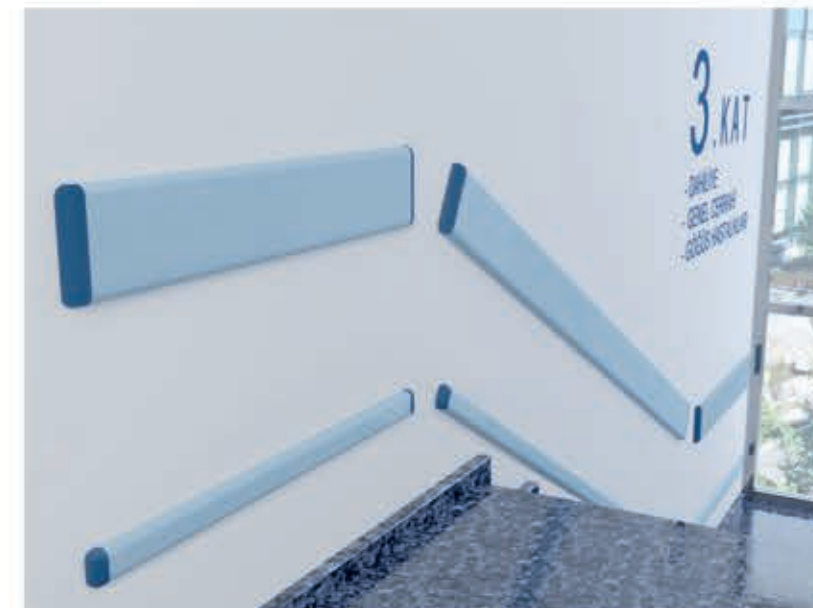


CR-50

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

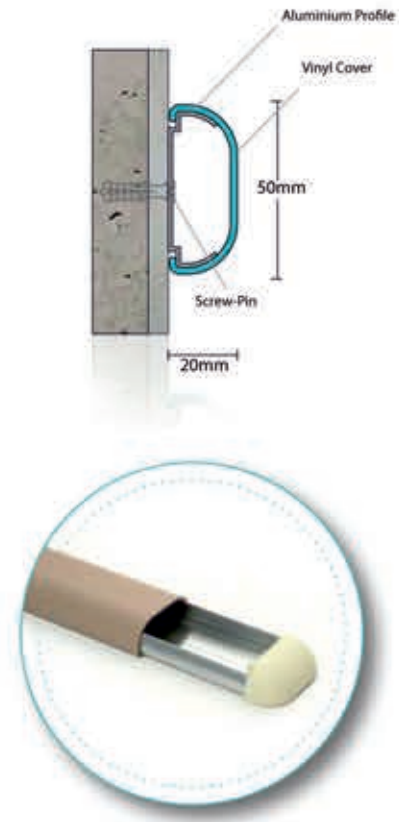



RG-100

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

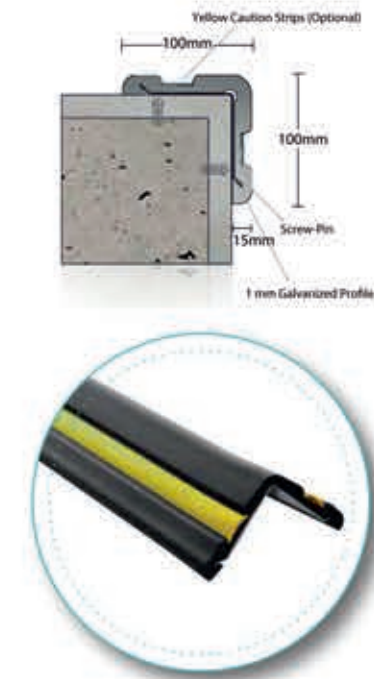



WG-1004 SS

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

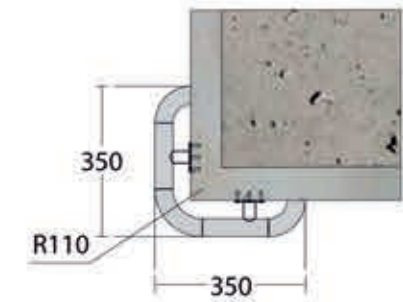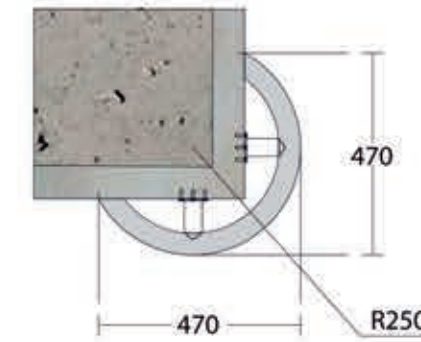

WG-200 SS

DUVAR KORUMA BANTLARI
WALL PROTECTION BAND

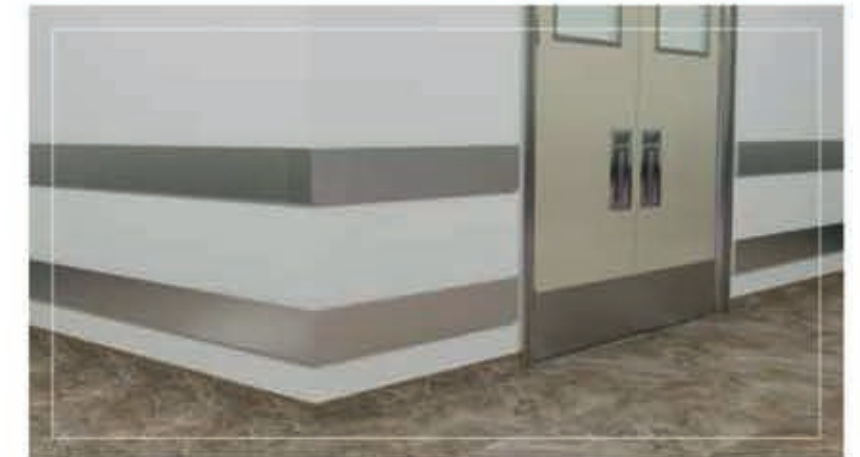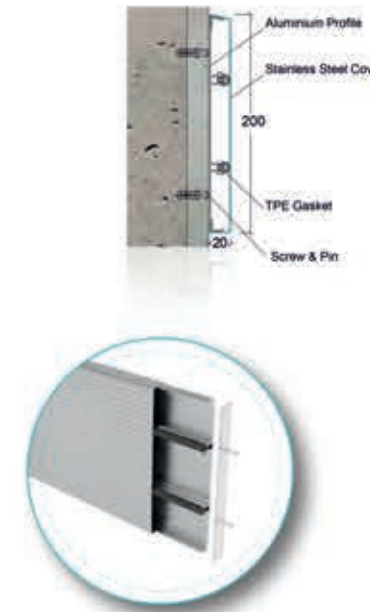



NITROCARE

Pvc Zemin ve Halı Çözümleri
PVC FLOORING AND CARPET SOLUTIONS

PVC ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

PVC FLOOR SOLUTIONS




PVC ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

PVC FLOOR SOLUTIONS



PVC ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

PVC FLOOR SOLUTIONS

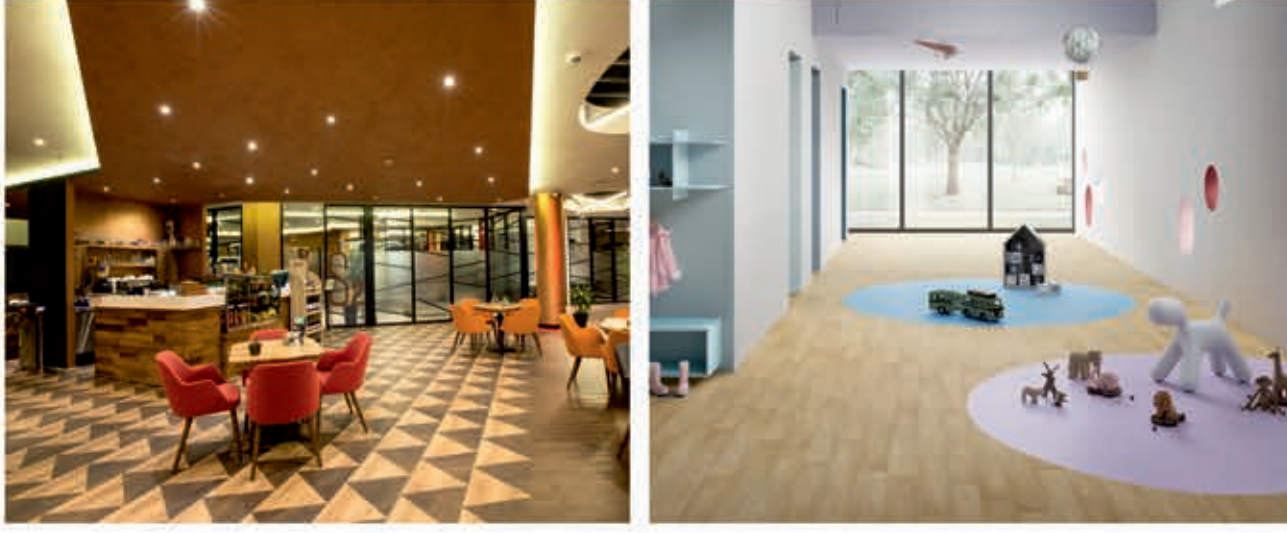

TUVALET KABİNLERİ

TOILET CUBICLES



SOYUNMA DOLAPLARI

LOCKERS









PROJELER
PROJECTS



PROJELER
PROJECTS





PROJELER
PROJECTS



PROJELER
PROJECTS






PROJELER
PROJECTS





PROJELER
PROJECTS



PROJELER
PROJECTS

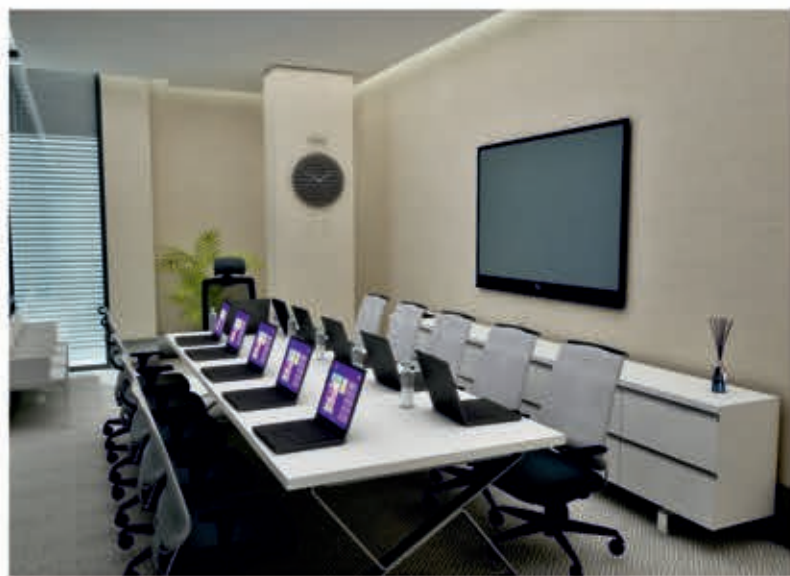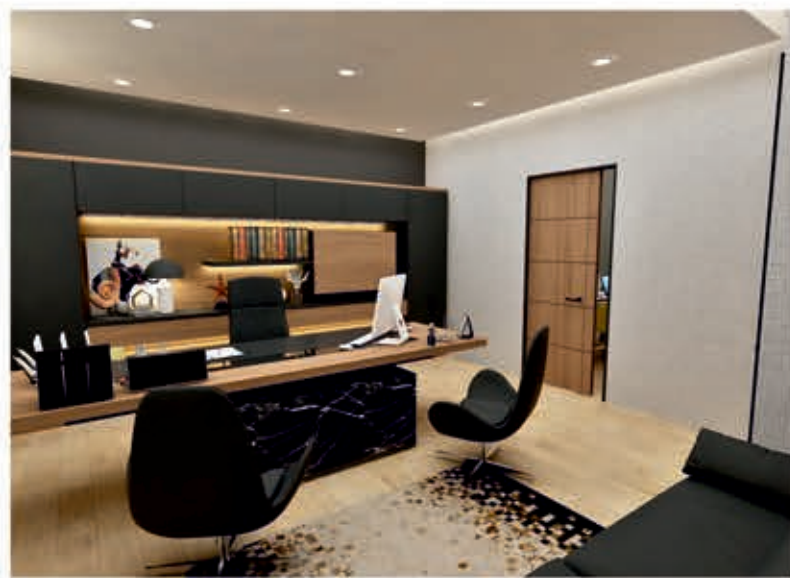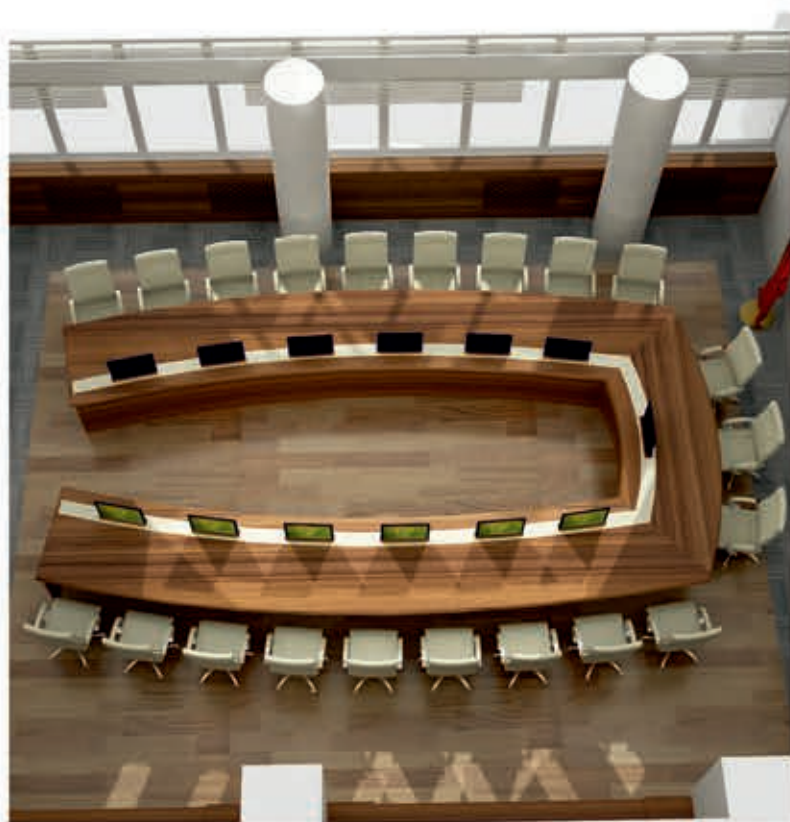

PROJELER
PROJECTS

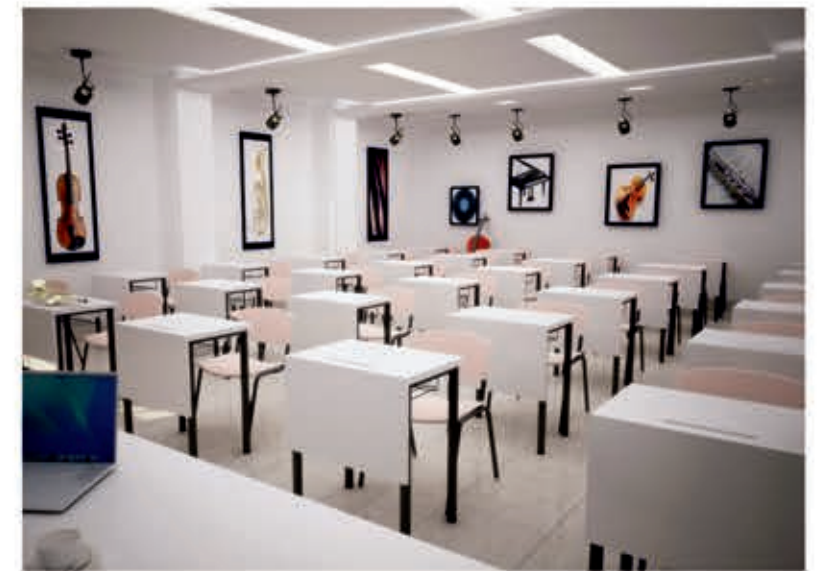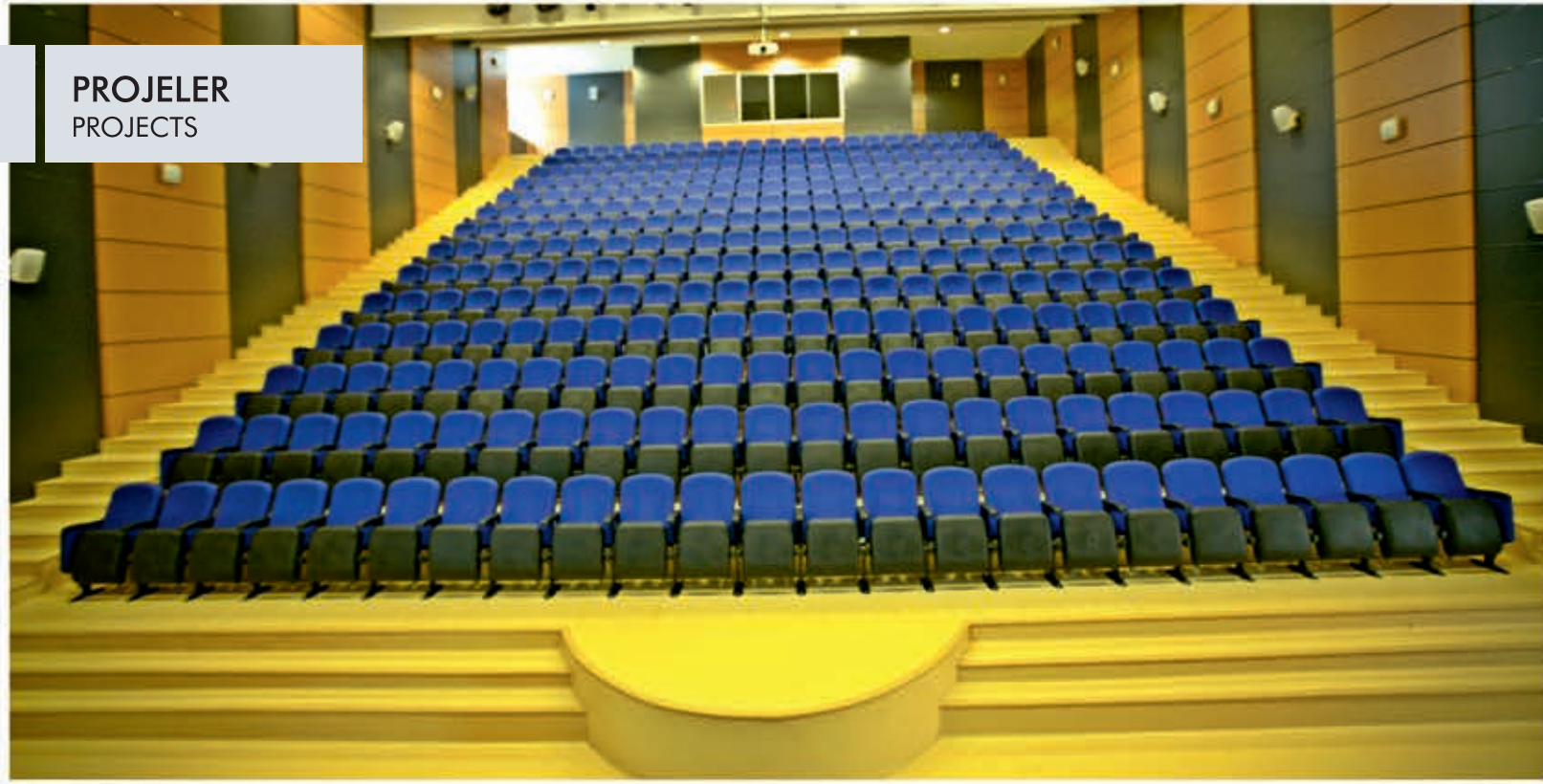

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP CITY HOSPITAL PROJECTS TURKEY

NITROCARE

OFİSLİNE

GÖKLER
GROUP



BURSA ŞEHİR HASTANESİ
YATAK KAPASİTESİ 1355

BURSA CITY HOSPİTAL
BED CAPACITY 1355

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ
YATAK KAPASİTESİ 486

TEKİRDAĞ CITY HOSPİTAL
BED CAPACITY 486

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP CITY HOSPITAL PROJECTS TURKEY



OFİSLİNE



ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ
YATAK KAPASİTESİ 1038

ELAZIĞ CITY HOSPİTAL
BED CAPACITY 1038



ANKARA BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
YATAK KAPASİTESİ 3810

ANKARA BILKENT INTEGRATED HEALTH CAMPUS
BED CAPACITY 3810

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP CITY HOSPITAL PROJECTS TURKEY

NITROCARE®  OFİSLİNE



YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ YOZGAT CITY HOSPITAL
YATAK KAPASİTESİ 475 BED CAPACITY 475



ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ ISPARTA CITY HOSPITAL
YATAK KAPASİTESİ 755 BED CAPACITY 755



ADANA ŞEHİR HASTANESİ ADANA CITY HOSPITAL
YATAK KAPASİTESİ 1550 BED CAPACITY 1550



MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MERSİN CITY HOSPITAL
YATAK KAPASİTESİ 1253 BED CAPACITY 1253



ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ ESKİŞEHİR CITY HOSPITAL
YATAK KAPASİTESİ 1081 BED CAPACITY 1081

REFERANSLAR REFERENCES

ADANA AΠΙΚO HASTANESİ
ADANA AΠIKO ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
ADANA AΠIKO ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
ADANA BAŞKENT ÜN. ADANA U. VE A. MERKEZİ
ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ
ADANA ÇUKUROAVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ADANA GÜZELYALI HASTANESİ
ADANA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ADANA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRTERLİĞİ
ADANA NUMUNE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ADANA ÖZEL ALGOMED HASTANESİ
ADANA ÖZEL ALGOMED HASTANESİ
ADANA ÖZEL GÜZELYALI HASTANESİ
ADANA ÖZEL SEZAR HOSPİTAL
ADANA ÖZEL YAŞAM TIP MERKEZİ
ADANA ŞEHİR HASTANESİ
ADIYAMAN ÇELİKİHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
ADIYAMAN GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ
ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ
ADIYAMAN ÖZEL GÖZDE HASTANESİ
ADIYAMAN ÖZEL SEVGİ TIP MERKEZİ
AFYON EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
AFYON HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
AFYON KOÇATEPE ÜNİV.REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞK.
AFYON ÖZEL PARK HASTANESİ
AFYON ÖZEL KIRMIZI PARK HASTANESİ
AFYON ÖZEL PARK HASTANESİ
AFYON ZÜBEYDE HANIM DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ
AFYONKARAHİSAR İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AFYONKARAHİSAR KOÇATEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
AĞRI İ2.MKNZ.P.TUG.K.LIĞI / ERZURUM
AĞRI ASKER HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI / ERZURUM
AĞRI DEVLET HASTANESİ
AĞRI DIYADİN DEVLET HASTANESİ
AĞRI DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ
AĞRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AĞRI PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
AĞRI TUTAK DEVLET HASTANESİ
AKSARAY DEVLET HASTANESİ
AKSARAY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ
ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ANKARA BAŞBAKANLIĞI MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
ANKARA BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
ANKARA DELTA TIP MERKEZİ
ANKARA DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA DR. NAFİ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ
ANKARA DR.ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA ETİ MADEN İŞLETMELERİ
ANKARA ETİMESGUT ASKERİ HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI LEVAZİM MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA FATİH ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
ANKARA FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
ANKARA GÖLBAŞI HASYAK DEVLET HASTANESİ
ANKARA GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
ANKARA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ANKARA GÜVEN HASTANESİ
ANKARA HACETTEPE ÜNİ.VERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK MERKEZLERİ
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HASTANESİ
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ
ANKARA HAYMANA DEVLET HASTANESİ

ANKARA HC HOSPİTAL
ANKARA HF DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
ANKARA HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA İBNİSİNA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA/BURSA/İSTANBUL
ANKARA İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
ANKARA KEÇİÖREN OSMANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ANKARA LÖSEV-LÖSEMİ ÇOCUKLAR S.EĞİTİM VAKFI
ANKARA MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ
ANKARA NALLIHAN DEVLET HASTANESİ
ANKARA ONDOKUZMAYIS HASTANESİ
ANKARA ÖZEL 19 MAYIS HASTANESİ
ANKARA ÖZEL ACİBADEM HASTANELERİ
ANKARA ÖZEL ÇAĞ HASTANESİ
ANKARA ÖZEL DENTALİS DİŞ KLİNİĞİ
ANKARA ÖZEL ETİMED HASTANESİ
ANKARA ÖZEL GÜVEN HASTANESİ
ANKARA ÖZEL İNCEK FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
ANKARA ÖZEL KORU HASTANESİ
ANKARA ÖZEL MEDIGOLD CERRAHİ TIP MERKEZİ
ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ
ANKARA PROF DR. CELAL ERTUĞ ETİMESGUT DH ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA SİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ
ANKARA TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ANKARA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI İŞLETMESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HASTANESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ/ANKARA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA
ANKARA ZEKAI TAHIR BURAK KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ
ANKARA ZEL ÇAĞ HASTANESİ
ANKARA ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİ
ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANTALYA ALANYA DEVLET HASTANESİ
ANTALYA ALANYA DEVLET HASTANESİ
ANTALYA ALANYA HUZUREVİ
ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /ESKİŞEHİR
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANTALYA ELMALI DEVLET HASTANESİ
ANTALYA GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ANTALYA KARDELEN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
ANTALYA KAŞ DEVLET HASTANESİ
ANTALYA KEMER DEVLET HASTANESİ
ANTALYA KEMER DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
ANTALYA KEPEZ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA KUMLUCA DEVLET HASTANESİ
ANTALYA MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ANTALYA ÖZEL OFM HASTANESİ
ANTALYA ÖZEL OPERA YAŞAM HASTANESİ
ANTALYA ÖZEL İNEGÖL ÇAN HASTANESİ
ANTALYA SERİK DEVLET HASTANESİ
ANTALYA TÜP BEBEK MERKEZİ
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ
ARDAHAN İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ARTVIN ARHAVİ DEVLET HASTANESİ
ARTVIN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER D.BAŞK. / TRABZON
ARTVIN DEVLET HASTANESİ
ARTVIN HOPA DEVLET HASTANESİ
ARTVIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ARTVIN MURGUL İLÇE ENTEGRE HASTANESİ

ARTVIN ŞAVSAT DEVLET HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AYDIN DEVLET HASTANESİ
AYDIN DİDİM DEVLET HASTANESİ
AYDIN HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REH.MERK.MÜD.
AYDIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AYDIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AYDIN KUŞADASI DEVLET HASTANESİ
AYDIN KUŞADASI DEVLET HASTANESİ
AYDIN ÖZEL EGE LİVA HASTANESİ
BALIKESİR ASKER HASTANESİ
BALIKESİR ASTSUBAY MES.YÜK.OKUL.K.LIĞI
BALIKESİR ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
BALIKESİR AYVALIK DEVLET HASTANESİ
BALIKESİR BIGADIÇ DEVLET HASTANESİ
BALIKESİR DEVLET HASTANESİ
BALIKESİR DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ
BALIKESİR DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ
BALIKESİR İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BALIKESİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BARTIN DEVLET HASTANESİ
BARTIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
BATMAN GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ
BATMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BATMAN KOZLUK DEVLET HASTANESİ
BAYBURT İ12 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
BAYBURT DEVLET HASTANESİ
BAYBURT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ
BİNGÖL GENÇLİK MERKEZİ
BİNGÖL İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BITLİS DEVLET HASTANESİ
BITLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BITLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BOLU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU İL ÖZEL İDARESİ
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ
BURDUR BUCAK AKDENİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
BURDUR DEVLET HASTANESİ
BURDUR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BURDUR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ
BURSA ASKER HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
BURSA BİLGİ BAHÇESİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ
BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ
BURSA DEVLET HASTANESİ
BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
BURSA ESTETİCARE CERRAHI MERKEZİ
BURSA ESTETİCARE CERRAHI MERKEZİ
BURSA İL ÖZEL İDARESİ
BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ
BURSA İZNIK DEVLET HASTANESİ
BURSA İZNIK DEVLET HASTANESİ BAŞATABİPLİĞİ
BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BURSA KARACABEY DEVLET HASTANESİ
BURSA KARACABEY DEVLET HASTANESİ
BURSA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR YARDİM DERNEĞİ
BURSA MUDANYA ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
BURSA MUSTAFA KEMAL PAŞA DEVLET HASTANESİ
BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BURSA ORHANELİ DEVLET HASTANESİ
BURSA ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ
BURSA ÖZEL ARITMI HASTANESİ
BURSA ÖZEL BAHAR HASTANESİ
BURSA ÖZEL BAHAR HASTANESİ
BURSA ÖZEL ÇEKİRGE DORUK HASTANESİ
BURSA ÖZEL İNEGÖL ÇAN HASTANESİ
BURSA ÖZEL İNEGÖL ÇAN HASTANESİ
BURSA ÖZEL MEDİCABL HASTANESİ
BURSA ÖZEL MEDİ-CE HASTANESİ
BURSA ÖZEL MEDİ-CE HASTANESİ
BURSA ÖZEL ZEYTİN TIP MERKEZİ
BURSA ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BURSA ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ
ÇANAKKALE GELİBOLU ASKER HASTANESİ
ÇANAKKALE GELİBOLU DEVLET HASTANESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
ÇANAKKİLAE DEVLET HASTANESİ
ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ
ÇANKIRI ELDIVAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ÇANKIRI KUŞUNLU DEVLET AHSTANESİ
ÇANKIRI KUŞUNLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇANKIRI ŞABANÖZÜ DR. SAMİ BARAN HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇORUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ÇORUM KARGI DEVLET HASTANESİ
ÇORUM ÖZEL HASTANESİ
DENİZLİ ASKER HASTANESİ
DENİZLİ ÇİRİL DEVLET HASTANESİ
DENİZLİ DENİPOL HASTANESİ
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
DIYARBAKIR BATI GÖZ HASTANESİ
DIYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ
DIYARBAKIR ÇİNAİR ENTEGRE İLÇE HASTANESİ
DIYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
DIYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DIYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ
DIYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
DIYARBAKIR ORDUVİ
DIYARBAKIR ÖZEL FİZYO METROPOLİTAN FİZİK TEDAVİ MERKEZİ
DIYARBAKIR SİLVAN DEVLET HASTANESİ
DÜZCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
DÜZCE DEVLET HASTANESİ
DÜZCE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
EDİRNE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HAYSA DEVLET HASTANESİ
EDİRNE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞ
EDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİ
EDİRNE ÖZEL TRAKYA HASTANESİ
EDİRNE T.Ü SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ
EDİRNE UZUNKÖPRÜ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE UZUNKÖPRÜ SÜLEYBE ŞEFİK ÖZTÜRK HUZUREVİ MÜD.
ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
ELAZIĞ FIRAT ÜNİ.HASTAHANESİ / ELAZIĞ
ELAZIĞ HARPUT DEVLET HASTANESİ
ELAZIĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ELAZIĞ KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ
ELAZIĞ MADEN DEVLET HASTANESİ
ELAZIĞ MEDICAL PARK
ELAZIĞ MEDICAL PARK HASTANESİ
ELAZIĞ ÖZEL HAYAT DAMLA HASTANESİ
ELAZIĞ PALU DEVLET HASTANESİ
ELAZIĞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ
ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ
ERZİNCAN İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
ERZİNCAN İLİÇ DEVLET HASTANESİ
ERZİNCAN MENGÜZEK GAZİ DEVLET HASTANESİ
ERZİNCAN POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
ERZURUM AŞKALE DEVLET HASTANESİ
ERZURUM ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
ERZURUM BÖLGE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ERZURUM ÇAT İLÇE HASTANESİ / ERZURUM
ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ERZURUM KARAYAZI DEVLET HASTANESİ
ERZURUM NENEHATUN KADINDOĞUM HASTANESİ
ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
ERZURUM TORTUM DEVLET HASTANESİ
ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI DÖNER SERMAYE BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
ESKİŞEHİR GÜRLİFE HOSPİTAL
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ESKİŞEHİR ÖZEL TSG ANADOLU HASTANESİ
ESKİŞEHİR SIVRIHİSAR KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜD. /ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ
GAZİANTE NİZİP DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
GAZİANTEP ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
GAZİANTEP İNAYET TOPÇUOĞLU HASTANESİ
GAZİANTEP İNAYET TOPÇUOĞLU HASTANNESİ
GAZİANTEP KIZILASLAN TIP MERKEZİ
GAZİANTEP LİV HOSPİTAL
GAZİANTEP NCR INTERNATIONAL HOSPİTAL
GAZİANTEP NİZİP ADN HASTANESİ
GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ
GAZİANTEP OBEN TIP MERKEZİ
GAZİANTEP ÖZEL ALLEBEN TIP MERKEZİ
GAZİANTEP ÖZEL DEVA HASTANESİ
GAZİANTEP ÖZEL DEVA HASTANESİ
GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ
GAZİANTEP ÖZEL MEDICAL PARK HASTANESİ
GAZİANTEP ÖZEL TAMMED HASTANESİ
GAZİANTEP ŞEHİT KAMİL DEVLET HASTANESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
GAZİANTEP YAZICIK TIP MERKEZİ
GİRESUN BULANCAK DEVLET HASTANESİ
GİRESUN ÖZEL ALLEBEN TIP MERKEZİ
GİRESUN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
GİRESUN ESPIYE DEVLET HASTANESİ
GİRESUN FİZİK TEDAVİ HASTANESİ
GİRESUN GÖRELE OPR. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ
GİRESUN İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ
GİRESUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
GİRESUN PIRAZIZ İSMAIL YÜCEL ANADOLU TEKNİK VE END.MES. LİSESİ MÜD. / TRABZON
GİRESUN PR.DR.A.İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HAST.BAŞTP.
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
GÜMÜŞHANE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMÜŞHANE İLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMÜŞHANE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ
HAKKARI ASKER HASTANESİ
HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ
HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
HATAY HAYAT ÖZEL REYHANLI DEFNE HASTANESİ
HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ
HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ
HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ
HATAY ÖZEL AKADEMİ HASTANESİ
HATAY ÖZEL AKADEMİ HASTANESİ
HATAY ÖZEL ANTAKYA AKADEMİ HASTANESİ
HATAY ÖZEL DEFNE HASTANESİ
HATAY ÖZEL DOĞU AKDENİZ HASTANESİ
HATAY ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM HASTANESİ
HATAY ÖZEL PALMIYE HASTANESİ
HATAY ÖZEL PALMIYE HASTANESİ
HATAY SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ
HATAY YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ
İGDİR DEVLET HASTANESİ
İGDİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İSPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İSPARTA ASKER HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
İSPARTA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
İSPARTA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İSPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ANATOMİCA TIP MERKEZİ
İSTANBUL ANATOMİCA TIP MERKEZİ
İSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL ASYA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
İSTANBUL ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İSTANBUL AVCILAR DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL AVCILAR MURAT KÖRÜK DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/İSTANBUL
İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL BAKIRKÖY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL BALIKLI RUM HASTANESİ
İSTANBUL BALTA LİMANI KEMİK HASTANESİ
İSTANBUL BALTALIMANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR CERRAHI TIP MERKEZİ
İSTANBUL BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTYANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL BEYOĞLU SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI LEVAZİM VE AYNIYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ÇATALCA DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL ÇEKMECE BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İSTANBUL DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DOKTOR SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞT.VE ARAŞ.HAST.
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL ELİTİUM CERRAHI TIP MERKEZİ
İSTANBUL EMAR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
İSTANBUL ERDEM HASTANESİ
İSTANBUL ERDEM HASTANESİ
İSTANBUL EREN SAĞLIK HİZMETLERİ
İSTANBUL EREN SAĞLIK HİZMETLERİ
İSTANBUL ERENKÖY FİZİK TED. VE REHABİ. HAS./İSTANBUL/BASIM
İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
İSTANBUL ESENYURT DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL ESHA ÖZEL CERRAHI TIP MERKEZİ
İSTANBUL EYÜP DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL EYÜP DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL FATİH HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIKÖY
İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
İSTANBUL FRANŞİZ LAPE HASTANESİ
İSTANBUL GÖP TAKSİM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL HOSPİTADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİ
İSTANBUL İLİ BAKIRKÖY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HAST.BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ /İST
İSTANBUL İLİ DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL İLİ FATİH KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İSTANBUL İSMAİL AKGÜN DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL İSTİNYE DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL KADIKÖY ÖZEL KALAMIŞ TIP MERKEZİ
İSTANBUL KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFÜ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
İSTANBUL KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL KIZILAY KARTAL TIP MERKEZİ
İSTANBUL KOLAN HASTANESİ
İSTANBUL LİFEMED SAĞLIK HİZMETLERİ TIP MERKEZİ
İSTANBUL LİFEMED SAĞLIK HİZMETLERİ TIP MERKEZİ
İSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
İSTANBUL M. AKİF ERSOY GÖĞÜS VE KALP DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL MALTEPE DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL MARMARA EREĞLİSİ DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL MEDİCANA ÇAMLICA HASTANESİ
İSTANBUL MEDİENT KBB KULAK BURUN BOĞAZ MERKEZİ
İSTANBUL MEDİPOINT TIP MERKEZİ
İSTANBUL MEDİSTANBUL (TEMPOINT) HASTANESİ
İSTANBUL MEHMET TOPRAK HOSPİTAL
İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL MORA NEOSANTE SİGARA BIRAKMA MERKEZİ
İSTANBUL OK MEYDANI DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL OKMEYDANI DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL ONKOLOJİ HASTANESİ
İSTANBUL ÖZEL ACİBADEM HASTANESİ
İSTANBUL ÖZEL ACİBADEM HASTANESİ İSTANBUL

REFERANSLAR REFERENCES

İSTANBUL ÖZEL ADNAN AYDINER İÇ HASTALIKLARI DAL MERKEZİ
 İSTANBUL ÖZEL AKADEMİ TIP MERKEZİ
 İSTANBUL ÖZEL ACADEMIC HOSPİTAL
 İSTANBUL ÖZEL ANADOLU HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL ATALAR HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL AVRASYA HOSPİTAL
 İSTANBUL ÖZEL AVRUPA DIŞ ESENYURT ŞUBESİ
 İSTANBUL ÖZEL BAHAT HOSPİTAL
 İSTANBUL ÖZEL BAŞARI HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL
 İSTANBUL ÖZEL ÇERKEZKÖY HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL DORA HOSPİTAL
 İSTANBUL ÖZEL EMSEY HOSPİTAL
 İSTANBUL ÖZEL ERDEM HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL ESENCAN HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL ESENTEPE HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 MALTEPE HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 ŞİRİNEVLER HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL GÜLTEPE AVICENNA HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL İNAYET TOPÇUOĞLU HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL İNTERTİP ÜROLOJİ KLİNİĞİ
 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL MEDİCNE HOSPİTAL
 İSTANBUL ÖZEL KALAMIŞ TIP MERKEZİ
 İSTANBUL ÖZEL KOLAN HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL KÜÇÜKYALI DELTA HOSPİTAL
 İSTANBUL ÖZEL LEVENT HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL LEVENT HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL MEDİCABİL HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL MEDİGOLD CERRAHI TIP MERKEZİ
 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA BAHÇELİEVLER HOSPİTAL
 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL A.Ş.
 İSTANBUL ÖZEL NİSA HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL SAFA HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL SAYGI HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL SEN JORJ AVUSTURYA HASTANESİ
 İSTANBUL ÖZEL TÜRKİYE HASTANESİ
 İSTANBUL PENDİK DEVLET HASTANESİ
 İSTANBUL PROF.DR.NAZİF BAĞRIACIK DIABET VE OBEZİTE HASTANESİ
 İSTANBUL PROFESÖR DOKTOR NECMİ AYANOĞLU DEVLET HASTANESİ
 İSTANBUL PSIKİYATRİ HASTANESİ
 İSTANBUL SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ
 İSTANBUL SARIYER AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 İSTANBUL SARIYER DEVLET HASTANESİ
 İSTANBUL SULTANBEYLİ TACİRLER EĞİTİM VAKFI DEVLET HASTANESİ
 İSTANBUL SÜLEYMANIYE DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ
 İSTANBUL SÜLEYMANIYE KADIN DOĞUM HASTANESİ
 İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARŞTIRMA HASTANESİ
 İSTANBUL TAVŞANLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 REKTÖRLÜĞÜ/İSTANBUL/BASIM
 İSTANBUL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MD.
 İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ
 İSTANBUL TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 İSTANBUL ÜMRANIYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
 İSTANBUL VİVA BEYİN VE KALP SAĞLIĞI
 İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 İSTANBUL YENİ ERENKÖY ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
 İSTANBUL YENİ HUZUR CERRAHI TIP MERKEZİ
 İSTANBUL YENİ HUZUR CERRAHI TIP MERKEZİ
 İZMİR 2 İNCİ ANA JET ÜSSÜ KOMUTANLIĞI
 İZMİR ALIAGA TIP MERKEZİ
 İZMİR BERGAMA DR. FARUK İLKER DEVLET HASTANESİ
 İZMİR BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ
 İZMİR BOZYAKA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 İZMİR BUCA SEYFETTİN DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ
 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EŞREFFAŞA HASTANESİ
 İZMİR ÇİĞİLİ DEVLET HASTANESİ
 İZMİR ÇİĞİLİ DEVLET HASTANESİ
 İZMİR DAPHNE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
 İZMİR DOĞA TIP MERKEZİ
 İZMİR DOKTOR BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ARAŞTIRMA NEVVAR SALIH İŞGÖREN ÇOCUK HASTANESİ
 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ARAŞTIRMA

HASTANESİ
 İZMİR DÜNYA GÖZ HASTANESİ
 İZMİR EGE ŞEHİR HASTANESİ
 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK
 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACIL SERVİS
 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSSEL ARAŞTIRMA PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 İZMİR EGEPOL HASTANESİ
 İZMİR EŞREFFAŞA HASTANESİ
 İZMİR GALEN HASTANESİ
 İZMİR GÜNEY GENEL SEKRETERLİĞİ
 İZMİR İL ÖZEL İDARESİ
 İZMİR İZOMEK ÖZEL GÖZDE HASTANESİ
 İZMİR İZOMEK ÖZEL GÖZDE HASTANESİ
 İZMİR KEMAL PAŞA DEVLET HASTANESİ
 İZMİR KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ
 İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 İZMİR KUZEY KAMU HASTANLERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 İZMİR MEDİCANA
 İZMİR NEVVAR SALIH İŞGÖREN ALSANCAK DEVLET HASTANESİ
 İZMİR ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL AKUT KALP DAMAR HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL ALIAGA TIP MERKEZİ
 İZMİR ÖZEL ALIAGA TIP MERKEZİ
 İZMİR ÖZEL ATA SAĞLIK HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL DENT ALSANCAK AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
 İZMİR ÖZEL DİAFİZ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL MERKEZİ
 İZMİR ÖZEL DOĞA TIP MERKEZİ
 İZMİR ÖZEL ENTO KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHI TIP MERKEZİ
 İZMİR ÖZEL İZMİRYOLU SEVGİ HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL KARATAŞ HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL KENT HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL MARTI HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL MEDİFAMA HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL PARK TIP HASTANESİ
 İZMİR ÖZEL ÜÇ EYLÜL TIP MERKEZİ
 İZMİR RADSOMER GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ
 İZMİR SELÇUK DEVLET HASTANESİ
 İZMİR ŞİFA HASTANELER GRUBU
 İZMİR ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BORNova EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 İZMİR ŞİFA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL KARŞIYAKA POLİKLİNİĞİ
 İZMİR TEPEDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 İZMİR URLA DEVLET HASTANESİ
 İZMİT KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
 İZMİT ÖZEL KOCAELİ AKADEMİ SAĞLIK HİZMETLERİ
 KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
 KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTALERİ BİRLİĞİ
 KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZİL DEVLET HASTANESİ
 KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZİL ŞEHİR HASTANESİ
 KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZİL ŞEHİR HASTANESİ
 KAHRAMANMARAŞ ÖZEL MEGAPARK HASTANESİ
 KAHRAMANMARAŞ ÖZEL SULAR VATAN HASTANESİ
 KAHRAMANMARAŞ PAZARCİK DEVLET HASTANESİ
 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
 KAHRAMANMARAŞ T.C. İL ÖZEL İDARESİ
 KAHRAMANMARAŞ TÜRKÖĞLU DOKTOR KEMAL BEYAZIT FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
 KAHRAMANMARAŞ VATAN HASTANESİ
 KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZİL ŞEHİR HASTANESİ
 KARABÜK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 KARABÜK ÖZEL MEDİKAR HASTANESİ
 KARABÜK ÖZEL MEDİKAR HASTANESİ (SAFRAN SAĞLIK)
 KARABÜK SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ
 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 KARAMAN DEVLET HASTANESİ
 KARAMAN DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
 KARS AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 KARS ARPAÇAY DEVLET HASTANESİ
 KARS DEVLET HASTANESİ
 KARS DİĞÖR İLÇE HASTANESİ
 KARS İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
 KARS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 KARS SELİM ABDÜLHADİ CİHAĞIR İLÇE DEVLET HASTANESİ
 KARTAL BELEDİYESİ İSTANBUL
 KASTAMONU ABANA DEVLET HASTANESİ
 KASTAMONU ÇATALZEYİN DEVLET HASTANESİ
 KASTAMONU DEVLET HASTANESİ
 KASTAMONU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
 KASTAMONU İHSANGAZI DEVLET HASTANESİ
 KASTAMONU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 KASTAMONU KÜRE DEVLET HASTANESİ
 KAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 KAYSERİ GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 KAYSERİ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
 KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 KAYSERİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KAYSERİ İL GENEL SEKRETERLİĞİ
 KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. DIŞ HASTANESİ
 KAYSERİ ÖZEL DÜNYAM HASTANESİ
 KAYSERİ ÖZEL GÖZ HASTANESİ
 KAYSERİ ÖZEL SEVGİ HASTANESİ
 KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
 KIRKLARELİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ
 KIRKLARELİ DERMAN SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLETMESİ A.Ş
 KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ
 KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ
 KIRKLARELİ ÖZEL DERMAN HASTANESİ
 KIRKLARELİ ÖZEL MEDİKENT HASTANESİ
 KIRKLARELİ VİZE DEVLET HASTANESİ
 KIRŞEHİR DEVLET HASTANESİ
 KIRŞEHİR KAMAN DEVLET HASTANESİ
 KİLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 KOCAELİ DEVLET HASTANESİ
 KOCAELİ DİLOVASI DEVLET HASTANESİ
 KOCAELİ GEBZE ÖZEL GEBZE KONAK HASTANESİ
 KOCAELİ GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ
 KOCAELİ KARAMÜSEL İLÇE DEVLET HASTANESİ
 KOCAELİ ÖZEL BEŞİROĞLU AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
 KOCAELİ ÖZEL KOCAELİ AKADEMİ SAĞLIK HİZMETLERİ
 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 KOCAELİ ÜNİV. ARAŞ. VE UYG. HASTANESİ
 BAŞHEKİMLİĞİ/İSTANBUL
 KONYA AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 KONYA AKŞEHİR ÖZEL PARK HASTANESİ
 KONYA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 KONYA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 KONYA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 KONYA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ
 KONYA ÇUMRA DEVLET HASTANESİ
 KONYA GÖZ HASTANESİ
 KONYA HUYÜK DEVLET HASTANESİ
 KONYA İLGİN DEVLET HASTANESİ
 KONYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
 KONYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 KONYA KARAPINAR DEVLET HASTANESİ
 KONYA KARAPINAR DEVLET HASTANESİ
 KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. MERAM TIP FAKÜLTESİ
 KONYA ÖZEL KONYA ANIT HASTANESİ
 KONYA ÖZEL MEDOVA HASTANESİ
 KONYA ÖZEL PARK HAYAT AKŞEHİR HASTANESİ
 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 KOZAN DEVLET HASTANESİ
 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLIYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 KÜTAHYA EVLIYA ÇELEBİ DEVLET HASTANESİ
 KÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİ
 KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 KÜTAHYA ÖZEL ANADOLU HASTANESİ
 KÜTAHYA ÖZEL KENT HASTANESİ
 KÜTAHYA ÖZEL PARK HASTANESİ
 KÜTAHYA SİMAV DOÇENT DOKTOR İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
 KÜTAHYA YONCALI HİDROTERAPI VE FİZİK TEDAVİ HASTANESİ
 MALATYA AKÇADAĞ DEVLET HASTANESİ

MALATYA DEVLET HASTANESİ
 MALATYA DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANSI
 MALATYA FIRAT SEMT POLİKLİNİĞİ
 MALATYA HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ
 MALATYA İL ÖZEL İDARESİ
 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 MALATYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 MALATYA OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ
 MALATYA ÖZEL GÖZDE HASTANESİ
 MALATYA PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ
 MALATYA TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ
 MANİSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 MANİSA AKHİŞAR DEVLET HASTANESİ
 MANİSA ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ
 MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İZMİR
 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
 MANİSA DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ
 MANİSA GÖRDES DEVLET HASTANESİ
 MANİSA İL ÖZEL İDARESİ
 MANİSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 MANİSA KIRKAĞAÇ DEVLET HASTANESİ
 MANİSA MEDİGÜNEŞ HASTANESİ
 MANİSA MERKEZ EFENDİ DEVLET HASTANESİ
 MANİSA ÖZEL AKHİŞAR HASTANESİ
 MANİSA ÖZEL DEVA TIP MERKEZİ
 MANİSA ÖZEL GRANDMEDICAL HOSPİTAL
 MANİSA ÖZEL MEDİGÜVEN HASTANESİ
 MANİSA ÖZEL SALİHLİ HASTANESİ
 MANİSA SALİHLİ ÖZEL MEDİGÜNEŞ HASTANESİ
 MANİSA SOMA DEVLET HASTANESİ
 MANİSA TURGUTLU DEVLET HASTANESİ
 MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ
 MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ
 MERSİN AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 MERSİN GÜLNAR DEVLET HASTANESİ
 MERSİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ
 MERSİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 MERSİN MUT DEVLET HASTANESİ
 MERSİN ÖZEL AKADEMİ HASTANESİ
 MERSİN ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ
 MERSİN ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ
 MERSİN ÖZEL YENİŞEHİR HASTANESİ
 MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ
 MERSİN TARSUS AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ
 MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ
 MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
 MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 MUĞLA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 MUĞLA MARMARİS ÖZEL YÜCELEN HASTANESİ
 MUĞLA MİLAS 75. YIL DEVLET HASTANESİ
 MUĞLA ÖZEL İZAN SAĞLIK HASTANESİ
 MUĞLA ÖZEL LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ
 MUĞLA ÖZEL YÜCELEN HASTANESİ
 MUĞLA ÖZEL YÜCELEN HASTANESİ MARMARIS
 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 MUŞ 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
 MUŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 MUŞ VARTO DEVLET HASTANESİ
 NEVŞEHİR BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜD.
 NEVŞEHİR İBRAHİM ŞEVKİ ATASAGUN DEVLET HASTANESİ
 NEVŞEHİR ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ
 NİĞDE ÇİFTTEHAN FİZİK TEDAVİ HASTANESİ
 NİĞDE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 ORDU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 ORDU DEVLET HASTANESİ
 ORDU ENGELLİ YAŞAM MERKEZİ
 ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ
 ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
 ORDU GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ
 ORDU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ /
 ORDU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 ORDU KORGAN DEVLET HASTANESİ
 ORDU KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ
 ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 OSAMNİYE DÜZİÇİ ÖZEL HAYAT TIP MERKEZİ
 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 OSMANİYE DEVLET HASTANESİ
 OSMANİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKR.
 OSMANİYE ÖZEL HAYAT TIP MERKEZİ DÜZİÇİ
 RİZE ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ
 RİZE DEVLET HASTANESİ
 RİZE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 RİZE FİNDIKLI GUATR ARAŞTIRMA HASTANESİ
 RİZE İL ÖZEL İDARESİ
 RİZE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAKARYA AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 SAKARYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
 SAKARYA HENDEK DEVLET HASTANESİ
 SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ/İSTANBUL
 SAKARYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 SAKARYA JİNESTE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ
 SAKARYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 SAKARYA KARASU DEVLET HASTANESİ
 SAKARYA KOCAELİ İLÇE HASTANESİ
 SAKARYA ÖZEL ADATIP HASTANESİ
 SAKARYA ÖZEL BEYHEKİM HASTANESİ
 SAKARYA ÖZEL İNCİ GÖZ HASTANESİ
 SAKARYA SAPANCA DEVLET HASTANESİ
 SAKARYA YENİKENT DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / SAMSUN / TRABZON
 SAMSUN BAFRA DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN BAFRA DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
 SAMSUN DOĞUMEVİ HASTANESİ
 SAMSUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
 SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ
 SAMSUN HAVZA FİZİK TEDAVİ OTELİ
 SAMSUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ
 SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 SAMSUN KAVAK DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN KAVAK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
 SAMSUN MEHMET AYDIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 SAMSUN ROMATEM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANELERİ
 SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ
 SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 SAMSUN SALİPAZARI DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN VEZİRKÖPRÜ AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 SAMSUN VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ
 SAMSUN VEZİRKÖPRÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ
 SİİRT 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 SİİRT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
 SİNOP DURAĞAN DEVLET HASTANESİ
 SİNOP GERZE DEVLET HASTANESİ
 SİNOP GERZE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
 SİNOP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 SİNOP TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ
 SİNOP TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ
 SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 SİVAS AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 SİVAS BİLİM VE SANAT MERKEZİ
 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 SİVAS DEVLET HASTANESİ
 SİVAS GÜRÜN DEVLET HASTANESİ
 SİVAS HALK EĞİTİM MERKEZİ
 SİVAS İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
 SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 SİVAS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 SİVAS KAYAK SİMİLASYON MERKEZİ
 SİVAS KOYULHİSAR DEVLET HASTANESİ
 SİVAS NUMUNE HASTANESİ
 SİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ
 ŞANLI URFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
 ŞANLI URFA EYÜBİYE DEVLET HASTANESİ
 ŞANLIURFA BİRECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ
 ŞANLIURFA ÇOCUK HASTANESİ
 ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 ŞANLIURFA EYYÜBİYE AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 ŞANLIURFA EYYÜBİYE DEVLET HASTANESİ
 ŞANLIURFA HALFETİ DEVLET HASTANESİ
 ŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
 ŞANLIURFA KADIN DOĞUM HASTANESİ
 ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKR.
 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 ŞANLIURFA ÖZEL MEDİGAP HASTANESİ

ŞANLIURFA ÖZEL EDESSA HASTANESİ
 ŞANLIURFA ÖZEL EDESSA HASTANESİ
 ŞANLIURFA ÖZEL MEDİGAP HASTANESİ
 ŞANLIURFA ÖZEL METROLİFE HASTANESİ
 ŞANLIURFA ÖZEL ŞANMED HASTANESİ
 ŞANLIURFA ÖZEL URSU HASTANESİ
 ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ
 ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ
 ŞANLIURFA SÜRÜÇ DEVLET HASTANESİ
 ŞANLIURFA UFUK TIP MERKEZİ
 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
 TEKİRDAĞ AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ
 TEKİRDAĞ ÇORLU ASKER HASTANESİ
 TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ
 TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
 TEKİRDAĞ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
 TEKİRDAĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 TEKİRDAĞ MALKARA DEVET HASTANESİ
 TEKİRDAĞ MURATLI DEVLET HASTANESİ
 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 TEKİRDAĞ ÖZEL ÇERKEZKÖY HASTANESİ
 TEKİRDAĞ ÖZEL İMRET HASTANESİ
 TEKİRDAĞ ÖZEL YAŞAM HASTANESİ
 TEKİRDAĞ ÖZEL YAŞAM HASTANESİ
 TOKAT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 TOKAT DEVLET HASTANESİ
 TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ
 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 TOKAT İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
 TOKAT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 TOKAT ÖZEL HAYAT BAKIM MERKEZİ
 TOKAT REŞADİYE DEVLET HASTANESİ
 TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ
 TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ
 TOKAT TURHAL ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ
 TRABZON 112 ACIL ÇAĞRI MERKEZİ
 TRABZON AKÇAABAT HAÇKALİBABA DEVLET HASTANESİ
 TRABZON KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 TRABZON KANUNİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 FARABI HASTANESİ
 TRABZON KTÜ FARABI HASTANESİ
 TRABZON NUMUNE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 TRABZON OF DEVLET HASTANESİ
 TRABZON OF DEVLET HASTANESİ
 TRABZON TONYA DEVLET HASTANESİ
 TRABZON VAKİFKEBİR DEVLET HASTANESİ
 TRABZON YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
 TUNCELİ AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 TUNCELİ DEVLET HASTANESİ
 TUNCELİ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
 TUNCELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 TUNCELİ MUNZUR ÜNİVERİTESİ
 UŞAK DEVLET HASTANESİ
 UŞAK İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 VAN ÇATAK DEVLET HASTANESİ
 VAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 VAN ERÇİŞ DEVLET HASTANESİ
 VAN ERÇİŞ DEVLET HASTANESİ
 VAN GEVAŞ İLÇE HASTANESİ
 VAN İPEKYOLU KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HAST. H
 VAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİ
 VAN ÖZALP DEVLET HASTANESİ
 VAN ÖZEL LOKMAN HEKİM HAYAT HASTANESİ
 YALOVA ÇINARCİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
 YALOVA DEVLET HASTANESİ
 YALOVA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 YALOVA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 YALOVA ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
 YOZGAT AKDAĞHADENİ DEVLET HASTANESİ
 YOZGAT ALPARSLAN TÜRKES HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYG. H
 YOZGAT DEVLET HASTANESİ
 YOZGAT İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
 YOZGAT KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI H.
 YOZGAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 ZONGULDAK AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 ZONGULDAK DEVREK DEVLET HASTANESİ
 ZONGULDAK DEVREK DEVLET HASTANESİ
 ZONGULDAK EREĞLİ DEVLET HASTANESİ
 ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ
 ZONGULDAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKR.
 ZONGULDAK ÖZEL LEVEL HASTANESİ
 ZONGULDAK UZUN MEHMET GÖĞÜS VE MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ

SANTE 8000 D



SANTE 8150



SANTE 8000 B



SANTE 8000 T



SANTE 8000



SANTE 8140



SANTE 8140 C



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
Motor Sayısı / Motors	Pcs	4	4	4
Karyola Genişliği / Width	mm	1025	1025	1025 / 1285
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	2260	2260	2260 /2440
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	480	570	480
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	880	970	880
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	Yes	Yes	Yes
Sırt Açısı / Backrest	°	60°	60°	60°
Baldır Açısı / Calf	°	15°	15°	15°
Ayak Açısı / Legrest	°	30°	30°	30°
Auto Regression (cm)	Cm	10	10	10
Taşıma Kapasitesi / Safety Patient Capacity	Kg	275	275	315
Teker Çapı / Wheels	mm	150	150	150 Double
5. Teker / 5. Wheels	mm	Yes	Yes	Yes
Çiftli Teker / Double Wheels (150)	mm	Yes *	Yes *	Yes
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes	Yes	Yes
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		No	No	No
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	18°	18°	18°
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	17°	17°	17°
Batarya / Battary		Yes	Yes	Yes
Şilte / Mattress	cm	Yes *	Yes *	Yes *
Bariatrik / Bariatric		No	No	Yes
Lateral Tilt	°	Yes *	Yes	No
Tartı / Weight Scale		Yes	Yes	Yes *
X-Ray		Backrest	Backrest	No

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
4	4	4	4
1025	1025	1025	1020
2260	2260	2260	2205
520	480	370	370
920	880	800	800
Yes	Yes	Yes *	Yes *
60°	60°	60°	60°
15°	15°	15°	15°
30°	30°	30°	30°
10	10	10	10
275	275	275	275
150	150	125	125
Yes	Yes	Yes *	Yes *
Yes *	Yes *	Yes *	No
Yes	Yes	Yes *	Yes *
No	No	Yes	Yes
18°	18°	16°	16,5°
17°	17°	16,5°	16°
Yes	Yes	Yes *	Yes *
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
No	No	No	No
Yes *	Yes *	No	No
Yes	Yes *	No	No
Backrest	Backrest	Backrest *	Backrest *

SANTE 8130



SANTE 8120



COMPACT 6220



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER
Motor Sayısı / Motors	Pcs	3	2	4
Karyola Genişliği / Width	mm	1025	1025	1100 / 1440
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	2260	2260	2155
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	390	505	470
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	770	No	870
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	Yes *	Yes *	Yes
Sırt Açısı / Backrest	°	60°	60°	70°
Baldır Açısı / Calf	°	15°	15°	15°
Ayak Açısı / Legrest	°	30°	30°	35°
Auto Regression (cm)	cm	10	10	10
Taşıma Kapasitesi / Safety Patient Capacity	kg	275	275	315
Teker Çapı / Wheels	mm	125	125	150 Double
5. Teker / 5. Wheels	mm	No	No	Yes
Çiftli Teker / Double Wheels (150)	mm	No	No	Yes
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes *	No	Yes
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		Yes	Yes	No
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	12° *	15,5° *	17°
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	No	No	17,5°
Batarya / Battary		Yes *	Yes *	Yes
Şilte / Mattress		Yes *	Yes *	Yes *
Bariatrik / Bariatric		No	No	Yes
Lateral Tilt	°	No	No	No
Tartı / Weight Scale		No	No	Yes *
X-Ray		Backrest *	Backrest *	No

COMPACT 5130



COMPACT 5220



COMPACT 4230



COMPACT 3340



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
4	4	4	3
960	960	1060	970
2290	2290	2150	2230
505	470	370	380
905	870	800	760
Yes	Yes	Yes *	Yes *
70°	70°	70°	70°
15°	15°	15°	15°
35°	35°	35°	35°
10	10	10	10
275	275	275	250
150	150	125	125
Yes	Yes	Yes *	No
Yes *	Yes *	Yes *	No
Yes	Yes	Yes *	Yes *
No	No	Yes	Yes
15°	17°	16°	12° *
17,5°	17,5°	16°	No
Yes	Yes	Yes *	Yes *
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
No	No	No	No
Yes *	Yes *	No	No
Yes	Yes *	No	No
Backrest *	Backrest *	Backrest *	Backrest *

COMPACT 2110



FIESTA 5330



FIESTA 4220



FIESTA 3150



FIESTA 3350



FIESTA 2220



OPTIMA 5110



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
Motor Sayısı / Motors	Pcs	2	4	4
Karyola Geniřlięi / Width	mm	1060	1080	1080
Karyola Uzunluęu / Lenght	mm	2160	2285	2230
Yatma Yüzeyi Yerden Yükseklięi (MIN) / Height	mm	505	470	370
Yatma Yüzeyi Yerden Yükseklięi (MAX) / Height	mm	No	870	800
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	Yes *	Yes	Yes *
Sırt Açısı / Backrest	°	70°	70°	70°
Baldır Açısı / Calf	°	15°	15°	15°
Ayak Açısı / Legrest	°	35°	35°	35°
Auto Regression (cm)	cm	10	10	10
Tařıma Kapasitesi / Safety Patient Capacity	kg	250	275	275
Teker Çapı / Wheels	mm	125	150	125
5. Teker / 5. Wheels	mm	No	Yes	Yes *
Çiftli Teker / Double Wheels (150)	mm	No	Yes *	Yes *
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		No	Yes	Yes *
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		Yes	No	Yes
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	15,5° *	17°	16°
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	No	17,5°	16°
Batarya / Battary		Yes *	Yes	Yes *
řilte / Mattress		Yes *	Yes *	Yes *
Bariatrik / Bariatric		No	No	No
Lateral Tilt	°	No	Yes *	No
Tartı / Weight Scale		No	Yes *	No
X-Ray		Backrest *	Backrest	Backrest *

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
3	3	2	5
1080	1080	1085	1065
2240	2230	2230	2215
380	380	505	460
760	760	No	860
Yes *	Yes *	Yes *	Yes
70°	70°	70°	70°
15°	15°	15°	15°
35°	35°	35°	35°
10	10	10	10
250	250	250	290
125	125	125	150
No	No	No	Yes
No	No	No	Yes *
Yes *	Yes *	No	Yes
Yes	Yes	Yes	Yes *
12° *	12° *	15,5° *	17°
No	No	No	17,5°
Yes *	Yes *	Yes *	Yes
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
No	No	No	No
No	No	No	Yes
No	No	No	Yes *
Backrest *	Backrest *	Backrest *	Backrest

OPTIMA 5230



OPTIMA 4310



OPTIMA 3230



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER
Motor Sayısı / Motors	Pcs	4	4	3
Karyola Geniřlięi / Width	mm	1065	1065	1060
Karyola Uzunluęu / Lenght	mm	2215	2215	2215
Yatma Yüzeyi Yerden Yükseklięi (MIN) / Height	mm	470	370	380
Yatma Yüzeyi Yerden Yükseklięi (MAX) / Height	mm	870	800	760
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	Yes	Yes *	Yes *
Sırt Açısı / Backrest	°	70°	70°	70°
Baldır Açısı / Calf	°	15°	15°	15°
Ayak Açısı / Legrest	°	35°	35°	35°
Auto Regression (cm)	cm	10	10	10
Tařıma Kapasitesi / Safety Patient Capacity	kg	275	275	250
Teker Çapı / Wheels	mm	150	125	125
5. Teker / 5. Wheels	mm	Yes	Yes *	No
Çiftli Teker / Double Wheels (150)	mm	Yes *	Yes *	No
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes	Yes *	Yes *
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		Yes *	Yes	Yes
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	17°	16,5°	12°
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	17,5°	16°	No
Batarya / Battary		Yes	Yes *	Yes *
řilte / Mattress		Yes *	Yes *	Yes *
Bariatrik / Bariatric		No	No	No
Lateral Tilt	°	Yes *	No	No
Tartı / Weight Scale		Yes *	No	No
X-Ray		Backrest	Backrest *	Backrest *

OPTIMA 2230



INNOVA 6260



LOGICA 6240



VENTURA 6630



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
2	4	4	4
1065	1095	1070	1080
2215	2155	2230	2230
505	445	370	370
No	855	800	800
Yes *	No	No	Yes *
70°	70°	70°	70°
15°	15°	15°	15°
35°	35°	35°	35°
10	10	10	10
250	275	275	275
125	125	150	125
No	Yes *	Yes *	Yes *
No	Yes *	Yes *	No
No	Yes	Yes	Yes *
Yes	Yes *	Yes *	Yes
15,5° *	12,5°	16,5°	16°
No	13,5°	16°	16°
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
Backrest *	Backrest *	Backrest *	Backrest *

VENTURA 6460



VENTURA 6610



VENTURA 6420



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
Motor Sayısı / Motors	Pcs	4	2	2
Karyola Genişliği / Width	mm	1080	1080	1080
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	2230	2230	2230
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	370	400	420
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	800	No	No
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	Yes *	No	No
Sırt Açısı / Backrest	°	70°	70°	70°
Baldır Açısı / Calf	°	15°	15°	15°
Ayak Açısı / Legrest	°	35°	35°	35°
Auto Regression (cm)	cm	10	10	10
Taşıma Kapasitesi / Safety Patient Capacity	kg	275	250	250
Teker Çapı / Wheels	mm	125	125	125
5. Teker / 5. Wheels	mm	Yes *	No	No
Çiftli Teker / Double Wheels (150)	mm	No	No	No
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes *	No	No
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		Yes	Yes	Yes
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	16,5°	Yes *	Yes *
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	16°	Yes *	Yes *
Batarya / Battery		Yes *	Yes *	Yes *
Şilte / Mattress		Yes *	Yes *	Yes *
Bariatrik / Bariatric		No	No	No
Lateral Tilt	°	No	No	No
Tartı / Weight Scale		No	No	No
X-Ray		Backrest *	Backrest *	Backrest *

SERRA 2 7260



SERRA 2 7260 F



SERRA 7240



SERENITY 7000



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
4	4	4	4
1075	1100	1020	1035
2090	2110	2090	2190
370	370	370	290
800	800	800	690
No	No	No	No
70°	70°	70°	75°
15°	15°	15°	10°
35°	35°	35°	30°
10	10	10	10
225	225	225	225
125	125	125	125
No	No	No	No
No	No	No	No
Yes *	Yes *	Yes *	No
Yes	Yes	Yes	Yes
16°	16°	16°	12°
16°	16°	16°	12°
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No

KING 7250



KING 7250 S



COMPACT 4430 P



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER
Motor Sayısı / Motors	Pcs	3	3	4
Karyola Genişliği / Width	mm	1090 / 1200	920 / 1030	900
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	2130	2130	1995
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	290	290	550
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	665	665	930
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	No	No	Yes *
Sırt Açısı / Backrest	°	70°	70°	70°
Baldır Açısı / Calf	°	15°	15°	15°
Ayak Açısı / Legrest	°	35°	35°	35°
Auto Regression (cm)	cm	10	10	10
Taşıma Kapasitesi / Safety Patient Capacity	kg	250	250	200
Teker Çapı / Wheels	mm	125	125	125
5. Teker / 5. Wheels	mm	No	No	No
Çiftli Teker / Double Wheels (150)	mm	Yes *	Yes *	No
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		No	No	Yes *
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		Yes	Yes	Yes
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	No	No	16,5°
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	No	No	18°
Batarya / Battery		Yes *	Yes *	Yes *
Şilte / Mattress		Yes *	Yes *	Yes *
Bariatrik / Bariatric		No	No	No
Lateral Tilt	°	No	No	No
Tartı / Weight Scale		No	No	No
X-Ray		No	No	No

COMPACT 3430 P



COMPACT 2430 P



FIESTA 4420 P



FIESTA 3420 P



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
3	2	4	3
900	900	890	890
1995	1995	1920	1920
500	505	555	500
820	No	925	820
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
70°	70°	70°	70°
15°	15°	15°	15°
35°	35°	35°	35°
10	10	10	10
200	200	200	200
125	125	125	125
No	No	No	No
No	No	No	No
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
Yes	Yes	Yes	Yes
15,5° *	15,5° *	16,5°	15,5° *
No	No	18°	No
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
Yes *	Yes *	Yes *	Yes *
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No

FIESTA 2420 P



1310



COMPACT 1430



1110



FIESTA 1420



JMM 01



EVA JMM 04



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
Motor Sayısı / Motors	Pcs	2	HYDRAULIC	CRANK
Karyola Genişliği / Width	mm	890	1080	960
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	1920	2230	2180
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	505	525	440
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	No	845	720
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	Yes *	No	No
Sırt Açısı / Backrest	°	70°	70°	85°
Baldır Açısı / Calf	°	15°	15°	20°
Ayak Açısı / Legrest	°	35°	35°	60°
Auto Regression (cm)	cm	10	No	No
Taşıma Kapasitesi / Safety Patient Capacity	kg	200	250	250
Teker Çapı / Wheels	mm	125	125	125
5. Teker / 5. Wheels	mm	No	No	No
Çiftli Teker / Double Wheels (150)	mm	No	No	No
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes *	No	No
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		Yes	Yes	Yes
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	15,5° *	15°	12°
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	No	No	12°
Batarya / Battary		Yes *	No	No
Şilte / Mattress		Yes *	Yes *	Yes *
Bariatrik / Bariatric		No	No	No
Lateral Tilt	°	No	No	No
Tartı / Weight Scale		No	No	No
X-Ray		No	No	No

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
MANUEL	CRANK	2	3
830	960	600 / 770	610
1650 / 2065	2180	1505 / 1595	1290
1160	440	510	520
No	720	830	765
No	No	No	No
60°	85°	75°	95°-180°
No	20°	No	No
No	60°	No	25°
No	No	No	No
200	250	225	175
125	125	125	125
No	No	No	No
No	No	No	Yes
No	No	Yes	No
Yes	Yes	No	Yes
12°	12°	12,5°	25°
No	12°	No	No
No	No	No	Yes
Yes *	Yes *	Yes	Yes
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No

JMM 02



JMM 03



SD 01



SD 01P



SD 04



SD 05



SD 06



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER
Motor Sayısı / Motors	Pcs	3	3	HYDRAULIC
Karyola Genişliği / Width	mm	1025 / 1070	600 / 790	840
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	1635 / 2320	1500 / 1600	2095
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	605	500	515
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	875	1000	790
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	Yes	No	No
Sırt Açısı / Backrest	°	80°	75°	88°
Baldır Açısı / Calf	°	No	No	No
Ayak Açısı / Legrest	°	No	No	No
Auto Regression (cm)	cm	No	No	No
Taşıma Kapasitesi / Safety Patient Capacity	kg	250	225	225
Teker Çapı / Wheels	mm	125	125	125
5. Teker / 5. Wheels	mm	No	No	Yes *
Çiftli Teker / Double Wheels (150)	mm	Yes *	No	No
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes	Yes	Yes
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		No	No	No
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	14,5°	12°	14°
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	No	No	12°
Batarya / Battary		Yes	No	No
Şilte / Mattress		Yes	Yes	Yes
Bariatrik / Bariatric		No	No	No
Lateral Tilt	°	No	No	No
Tartı / Weight Scale		No	No	No
X-Ray		No	No	No

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	FIX
840	840	840	840
1600	2145	2145	2145 / 4100
515	610	615	810
790	910	915	No
No	No	No	No
88°	85°	85°	85°
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
200	250	250	275
125	200	200	150
No	Yes	Yes	No
No	No	Yes	No
Yes	Yes	Yes	Yes
No	No	No	No
14°	13°	13°	No
12°	13°	13°	No
No	No	No	No
Yes	Yes	Yes	Yes
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	Head / Foot	No

SD 07



SD 08



SD 09



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
Motor Sayısı / Motors	Pcs	3	HYDRAULIC	HYDRAULIC
Karyola Genişliği / Width	mm	755	840	840
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	2195	2150	2145
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	630	510	590
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	1030	790	895
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	No	No	No
Sırt Açısı / Backrest	°	77°	No	85°
Baldır Açısı / Calf	°	30°	No	45°
Ayak Açısı / Legrest	°	No	No	15°
Auto Regression	Cm	No	No	No
Taşıma Kapasitesi	Kg	250	200	250
Teker Çapı / Wheels	mm	150	125	200
Teker Çapı 200 mm / Wheels	mm	No	No	Yes
5. Teker / 5. Wheels	mm	No	No	Yes
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes	Yes	Yes
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		No	No	No
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	13°	13°	13°
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	12°	No	13°
Batarya / Battary		Yes *	No	No
Şilte / Mattress	cm	Yes	Yes	Yes
Bariatrik / Bariatric		No	No	No
Lateral Tilt	°	No	No	No
Tartı / Weight Scale		No	No	No
X-Ray		No	No	Head / Foot

NT Q7



SD 10



SD 11



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
Motor Sayısı / Motors	Pcs	HYDRAULIC	1	2
Karyola Genişliği / Width	mm	755	650	600 / 865
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	2195	2045	1865
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	615	580	560
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	825	930	820
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	No	No	No
Sırt Açısı / Backrest	°	80°	70°	90°
Baldır Açısı / Calf	°	25°	No	No
Ayak Açısı / Legrest	°	No	No	No
Auto Regression	cm	No	No	No
Taşıma Kapasitesi	kg	250	175	175
Teker Çapı / Wheels	mm	150	Front 105 / Back 200	125
Teker Çapı 200 mm / Wheels	mm	No	Yes	No
5. Teker / 5. Wheels	mm	Yes / Ø75	No	No
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes	Yes	Yes
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		No	No	No
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	13°	No	No
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	12°	No	No
Batarya / Battary		No	No	No
Şilte / Mattress		Yes	Yes	Yes
Bariatrik / Bariatric		No	No	No
Lateral Tilt	°	No	No	No
Tartı / Weight Scale		No	No	No
X-Ray		Sırtta	No	No

SD 13



SD 14



SD 15



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER
Motor Sayısı / Motors	Pcs	HYDRAULIC	4	HYDRAULIC
Karyola Genişliği / Width	mm	990	990	840
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	2140	2140	2145
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	615	520	620
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	915	920	900
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	No	No	No
Sırt Açısı / Backrest	°	85°	70°	85°
Baldır Açısı / Calf	°	No	34°	45°
Ayak Açısı / Legrest	°	No	12°	15°
Auto Regression	Cm	No	Yes	No
Taşıma Kapasitesi	Kg	290	290	250
Teker Çapı / Wheels	mm	200	200	200
Teker Çapı 200 mm / Wheels	mm	Yes	Yes	Yes
5. Teker / 5. Wheels	mm	Yes	Yes	Yes
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes	Yes	Yes
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		No	No	No
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	13°	17°	12°
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	13°	17°	12°
Batarya / Battary		No	Yes	No
Şilte / Mattress	cm	Yes	Yes	Yes
Bariatrik / Bariatric		Yes	Yes	No
Lateral Tilt	°	No	No	No
Tartı / Weight Scale		No	No	No
X-Ray		Head / Foot	Head / Foot	Head / Foot

SD 12



NHS 870



HB 6210



ÜRÜN ADI	BİRİM/UNIT	ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS
Motor Sayısı / Motors	Pcs	HYDRAULIC	HYDRAULIC	2
Karyola Genişliği / Width	mm	840	755	1080
Karyola Uzunluğu / Lenght	mm	2145	2195	2230
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MIN) / Height	mm	620	620	560
Yatma Yüzeyi Yerden Yüksekliği (MAX) / Height	mm	900	820	820
Yatak Uzatma / bed Extension	cm	No	No	No
Sırt Açısı / Backrest	°	85°	65°	70°
Baldır Açısı / Calf	°	45°	25°	No
Ayak Açısı / Legrest	°	15°	No	No
Auto Regression	cm	No	No	No
Taşıma Kapasitesi	kg	250	250	250
Teker Çapı / Wheels	mm	200	150	125
Teker Çapı 200 mm / Wheels	mm	Yes	No	No
5. Teker / 5. Wheels	mm	Yes	No	No
Fren Sistemi Merkezi / Central Brake System		Yes	Yes	Yes
Fren Sistemi Doğrusal / Linear Brake System		No	No	No
TR Açısı (MIN / MAX) / Trendelenburg	°	12°	13°	No
ATR Açısı (MIN / MAX) / Reverse Trendelenburg	°	12°	12°	No
Batarya / Battary		No	No	No
Şilte / Mattress		Yes	Yes	Yes
Bariatrik / Bariatric		No	No	Yes
Lateral Tilt	°	No	No	No
Tartı / Weight Scale		No	No	No
X-Ray		Head / Foot	No	No

ICU BEDS



8000 D



8000 B



8000



5220



5330

HOSPITAL BEDS



8140 C



8140



4230



4220



6460

MANUAL BEDS



1310



1430



1420

CARE BEDS



7260 F



7260



7240



7250



7000

STRETCHER



SD 14 DRIVE



SD 14



Q7



SD 12



SD 09

GYNAECOLOGICAL



SANTE JMM 02



EVA JMM 04



JMM 03



JMM 01

PEDIATRICS



4430 P



1110



BK 02



BK 03

RENK KARTELALARI COLOR CHARTS

LAMİNAT VE MELAMİN RENKLERİ
METAL RENKLERİ
SUNİ DERİ RENKLERİ
KUMAŞ RENKLERİ

LAMINATE and MELAMINE COLORS
METAL COLORS
ARTIFICIAL LEATHER COLORS
FABRIC COLOURS

NOT: BASKI VEYA FOTOĞRAF ÇEKİMİYLE İLGİLİ NEDENLERDEN DOLAYI
RENKLERDE, TON FARKLILIKLARI OLABİLİR.

NOT: THERE MAY BE DIFFERENCES IN COLORS, TONS, FOR TECHNICAL
REASONS FOR PRINTING OR PHOTO SHOOTING.

LAMİNAT VE MELAMİN RENKLERİ


LAMINATE and MELAMINE COLORS

METAL RENKLERİ

METAL COLORS



3131 SÖKE CEVİZ

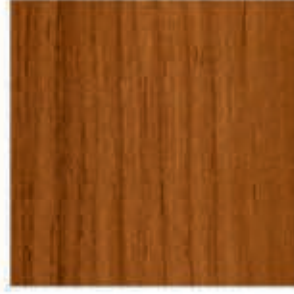

4395 REAL TEAK



263 BAMBU



4236 SIAM TEAK




243 A. AKÇAAĞAÇ



4208 BEYAZ MEŞE



7158 NİL CEVİZİ

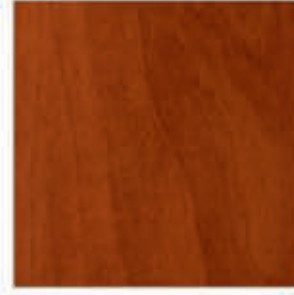

4253 KIRAZ



4252 AKAJU



4251 ARMUT



1012 KREM



3096 BEYAZ



3153 OFİS GRİ



1081 KUM BEJİ



1044 İNCE PÜTÜRLÜ BEJ



1244 Y. PARLAK BONDED



BEYAZ RAL 9016




SİYAH RAL 9005



GRİ RAL 9006




ANTRASİT RAL 7021

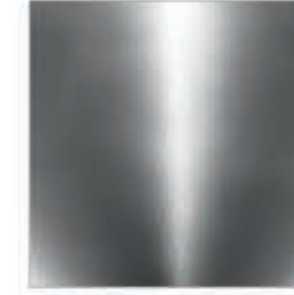

KROM

SUNİ DERİ RENKLERİ ARTIFICIAL LEATHER COLORS

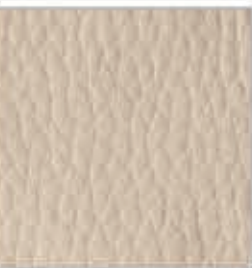

K 008



K 010




K 036



K 030



K 320

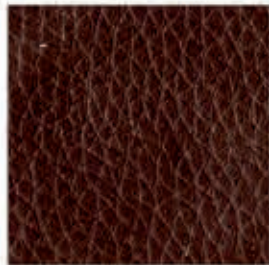

K 340



K 003



K 310



K 220



K 605



K 620



K 901



K 280




K 210



K 580



K 410

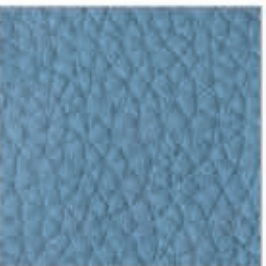

K 500



K 570



K 400



K 425



K 250

ARAS SUNİ DERİ RENKLERİ ARAS ARTIFICIAL LEATHER COLORS



21D7617



21D7624



21D7609



21D 7619



21D7608



21D7616



21D7620



21D7618



21D7610



21D7611



21D7613



21D7612



21D7614



21D7621



21D7606



21D 7401



21D7623


KUMAŞ RENKLERİ FABRIC COLORS CHART




B 050



B 070

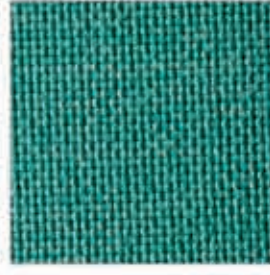

B 110

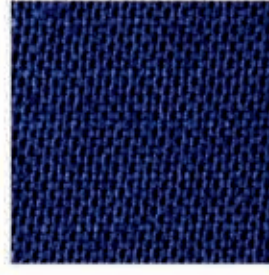

B 120



B 230



B 250



B 280



B 370



B 450

KUMAŞ RENKLERİ FABRIC COLORS CHART



OLEA 2002



OLEA 2006



OLEA 2011



OLEA 2013



OLEA 2021



OLEA 2022



OLEA 2026



OLEA 2031



OLEA 2034



OLEA 2036



OLEA 2044



OLEA 2045


OFİSLINE FABRİKA / OFİSLINE FACTORY



NITROCARE FABRİKA / NITROCARE FACTORY



OFİSLINE FABRİKA 3 / OFİSLINE FACTORY 3

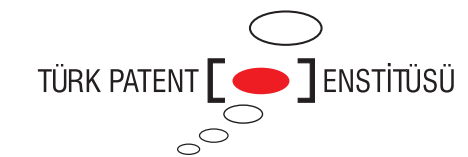

Markamız, Tasarımlarımız ve Tüm Ürünlerimiz, Türk Patent Enstitüsü tarafından Marka Tescil, Tasarım Tescil ve Faydalı Model Belgeleri ile Koruma altındadır.

Our trademark, projections and products are under protection with the documents Brand Registry, Utility Model and Design Registration by Turkish Patent Institute, Republic of Turkey.



TS EN 13761 / TS 5337-1 EN 1335-1, TS 5337-2 EN 1335-2, TS 5337-3 EN 1335-3 / TS ENV 12521 / TS EN 14749 / TS EN 527-1, TS EN 527-2
TS EN 60601-2-38 / TS 4271 / TS EN 12727 / TS ENV 12520 / TS EN 14073-2 / TS 4510 / TS EN 1023-1 / TS 3888 / TS 5541 / TS 6606
ISO 13485:2003 TSE-HYB HİZMET YETERLİK BELGESİ / MARKA TESCİL BELGESİ

Firmamız, Önceden Haber Vermeksizin Ürünler Üzerinde Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir.

Our Company has the Right to Make Changes on the Products Without Prior Notice.


YOU CAN FIND US EVERYWHERE

OUR LOCATION



DISTANCE BETWEEN SİVAS (FACTORY CITY) TO PORTS	
Mersin Port	: 515 Km
İstanbul Port	: 895 Km
Samsun Port	: 340 Km
İzmir Port	: 1036 Km



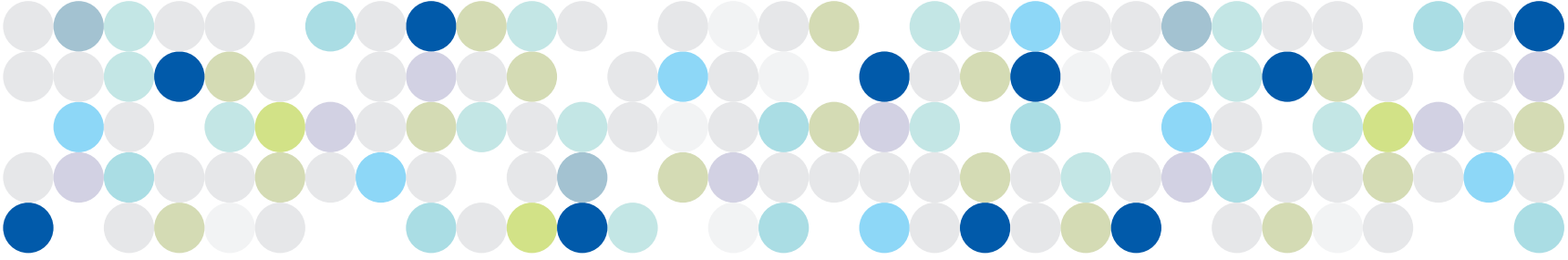

SİVAS FABRİKA / FACTORY
1.Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad No:7
SİVAS / TÜRKİYE
Tel : +90 346 218 19 10-13
Faks : +90 346 218 19 14

ANKARA MERKEZ / BRANCH OFFICE
Mustafa Kemal Mah. 2133. Sk. No:11/10 Gökçen 2 İş Merkezi
Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 312 286 66 44
Faks : +90 312 286 86 67

İSTANBUL MERKEZ / BRANCH OFFICE
Barbaros Mahallesi Halk Caddesi Gökler Plaza 23/A
Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 216 317 56 50-51
Faks : +90 216 317 56 62

İZMİR MERKEZ / BRANCH OFFICE
1394. Sokak Cenk Apt. No:16 D:2
Alsancak / İZMİR / TÜRKİYE
Tel : +90 232 220 13 13-14
Faks : +90 232 220 13 15

www.nitrocare.com.tr
info@nitrocare.com.tr

Firmamız, önceden haber vermeksizin ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir
Our company has the right to make changes on the products without prior notice.

